




MANFRED SAUER

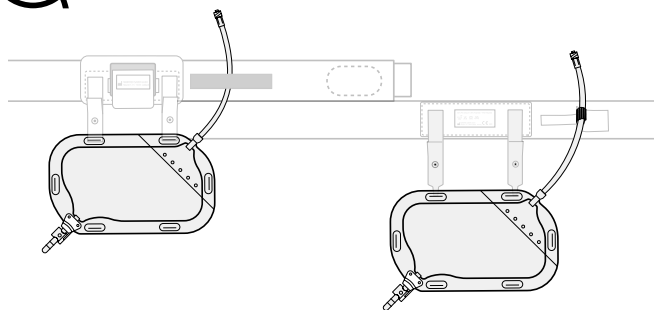

SAUER-NephSys BEUTEL

STERILE

Abbildungen/Figures/Illustraties/Kuva/Illusztrációk/قصورات الوسائط/موسرل

2

Gebrauchsanweisung	Deutsch	3
Instructions for use	English	5
Notice d'utilisation	Français	7
Istruzioni per l'uso	Italiano	9
Gebruiksaanwijzing	Nederlands	11
Bruksanvisning	Svenska	13
Brugsanvisning	Dansk	15
Käyttöohje	Suomi	17
Bruksanvisning	Norsk	19
Notkunarleiðbeiningar	Ísland	21
Kasutusjuhised	Eesti	23
Instrucciones de uso	Español	25
Instruções de utilização	Português	27
Οδηγίες χρήσης	Ελληνική	29
Használati utasítás	Magyar	31
Instrukcja użytkowania	Polski	33
Návod k použití	Čeština	35
Instrucțiuni de utilizare	Română	37
Инструкция за употреба	Български	39
Navodila za uporabo	Slovenščina	41
Upute za uporabu	Hrvatski	43
Uputstvo za upotrebu	Српски/srpski	45
Uputstvo za upotrebu	Bosanski	47
Упатство за употреба	Македонски	49
دستور العمل استفادة	فارسی	51
قسطرة التبول الخارجي ذاتية الالتصاق	العربية	53








MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960 100 · info@manfred-sauer.de
www.manfred-sauer.com

20260215 §20358



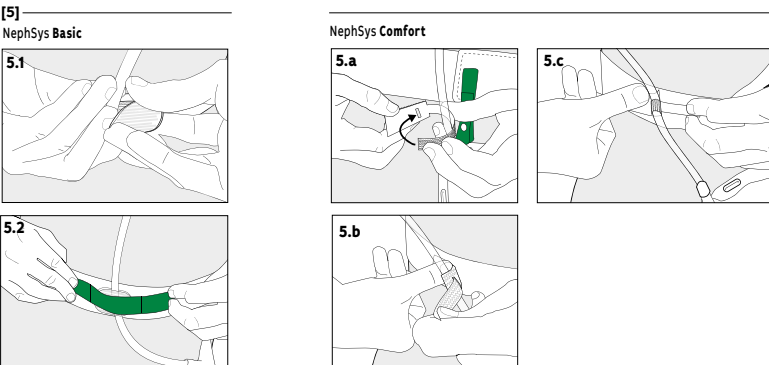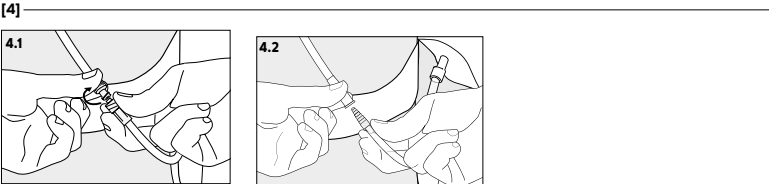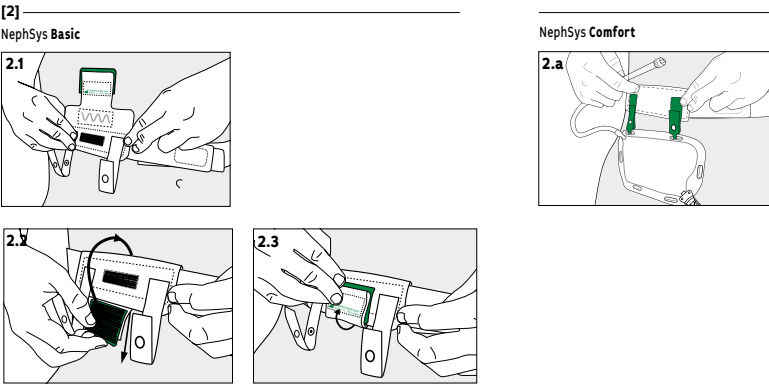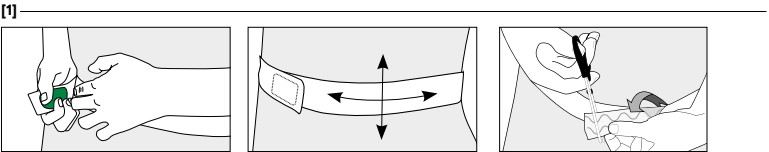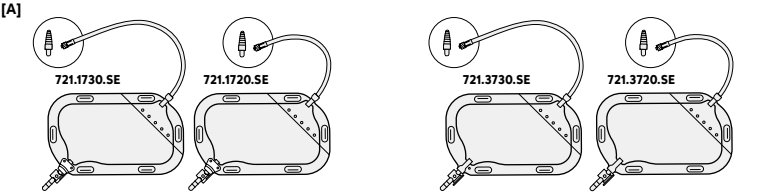

Deutsch

SAUER-NephSys Beutel (721.xxxx.SE), steril

Informationen

Die Anleitung zur Versorgung mit SAUER-NephSys-Produkten sollte durch eine Fachkraft erfolgen. SAUER-NephSys Beutel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Das SAUER-NephSys-Gurtset ist zur Mehrfachanwendung geeignet. Waschinweise auf dem Gurtset beachten. Die Haltbarkeit des Gurtsets hängt von der individuellen Nutzung (An-/Ablegen, waschen etc.) ab. Diese entspricht in der Regel 2-3 Monaten. Handelsname und Leistungsmerkmale des Produktes sind dem Etikett zu entnehmen.

Zweckbestimmung und Indikationen

Das SAUER-NephSys-Gurtset (57.42, 57.43) ist Zubehör zum SAUER-NephSys-Beutel. Das SAUER-NephSys-Gurtset dient zur Befestigung von einem oder zwei SAUER-NephSys-Beuteln an der Hüfte. In Kombination sind sie zur Sammlung von Urin bei Personen mit ableitenden Systemen oberhalb der Geschlechtsorgane, insbesondere von Nierenfistelkathetern, bestimmt.

- Risiken und Warnhinweise**
- Der SAUER-NephSys-Beutel darf a) nicht wiederverwendet und b) nicht bei beschädigter Sterilbarriere verwendet werden, um das Infektionsrisiko nicht zu erhöhen.
 - Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Komplikationen führen. Ein Urinstau, z. B. durch eine abgeknickte Urinableitung, kann zu einer lebensbedrohlichen Urosepsis führen. In diesem Fall ist sofort ein Arzt aufzusuchen, ebenso bei Infektionen und anhaltendem Urinstau.
 - Zur Reduktion von Infektionsquellen die Konnektierfläche des Beutladapters weder berühren noch in Kontakt mit Oberflächen bringen (Innenseite beim Luer-Lock-Adapter, Außenseite beim gestuften Adapter). Das Kürzen des Schlauchs darf nur mit einer zuvor desinfizierten Schere erfolgen (geeignetes Desinfektionsmittel, z. B. für Oberflächen, verwenden).
 - Darauf achten, dass der Beutel nicht oberhalb des ableitenden Systems angebracht wird, damit Urin ungehindert ablaufen kann (z. B. nicht oberhalb des Konnektors des Nierenfistelkatheters). Mehrfach täglich kontrollieren, ob Urin in den Beutel abläuft. Ein Verdrehen, Abknicken und Abklemmen des Einlaufschlauches sind zu vermeiden.
 - Um ein unbeabsichtigtes Öffnen/Lösen der Gurtsetkomponenten zu vermeiden, sind diese bei Verschleißerscheinungen zu ersetzen.
 - Zug am Katheter ist zu vermeiden. Folgendes beachten:
 - Adapter des Beutels zugfrei mit dem Konnektor des Katheters verbinden.
 - Immer zuerst die Verbindung zwischen Beutel und Katheter trennen bevor der Leibgurt geöffnet wird, um plötzlichen Zug am Katheter durch das Beuteltgewicht zu vermeiden.
 - Beim Anschluss des SAUER-NephSys-Beutels an einen geeigneten Beutel für die Nacht darauf achten, dass der Auslaufhahn geöffnet ist und sich nicht in der Nacht schließt.

Sollten bei der Verwendung von SAUER Urin-Auffangbeuteln schwerwiegende Vorfälle auftreten, so sind diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes zu melden, in dem der Anwender niedergelassen ist.

SAUER-NephSys Beutel mit beigelegtem gestuften Adapter (aufsteckbar), steril (Abb. [A] Seite 2)

Anwendungshinweise (Abb. [1]–[5] siehe Seite 2)

[1]. Leibgurt anlegen und kürzen

Dazu die Gurt-Seite mit den Silikonlinien auf der Haut positionieren, den Gurt unter leichtem Zug nach Belieben zwischen Taille und Hüfte anlegen. Auf angenehmen, vor allem aber stabilen Sitz achten! Mit einer Schere kann der überschüssige Gurtabschnitt beliebig gekürzt werden (1.3).

[2]. Klettpad positionieren und fixieren

2.1, 2.a: Das Klettpad an der Körperseite befestigen, an der sich das ableitende System, z. B. der Nierenfistelkatheter, befindet. Dazu das Klettpad entsprechend der Abbildung (2.1 bzw. 2.a) mittig zwischen der Hüftseite und dem Bauchnabel auf dem Leibgurt befestigen.

2.1, 2.3: **Gurtset Basic:** Nach dem Befestigen des Klett pads (Abb. 2.1) den Leibgurt etwas vom Körper wegziehen und die Lasche des Klett pads unter dem Gurt herumführen (Abb. 2.2). Dann das Fixierhakenband umschlagen und auf dem aufgenähten Hakenband an der Vorderseite des Klett pads befestigen (Abb. 2.3).

2.a: **Gurtset Comfort:** Tipp: bei der Comfort-Variante empfiehlt es sich, zuerst den Beutel am Klett pad zu befestigen (Abb. 3.a) und dann das Klett pad am Leibgurt zu befestigen (Abb. 2.a).

[3]. Beutel am Klett pad befestigen

3.1, 3.a: Es empfiehlt sich, den Einlaufschlauch mit einer Hand festzuhalten, um Kontakt mit der Konnektierfläche des Adapters zu vermeiden. Den Beutel so fixieren, dass der Auslaufhahn in Richtung des Schrittes zeigt. Die beiden Haltetaschen des Klett pads durch die Gurtlösen des Beutels fädeln und die Druckknöpfe schließen.

[4]. Beutel an Katheter konnektieren

4.1: Verbinden Sie den männlichen Luer-Lock-Anschluss am Beutel mit dem weiblichen Luer-Lock-Anschluss am Nephrostomie Katheter durch Drehen im Uhrzeigersinn.

4.2: Zur Nutzung des beigelegten gestuften Adapters den Schlauch mit einer zuvor desinfizierten Schere (geeignetes Desinfektionsmittel, z. B. für Oberflächen, verwenden) auf die gewünschte Länge kürzen (gerader Schnitt). Adapter auf den Schlauch aufstecken, ohne die Konnektierfläche des Adapters zu berühren. Schutzkappe vom Adapter entfernen. Den Adapter des Beutels zugfrei mit dem Konnektor des Katheters verbinden.

[5]. Einlaufschlauch mit der Zugentlastung sichern

Um das Risiko des Verdrehens des Einlaufschlauches oder Zuges am Katheter zu vermindern, wird der Schlauch mit Hilfe der Zugentlastung am Leibgurt in einer geeigneten Position fixiert.

5.1–5.2: **Gurtset Basic:** Die Schutzfolien des Fixier-Klebe punktes entfernen. An der Stelle, an der sich Schlauch und Leibgurt kreuzen, den Schlauch zwischen die Klebeflächen des Fixier-Klebe punktes führen (5.1), diese zusammendrücken und den Klebe punkt auf den Leibgurt kletten. Zuletzt den Fixier-Klebe punkt mit Hilfe des Fixier-Hakenbandes wie in Abb. 5.2 fixieren

5.a–c: **Gurtset Comfort:** Die Fixierlasche entsprechend der Abb. 5.a um den Einlaufschlauch fädeln. Den breiten Teil der Klett lasche auf dem Leibgurt an der Stelle, an der sich Schlauch und Leibgurt kreuzen, andrücken (5.b). Die Klett lasche so festziehen, dass der Schlauch sich nicht mehr herausziehen lässt (Schlauch nicht abklemmen). Anschließend den dünnen Streifen auf dem Gurt andrücken (5.c).

Während der Nacht

Der SAUER-NephSys Beutel kann auch in der Nacht am Gurt befestigt bleiben. Es kann jedoch komfortabler sein, den Beutel vom Gurt zu entfernen und neben dem Körper sicher im Bett zu positionieren. Für ein erhöhtes Fassungsvermögen in der Nacht kann der SAUER-NephSys Beutel an einen geeigneten Beutel angeschlossen werden. Dazu den Kupplungsschlauch auf den Auslaufhahn des SAUER-NephSys-Beutels schieben und mit dem Adapter des Bettbeutels verbinden. In diesem Fall muss der Auslaufhahn des Beutels geöffnet bleiben.

Entleeren und Wechseln


Zum Entleeren des SAUER-NephSys-Beutels den Auslaufhahn öffnen und den Urin in die Toilette oder ein geeignetes Gefäß ablaufen lassen. Danach den Hahn wieder schließen.







Entsorgen

Den SAUER-NephSys Beutel vor dem Entsorgen leeren und im Restmüll entsorgen. Das Gurtssystem im Hausmüll entsorgen.

Die MANFRED SAUER GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemäßer Handhabung entgegen dieser Gebrauchsanweisung oder der Nichtanwendung der hygienischen Richtlinien ergeben können.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal oder an unsere Kundenberater:
MANFRED SAUER GmbH · Neurtort 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

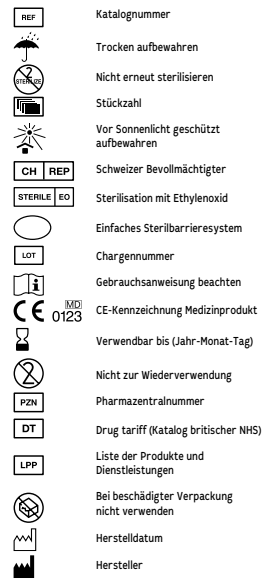

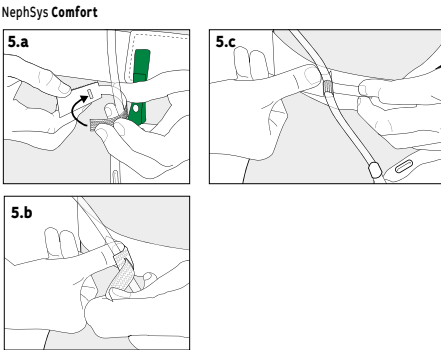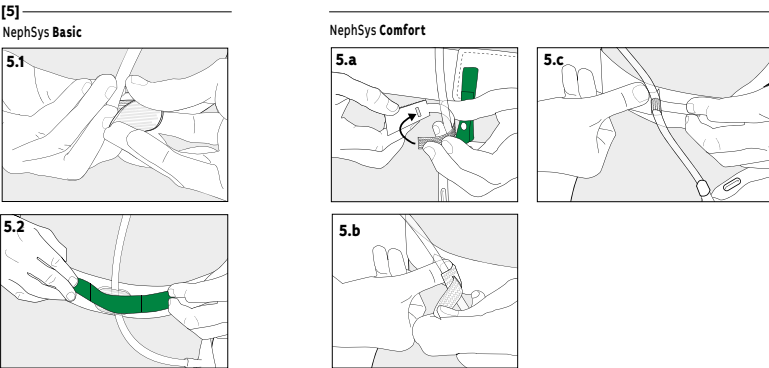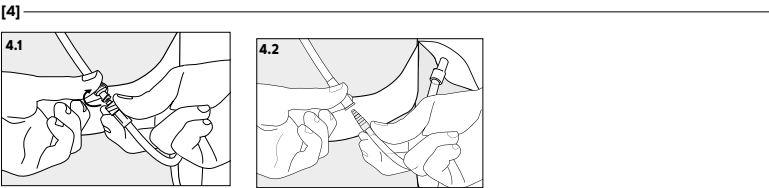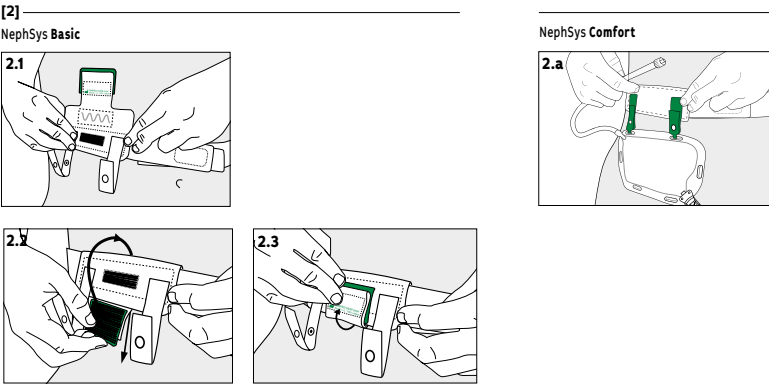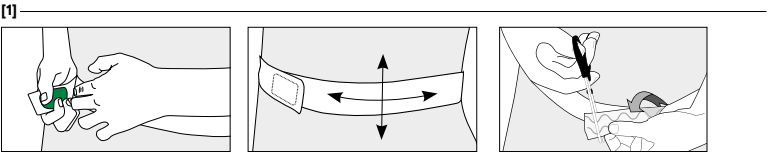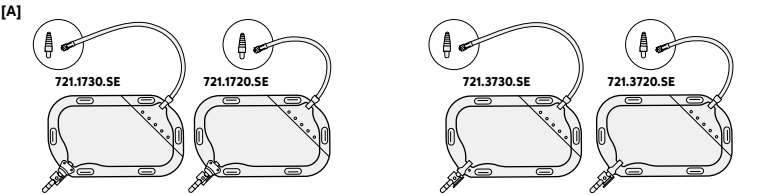

English

SAUER NephSys bag (721.xxxx.SE), sterile

Information

Instructions on how to use SAUER NephSys products should be provided by a medical expert. SAUER NephSys bags are for single use only. The SAUER NephSys belt set can be used multiple times. Please note laundering instructions on the label. The service life of the belt depends on individual usage (putting on, taking off, washing, etc.). In general, it is 2-3 months. Details of the device's trade name and performance characteristics can be found on the label.

Intended use and indications

The SAUER NephSys belt set (57.42, 57.43) is an accessory for the SAUER NephSys bag. The SAUER NephSys belt set is used to attach one or two SAUER NephSys bags to the hips. In combination, their intended use is to collect urine in persons with drainage systems above the reproductive organs, especially from nephrostomy catheters.

Risks and warnings

- The SAUER NephSys bag must a) not be reused and b) not be used if the sterile barrier is damaged, to prevent increasing the risk of infection.
- Incorrect use can lead to complications. Urinary retention, e.g. due to a kink in the urine drainage system, can lead to life-threatening urosepsis. In this case, contact a doctor immediately; this also applies in the event of infections or persistent urine retention.
- To reduce sources of infection, do not touch the connecting area of the bag adapter or bring it into contact with surfaces (inner side of the Luer lock adapter, outside of stepped adaptor). To cut the inlet tube, use only scissors that have been disinfected beforehand (use a suitable disinfectant, e.g. for surfaces).
- Ensure that the bag is not attached above the level of the drainage system to allow urine to drain unobstructed (e.g. do not attach it above the connector of the nephrostomy catheter). Check for urine flow into the bag several times a day. Prevent the inlet tube from being twisted, kinked, or pinched.
- To prevent the unintentional opening/loosening of the belt set components, they must be replaced when they show signs of wear and tear.
- Avoid tension on the catheter. Note the following:
 - Connect the adapter of the bag with the catheter connector without tension.
 - Always separate the connection between the bag and the catheter before the waist belt is opened to prevent sudden tension on the catheter from the weight of the bag.
- When connecting the SAUER NephSys bag to a suitable bag for the night, ensure that the drain tap is opened and does not close during the night.

If serious incidents occur when using SAUER urine collection bags, these must be reported to the manufacturer and competent authority of the country in which the user resides.

SAUER NephSys bag stepped adaptor included, (push on), sterile (Fig. [A] (see p. 2)

Instructions for use (Fig. [1]–[5] see p. 2)

[1]. Applying and shortening the waist belt

Place the side of the belt with the silicone lines on the skin and put the belt on anywhere between the waist and the hips under slight tension. Ensure a comfortable, but most importantly, a stable fit. The excess length of the belt can be cut off with scissors (1.3).

[2]. Positioning and fixing the hook-and-loop pad

2.1, 2.a: Attach the hook-and-loop pad on the side of the body where the drainage system, e.g. the nephrostomy catheter, is located. Attach the hook-and-loop pad to the waist belt as in the illustration (Fig. 2.1, 2.a) in the middle between the side of the hip and the navel.

2.1, 2.3: **Basic belt set:** After attaching the hook-and-loop pad (Fig. 2.1), pull the waist belt slightly away from the body and guide the tab of the hook-and-loop pad under the belt (Fig. 2.2). Then fold over the hook-and-loop fixation strip and fasten it to the hook-and-loop strip sewn onto the front of the hook-and-loop pad (Fig. 2.3).

2.a: **Comfort belt set:** Tip: For the Comfort version, we recommend first fastening the bag to the hook-and-loop pad (Fig. 3.a) and then fastening the hook-and-loop pad to the waist belt (Fig. 2.a).

[3]. Attaching the bag to the hook-and-loop pad

3.1, 3.a: We recommend holding the inlet tube with one hand to prevent contact with the connecting area of the adapter. Attach the bag so that the outlet tap is facing the crotch. Thread the two retaining tabs of the hook-and-loop pad through the belt loops of the bag and close the snaps.

[4]. Connecting the bag to the catheter

4.1: Attach the male luer lock connector of the bag to the female luer lock connector of the nephrostomy catheter by turning clockwise. 4.2: When using the included stepped adaptor, cut the inlet tube to the desired length (straight cut) with scissors that have been disinfected beforehand (use a suitable disinfectant, e.g. for surfaces). Push the adaptor onto the tube without touching the connecting area of the adaptor. Remove the protective cap from the adaptor. Connect the adaptor of the bag to the catheter connector without tension.

[5]. Securing the inlet tube with strain relief

To reduce the risk of twisting the inlet tube or putting strain on the catheter, the tube is secured to the waist belt in a suitable position using strain relief.

5.1–5.2: **Basic belt set:** Removing the protective films from the adhesive fixation dot. Guide the tube between the adhesive surfaces of the adhesive fixation dot where the inlet tube and the waist belt cross (Fig. 5.1), press them together and fasten the adhesive dot to the waist belt. As a last step, fasten the adhesive fixation dot using the hook-and-loop fixation strip as in Fig. 5.2.

5.a–c: **Comfort belt set:** Thread the fixation tab around the inlet tube as in Fig. 5.a. Press on the wide part of the hook-and-loop tab on the waist belt where the inlet tube and the waist belt cross (Fig. 5.b). Pull the hook-and-loop tab tight enough that the inlet tube can no longer be pulled out (do not pinch the tube). Then press the thin strip on the belt (Fig. 5.c).

At night

The SAUER NephSys bag can remain fastened to the belt at night. However, it may be more comfortable to remove the bag from the belt and position it safely in bed next to the body. The SAUER NephSys bag can be connected to a suitable bag to accommodate an increased volume at night. For this, the connecting tube is slid onto the outlet tap of the SAUER NephSys bag and connected to the adapter of the night bag. In this case, the outlet tap of the bag must remain open.

Removal and changing

To empty the SAUER NephSys bag, open the outlet tap and drain the urine into a toilet or other suitable container. Then close the tap again. To change the bag, carefully detach it from the catheter without touching the open ends of the connections.

Disposal

Empty the SAUER NephSys bag before disposal and dispose of it in residual waste. Dispose of the belt system in household waste.

REF	Catalog number
☂	Store in a dry place
🚫	Do not sterilise
📦	Quantity
☀	Keep away from sunlight
CH REP	Swiss authorised representative
UK REP	UK authorised representative
STERILE EO	Sterilised with ethylene oxide
🛡	Single sterile barrier system
LOT	Batch number
📖 i	Observe instructions for use
CE (MD) 0123	CE marked medical device
🕒	Use by (year-month-day)
🚫	Not for reuse
PZN	Pharmaceutical central no.
DT	Drug Tariff
LPP	List of products and services
🚫	Do not use if package is damaged
🏭	Date of manufacture
🏭	Manufacturer


MANFRED SAUER GmbH does not accept responsibility for damages or injuries that may result from improper handling contrary to these instructions for use or from neglecting the hygiene guidelines.

Should you have any questions or problems, please turn to a medical professional or to our customer adviser:


MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

UK REP Manfred Sauer UK Ltd · Barn Way · Northampton NN5 7UW · United Kingdom · Phone +44 1604 595696

[A]




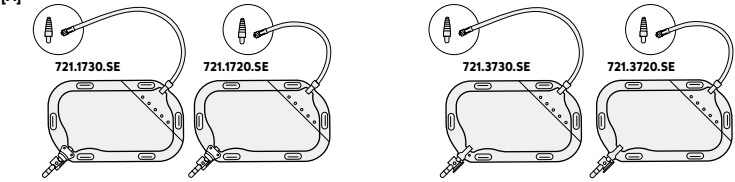


[1]

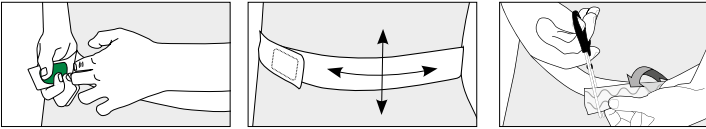



[2]

NephSys Basic

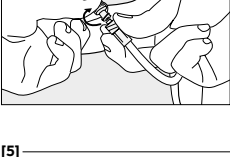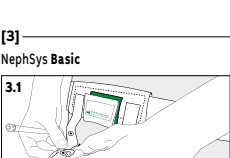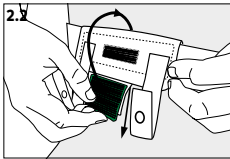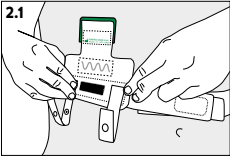


[5]


NephSys Basic

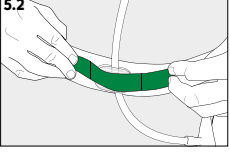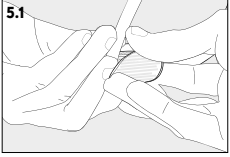




NephSys Comfort

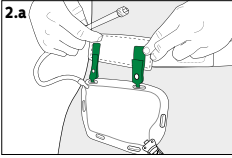

NephSys Comfort

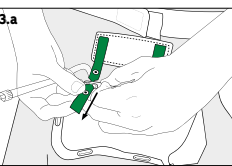

NephSys Comfort

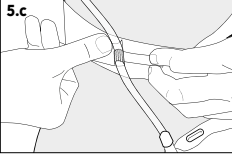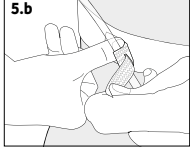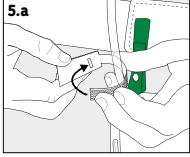

Français

Poche-SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), stérile

Informations

La mise en œuvre des soins à l'aide des produits SAUER-NephSys doit être expliquée par un soignant qualifié. Les poches SAUER-NephSys sont destinées à un usage unique. Le kit de sangles SAUER-NephSys convient à un usage multiple. Respecter les instructions de lavage sur l'étiquette de la sangle. La durabilité de la sangle dépend de l'utilisation individuelle (mise en place/retrait, lavage, etc.) Elle correspond généralement à 2 à 3 mois. La dénomination commerciale et les caractéristiques du produit se trouvent sur l'étiquette.

Utilisation prévue et indications

Le kit de sangles SAUER-NephSys (57.42, 57.43) est un accessoire de la poche SAUER-NephSys. Le kit de sangles SAUER NephSys sert à attacher une ou deux poches SAUER NephSys aux hanches. Combinées, elles sont destinées à la collecte d'urine de personnes ayant des systèmes de drainage au-dessus des organes génitaux, en particulier à partir de cathéters de néphrostomie.

Risques et mesures de précaution

- La poche SAUER-NephSys a) ne doit pas être réutilisée et b) ne doit pas être utilisée lorsque la barrière stérile est altérée, afin de ne pas augmenter le risque d'infection.
- Toute utilisation non conforme à l'utilisation prévue est susceptible d'entraîner des complications. L'accumulation de l'urine, due par exemple au cou dage du dispositif d'évacuation de l'urine, peut entraîner un urosepsis potentiellement mortel. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin, ainsi que dans toute situation d'infection et d'accumulation d'urine persistante.
- Afin de réduire les sources infectieuses, ne pas toucher la surface de raccordement de l'adaptateur de la poche et ne pas la mettre en contact avec des surfaces quelconques (à l'intérieur avec l'adaptateur Luer-Lock, à l'extérieur avec l'adaptateur cranté). Pour raccourcir le flexible, on devra utiliser exclusivement des ciseaux préalablement désinfectés (utiliser un produit désinfectant approprié, par ex. pour les surfaces).
- S'assurer que la poche n'est pas posée au-dessus du système de drainage pour que l'urine puisse s'écouler sans obstacle (p. ex. pas au-dessus du connecteur du cathéter de néphrostomie). Contrôler plusieurs fois par jour si l'urine s'écoule dans la poche. Éviter de tordre, de plier et de pincer le flexible d'entrée.
- Pour éviter une ouverture/un desserrage involontaire des composants du kit de sangles, ces dernières doivent être remplacées si elles présentent des signes d'usure.
- Éviter de tirer le cathéter. Respecter ce qui suit:
 - Raccorder l'adaptateur de la poche au connecteur du cathéter sans tirer.
 - Toujours débrancher le raccord entre la poche et le cathéter avant d'ouvrir la ceinture abdominale afin d'éviter des tractions soudaines sur le cathéter en raison du poids du sac.
- Lorsque la poche SAUER-NephSys est raccordée à une poche adaptée pour la nuit, s'assurer que le robinet de vidange est ouvert et ne se ferme pas la nuit.

Tout incident grave survenant lors de l'utilisation de poches de recueil urinaire SAUER devra être signalé au fabricant et aux autorités compétentes du pays dans lequel l'utilisateur est domicilié.

Poche-SAUER-NephSys adaptateur cranté fourni (à enficher), stérile (Fig. [A] voir page 2)

Instructions d'utilisation (Fig. [1]-[5] voir page 2)

[1]. Placer la ceinture abdominale et la raccourcir
Pour ce faire, positionner le côté ceinture avec les lignes en silicone contre la peau, placer la ceinture entre la taille et les hanches en tirant légèrement selon votre convenance. Veiller à ce que le positionnement soit confortable mais stable avant tout ! L'excédent de sangle peut être coupé avec une paire de ciseaux (1.3).

[2]. Positionner et fixer le tampon auto-agrippant

Fixer le tampon auto-agrippant sur le côté du corps où se situe le système de drainage, p. ex. le cathéter de néphrostomie. Pour ce faire, fixer le tampon auto-agrippant sur la ceinture conformément à la figure (fig. 2.1, 2.a) en le centrant entre le côté de la hanche et le nombril.

2.1. 2.a: Kit de sangles Basic: Après la fixation du tampon auto-agrippant, (fig. 2.1) éloigner légèrement la ceinture abdominale du corps pour passer la lanière du tampon auto-agrippant autour de la ceinture (fig. 2.2). Replier ensuite la bande du crochet de fixation et la fixer à la bande du crochet cousu à l'avant du tampon auto-agrippant (fig. 2.3).

2.a: Kit de sangles Comfort: Conseil: pour la variante Comfort, il est recommandé de fixer d'abord la poche au tampon auto-agrippant (fig. 3.a) et de fixer ensuite le tampon auto-agrippant à la ceinture abdominale (fig. 2.a).

[3]. Fixation de la poche au tampon auto-agrippant

3.1, 3.a: Il est conseillé de tenir le flexible d'arrivée d'une main pour éviter tout contact avec la surface de raccordement de l'adaptateur. Fixer la poche de façon à ce que le robinet de vidange pointe dans le sens de la marche. Enfiler les deux lanières de retenue du tampon auto-agrippant à travers les œillets de la sangle de la poche et fermer les boutons-pression.

[4]. Raccordement de la poche au cathéter

4.1: Raccordez l'embout Luer-Lock mâle de la poche à l'embout Luer-Lock femelle du cathéter de néphrostomie en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

4.2: Pour utiliser l'adaptateur cranté fourni, raccourcir le flexible à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux préalablement désinfectés (utiliser un produit désinfectant approprié, par ex. pour les surfaces) (coupe droite). Poussez l'adaptateur sur le tube sans toucher la surface de raccordement de l'adaptateur. Retirer le capuchon de protection de l'adaptateur. Raccorder l'adaptateur de la poche au connecteur du cathéter sans tirer.

[5]. Fixation du flexible d'entrée avec décharge de traction

Afin de réduire le risque de torsion du flexible d'entrée ou de traction sur le cathéter, le flexible est fixé dans une position appropriée à l'aide du dispositif de décharge de traction sur la ceinture.

5.1- 5.2: Kit de sangles Basic: Retirer le film de protection du point adhésif de fixation. Au point de croisement du flexible et de la ceinture abdominale, guider le flexible entre les surfaces adhésives du point adhésif de fixation (fig. 5.1), les presser ensemble et fixer le point adhésif à la ceinture abdominale. Fixer enfin le point adhésif de fixation à l'aide de la bande à crochets de fixation selon la figure 5.2.

5.a- 5.c: Kit de sangles Comfort: Enfiler la lanière de fixation conformément à la figure 5.a autour du flexible d'entrée. Presser la partie large de la bande auto-agrippante sur la ceinture abdominale au point de croisement du flexible et de la ceinture abdominale (fig. 5.b). Serrer la lanière auto-agrippante de manière à ce que le flexible ne puisse plus être retiré (ne pas pincer le tuyau). Presser ensuite la bande fine de la ceinture (fig. 5.c).

Pendant la nuit

La poche SAUER-NephSys peut également rester fixée à la sangle pendant la nuit. Cependant, il peut être plus confortable de retirer la poche de la sangle et de la positionner de manière sûre dans le lit le long du corps. Afin d'augmenter la capacité de recueil pendant la nuit, il est possible de raccorder la poche SAUER-NephSys à une poche adaptée. Pour cela, enfoncer le flexible de raccordement sur le robinet de la poche SAUER-NephSys et le relier à l'adaptateur de la poche de lit. Dans ce cas, le robinet de vidange doit rester ouvert.

Vidange et remplacement

Pour vider la poche SAUER-NephSys, ouvrir le robinet de vidange et laisser s'écouler l'urine dans les toilettes ou dans un récipient approprié. Refermer ensuite le robinet.

Pour remplacer la poche, détacher précautionneusement le raccord du cathéter sans toucher les extrémités ouvertes des raccords.

Élimination

Vider l'urine de la poche SAUER-NephSys avant l'élimination et jeter cette dernière avec les déchets résiduels. Éliminer le système de sangles avec les déchets ménagers.

MANFRED SAUER GmbH n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de blessures dus à la manipulation non conforme à la présente notice d'utilisation ou au non-respect des directives d'hygiène.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez vous adresser à des professionnels de la santé ou à notre service clientèle:

MANFRED SAUER GmbH · Neurot 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF	Numéro de catalogue
	Conserver au sec
	Ne pas stériliser une nouvelle fois
	Quantité
	Tenir à l'abri de la lumière du soleil
CH REP	Représentant autorisé suisse
STERILE EO	Sterilized with ethylene oxide
	Système de barrière stérile unique
LOT	Numéro de lot
	Respecter la notice d'utilisation
CE 0123 MD	Dispositif médical marqué CE
	Date de péremption (année-mois-jour)
	Ne pas réutiliser
PZN	Code identifiant de présentation
DT	Prix du médicament (catalogue NHS)
LPP	Liste des produits et prestations
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Date de fabrication
	Fabricant

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se

se






se

se

se

se

se

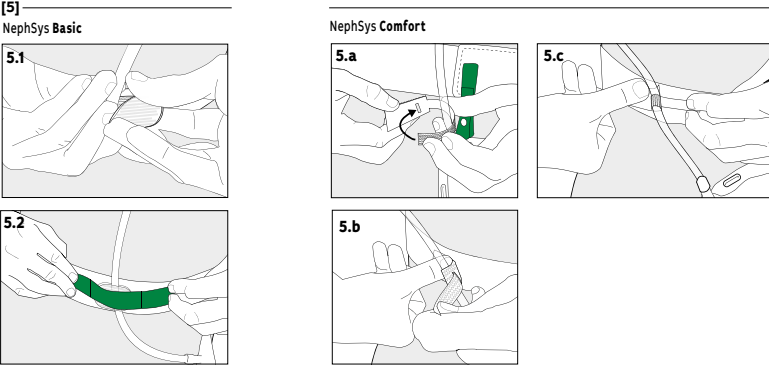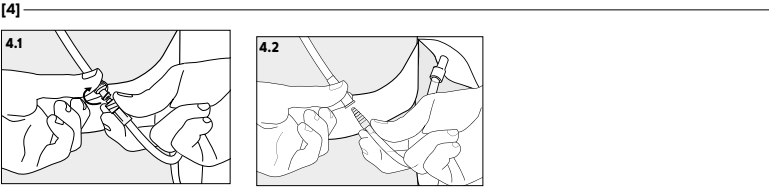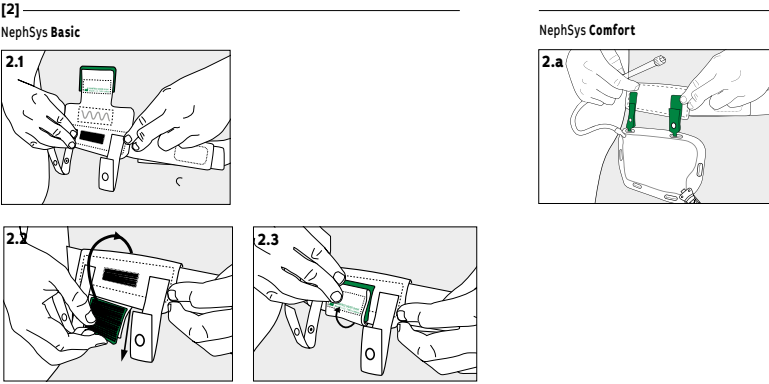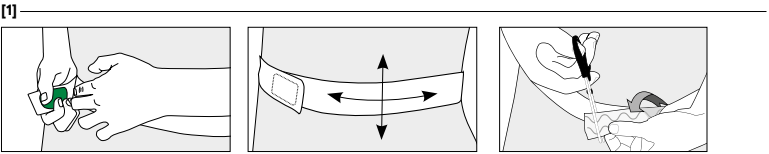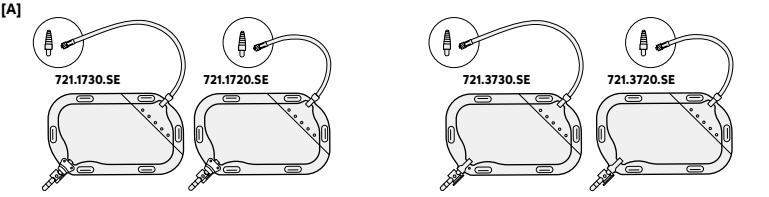

Italiano

Sacca SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), sterile

Informazioni

Le istruzioni per l'utilizzo di prodotti SAUER-NephSys devono essere fornite da personale qualificato. Le sacche SAUER NephSys sono destinate all'uso singolo. Il set cintura SAUER NephSys è adatta al riutilizzo. Attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta della cintura. La durata della cintura dipende dall'uso individuale (indossamento, lavaggio, ecc.) e di norma è di 2-3 mesi. Il nome commerciale e le caratteristiche del prodotto sono riportati sull'etichetta.

Destinazione d'uso e indicazioni

Il set cintura SAUER NephSys (57.42, 57.43) è un accessorio della sacca SAUER NephSys. Il set di cintura SAUER NephSys serve per fissare una o due sacche SAUER NephSys ai fianchi. Insieme, sono destinati alla raccolta di urina di persone con sistemi di drenaggio sopra gli organi genitali, in particolare cateteri per fistole renali.

Rischi e indicazioni di avvertenza

- La sacca SAUER NephSys non deve né a) essere riutilizzata né b) essere utilizzata con una barriera sterile danneggiata per non aumentare il rischio di infezioni.
- L'uso improprio può causare complicazioni. Il verificarsi di un blocco urinario, dovuto ad es. al pleggiamento del drenaggio, può determinare l'insorgere di sepsi urinaria con pericolo di vita. In questi casi, come anche in presenza di infezioni o blocchi urinari duraturi, è necessario consultare immediatamente un medico.
- Per ridurre le fonti di infezione, evitare di toccare la superficie di connessione dell'adattatore della sacca e di metterla a contatto con altre superfici (lato interno in caso di adattatore Luer Lock, lato esterno in caso di adattatore a gradini). Il tubicino può essere tagliato solamente con forbici precedentemente disinfettate (utilizzare un disinfettante adatto, ad es. per superfici).
- Assicurarsi che la sacca non sia posizionata sopra il sistema di drenaggio in modo che l'urina possa drenare liberamente (ad esempio non sopra il connettore del catetere della fistola renale). Controllare più volte al giorno che l'urina defluisca nella sacca. Evitare di attorcigliare, piegare e pizzicare il tubicino d'ingresso.
- Per evitare l'apertura o il distacco accidentale dei componenti del set cintura, sostituirli quando mostrano segni di usura.
- Evitare di tirare il catetere. Prestare attenzione a quanto segue:
 - Collegare l'adattatore della sacca al connettore del catetere senza tensione.
 - Scollegare sempre la sacca dal catetere prima di aprire la cintura addominale per evitare una trazione improvvisa sul catetere dovuta al peso della sacca.
- Quando si connette la sacca SAUER NephSys a una sacca per la notte idonea, assicurarsi che il rubinetto di uscita sia aperto e non si chiuda durante la notte.

Se si verificano incidenti gravi durante l'uso della sacca per drenaggio urinario SAUER, questi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utilizzatore.

Sacca SAUER-NephSys adattatore graduato fornito in dotazione (smontabile), sterile (Fig. [A] vedi pagina 2)

Istruzioni per l'uso (Fig. [1]–[5] vedi pagina 2)

[1]. Indossare e accorciare la cintura addominale

Posizionare il lato della cintura con le nervature in silicone sulla pelle e sistemare la cintura tra la vita e i fianchi, tirando delicatamente, come desiderato. Prestare attenzione a ottenere una vestibilità comoda, ma soprattutto stabile! Usare le forbici per accorciare il tratto di cintura in eccesso, come desiderato (1.3).

[2]. Posizionamento del lato ad asole del sistema a strappo e fissaggio

2.1, 2.a: Fissare il lato ad asole del sistema a strappo sul lato del corpo su cui si trova il sistema di drenaggio, ad esempio il catetere della fistola renale. A questo scopo, fissare il lato ad asole del sistema a strappo alla cintura addominale centralmente tra l'anca e l'ombelico, come mostrato in figura 2.1, 2.a.

2.1, 2.3: **Set cintura Basic:** Dopo aver fissato il lato ad asole del sistema a strappo (Fig. 2.1), allontanare leggermente la cintura addominale dal corpo e far passare il risvolto del lato ad asole sotto la cintura (Fig. 2.2). Quindi voltare il lato uncinato di fissaggio e applicarlo al nastro uncinato cucito sulla parte anteriore del lato ad asole del sistema a strappo (Fig. 2.3).

2.a: **Set cintura Comfort:** Sugerimento: per la versione Comfort, si raccomanda di fissare dapprima la sacca al lato ad asole del sistema a strappo (Fig. 3.a) e quindi di applicare il lato ad asole alla cintura addominale (Fig. 2.a).

3. Fissaggio della sacca al lato ad asole del sistema a strappo

3.1, 3.a: Si raccomanda di tenere il tubicino d'ingresso con una mano per evitare il contatto con la superficie di collegamento dell'adattatore. Fissare la sacca in modo che il rubinetto di uscita punti in direzione dell'inguine. Infilare i due risvolti di supporto del lato ad asole del sistema a strappo attraverso gli occhielli per la cintura della sacca e chiudere i bottoni a pressione.

4. Collegamento della sacca al catetere

4.1: Collegare il connettore Luer-Lock maschio sulla sacca con il connettore Luer Lock femmina situato sul catetere per nefrostomia, ruotando in senso orario.

4.2: Per utilizzare l'adattatore graduato fornito in dotazione, accorciare il tubo flessibile fino alla lunghezza desiderata utilizzando forbici precedentemente disinfettate (con un disinfettante adatto, ad es. per superfici, ed effettuando un taglio diritto). Spingere l'adattatore sul tubo della superficie di collegamento dell'adattatore senza toccarlo. Togliere il cappuccio protettivo dall'adattatore. Collegare l'adattatore della sacca al connettore del catetere senza tensione.

5. Assicurazione del tubicino d'ingresso con il dispositivo di scarico della trazione

Per ridurre il rischio di attorcigliare il tubicino di ingresso o di tirare il catetere, il tubicino viene fissato in una posizione adatta della cintura addominale utilizzando il dispositivo di scarico della trazione.

5.1-5.2: **Set cintura Basic:** Rimuovere le pellicole protettive dal punto di fissaggio adesivo. Nel punto in cui il tubicino e la cintura addominale si incrociano, guidare il tubicino tra le superfici adesive del punto di fissaggio (Fig. 5.1), premerle e fissare il punto alla cintura. Infine, fissare il punto di fissaggio adesivo con l'ausilio del nastro uncinato, come mostrato nella Fig. 5.2.

5.a-c: **Set cintura Comfort:** Far passare il risvolto intorno al tubicino d'ingresso, come mostrato nella Fig. 5.a. Premere la parte larga del risvolto a strappo sulla cintura addominale nel punto in cui il tubicino e la cintura si incrociano (Fig. 5.b). Tirare il risvolto di fissaggio a strappo in modo che il tubicino non possa più sfuggire (non scollegare il tubo). Premere quindi la striscia sottile sulla cintura (Fig. 5.c).

Durante la notte

La sacca SAUER NephSys può anche rimanere attaccata alla cintura durante la notte. Tuttavia, può essere più comodo rimuovere la sacca dalla cintura e posizionarla in modo sicuro accanto al corpo, nel letto. Per un volume di raccolta maggiore, durante la notte la sacca SAUER NephSys può essere collegata a una sacca adatta. A questo scopo, far scorrere il raccordo tubolare sul rubinetto di uscita della sacca SAUER NephSys e collegarlo all'adattatore della sacca da letto. In questo caso, il rubinetto di uscita della sacca deve rimanere aperto.

Svuotamento e sostituzione

Per svuotare la sacca SAUER NephSys, aprire il rubinetto di uscita e far defluire l'urina nella toilette o in un contenitore adatto. Quindi chiudere nuovamente il rubinetto.

Per sostituire la sacca, scollegare con cura il catetere senza toccare le estremità aperte dei connettori.

Smaltimento

Svuotare la sacca SAUER NephSys prima di smaltirla e gettarla nei rifiuti indifferenziati. Smaltire il set cintura nei rifiuti domestici.


MANFRED SAUER GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da una manipolazione impropria contraria alle presenti istruzioni per l'uso o dalla mancata applicazione delle linee guida igieniche.

In caso di domande o problemi, contattare il medico o il rappresentante dell'assistenza clienti:


MANFRED SAUER GmbH · Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF	Numero di catalogo
☂	Conservare in luogo asciutto
2 (STERILIZZAZIONE)	Non sterilizzare nuovamente
📦	Numero di pezzi
☀	Conservare in luogo asciutto
CH REP	Rappresentante autorizzato svizzero
STERILE EO	Sterilizzare con ossido di etilene
🛡	Sistema di barriera sterile singolo
LOT	Numero del lotto
📖	Osservare le istruzioni per l'uso
CE MD 0123	Marchata CE del prodotto medico
🕒	Utilizzabile fino (anno-mese-giorno)
🚫	Non riutilizzabile
PZN	Codice numerico farmaceutico centrale
DT	Drug tariff (Regno Unito)
LPP	Elenco dei prodotti e servizi
🚫	Non utilizzare in caso di confezione danneggiata
🏭	Data di produzione
🏭	Produttore

[A]


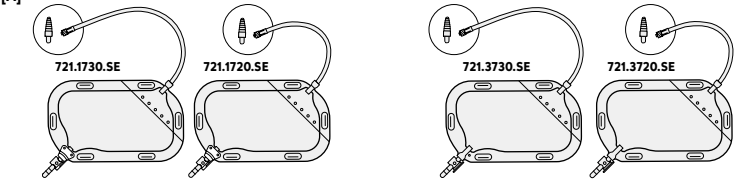


[1]


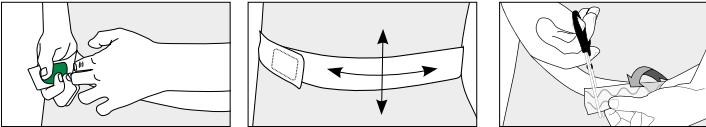


[2]


NephSys Basic

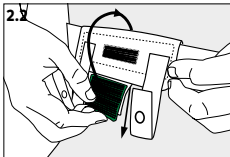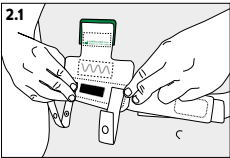


[4]

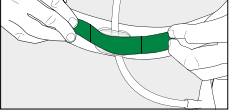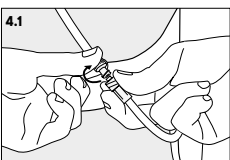




NephSys Comfort

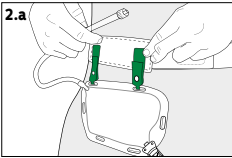

NephSys Comfort

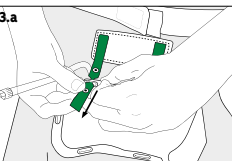

NephSys Comfort

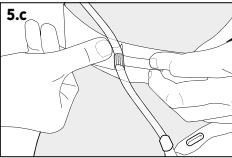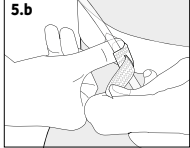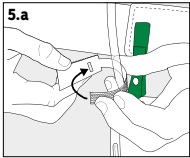

Nederlands

SAUER NephSys-zak (721.xxxx.SE), steriel

Informatie

Instructies voor de verzorging met SAUER NephSys-producten moeten door een specialist verstrekt worden.
De SAUER NephSys-zak is bedoeld voor eenmalig gebruik.
De SAUER NephSys-draagorgel is geschikt voor meervoudig gebruik. Volg de wasvoorschriften op het label van de gordel. De duurzaamheid van de gordel is afhankelijk van het individuele gebruik (aan-/uittrekken, wassen etc.). Dit komt meestal overeen met 2-3 maanden. De handelsnaam en eigenschappen van het product zijn terug te vinden op het etiket.

Beoogd gebruik en indicaties

De SAUER NephSys-draagorgel (57.42, 57.43) is een accessoire voor de SAUER NephSys-zak. De SAUER NephSys draaggordelset wordt gebruikt om één of twee SAUER NephSys tassen aan de heupen te bevestigen. In combinatie zijn ze bedoeld voor het opvangen van urine bij mensen met drainage systemen boven de geslachtsorganen, met name voor een nefrostomie katheter.

Risico's en waarschuwingen

- De SAUER NephSys-zak mag a) niet hergebruikt en b) niet gebruikt worden als het steriele barrièresysteem beschadigd is, om het risico van infecties niet te vergroten.
- Onjuist gebruik kan tot complicaties leiden. Stagnatie van urine, bijvoorbeeld door een geknikte urinedrain, kan tot levensbedreigende urosepsis leiden. In dat geval dient direct een arts te geraadpleegd worden, ook bij infecties en aanhoudende urinestuwung.
- Om infectiebronnen te verminderen mag het verbindingsoppervlak van de zakadapter niet aangeraakt en niet in contact gebracht worden met oppervlakken (binnenkant met Luer-Lock-adapter, buitenkant met getrapte adapter). De slang mag alleen ingekort worden met een vooraf gedesinfecteerde schaar (gebruik een geschikt desinfectiemiddel, bijv. voor oppervlakken).
- Zorg ervoor dat de zak niet boven het drainage systeem bevestigd wordt, zodat de urine vrij kan wegvloeiën (bijv. niet boven de connector van de nefrostomie katheter). Controleer meerdere keren per dag of er urine in de zak loopt. Voorkom dat de toevoerslang gedraaid of geknikt wordt of bekneld raakt.
- Om onbedoeld openen/losraken van onderdelen van de draaggordel te voorkomen, moeten deze bij tekenen van slijtage vervangen worden.
- Trek niet aan de katheter. Neem het volgende in acht:
 - Verbind de adapter van de zak zonder spanning met de connector van de katheter.
 - Ontkoppel voor het openen van de heupgordel altijd eerst de verbinding tussen de zak en de katheter om plotselinge spanning op de katheter door het gewicht van de zak te voorkomen.
- Zorg er bij het aansluiten van de SAUER NephSys-zak op een geschikte nachtzak voor dat de aftapkraan open staat en 's nachts niet kan sluiten.

Indien zich ernstige incidenten voordoen bij het gebruik van de urineopvangzakken SAUER moeten deze aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van het land van de gebruiker worden gerapporteerd.

SAUER NephSys-zak meegeleverde getrapte adapter te gebruiken (opsteekbaar), steriel (afb. [A] zie pagina 2)

Gebruiksaanwijzing (afb. [1]-[5] zie pagina 2)

[1]. Heupgordel aanbrengen en inkorten

Plaats de zijkant van de gordel met behulp van de siliconenlijp op de huid, trek de gordel voorzichtig vast tussen taille en heupen. Zorg voor een comfortabele, maar vooral stabiele plaatsing. Het overtollige bandgedeelte kan met een schaar ingekort worden (1.3).

[2]. Klittenbandpad positioneren en bevestigen

Bevestig de klittenbandpad aan de zijkant van het lichaam waar het drainage systeem, bijvoorbeeld de nefrostomie katheter, zich bevindt. Om dit te doen, bevestig u het klittenband aan de heupgordel in het midden tussen de heupzijde en de navel, zoals weergegeven in de afbeelding (Afb. 2.1, 2.a).
2.1, 2.a: Draaggordel Basic: Trek na het bevestigen van de klittenbandpad (Afb. 2.1) de heupgordel iets van het lichaam weg en voer de lus van de klittenbandpad onder de gordel door (Afb. 2.2). Vouw vervolgens het bevestigingshaakband om en bevestig het aan het vastgemaakte haakband aan de voorkant van het klittenband (Afb. 2.3).

2.a: Draaggordel Comfort: Tip: bij de Comfort-versie is het aan te raden om de zak eerst aan de klittenbandpad te bevestigen (Afb. 3.a) en vervolgens de klittenbandpad aan de heupgordel te bevestigen (Afb. 2.a).

[3]. Zak aan klittenbandpad bevestigen

3.1, 3.a: Het is raadzaam om de toevoerslang met één hand vast te houden om contact met het aansluitoppervlak van de adapter te vermijden. Maak de zak zo vast dat het kraantje in de richting van de trede wijst. Rijg de twee bevestigingslijpjes van de klittenbandpad door de gordelopeningen van de zak en sluit de drukknoppen.

[4]. Zak met katheter verbinden

4.1: Verbind de male Luer-lock-aansluiting op de zak met de female Luer-lock-aansluiting op de nefrostomie katheter door met de klok mee te draaien.

4.2: Om de meegeleverde getrapte adapter te gebruiken, moet de slang met een vooraf gedesinfecteerde schaar (gebruik geschikt desinfectiemiddel, bijv. voor oppervlakken) op de gewenste lengte ingekort worden (recht afknippen). Duw de adapter op de slang zonder het aansluitvlak van de adapter aan te raken. Verwijder het beschermkapje van de adapter. Verbind de adapter van de zak zonder spanning met de connector van de katheter.

[5]. Zet de toevoerslang vast met de trekontlasting.

Om de kans op het verdraaien van de toevoerslang of het trekken aan de katheter te verkleinen, wordt de slang met behulp van de trekontlasting op een geschikte plaats bevestigd aan de heupgordel.

5.1-5.2: Draaggordel Basic: Verwijder de beschermfolie van het kleeftpunt. Op het punt waar de slang en de heupgordel elkaar kruisen, de slang tussen de kleeftvlakken van het kleeftpunt leiden (Afb. 5.1), samendrukken en het kleeftpunt aan de heupgordel vastklitten. Bevestig ten slotte het kleeftpunt met behulp van de bevestigingshaakband zoals getoond in Afb. 5.2.

5.a-c: Draaggordel Comfort: Draai het bevestigingslijpje rond de toevoerslang zoals getoond in Afb. 5.a. Druk het brede deel van de klittenband op de heupgordel op het punt waar de slang en de heupgordel elkaar kruisen (Afb. 5.c). Trek de klittenband zo aan dat de slang niet meer uitgetrokken kan worden (slang niet afklemmen). Druk vervolgens de dunne strip op de gordel (Afb. 5.c).

Tijdens de nacht

De SAUER NephSys-zak kan 's nachts ook aan de gordel blijven zitten. Voor meer comfort kan het zakje van de gordel verwijderd en veilig naast het lichaam in bed geplaatst worden. Voor een groter opvangvolume in de nacht kan de SAUER NephSys-zak aangesloten worden op een geschikte zak. Schuif hiervoor de koppelingsslang op de aftapkraan van de SAUER NephSys-zak en sluit deze aan op de adapter van de nachtzak. In dit geval moet het kraantje van de zak geopend blijven.

Legen en verwisselen

Om de SAUER NephSys-zak te legen, opent u het kraantje en laat u de urine in het toilet of een geschikte bak lopen. Draai vervolgens het kraantje weer dicht.

Om de zak te verwisselen, koppelt u voorzichtig de verbinding met de katheter los zonder de open uiteinden van de verbindingen aan te raken.

Verwijdering

Maak de SAUER NephSys-zak leeg voordat u deze weggooit en deponeer deze bij het restafval. Het gordelsysteem kan bij het huisvuil.


MANFRED SAUER GmbH is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit onjuist gebruik dat in strijd is met deze gebruiksaanwijzingen of door het niet toepassen van de hygiënerichtlijnen.

Neem bij vragen of problemen alstublieft contact op met uw medische behandelaar of onze klantenservice:


MANFRED SAUER GmbH · Neurt 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

	Catalogusnummer
	Droog bewaren
	Steriliseer de zak niet opnieuw
	Aantal stuks
	Beschermen tegen zonlicht
	Zwitserse gemachtigde
	Sterilisatie met ethyleenoxide
	Eenvoudig steriel barrièresysteem
	Lotnummer
	Gebruiksaanwijzing naleven
	CE-markering medisch hulpmiddel
	EXP (jaar-maand-dag)
	Ongebruikt voor hergebruik
	Farmacologisch centraal nummer
	Drug Tariff (catalogus van de Britse NHS)
	Lijst van producten en diensten
	Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is
	Productiedatum
	Fabrikant

[A]



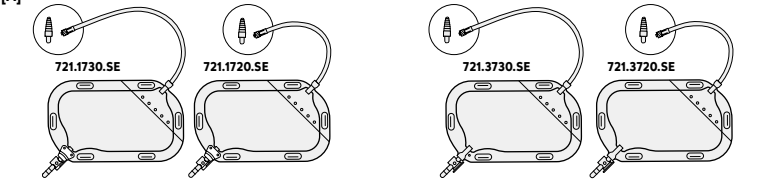


[1]

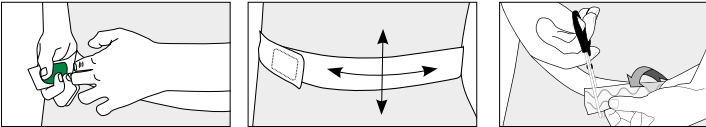


[2]

NephSys Basic

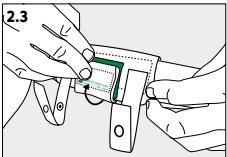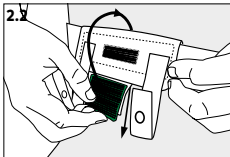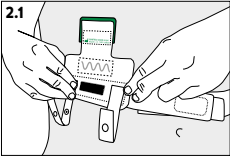

NephSys Comfort

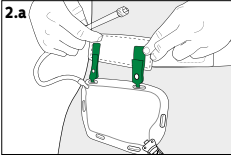


[3]



NephSys Basic



NephSys Comfort


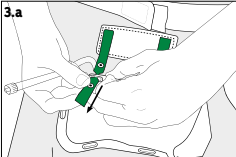


[4]


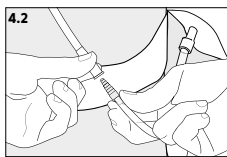
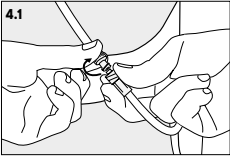


[5]

NephSys Basic

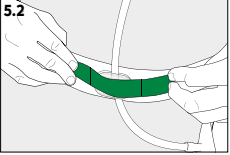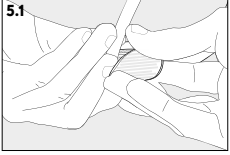

NephSys Comfort

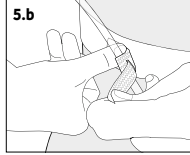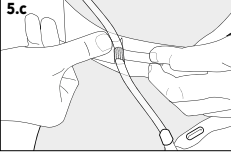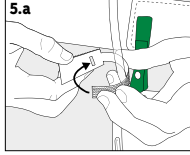

Svenska

SAUER-NephSys-påse (721.xxxx.SE), steril

Information

Användning av SAUER-NephSys-produkter bör ske efter konsultation med kvalificerad sjukvårdspersonal.
SAUER-NephSys-påsar är avsedda för engångsbruk.
SAUER-NephSys-bälte set är avsedda att användas flera gånger. Följ tvättråden på fästremmens etikett. Fästremmens hållbarhet beror på hur den används (av- och påtagning, tvätt etc.). Den kan som regel användas i 2-3 månader.
Produktens varumärke och egenskaper anges på etiketten.

Användningsområde och indikationer

SAUER-NephSys-Bälte set (57.42, 57.43) en är ett tillbehör för SAUER-NephSys-påsen. SAUER NephSys bälteset används för att fästa en eller två SAUER NephSys-påse på höften. Tillsammans används de för att samla upp urin från personer med permanent urinavledning ovanför könsorganen med hjälp av en nefrostomikateter.

Risker och varningar

- SAUER-NephSys-påsen får a) inte återanvändas och b) inte användas om sterilbarriären brutits, för att inte medföra förhöjd infektionsrisk.
- Felaktig användning kan leda till komplikationer. Urinostas, t.ex. på grund av en vikt urinavledningslång, kan leda till livshotande urosepsis. I dessa fall måste läkare omedelbart uppsökas, likaså om det uppstår infektion eller långvarig urinostas.
- För att minska infektionsskäl efter att skyddshöljet dragits bort, får påsadaptorns anslutningsytor varken vidröras eller komma i kontakt med andra ytor (stegadaptorns utsida respektive Luer-Lock-adaptorns insida). Slangen får endast kapas med en desinficerad sax (använd lämpligt desinfektionsmedel, t.ex. för ytor).
- Kontrollera att påsen inte hamnar högre än urinavledningssystemet, så att urinen obehindrat kan rinna ner i påsen. (Den får inte befinna sig högre än anslutningen till nefrostomikatetern). Kontrollera flera gånger dagligen att urin rinner ner i påsen. Kontrollera att påsens inloppsslang inte är vriden, veckad eller hamnat i kläm.
- För att förhindra att någon av fäst detaljerna lossnar eller öppnas oavsiktligt måste de bytas ut om de visar tecken på försiltning.
- Utsätt inte katetern för dragbelastning. Tänk på följande:
 - Undvik att dra i katetern vid anslutning av påsens adapter.
 - Lossa alltid kopplingen mellan påsen och katetern innan midjebältet öppnas, för att förhindra att påsens vikt utsätter katetern för belastning.
- När SAUER-NephSys-påsen ansluts till en nattpåse – kontrollera att utloppskranen är öppen och att den inte stängs under natten.

Skulle det uppstå allvarliga incidenter vid användning av SAUER urinuppsamlingspåsar, måste dessa anmälas till tillverkaren samt till behörig myndighet i det land där användaren är bosatt.

SAUER-NephSys-påse med medföljande stegad adapter (fästbar), steril (Fig. [A] se sidan 2)

Bruksanvisning (Fig. [1]–[5] se sidan 2)

[1]. Ta på midjeremmen och ställ in rätt längd

Placera remmen mellan midjan och höften med silikonranderna inåt, mot huden och dra åt den till önskad storlek. Känn efter att den sitter bekvämt och framför allt stabilt. Den överskjutande delen av remmen kan klippas av till önskad längd med en sax (1.3).

[2]. Placera och fäst kardborrefästet

2.1, 2.a: Fäst kardborrefästet på den sida av kroppen där avledningssystemet, t.ex. nefrostomikatetern, sitter. Fäst kardborrefästet på midjeremmen enligt bilden (figur 2.1, 2.a) mitt emellan höften och naveln.

2.1, 2.3: Bälte set Basic: Efter att kardborrefästet tryckts på plats (figur 2.1) lättas midjeremmen något från kroppen så att kardborrefästets fästflik kan träs in bakom remmen (figur 2.2). Vik sedan upp kardborrefliken och fäst den mot fästytan på framsidan av kardborrefästet (figur 2.3).

2.a: Bälte set Comfort: Tips: För Comfort-varianten är det lämpligt att först fästa påsen vid kardborrefästet (figur 3.a) och därefter fästa kardborrefästet i midjeremmen (figur 2.a).

[3]. Fäst påsen i kardborrefästet

3.1, 3.a: Det är lämpligt att hålla i inloppsslangen med ena handen, för att undvika att komma i kontakt med adaptorns anslutningsyta. Fixera påsen så att utloppskranen pekar framåt. Trä kardborrefästets båda fästflikar genom påsens fästöglor och fäst dem med tryckknapparna.

[4]. Anslut påsen till katetern

4.1: Anslut påsens luerlock-hankontakt till nefrostomikateterns luerlock-honkontakt genom att vrida medurs.

4.2: För att använda den bifogade stegadaptorn klipper du av slangen till önskad längd (rakt snitt) med endesinficerad sax (använd lämpligt desinfektionsmedel, t.ex. för ytor). Skjut adaptorn på slangen utan att komma i kontakt med adaptorns anslutningsyta. Ta bort slangadapter skyddshölje. Anslut påsens adapter till kateterns anslutning utan att dra i katetern.

[5]. Fäst inloppsslangen med dragavlastningen

För att minska risken för att inloppsslangen ska vridas eller att den ska dra i katetern, fixeras den i lämplig position mot midjeremmen med dragavlastningen.

5.1–5.2: Bälte set Basic: Avlägsna skyddsplasten från fästtejen. Placera den del av slangen som möter midjeremmen mellan fästtejens klisterytor och tryck ihop klisterytorna (figur 5.1). Tryck sedan fast fästtejens kardborreyta mot midjeremmen. Fixera till sist fästtejen och slangen med hjälp av kardborrebandet enligt figur 5.2.

5.a–c: Bälte set Comfort: Dra fästremman runt inloppsslangen enligt figur 5.a. Tryck fast fästremmans breda kardborreyta mot midjeremmen i det läge där slangen möter midjeremmen (figur 5.b). Dra fast fästremman runt inloppsslangen så att slangen inte kan dras loss (men utan att klämma ihop slangen). Tryck sedan fast den smala änden av fästremman mot midjeremmen (figur 5.c).

Under natten

SAUER-NephSys-påsen kan sitta kvar i fästremmen även under natten. Det kan dock vara mer bekvämt att lossa påsen från fästremmen och i stället placera den i sängens bredvid kroppen. För större uppsamlingsvolym natttid kan SAUER-NephSys-påsen anslutas till lämplig uppsamlingspåse. Det görs med hjälp av en kopplingslång som skjuts fast på SAUER-NephSys-påsens utloppskran och sedan ansluts till sängpåsens adapter. I detta fall måste påsens utloppskran vara i öppet läge.

Tömning och byte

När SAUER-NephSys-påsen ska tömmas öppnar man utloppskranen och låter urinen rinna ut i toaletten eller i lämpligt kärl. Stäng sedan kranen igen.

När påsen ska bytas lossar man försiktigt anslutningen vid katetern utan att vidröra anslutningarnas öppna ändar.

Avfallshantering


Töm SAUER-NephSys-påsen och källsortera den som restavfall. Fästremarna sorteras som hushållsavfall.

MANFRED SAUER GmbH ansvarar inte för eventuella skador som beror på felaktig användning ej i enlighet med denna bruksanvisning eller underlåtenhet att följa de hygieniska riktlinjerna.


Om du har frågor eller problem, vänligen kontakta din vårdgivare eller våra produktspecialister:
MANFRED SAUER GmbH · Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

	Katalognummer
	Förvaras torrt
	Förbrukningsmaterial
	Förbrukningsmaterial
	Antal
	Skyddas mot direkt solljus
	Schweizisk auktoriserad representant
	Schweizisk auktoriserad representant
	Produkten steriliseras med etenoxid
	Produkten steriliseras med etenoxid
	Enskilt sterilt barriärsystem
	Batchnummer
	Följ bruksanvisningen
	CE-märkning för medicinteknisk produkt
	0123
	Används före (år-månad-dag)
	Endast för engångsbruk
	PZN-nummer
	Drug Tariff (ersättningsbelopp från brittisk NHS)
	Lista över produkter och tjänster
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare

[A]



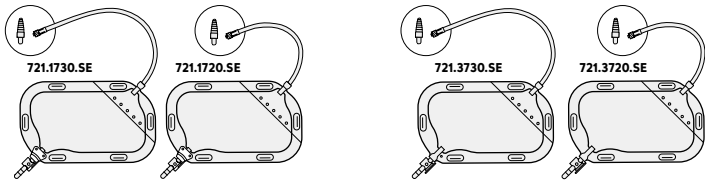


[1]

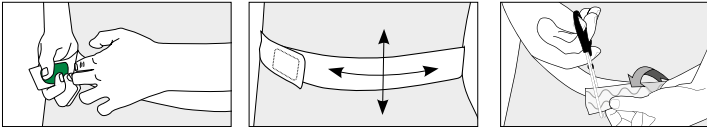


[2]

NephSys Basic

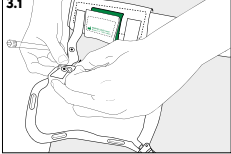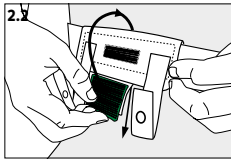
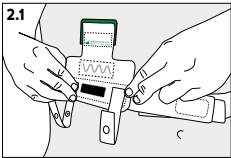


[4]

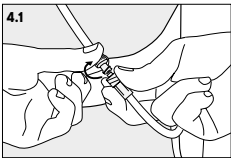


[5]


NephSys Basic

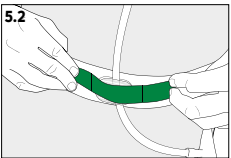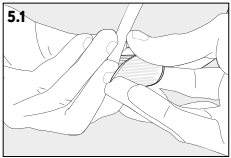




NephSys Comfort

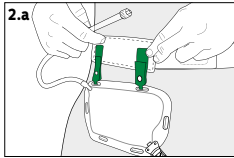

NephSys Comfort

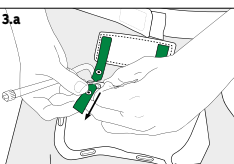

NephSys Comfort

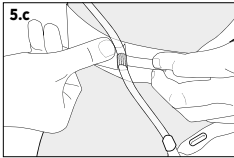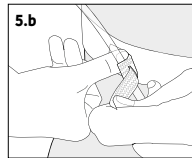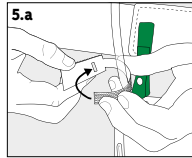

Dansk

SAUER-NephSys-pose (721.xxxx.SE), steril

Information

Anvisningen til pleje med SAUER-NephSys-produkter skal ske fra en fagpersoners side. SAUER-NephSys-poser er udelukkende til engangsbrug. SAUER-NephSys-bæltessættet er egnet til brug flere gange. Vær opmærksom på vaskeanvisningen på bæltemarkaten. Bæltets holdbarhed afhænger af den individuelle brug (antal gange det tages på og af, vask, osv.) Det er som regel 2-3 måneder. Produktets handelsnavn og egenskaber er angivet på etiketten.

Tilsigtet formål og indikationer

SAUER-NephSys-bæltessættet (57.42, 57.43) er tilhører til SAUER-NephSys-posen. SAUER NephSys-bæltessættet bruges til at fastgøre en eller to SAUER NephSys-pose til hoften. Sammen er de beregnet til opsamling af urin hos personer med afledte systemer over kønsorganerne, især fra nyrekatetre.

Risici og advarsler

- SAUER-NephSys-posen må ikke genbruges og b) ikke anvendes ved beskadiget sterilbarriere, for ikke at forøge infektionsrisikoen.
- Forkert brug kan føre til komplikationer. Urinbelastning, f.eks. på grund af knæk på en urinrøder, kan føre til livstruende urosepsis. I så fald skal en læge straks konsulteres, også i tilfælde af infektioner og vedvarende urinbelastning.
- For at reducere infektionskilderne må poseadapterens tilslutningsflade hverken berøres eller komme i kontakt med overflader (undersiden ved luer-låseadapteren, ydersiden ved trinvis adapteren). Slangen må kun afkortes med en saks, der er desinficeret først (anvend et egnet desinfektionsmiddel, f.eks. til overflader).
- Pas på ikke at anbringe posen over det afledende system, så urinen kan løbe uhindret af (f.eks. ikke over nyrekateterets konnektor). Kontroller flere gange om dagen, om der løber urin ned i posen. Undgå snotning, knæk-dannelse og at klemme på indløbsslangen.
- For at undgå at bæltessættets komponenter utilsigtet åbnes eller løsnes skal de udskiftes ved tegn på slitage.
- Undgå at trække i kateteret. Vær opmærksom på følgende:
 - Tilslut posens adapter med kateterets konnektor uden at trække i den.
 - Adskill altid forbindelsen mellem pose og kateter, inden bæltet om livet åbnes, for at undgå at posens vægt pludselig øver et træk på kateteret.
- Ved tilslutning af SAUER-NephSys-posen til en egnet pose til natten skal man være opmærksom på, at udløbshanen er åbnet og ikke lukker om natten.
- I tilfælde af alvorlige forhold ved anvendelse af SAUER-urinopsamlingsposer skal disse indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren er etableret.

SAUER-NephSys-pose med vedlagt trinvis adapter (kan påmonteres), steril (Fig. [A] se side 2):

Brugsanvisninger (Fig. [1]–[5] se side 2):

[1]. Sådan tages bæltet omkring livet og kortes af

Anbring siden på bæltet med silikonelinjerne på huden, og tag bæltet på med et let træk efter ønske mellem taljen og hoften. Det skal føles behageligt, men frem for alt sidde stabilt! Med en saks kan det overskydende stykke bælte klippes af, hvis det ønskes (f.3).

[2]. Anbringelse af burrepuden og fastgørelse af den

Sæt burrepuden fast på kropssiden, hvorpå det afledende system, f.eks. nyrekateteret befinder sig. Burrepuden fastgøres på bæltet som på illustrationen (ill. 21, 2.a) midt på mellem hoftensiden og navlen.

2.1, 2.3: Bæltessæt Comfort: Efter at burrepuden er påsat (ill. 2.1), løsnes bæltet et stykke fra kroppen, og bændlet på burrepuden føres omkring bæltet (ill. 2.2) Dernæst slås fikseringshægtebåndet om og fastnes på det påsyede hægtebånd på forsiden af burrepuden (ill. 2.3).

2.a: Bæltessæt Comfort: Tip: For Comfort-variantens vedkommende anbefales det først at påsætte posen på burrepuden (ill. 3.a), og dernæst burrepuden på bæltet (ill. 2.a).

[3]. Påsætning af posen på burrepuden

3.1, 3.a: Det anbefales at holde indløbsslangen med den ene hånd for at undgå kontakt med adapterens tilslutningsflade. Posen påsættes, så udløbshanen peger i retning af skridtet.

Tråd de to holdebåndler på burrepuden gennem bælteøsknerne på posen, og luk tryklåsene.

[4]. Tilslutning af posen til kateteret

Tilslut luer lock-hanstikket på posen til luer lock-hunbstikket på nephrostomikateteret ved at dreje med uret.

For att anvånda den bifogade stegadaptorn klipper du av slangen till önskad längd (rakt snitt) med endesinficerad sax (använd lämpligt desinfektionsmedel, t.ex. för ytor). Skub adapteren på slangen uden at røre adapterens forbindelsesflade. Fjern beskyttelseskappen fra adapteren. Anslut påsens adapter til kateterens anslutning utan att dra i katetern.

[5]. Sikring af indløbsslangen med trækaftastningen

For at mindske risikoen for at få snot indløbsslangen eller trukket i kateteren påsættes slangen ved hjælp af trækaftastningen på bæltet i en passende position.

5.1-5.2: Bæltessæt Basic: Fjern beskyttelsesfolien på klæbepunktet til påsætningen. På det sted, hvor slangen og bæltet krydser hinanden, føres slangen mellem påsætningsklæbepunktets klæbeflader (ill. 5.1.)De trykkes sammen, og klæbepunktet på bæltet klæbes. Til sidst fastgøres fikseringsklæbepunktet ved hjælp af fikseringshægtebåndet, som i ill. 5.2.

5.a-c: Bæltessæt Comfort: Træd fastgørelsesbændlet om indløbsslangen som i ill. 5.a. Tryk den brede del af klæbebåndlet på bæltet an på det sted, hvor slangen og bæltet krydser hinanden (ill. 5.b). Klæbebåndlet påsættes, så slangen ikke kan trækkes ud (slangen må ikke klemmes til). Dernæst trykkes den tynde strimmel på bæltet til (ill. 5.c).

I løbet af natten

SAUER-NephSys-posen kan også blive siddende på bæltet om natten. Men det kan være mere behageligt at fjerne posen fra bæltet og anbringe den ved siden af kroppen på sikker vis i sengen. For at der kan rummes en større volumen om natten, kan SAUER-NephSys-posen sluttes til en ekstra egnet pose. Til formålet skydes koblingslangens ind på SAUER-NephSys-posens udløbshane og forbindes med sengeposens adapter. Her skal posens udløbshane forblive åben.

Tømning og skift

For at tømme SAUER-NephSys-posen skal udløbshanen åbnes og urinen tømmes ud i toiletet eller en egnet beholder. Luk derefter hanen igen. For skift af pose adskilles forbindelsen til kateteret forsigtigt uden at berøre de åbne ender på tilslutningerne.

Bortskaffelse


Tøm SAUER-NephSys-posen før bortskaffelse, og kasser den som restaffald. Bæltesystemet bortskaffes som restaffald.

MANFRED SAUER GmbH påtager sig intet ansvar for skader eller ulykker, som kan opstå som følge af forkert håndtering i strid med denne vejledning eller manglende anvendelse af de hygiejniske retningslinjer.


Såfremt du skulle have spørgsmål eller problemer, kan du henvende dig til det medicinske sundhedspersonale eller til vores kundeservice: MANFRED SAUER GmbH · Neurtett 7-15 · 74931 Lobbach · Germany +49 6226 960100

REF	Katalognummer
☂	Skal opbevares tørt
STERIL	Må ikke steriliseres igen
1	Antal
☀	Beskyttes mod sollys
CH REP	Autoriseret for Schweiz
STERILE EO	Sterilisation med ethylenoxid
○	Simplet steril barrieresystem
LOT	Batchnummer
📖	Følg brugsanvisningen
CE MDD 0123	CE-mærkning medicinsk produkt
🕒	Holdbar til (år-måned-dag)
⚠	Må ikke genanvendes
PZN	Nummer på farmaceutisk central
DT	Medicintarif (brittiske National Health System)
LPP	Liste over produkter og tjenester
🚫	Må ikke anvendes i tilfælde af beskadiget emballage
🏭	Fremstillingsdato
🏭	Producent

[A]


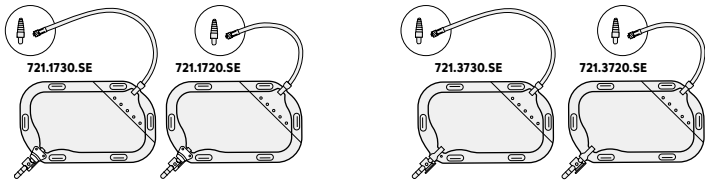


[1]

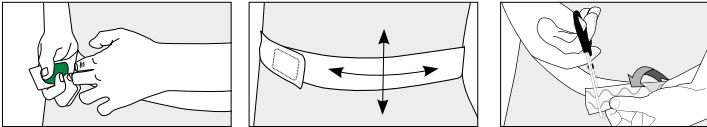


[2]

NephSys Basic

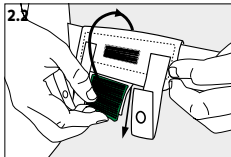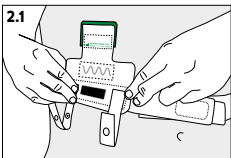


[3]

NephSys Basic


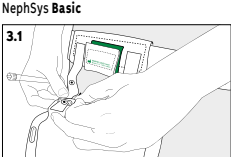


[4]

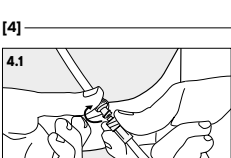


[5]


NephSys Basic

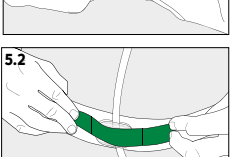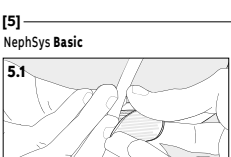


NephSys Comfort

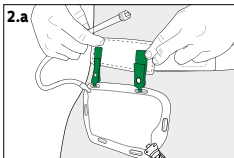

NephSys Comfort

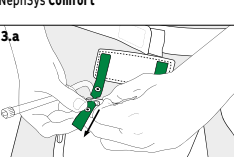

NephSys Comfort

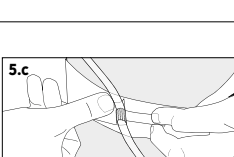

Suomi

SAUER-NephSys-pussi (721.xxxx.SE), steriili

Tiedot

Asiaan perehtyneen ammattihenkilön on opastettava SAUER-NephSys-tuotteiden käyttöä. SAUER-NephSys-pussit ovat kertakäyttöisiä. SAUER-NephSys-hihnasetti voidaan käyttää useita kertoja. Noudata hinnan lapussa olevia suosiohjeita. Hinnan käyttöaika riippuu yksilöllisestä käytöstä (kiinnittämisestä/riisumisesta, pesemisestä jne.) Tavallisesti se on 2-3 kuukautta. Tuotteen kaupanimi ja ominaisuudet ovat nähtävissä etiketistä.

Käyttötarkoituks ja käyttöaiheet

SAUER-NephSys-hihnasetti (57.42, 57.43) on SAUER-NephSys-pussin lisävaruste. SAUER-NephSys-hihnasetti käytetään yhden tai kahden SAUER NephSys-pussi kiinnittämiseen lantioon. Yhdessä ne on tarkoitettu virtsan keräämiseen henkilöille, joilla on virtsan ulkoiseen poistoon ohjaava järjestelmä sukuelinten yläpuolella; erityisesti henkilöille, joilla on munuaisallaskatetri.

Riskit ja varoitukset

- SAUER-NephSys-pussia a) ei saa käyttää uudelleen eikä b) käyttää steriiliin esteen vaurioituttua, jotta infektori ei kasvaisi.
- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa komplikaatioita. Esim. taittuneesta virtsanpoistolekusta johtuva virtsaumpi voi johtaa hengenvaaralliseen virtsaelinperäiseen verenmyrkytykseen. Tällöin on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, samoin kuin infektioiden ja jatkuvan virtsaummen yhteydessä.
- Infektiolähteiden vähentämiseksi pussisovittimen liitospintaa ei saa koskettaa eikä se saa joutua kosketuksiin pintojen kanssa (sisällä luer lock -sovitimella, ulkopuolella porrastetulla adapterilla). . Letkun saa lyhentää vain etukäteen desinoiduilla saksilla (käytä sopivaa, esim. pinnolle tarkoitettua, desinfektioainetta).
- Huolehdi, ettei pussia kiinnitetä johtavan järjestelmän yläpuolelle, jotta virtsa pääsee virtaamaan esteettä (ei esim. munuaisallaskatetrin liittimen yläpuolelle). Tarkista päivittäin useita kertoja, että virtsa virtaa pussiin. Vältä sisääntulehtun kiertämistä, taittamista ja kiinni puristamista.
- Jotta hihnasetin osat eivät avaudu/irtoa vahingossa, ne tulee vaihtaa, jos niissä havaitaan kulumista.
- Vältä vetämästä katetrista. Huomioi seuraavat seikat:
 - Yhdistä pussin sovittimen katetrin liittimeen siten, ettei siihen kohdistu vetoa.
 - Irrota aina ensin pussin ja katetrin välinen liitos ennen virtsalihtin avaamista, jotta katetriin ei kohdistu yhtäkkiä vetoa pussin painon vuoksi.
- Liittäessä SAUER-NephSys-pussia soveltuvaan pussiin yötä varten varmista, että poistoventtiili on auki eikä se sulkeudu yön aikana.

Jos SAUER-virtsankeräyssystemeja käytettäessä esiintyy tilanteita, joilla on vakavia seurauksia, niistä on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän asuinmaan vastaaville viranomaisille.

SAUER-NephSys-pussi mukana porrastettu liitin (irrotettava), steriili (Kuva [A] katso sivu 2):

Käyttöohjeet (Kuva [1]–[5] katso sivu 2):

[1]. Vartalohinnan kiinnittäminen ja lyhentäminen

Aseta ihoa vasten hinnan puoli, jolla on silikoniviivat, ja sijoita hihna kevyesti vetämällä haluamaasi kohtaan vyötärön ja lantion välille. Varmista miellyttävä ja ennen kaikkea vakaa istuvuus! Ylimääräistä hinnan osaa voidaan haluttaessa lyhentää saksilla (1.3).

[2]. Tarralapun asettaminen ja kiinnittäminen paikalleen

2.1, 2.a: Kiinnitä tarralappu vartalon sille puolelle, jolla virtsan poisjohtava järjestelmä, esim. munuaisallaskatetri, sijaitsee. Kiinnitä tarralappu vartalohinnan kuvan (kuva 2.1, 2.a) mukaisesti lantion sivun ja navan puolivälillä.

2.1, 2.3: Hihnasetti Basic: Tarralapun kiinnittämisen jälkeen (kuva 2.1) vedä vartalohihnaa hieman irti vartalosta ja vie tarralapun läppä hinnan ali (kuva 2.2). Käännä sen jälkeen kiinnityskoukkunauha ja kiinnitä se ommeltuun koukkunauhaan tarranauhan etupuolelle (kuva 2.3).

2.a: Hihnasetti Comfort: Vinkki: Comfort-mallissa on suositeltavaa kiinnittää ensin pussi tarralappuun (kuva 3.a) ja sitten tarralappu vartalohinnan (kuva 2.a).

[3]. Pussin kiinnittäminen tarralappuun

3.1, 3.a: On suositeltavaa pitää toisella kädellä kiinni sisääntulehtokusta, jotta vältetään kosketus sovittimen liitospintaan. Kiinnitä pussi siten, että poistoventtiili osoittaa askeleen suuntaan. Pujota tarralapun kiinnitysläpät pussin hinnan silmuista ja sulje painonapit.

[4]. Yhdistä pussi katetriin.

4.1: Tilslut luer lock-hanstikket på posen til luer lock-hunbstikket på nephrostomikatetret ved at dreje med uret.

4.2: För att använda den bifogade stegadaptern klipper du av slangen till önskad längd (rakt snitt) med endesinficerad sax (använd lämpligt desinfektionsmedel, t.ex. för ytor). Yrönnä sovittimen letkuun koskematta adapterin liitospintaa. Irrota letkusovittimen suojakansi. Anslut påsens adapter till kateterns anslutning utan att dra i katetern.

[5]. Varmista sisääntulehtu vedonpoistimella.

Sisääntulehtun kiertymisen ja katetriin kohdistuvan vedon välttämiseksi letku kiinnitetään vartalohinnan sopivaan asentoon vedonpoistimen avulla.

5.1-5.2: Hihnasetti Basic: Poista kiinnitysluimapisteen suojakalvat. Kohdassa, jossa letku ja vartalohihna risteävät, vie letku kiinnitysluimapisteen liimapiintojen välistä (kuva 5.1), paina ne yhteen ja kiinnitä luimapiste vartalohinnan. Kiinnitä lopuksi kiinnitysluimapiste kiinnityskoukkunauhan avulla kuvan 5.2 mukaisesti.

5.a-c: Hihnasetti Comfort: Pujota kiinnitysläppä kuvan 5.a mukaisesti sisääntulehtun ympärille. Paina tarraläpän leveä osa vartalohinnan kohdassa, jossa letku ja vartalohihna risteävät (kuva 5.b). Kiristä tarraläppä siten, että letkua ei voi enää vetää ulos (älä purista letkua kiinni). Paina lopuksi ohut kaistale kiinni hinnan (kuva 5.c).

Yöliä

SAUER-NephSys-pussi voi olla kiinnitettyä hinnan myös yöliä. Voi kuitenkin olla miellyttävämpää irrottaa pussi hinnasta ja asettaa se turvallisesti vuoteeseen vartalon viereen. Virtsankeräystilavuuden lisäämiseksi öisin SAUER-NephSys-pussi voidaan yhdistää soveltuvaan pussiin. Se tapahtuu työntämällä liitäntäletku SAUER-NephSys-pussin poistoventtiiliin ja liittämällä se vuodepussin sovittimeen. Tällöin pussin poistoventtiiliin on jäätävä auki.

Tyhjentäminen ja vaihtaminen

Tyhjennä SAUER-NephSys-pussi avaamalla poistoventtiili ja valuttamalla virtsa WC-istuimeen tai sopivaan astiaan. Sulje sen jälkeen venttiili. Voit vaihtaa pussin irrottamalla varovasti liitäntän katetriin koskematta liitäntöjen avoimiin päihin.

Hävittäminen

Tyhjennä SAUER-NephSys-pussi ennen hävittämistä ja hävitä se kaatopaikkajätteenä. Hävitä hihnajärjestelmä kotitalousjätteenä.

MANFRED SAUER GmbH ei vastaa vahingoista tai loukkautumisista, joita näiden käyttöohjeiden vastaisesta virheellisestä käytöstä tai hygieniamääräysten noudattamatta jättämisestä voi seurata.

Mikäli jokin asia katetroiden mietittävää, kysy tarvittaessa neuvoja lääkäriltäsi tai hoitajalta:

MANFRED SAUER GmbH · Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF

Luettelonumero

Säilytettävä kuivassa tilassa

Älä steriili uudelleen

Kappalemäärä

Suojattava auringonvalolta

CH REP

Swiss authorised representative

STERILE EO

Steriilointi eteeniksidillä

Yksinkertainen steriili suojajärjestelmä

LOT

Eränumero

Noudata käyttöohjeita

CE 0123

Lääkinnällisen laitteen CE-merkintä

Viimeinen käyttäjänohta (vuosi-kuukausi-päivä)

Ei voida käyttää uudelleen

PZN

Lääkekeksuksen numero

DT

Drug Tariff (Britannian NHS:n luettelo korvauskelpoisista lääkkeistä)






LPP

Tuote- ja palveluluettelo

Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut

Valmistuspäivä

Valmistaja

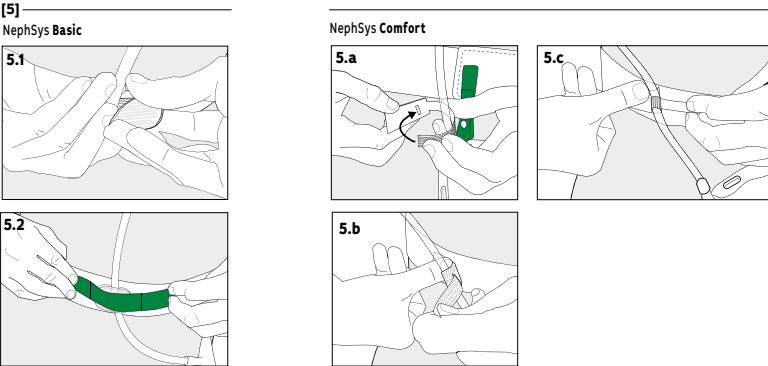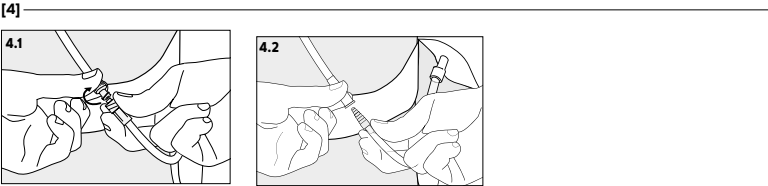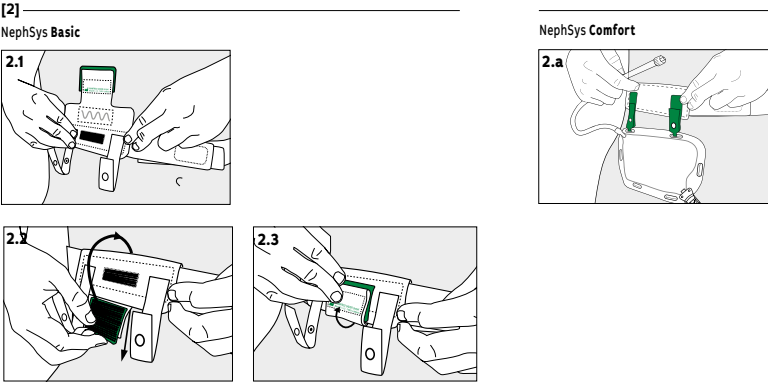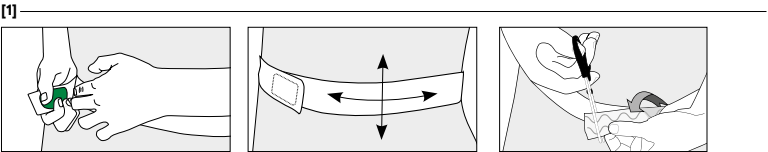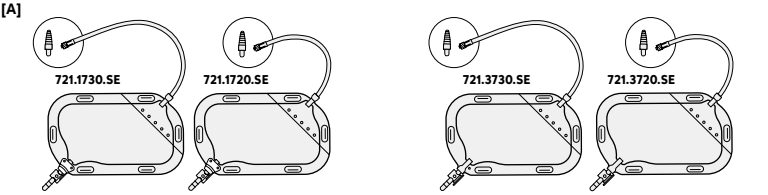

Norsk

SAUER-NephSys-pose (721.xxxx.SE), steril

Informasjon

Veiledningen for behandling med SAUER-NephSys produkter skal utføres av kvalifisert helsepersonell.
SAUER-NephSys-poser er ment til engangsbruk.
SAUER-NephSys-beltesettet er egnet til gjenbruk. Følg vaskeinstruksene på belteetiketten. Beltets holdbarhet er avhengig av individuelt bruk (påtaking/fjerning, vasking etc.) Dette betyr vanligvis en brukstid på 2-3 måneder.
Produktets handelsnavn og ytelsesegenskaper er angitt på etiketten.

Bruksformål og indikasjoner

SAUER-NephSys-beltesettet (57.42, 57.43) er tilbehør til SAUER-NephSys-pose. SAUER NephSys-beltesettet brukes til å feste en eller to SAUER NephSys-poser på hoften. I kombinasjon er de bestemt til å samle urin hos personer med avledende systemer ovenfor kjønnsorganene, spesielt fra nefrostomikateter.

Risikoeer og advarsler

- SAUER-NephSys-posen må a) ikke gjenbrukes og b) ikke brukes ved skadet steril barriere, for ikke å øke infeksjonsrisikoen.
- Feilaktig bruk kan føre til komplikasjoner. Urinretensjon, eksempelvis pga. en bøyd urindrenasje, kan føre til en livstruende urosepsis. I slike tilfeller må lege oppsøkes øyeblikkelig, og det samme gjelder ved infeksjoner og vedvarende urinretensjon.
- For å redusere infeksjonskilder, må kontakthaten til poseadapteren hverken berøres eller komme i kontakt med overflater (innsiden av Luer-Lockadapteren, utsiden ved trinnadapter). Slangen må bare kortes ned med en saks som har blitt desinfisert på forhånd (bruk egnet desinfeksjonsmiddel, f.eks. for overflater).
- Det må passes på at posen ikke plasseres ovenfor det avledende systemet, slik at urinen kan renne uhindret bort (f.eks. ikke ovenfor konnektoren til nefrostomikateteret). Kontroller flere ganger daglig om urinen renner ned i posen. Unngå at innløpsslangen forvrir, bøyes og kobles fra.
- For å unngå at beltesettkomponentene åpnes/løses uforvarende, må de skiftes ut så snart de viser tegn på slitasje.
- Trekk i kateteret må unngås. Overhold følgende:
 - Koble adapteren på posen til konnektoren på kateteret uten trekkbelastning.
 - Åpne alltid først forbindelsen mellom pose og kateter før midjebeltet åpnes, dette for å unngå at vekten fra posen fører til at det plutselig trekkes i kateteret.
- Når SAUER-NephSys-posen kobles til en egnet pose for natten, må det passes på at utløpskranen er åpnet og ikke kan lukke seg i løpet av natten.
Dersom det skulle oppstå alvorlige hendelser ved bruken av SAUER-urinposer, så må disse meldes til produsenten og ansvarlig nasjonal myndighet der brukeren bor.

SAUER-NephSys-pose med trinnadapter som følger med (push-on), steril (Fig [A] se side 2):

Instruks for bruk (Fig [1]–[5] se side 2)

[1]. Legge på midjebeltet og forkorte det

For å gjøre dette posisjoner beltesiden med silikonlinjene på huden, og legg beltet som ønsket mellom midjen og hoften idet du trekker litt i beltet. Se til at beltet sitter behagelig, men fremfor alt stabilt! Den overfløydige delen av beltet kan forkortes etter ønske med en saks (1.3).

[2]. Plassere borrelåslappen og fiksere den

2.1, 2.a: Monter belte med silikoniden mot huden. Fest beltet mellom midjen og hoften og stram litt til. For å gjøre dette festes borrelåslappen på midjebeltet midt mellom hoftesiden og navlen, slik det vises i illustrasjonen (illustr. 2.1, 2.a).

2.1, 2.3: **Beltesett Basic:** Etter at borrelåslappen har blitt festet (illustr. 2.1), trekkes midjebeltet litt bort fra kroppen, og lasken på borrelåslappen føres under beltet (illustr. 2.2). Deretter vendes fiksings-krokbåndet og festes på det påsydde krokbåndet på forsiden av borrelåslappen (illustr. 2.3).

2.a: **Beltesett Comfort:** Tips: For Comfort-varianten anbefaler vi å først feste posen på borrelåslappen (illustr. 3.a), og deretter feste borrelåslappen på midjebeltet (illustr. 2.a).

[3]. Feste posen på borrelåslappen

Det lønner seg å holde fast innløpsslangen med den ene hånden, slik at kontakt med konnekteringsflaten på adapteren unngås. Fikser posen slik at utløpskranen peker i retning av skrittet.
Monter de to stroppene på borrelåslappen gjennom hullene på posen og lukk trykknappene.

[4]. Koble posen til kateteret

4.1: Koble Luer-Lock koblingen, hann, på posen til Luer-Lock-koblingen, hunn, på nefrostomikateteret ved å dreie med klokken.
4.2: For å bruke den vedlagte trinnadapteren, må slangen kortes ned til ønsket lengde ved bruk av en saks som på forhånd har blitt desinfisert (bruket egnet desinfeksjonsmiddel, f.eks. for overflater) (klipp rett over). Skyv adapteren på slangen uten å berøre tilkoblingsflaten til adapteren. Fjern beskyttelseshetten fra adapteren. Koble adapteren på posen til konnektoren på kateteret uten trekkbelastning.

[5]. Sikre innløpsslangen med trekkavlastningen

For å redusere faren for at innløpsslangen vrir seg eller at det oppstår trekkbelastning på kateteret, blir slangen fiksert i en egnet posisjon på midjebeltet ved hjelp av borrelås feste.

5.1–5.2: Beltesett Basic:

Fjern beskyttelsesfolien fra fiksings-klebelementet. På stedet der slangen og midjebeltet krysser hverandre, må slangen føres mellom klebeflatene til fiksings-klebelementet (illustr. 5.1), trykk så disse sammen og fest klebelementet på midjebeltet med borrelåsen. Til slutt fikses fiksings-klebelementet ved hjelp av fiksings-krokbåndet som vist i illustr. 5.2.

5.a–c: **Beltesett Comfort:** Trå fiksingskabelen inn i innløpsslangen som vist i illustr. 5.a. Trykk den brede delen av borrelåsen på midjebeltet på det stedet der slangen og midjebeltet krysser hverandre (illustr. 5.b). Stram til borrelåsen slik at slangen ikke lenger kan trekkes ut (ikke koble fra slangen). Trykk til slutt den tynne strimmelen på beltet (illustr. 5.c).

Om natten

SAUER-NephSys-posen kan forbli festet på beltet om natten. Det kan imidlertid være mer behagelig å fjerne posen fra beltet og posisjonere den trygt i sengen ved siden av kroppen. For å øke volumet for natten, kan SAUER-NephSys-posen kobles til en egnet pose. For å gjøre dette skyves koblingsslangen på utløpskranen til SAUER-NephSys-posen og forbindes med adapteren til sengeposen. I dette tilfellet må utløpskranen til posen holdes åpen.

Tømming og bytte

For å tømme SAUER-NephSys-posen åpnes utløpskranen, og urinen får renne ned i toalettet eller i en egnet beholder. Steng deretter kranen igjen. For å bytte pose må forbindelsen til kateteret tas forsiktig av, uten å berøre de åpne endene på adapterne.






Avfallshåndtering

SAUER-NephSys-posen tømmes og legges i restavfallet. Beltesystemet legges i vanlig husholdningsavfall.

MANFRED SAUER GmbH påtar seg intet ansvar for personskade eller annen skade som kan føres tilbake til ufagmessig håndtering som strider mot denne bruksanvisningen eller ved manglende overholdelse av hygieniske retningslinjer.

Ved spørsmål eller problemer, må du henvende deg til medisinsk fagpersonell eller til vår kundeservice:
MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

	Katalognummer
	Skal oppbevares tørt
	Skal ikke steriliseres på nytt
	Antall
	Skal oppbevares tørt
	Sveitsisk autorisert organ
	Sterilisering med etylenoksid
	Enkelt sterilt barriersystem
	Partinummer
	Overhold bruksanvisningen
	CE-merke for medisinsk produkt
	Utløpstid (år-måned-dag)
	Ikke til gjenbruk
	Farmasentralnummer
	Legemiddeltariff (katalog fra britiske NHS)
	Liste over produkter og tjenester
	Skal ikke brukes dersom emballasjen er skadet
	Produksjonsdato
	Produsent

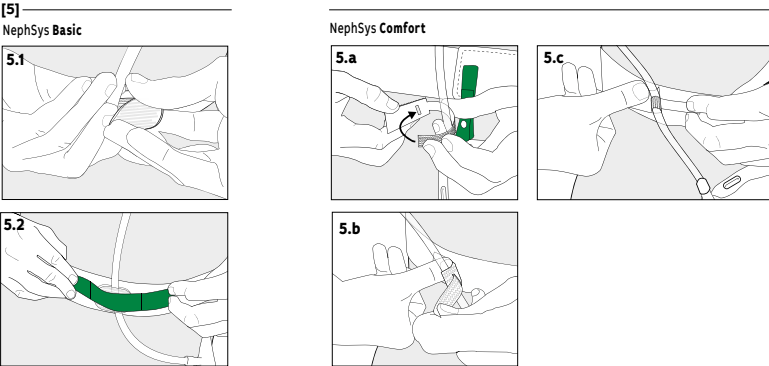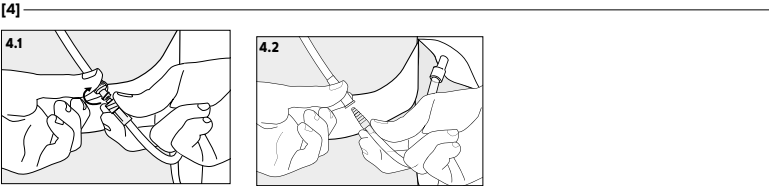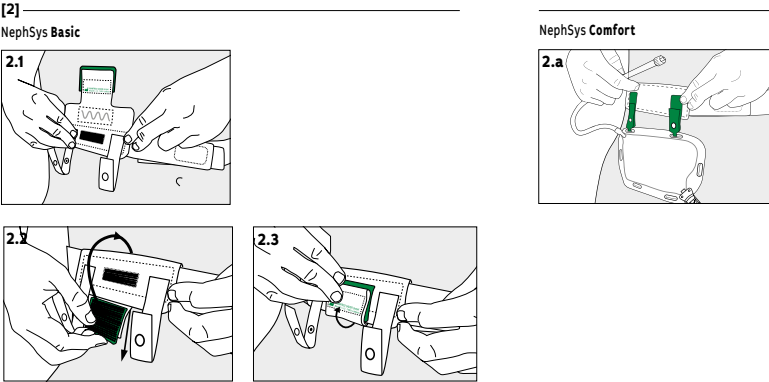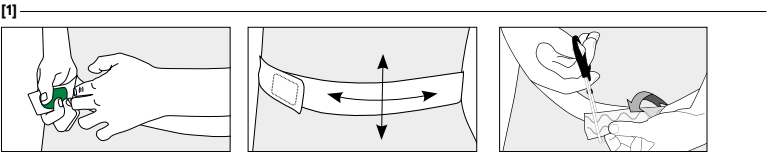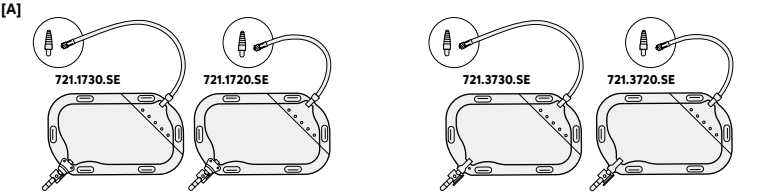

Ísland

SAUER-NephSys poki (721.xxxx.SE), dauðhreinsað

Upplýsingar

Fagaðili skal leiðbeina við notkun á SAUER-NephSys vörum. SAUER-NephSys pokarnir eru einnota. SAUER-NephSys beltið er margnota. Fylgið þvottaleiðbeiningum á merkimiða beltisins. Ending beltisins fer eftir einstaklingsbundinni notkun (beltið sett á, tekið af, þvegið o.s.frv.). Þetta svarar almennt til 2-3 mánaða. Vöruleiti og -eigileikar eru tilgreindir í merkimiðanum.

Tilætluð notkun og ábendingar

SAUER-NephSys beltasettið (57.42, 57.43) fylgir með SAUER-NephSys pokanum. SAUER-NephSys beltasettið er notað til að festa eina eða tvær SAUER-NephSys töskur við mjóðmi-na. Saman hjónar þessi búnaður söfnun þvags hjá einstaklingum með úrgangslösumarkerfi ofan kynfæranna, einkum þegar settur hefur verið upp nýrnaleggur.

Hættur og aðvaranir

- SAUER-NephSys pokann má a) ekki endurnota og b) ekki nota ef dauðhreinsun hefur verið rofin svo ekki skapist aukin hætt á sýkingu.
 - Röng meðferð getur haft kvilla í för með sér. Þvagteppa, t.d. vegna beygju á þvagú-trennslisbúnaði, getur leitt til lifshættulegrar þvagsýkissóttar. Ef um slíkt er að ræða skal tafarlaust leita til læknis og það sama gildir um sýkingar og viðvarandi þvagteppu.
 - Til að viðhalda dauðhreinsun pokans skal hvorki snerta tengiflöt pokatengistykksins né láta það komast í snertingu við yfirborðsfleti (innri hlíðin hjá Luer-Lock tengistykki, ytri hlíðin hjá þrepaskiptu tengistykki). Áðeins má stytta slönguna með því að nota sóttthreinsuð skæri.
 - Gætið að því að pokanum verði ekki komið fyrir ofan við útrennsliskerfið svo þvág geti runnið burt hindrunarlaust (t.d. ekki ofan við tengibúnað þegar settur hefur verið upp nýrnaleggur). Gætið að því oft á dag hvort þvág renni í pokann. Komandi í veg fyrir að innrennslisslangan snúist, beygist eða klemmist.
 - Til að koma í veg fyrir að einstakir hlutar beltasettsins opnast/losni fyrir slýsni skal skipta um þá ef þeir sýna merki um slit.
 - Forðist að toga í legginn. Athugið eftirfarandi:
 - Tengidöð tengistykki pokans við tengistað leggins án þess að toga.
 - Aftengidöð alltaf fyrst tenginguna á milli poka og leggss áður en mittisbeltið er opnað, til að koma í veg fyrir skyndilegt tog í legginn vegna þunga pokans.
 - Þegar SAUER-NephSys pokinn er tengdur við víðeigangi poka fyrir nóttina skal gæta að því að útrennsliskraninn sé opinn og lokist ekki um nóttina.
- Komi upp alvarleg tilvik við notkun SAUER þvagpoka skal tilkynna þau til framleiðanda og viðkomandi embættis þess lands þar sem notandinn er búsettur.

SAUER-NephSys poki með meðfylgjandi þrepa millistykki (clip-on), dauðhreinsað (Mynd [A] sjá bls. 2).

Ábendingar fyrir notkun (Mynd [1]–[5] sjá bls. 2):

[1]. Mittisbeltið sett á og stýtt

Leggið þá hlíð beltisins sem er með silikonlinunum við húðina og setjið síðan beltið á milli mjaðma og mittis með því að toga varlega. Gætið að því að staða beltisins sé þægileg og umfram allt traust! Með skærum má stytta umframhluta beltisins að vild (1.3).

[2]. Staðsetjið franska leppinn og festið hann

2.1, 2.a: Festið franska leppinn líkamsmegin þar sem þvagútrennsliskerfið, t.d. nýrnaleggurinn, er staðsettur. Festið í þessu skyni franska leppinn skv. myndinni (2.1 eða 2.a) á mittisbeltið miðja vega á milli mjaðmarhlíðarinnar og nafans.

2.1, 2.3: Beltasett Basic: Þegar búið er að festa franska leppinn (mynd 2.1) skal toga mittisbeltið litlilega frá líkanum og smeygja lykkju franska leppsins undir mittisbeltið (mynd 2.2). Snúði síðan festilykkjubandinu og festið það við ásaumaða lykkjubandið á framhlíð franska leppsins (mynd 2.3).

2.a: Beltasett Comfort: Ábending: Þegar um er að ræða Comfort útgáfuna er ráðlegt að festa fyrst pokann við franska leppinn (mynd 3.a) og festa síðan franska leppinn við mittisbandið (mynd 2.a).

[3]. Festið pokann við franska leppinn

3.1, 3.a: Hælt er með því að halda innrennslisslöngunni fastri með annarri hendinni til að koma í veg fyrir snertingu við tengiflöt tengistykki-sins. Festið pokann þannig að útrennsliskraninn vísi að klofinu. Þræðið báða festivasa franska leppsins í gegnum pokalykkjurnar og smellið þrýstihöppunum.

[4]. Tenging pokans við legginn

4.1: Tengidöð „karlhluta“ Luer-Lock tengingarinnar á pokanum við „kvenhluta“ Luer-Lock tengingarinnar á nephrostomy leggunum með því að snúa réttssælis.

4.2: Til að nota meðfylgjandi þrepaskipta tengistykkið skal fyrst klippa slönguna í æskilega lengd (beinn skurður) með skærum sem áður hafa verið sóttthreinsuð (með víðeigandi sóttthreinsiefni). Festið síðan tengistykkið á. Tengidöð tengistykki pokans við tengistað drensins án þess að toga.

[5]. Festið inntaksslönguna með festiband

Til að draga úr hættu á að inntaksrörið snúist eða togi í hollegnum er rörið fest í víðeigandi stöðu með því að nota togaflettuna á mittisbeltinu.

5.1–5.2: Beltasett Basic: Fjarlægjið hlífðarfilmur limfestipunktans. Á staðnum þar sem slangan og mittisbeltið mætast skal leiða slönguna á milli lim-flata limfestipunktans, þrýsta þeim saman og festa limpunktinn við mittisbeltið. Loks skal festa limfestipunktinn með hjálp festilykkjubandsins eins og sjá má á mynd 5.2.

5.a–c: Beltasett Comfort: Þræðið festilykkjuna í samræmi við mynd 5.a utan um innrennslisslönguna. Þrýstið breiða hluta frönsku lykkjunnar á mit-tisbeltinu að staðnum þar sem slangan og mittisbeltið skarast (mynd 5.b). Togið í frönsku lykkjuna þannig að ekki sé lengur unnt að draga slönguna út (klemmið slönguna ekki fasta). Þrýstið síðan þunna bandinu á beltið (5.c).

Á nóttunni

SAUER-NephSys pokinn má vera festur við beltið yfir nótt. Það getur þó verið þægilegra að losa pokann af beltinu og leggja hann á öruggan hátt í rúmið. Til að auka geymslumagn SAUER-NephSys pokans á nóttunni er hægt að tengja hann við víðeigandi poka. Í þessu skyni skal ýta tengisilöngunni á útrennsliskrana SAUER-NephSys pokans og tengja við tengistykki rúmpokans. Ef um þetta er að ræða þarf útrennsliskrani pokans að vera opinn.

Tæming og skipti

Til að opna SAUER-NephSys pokann skal opna útrennsliskranann og hleypa síðan þvagini út ofan í salerni eða víðeigandi líát. Að því búnu skal aftur loka krananum. Til að skipta um poka skal losa varlega um tenginguna við legginn, án þess að snerta opna enda tenginganna.

Förgun


Tæmið SAUER-NephSys pokann og fargið honum síðan með óendurnýtanlegu rusli. Fargið beltakerfinu með almennu heimilissorpi.

REF	Vörunúmer
	Geymist á þurrum stað
	Ekki sæfa aftur
	Fjöldi
	Haldið frá sólarljósi
CH REP	CH REP Sviss viðurkenndur fulltrúi
STERILE EO	Dauðhreinsað með etýlenoxíði
	Einfalt sóttthreinsunarinngi
LOT	Lotunúmer
	Fylgið notkunarleiðbeiningum
CE 0123	CE-merkt lyfjavara
	Nothæft þar til (ár-mánuður-dagur)
	Ekki til endurnotkunar
PZN	Aðalnúmer apóteksins
DT	Drug tariff (UK NHS vörulisti)
LPP	Vörulisti (Frakkland)
	Notið ekki ef umbúðir eru skemmdar
	Framleiðsludagur
	Framleiðandi


MANFRED SAUER GmbH tekur ekki ábyrgð á skemmdum og áverkum sem geta orsakast af völdum rangrar notkunar sem brýtur í bága við þessar leiðbeiningar eða meðferðar sem er í ósamræmi við hreinlætiskröfur.

Ef einhverjar spurningar eða vandamál koma upp skal vinsamlegast hafa samband við heilbrigðisfarsmann eða viðskiptavinabjónustu okkar: MANFRED SAUER GmbH · Neurot 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

[A]


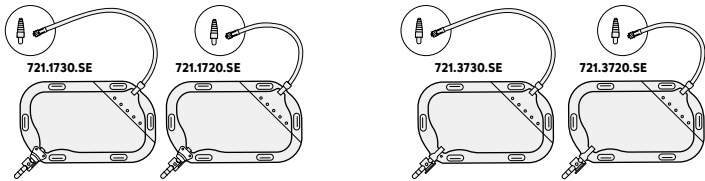


[1]

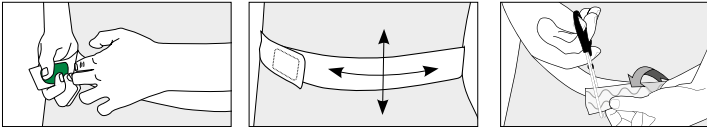


[2]

NephSys Basic

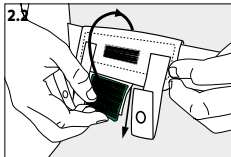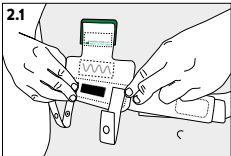


[3]

NephSys Basic


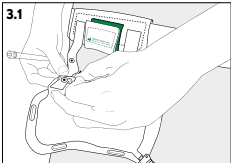


[4]


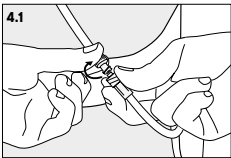


[5]


NephSys Basic

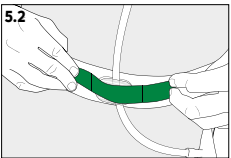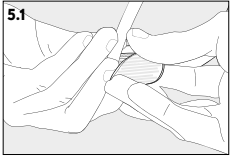


NephSys Comfort

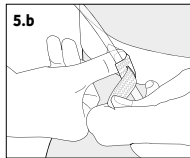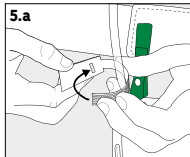

NephSys Comfort

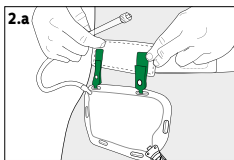

NephSys Comfort

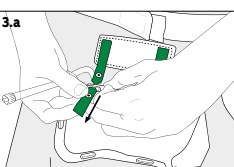

Eesti

Kott SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), steriilne

Teave

Toodete SAUER-NephSys paigaldamist peab juhendama spetsialist. Kotid SAUER-NephSys on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Võõkomplekt SAUER-NephSys võib korduskasutada. Järgige vöö etiketil olevaid pesemisejuhisteid. Vöö kasutusaeg oleneb individuaalsest kasutamisest (pealepanemine/äravõtmine, pesemine jne). Üldjuhul vastab see 2–3 kuule. Toote kaubanduslik nimi ja omadused on märgitud etiketile.

Kasutusotstarve ja näidustused

Võõkomplekt SAUER-NephSys (57.42, 57.43) on koti SAUER-NephSys tarvik. SAUER NephSys võõkomplekti kasutatakse ühe või kahe SAUER NephSys koti kinnitamiseks puusa külge. Kombineerituna saab neid kasutada uriini kogumiseks ülalpool suguelundeid asuva moodajutiva süsteemiga, eelkõige nefrostoomiaga inimestel.

Ohud ja hoiatused

- Kotti SAUER-NephSys ei tohi a) korduskasutada ega b) kasutada kahjustatud steriilse barjääri korral, et mitte suurendada nakkusohu.
 - Nõuetele mittevastav kasutamine võib tekitada tüsistusi. Urostaas, nt kokkumurtud uriinivooliku tõttu, võib tekitada eluohtlikku urosepist. Sellisel juhul pöörduge kohe arsti poole, nagu ka nakkuste ja püsiva urostaasi korral.
 - Infektsioonilike vahendamiseks ärge, puudutage koti adapteri ühenduspindu ja ärge laske neil pindadega (Luer-Lock-adapteri sise- ja astmelise adapteri välispind) kokku puutuda. Voolikut tohib lühendada ainult eelnevalt desinfitseeritud kääridega (kasutage sobivat desinfitseerimisvahendit, nt pealispinda jaoks).
 - Seejuures jälgige, et kotti ei paigutataks moodajutivast süsteemist ülespoole (nt mitte nefrostoomia ühendusest ülespoole), nii et uriin saaks takistamatult voolata. Kontrollige mitu korda päevas, kas uriin voolab kotti. Vältige sisselaskevooliku väändumist, murdumist ja pitsitamist.
 - Võõkomplekti osade soovimatu avanemise/lõdvenemise vältimiseks tuleb need kulumismärkide tekkimisel välja vahetada.
 - Vältige kateetri tõmbamist. Järgige neid juhiseid.
 - Ühendage koti adapter tõmbevabalt kateetri ühendusega.
 - Enne kehavöö avamist lahutage alati kõigepealt koti ja kateetri ühendus, et vältida kateetri äkilist tõmbamist koti massi tõttu.
 - Kotti SAUER-NephSys ühendamisel sobiva öökotiga jälgige, et väljalaskekraan oleks avatud ega saaks öösel sulguda.
- Kui SAUER-urini kogumiskottide kasutamisel esineb raskeid vahejuhtumeid, tuleb neist teatada kasutaja asukohariigi riiklikule pädevale asutusele.

Kott SAUER-NephSys koos lisatud astmeline adapter (vajutusnupp), steriilne (Joonis [A] vt lk 2).

Kasutusjuhised (Joonis [1]–[5] vt lk 2):

[1]. Kehavöö pealepanemine ja lühendamine

Selleks asetage silikoonribadega vööpool nahale ning pange vöö peale soovitud kohta talje ja puusa vahel, seda kergelt tõmmates. Jälgige, et vöö istuks mugavalt, aga ennekoike stabiilselt. Liiga pika vöö saab kääridega soovi korral lühemaks lõigata (1.3).

[2]. Takjapadja paigutamine ja kinnitamine

2.1, 2.a: Kinnitage takjapadi kehapoele, kus asub ärajuhtimissüsteem, nt nefrostoomia. Selleks kinnitage takjapadi joonise (Joonis 2.1, 2.a) järgi kehavööle puusapoele ja naba keskele.

2.1, 2.3: **Võõkomplekt Basic:** Pärast takjapadja kinnitamist (joonis 2.1) tõmmake kehavöö kehast veidi eemale ja viige takjapadja klapp vöö alt läbi (joonis 2.2). Siis keerake haakiv fikseerimisriba ümber ning kinnitage takjapadja esipoolele oleva pealeõmmeldud haakiva riba külge (joonis 2.3).

2.a: **Võõkomplekt Comfort:** Näpunäide: variandi Comfort puhul on soovitatav kinnitada kõigepealt kott takjapadja külge (joonis 3.a) ja seejärel takjapadi kehavöö külge (joonis 2.a).

[3]. Kotti kinnitamine takjapadja külge

Soovitatav on sisselaskevoolikut ühe käega kinni hoida, et vältida kokkupuudet adapteri ühenduspindadega. Kinnitage kott nii, et väljalaskekraan oleks liikumissuunas. Viige takjapadja mõlemad hoiderbad läbi koti vööaasade ja sulgege trukiid.

[4]. Kotti ühendamine kateetriga

4.1: Ühendage kottile olev isane Lueri luku ühendus nefrostoomia kateetril oleva emase Lueri luku ühendusega, keerates kellaosuti suunas.
4.2: Kaasasoleva astmelise adapteri kasutamiseks lühendage voolik eelnevalt desinfitseeritud kääride abil (kasutage sobivat desinfitseerimisvahendit, nt pealispinda desinfitseerimiseks) soovitud pikkusesse (sirge lõikega). Lükake adapter vooliku külge ilma adapteri ühenduspinda puudutamata. Eemaldage adapterilt kaitsekork. Ühendage koti adapter tõmbevabalt kateetri konnektoriga.

[5]. Sisselaskevooliku kindlustamine pingevabastusdetailiga

Selleks et vältida sisselaskevooliku keerumise ohtu või kateetri tõmbamist, kinnitatakse voolik kehavööle pingevabastusdetaili abil sobivas asendis.

5.1–5.2: **Võõkomplekt Basic:** Eemaldage fikseeriva kleepepunkti kaitsekile. Kohas, kus voolik ja kehavöö ristuvad, viige voolik fikseeriva kleepepunkti kleeppindade vahelt läbi (joonis 5.1), vajutage need kokku ning kinnitage kleeppunkt takjakinnisega kehavöö külge. Viimaks kinnitage fikseeriv kleeppunkt haagiga fikseerimisrihma abil joonise 5.2 järgi.

5.a–c: **Võõkomplekt Comfort:** Viige kinnitusriba joonise 5.a järgi ümber sisselaskevooliku. Vajutage takjariba lai osa kehavööle kohas, kus voolik ja kehavöö ristuvad (joonis 5.b). Pingutage takjariba nii, et seda ei saaks enam välja tõmmata (ärge pitsitage voolikut). Seejärel vajutage kitsas riba vööle (joonis 5.c).

Õõsel

Kott SAUER-NephSys võib jääda vööle kinnitatuna ka ööseks. Võib aga olla mugavam, kui kott vööst eemaldada ja paigutada see turvaliselt keha kõrvale voodisse. Suurema öise kogumismahu jaoks saab kotti SAUER-NephSys ühendada sobiva koti külge. Selleks lükake ühendusvoolik kotti SAUER-NephSys väljalaskekraani peale ja ühendage öökoti adapteriga. Sellisel juhul peab kott väljalaskekraan jääma avatuks.






Tühjendamine ja vahetamine

Kotti SAUER-NephSys tühjendamiseks avage väljalaskekraan ja laske uriinil WC-potti või sobivasse mahutisse voolata. Seejärel sulgege uuesti kraan. Kotti vahetamiseks lahutage ettevaatlikult ühendus kateetriga, puudutamata liitmike lahtiselt otsi.

Kõrvaldamine

Enne kõrvaldamist tühjendage kott SAUER-NephSys ja kõrvaldage segajäätmena. Kõrvaldage vöösüsteem olmejäätmena.

	Katologinumber
	Hoida kuivas kohas
	Mitte uuesti steriiliseerida
	Tükiarv
	Hoida päikesevalguse eest kaitstult
	Šveitsi voltitud esindaja
	Steriiliseerimine etüleenoksidiga
	Ühe steriilse barjääriga süsteem
	Partii number
	Järgida kasutusjuhendit
	Meditsiinitoote CE-märgistus
	Kasutada kuni (aasta-kuu-päev)
	Mitte kasutada uuesti
	Ravimikood
	Drug tariff (kataloog Briti riikliku tervishoiusüsteemi NHS)
	Toodete ja teenuste loend
	Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada
	Tootmiskuupäev
	Tootja

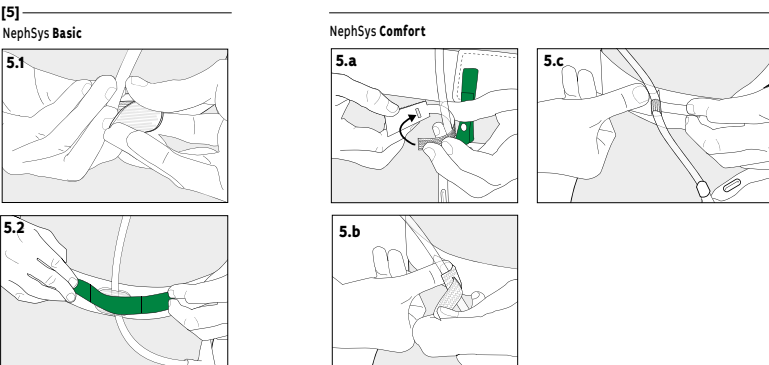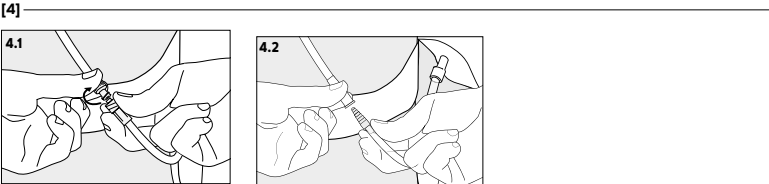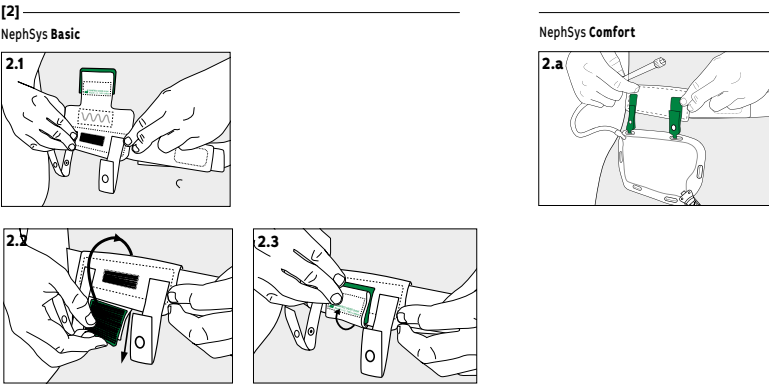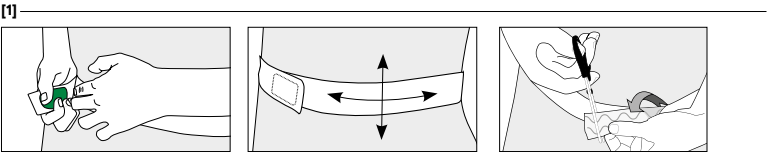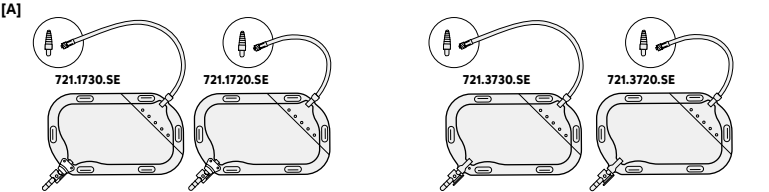

Español

Bolsa SAUER NephSys (721.xxxx.SE), estéril

Información

Las instrucciones de uso de los productos SAUER NephSys deben ser impartidas por un profesional cualificado.

Las bolsas SAUER NephSys están destinadas a un solo uso.

El kit de cinturón SAUER NephSys se adecua para usos múltiples. Observe las instrucciones de lavado en la etiqueta del cinturón. La durabilidad del cinturón depende del uso que se haga de este (poner, quitar, lavar, etc.). Esta es, por lo general, de 2 a 3 meses. Consulte el nombre comercial y las prestaciones en la etiqueta del producto.

Uso previsto e indicaciones

El kit de cinturón SAUER NephSys (57.42, 57.43) es un accesorio para la bolsa SAUER-NephSys. El kit de cinturón SAUER NephSys se utiliza para sujetar una o dos bolsas SAUER NephSys a la cadera. Estos dos productos están destinados a la recogida de orina en personas con sistemas de drenaje por encima de los órganos genitales, en particular, con catéteres de nefrostomía.

Riesgos y advertencias

- Para evitar el aumento del riesgo de infección, la bolsa SAUER NephSys no debe a) reutilizarse ni b) emplearse en caso de daños en la barrera estéril.
- Un uso inadecuado puede dar lugar a complicaciones. Una obstrucción urinaria, por ejemplo, debido a la obturación del drenaje de orina, puede provocar una urosepsis potencialmente mortal. En este caso o si se presentan infecciones o una obstrucción constante del drenaje, acuda inmediatamente a un médico.
- Para reducir las fuentes de infección, no toque la superficie de conexión del adaptador de la bolsa ni la ponga en contacto con superficies (en la parte interior en el caso del adaptador de bloqueo Luer y en la parte exterior en el caso del adaptador ranurado). Para acortar el tubo, solo deben emplearse tijeras previamente desinfectadas (utilice un desinfectante adecuado, por ejemplo, para superficies).
- Asegúrese de no colocar la bolsa por encima del sistema de drenaje para que la orina pueda fluir libremente (por ejemplo, no la coloque por encima del conector del catéter de nefrostomía). Compruebe varias veces al día si la orina fluye hacia la bolsa. Evite torcer, doblar o desconectar el tubo de entrada.
- Para evitar que los componentes del kit de cinturón se abran o se suelten involuntariamente, sustitúyalos si muestran signos de desgaste.
- Evite generar tensión en el catéter. Observe lo siguiente:
 - Conecte sin tensión el adaptador de la bolsa al conector del catéter.
 - Desconecte siempre primero la conexión entre la bolsa y el catéter antes de abrir el cinturón abdominal para evitar que se produzca un tirón repentino del catéter debido al peso de la bolsa.
- Al conectar la bolsa SAUER NephSys a una bolsa adecuada para la noche, asegúrese de que la llave de descarga esté abierta y no pueda cerrarse durante la noche.

Si se producen incidentes graves relacionados con el uso de las bolsas colectoras de orina SAUER, deberá informarse al fabricante o a la autoridad competente del país en el que resida el usuario.

Bolsa SAUER NephSys con adaptador ranurado adjunto, (de quita y pon), estéril (Fig. [A] ver página 2).

Instrucciones de uso (Fig. [1]–[5] ver página 2):

[1]. Coloque y acorte el cinturón abdominal

Para este propósito, coloque el lado del cinturón con las líneas de silicona sobre la piel, sitúe el cinturón entre la cintura y la cadera, ciñéndolo ligeramente como desee. Asegúrese de que el ajuste sea cómodo y especialmente estable. Corte con unas tijeras la sección sobrante del cinturón (1.3).

[2]. Coloque en posición y fije la almohadilla adhesiva

2.1, 2.a: Fije la almohadilla de adhesiva en el lado del cuerpo donde se encuentra el sistema de drenaje, por ejemplo, el catéter de nefrostomía. Para ello, coloque la almohadilla adhesiva en el cinturón abdominal, a la altura entre la cadera y el ombligo, como se indica en la figura 2.1, 2.a.

2.1, 2.3: **Kit de cinturón Basic:** Una vez colocada la almohadilla adhesiva (fig. 2.1), aleje un poco el cinturón abdominal del cuerpo y guíe la tira de la almohadilla adhesiva por debajo del cinturón (fig. 2.2). A continuación, dé la vuelta a la cinta de gancho y bucle para la fijación y adhiérrala a la cinta de gancho cosida en la parte delantera de la almohadilla adhesiva (fig. 2.3).

2.a: **Kit de cinturón Comfort:** Consejo: en el caso de la versión Comfort, se recomienda fijar primero la bolsa en la almohadilla adhesiva (fig. 3.a) y, a continuación, colocar la almohadilla de velcro en el cinturón abdominal (fig. 2.a).

[3]. Fijación de la bolsa en la almohadilla de adhesiva

3.1, 3.a: Se recomienda sostener con una mano el tubo de entrada a fin de evitar el contacto con la superficie de conexión del adaptador. Fije la bolsa de modo que la llave de descarga apunte en dirección de la entrepierna.

Haga pasar las dos tiras de sujeción de la almohadilla adhesiva por los ojales de la correa de la bolsa y cierre los botones de presión.

[4]. Conexión de la bolsa al catéter

4.1: Conecte el conector Luer macho de la bolsa al conector Luer hembra del catéter de nefrostomía girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

4.2: Para utilizar el adaptador escalonado suministrado, corte el tubo (corte recto) a la longitud requerida con unas tijeras previamente desinfectadas (utilice un desinfectante adecuado, por ejemplo, para superficies). Empuje el adaptador sobre la manguera sin tocar la superficie de conexión del adaptador. Retire la tapa protectora del adaptador. Conecte sin tensión el adaptador de la bolsa al conector del catéter.

[5]. Asegurar el tubo de entrada con la protección antitensión.

Para evitar el riesgo de que el tubo de entrada se tuerza o evite la tensión en el catéter, fije el tubo en una posición adecuada en el cinturón abdominal con ayuda de la protección antitensión.

5.1–5.2: **Kit de cinturón Basic:** Retire la película protectora del punto adhesivo de fijación. En el punto donde se cruzan el tubo y el cinturón abdominal, guíe el tubo a través de las superficies adhesivas del punto adhesivo de fijación, presione estas superficies y adhiera el punto adhesivo al cinturón abdominal. Para terminar, fije el punto adhesivo de fijación con la cinta de gancho y bucle como se indica en la fig. 5.2.

5.a–c: **Kit de cinturón Comfort:** Pase la tira de fijación alrededor del tubo de entrada como se indica en la fig. 5.a. Presione la parte ancha de la tira de adhesiva sobre el cinturón abdominal, en el punto donde se cruzan el tubo y el cinturón abdominal (fig. 5.b). Apriete la tira adhesiva de modo que ya no se pueda extraer el tubo (no desconecte el tubo). A continuación, presione la tira fina contra el cinturón (fig. 5.c).

Durante la noche

La bolsa SAUER NephSys también puede permanecer fijada al cinturón durante la noche. Sin embargo, puede resultar más cómodo retirar la bolsa del cinturón y colocarla de forma segura junto al cuerpo en la cama. La bolsa SAUER NephSys puede conectarse a una bolsa adecuada para aumentar el volumen durante la noche. Para hacerlo, desplace la manga de acoplamiento en la llave de salida de la bolsa SAUER NephSys y conéctelo al adaptador de la bolsa para cama. En este caso, la llave de salida de la bolsa debe permanecer abierta.

Vaciado y sustitución

Para vaciar la bolsa SAUER NephSys, abra la llave de descarga y vierta la orina en el váter o en un recipiente adecuado. A continuación, vuelva a cerrar la llave.

Sustituya la bolsa separando con cuidado la conexión que une la bolsa al catéter, sin tocar los extremos abiertos de las conexiones.

Eliminación

Vacíe la bolsa SAUER NephSys antes de desecharla y elimínela junto con la basura doméstica. Deseche el sistema de cinturón junto con la basura doméstica.


MANFRED SAUER GmbH no asume responsabilidad alguna por los daños o lesiones que puedan derivarse de un uso inadecuado contrario a las presentes instrucciones de uso o la no aplicación de las directrices de higiene.

Si tiene cualquier duda o problema, diríjase al personal médico o a nuestro departamento de Atención al Cliente:


MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF	Número de catálogo
STERILE	Manténgase seco
STERILIZ	No reesterilizar
UNITS	Unidades
SUN	Manténgase fuera de la luz del sol
CH REP	Representante autorizado de Suiza
STERILE EO	Esterilización con óxido de etileno
LOT	Sistema de barrera estéril único
LOT	Número de lote
LOT	Consulte las instrucciones de uso
CE	Producto sanitario con marcado CE
0123	Fecha de caducidad (año-mes-día)
NO REUTILIZABLE	No reutilizable
PZN	Código farmacológico
DT	Tarifa farmacológica (NHS británico)
LPP	Lista de productos y servicios
NO UTILIZAR	No utilizar en caso de daños en el envase
FECHA DE FABRICACIÓN	Fecha de fabricación
FABRICANTE	Fabricante

[A]


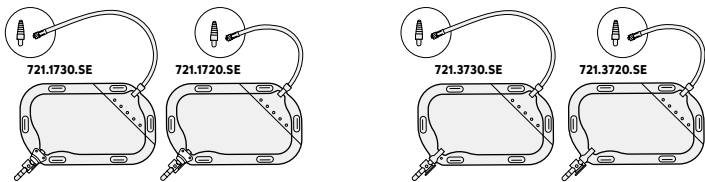


[1]

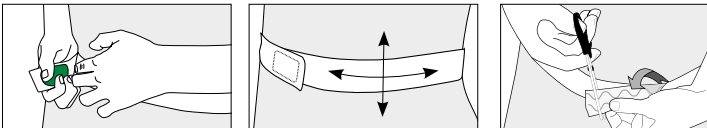


[2]

NephSys Basic

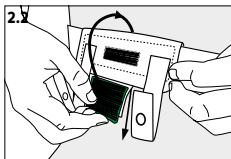
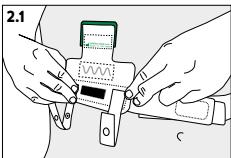


[3]

NephSys Basic

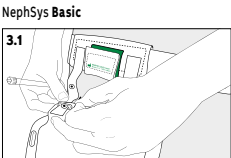


[4]

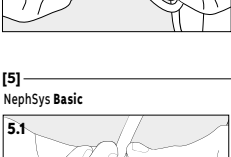
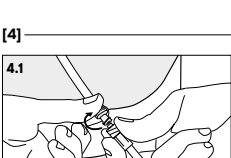


[5]


NephSys Basic

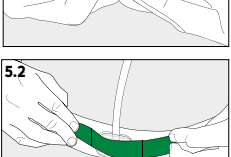



NephSys Comfort

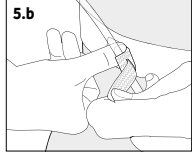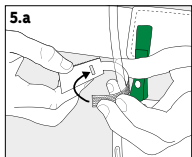

NephSys Comfort

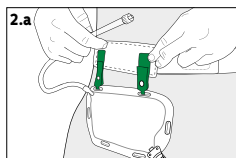

NephSys Comfort

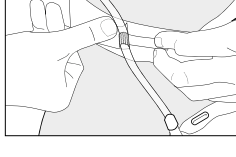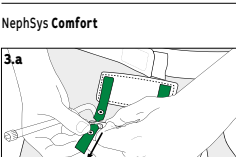

Português

Saco SAUER NephSys (721.xxxx.SE), estéril

Informações

As instruções para a utilização dos produtos SAUER NephSys SAUER devem ser facultadas por um especialista. Os sacos SAUER NephSys são de utilização única. O conjunto de cinto SAUER NephSys é adequado para múltiplas utilizações. Respeitar as instruções de lavagem existentes na etiqueta do cinto. A durabilidade do cinto depende da respetiva utilização individual (colocação/remoção, lavagem, etc.). Normalmente, corresponde a 2-3 meses. O nome comercial e as características de desempenho do produto podem ser encontrados na respetiva etiqueta.

Finalidade e indicações

O conjunto de cinto SAUER NephSys (57.42, 57.43) é um acessório do saco SAUER NephSys. O conjunto de cinto SAUER NephSys é utilizado para prender um ou dois sacos SAUER NephSys à anca. Em combinação, destinam-se à recolha de urina de pessoas com sistemas de drenagem acima dos órgãos genitais, especialmente de cateteres de nefrostomia.

Riscos e advertências

- O saco SAUER NephSys não deve a) ser reutilizado e b) ser utilizado com uma barreira estéril danificada, para não aumentar o risco de infeção.
- Uma utilização imprópria pode causar complicações. Uma estase urinária devido, p. ex., a um dreno de urina dobrado pode levar a uma urossépsis potencialmente fatal. Neste caso, consultar imediatamente o médico, bem como em caso de infeção e estase urinária persistente.
- Para reduzir as fontes de infeção, não tocar na superfície de ligação do adaptador do saco nem deixar a mesma entrar em contacto com outras superfícies (lado interior do adaptador Luer Lock, lado exterior do adaptador escalonado). O tubo só pode ser encurtado com uma tesoura previamente esterilizada (utilizar um desinfetante adequado, p. ex., para superfícies).
- Assegurar que o saco não é colocado acima do sistema de drenagem para que a urina possa fluir livremente (por exemplo, não acima da ligação do cateter de nefrostomia). Controlar várias vezes ao dia se a urina está a fluir para dentro do saco. Evitar torcer, dobrar e entalar o tubo de entrada.
- A fim de evitar uma abertura/libertação involuntária dos componentes do conjunto do cinto, estes devem ser substituídos sempre que apresentarem sinais de desgaste.
- Evitar trações no cateter. Ter em atenção o seguinte:
 - Ligar o adaptador do saco sem tração ao conector do cateter.
 - Separar sempre primeiro o saco do cateter antes de abrir o cinto abdominal, para evitar uma tração repentina no cateter devido ao peso do saco.
- Ao ligar o saco SAUER NephSys a um saco adequado para a noite, certifique-se de que a torneira de saída está aberta e não fecha durante a noite.

Caso ocorram incidentes graves durante a utilização dos sacos de recolha de urina SAUER, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do país no qual o utilizador se encontra.

Saco SAUER NephSys com adaptador escalonado incluído (encaixável), estéril Fig. [A] (ver página 2).

Instruções de utilização Fig. [1]-[5] (ver página 2):

[1]. Colocar o cinto abdominal e encurtar

Para tal, posicionar o lado do cinto com as linhas em silicone sobre a pele, colocar o cinto entre a cintura e as ancas, puxando suavemente conforme desejado. Garantir um ajuste confortável e, acima de tudo, estável! Utilizar uma tesoura para encurtar a secção do cinto em excesso conforme desejado (1.3).

[2]. Posicionar e fixar a tira de aderente

2.1, 2.a: Prender a tira aderente no lado do corpo no qual se encontra o sistema de drenagem, p. ex., o cateter de nefrostomia. Para o efeito, fixar a tira aderente ao cinto abdominal no meio, entre o lado da anca e o umbigo, conforme mostra a ilustração (Fig. 2.1, 2.a).

2.1, 2.3: **Conjunto de cinto Basic:** Após fixar a fita aderente (Fig. 2.1), afastar ligeiramente o cinto abdominal do corpo e passar a patilha da tira aderente por baixo do cinto (Fig. 2.2). Depois, dobrar a fita de ganchos de fixação e prendê-la à fita de ganchos cosida na parte da frente da tira aderente (Fig. 2.3).

2.a: **Conjunto de cinto Comfort:** Dica: no caso da versão Comfort, recomenda-se prender primeiro o saco à tira aderente (Fig. 3.a) e, depois, prender a tira aderente ao cinto (Fig. 2.a).

[3]. Fixar o saco à tira aderente

3.1, 3.a: É recomendável segurar o tubo de entrada com uma mão, para evitar o contacto com a superfície de ligação do adaptador. Fixar o saco de modo a que a torneira de saída aponte na direção da virilha. Enfiar as duas patilhas de retenção da tira aderente através dos ilhós existentes no cinto do saco e fechar as molas de pressão.

[4]. Ligar o saco ao cateter

4.1: Encaixar o conector Luer Lock macho no saco ao conector Luer Lock fêmea no cateter de nefrostomia, rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

4.2: Para utilizar o adaptador escalonado incluído, cortar o tubo ao comprimento desejado (corte reto) com uma tesoura previamente desinfetada (utilizar um desinfetante adequado, p. ex., para superfícies). Empurre o adaptador na mangueira sem tocar na superfície de conexão do adaptador. Retirar a tampa protectora do adaptador. Ligar o adaptador do saco ao conector do cateter sem tração.

[5]. Prender o tubo de entrada com o alívio de tração

Para reduzir o risco de torcer o tubo de entrada ou puxar o cateter, o tubo é fixado ao cinto abdominal numa posição adequada utilizando o alívio de tração.

5.1-5.2: **Conjunto de cinto Basic:** Retirar as películas de proteção do ponto adesivo para fixação. No ponto em que o tubo e o cinto abdominal se cruzam, passar o tubo entre as superfícies adesivas do ponto adesivo para fixação (Fig. 5.1), pressioná-las e prender o ponto adesivo ao cinto abdominal. Finalmente, fixar o ponto adesivo para fixação com a ajuda da fita de ganchos de fixação como ilustrado na Fig. 5.2.

5.a-c: **Conjunto de cinto Comfort:** Enfiar a patilha de fixação à volta do tubo de entrada conforme ilustrado na Fig. 5.a. Pressionar a parte larga da patilha de fixação no cinto abdominal no ponto em que o tubo e o cinto se cruzam (Fig. 5.b). Apertar a patilha de fixação para que o tubo não possa ser puxado para fora (não retirar o tubo). Em seguida, pressionar a tira fina sobre o cinto (Fig. 5.c).

Durante a noite

O saco SAUER NephSys também pode permanecer preso ao cinto durante a noite. No entanto, pode ser mais confortável retirar o saco do cinto e colocá-lo em segurança na cama junto ao corpo. Para aumentar a capacidade durante a noite, o saco SAUER NephSys pode ser ligado a um saco apropriado. Para este efeito, empurrar o tubo acoplador até à torneira de saída do saco SAUER NephSys e ligá-lo ao adaptador do saco para acamados. Neste caso, a torneira de saída do saco deve permanecer aberta.

Esvaziamento e muda

Para esvaziar o saco SAUER NephSys, abrir a torneira de saída e deixar a urina escoar para a sanita ou para um recipiente adequado. Em seguida, voltar a fechar a torneira.

Para mudar o saco, separar cuidadosamente a ligação ao cateter sem nunca tocar nas extremidades abertas das ligações.

Eliminação

Esvaziar o saco SAUER NephSys antes de o eliminar e deitá-lo no lixo residual. Eliminar o sistema de cinto no lixo doméstico.


A MANFRED SAUER GmbH não aceita qualquer responsabilidade em caso de danos ou lesões que possam resultar de um manuseamento incorreto contrário a estas instruções de utilização ou da não observância das diretrizes de higiene.

Caso tenha dúvidas ou problemas, dirija-se ao pessoal médico ou ao nosso consultor comercial:


MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

	Número de catálogo
	Guardar em local seco
	Não esterilizar de novo
	Quantidade
	Manter longe da luz solar
	Representante autorizado suíço
	Esterilização com óxido de etileno
	Sistema de barreira estéril único
	Número de lote
	Respeitar as instruções de utilização
	Dispositivo médico com marcação CE
	Utilizar até (ano-mês-dia)
	Não reutilizável
	Autorização de introdução no mercado
	Drug Tariff (catálogo NHS britânico)
	Lista dos produtos e serviços prestados
	Não utilizar, se a embalagem estiver danificada
	Data de fabrico
	Fabricante

[A]


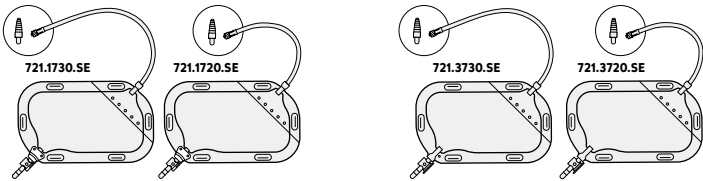


[1]

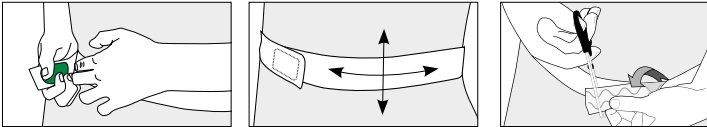


[2]

NephSys Basic

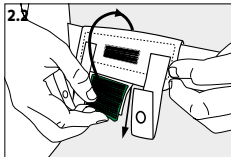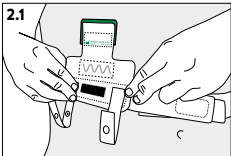


[3]

NephSys Basic


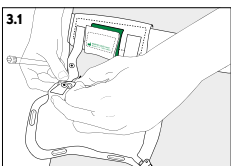


[4]

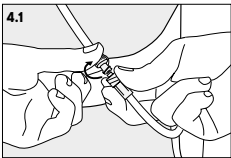


[5]


NephSys Basic

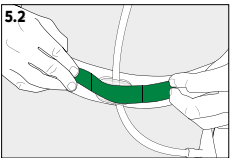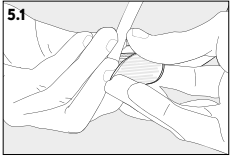



NephSys Comfort

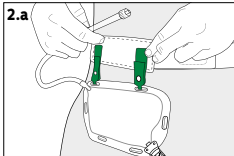

NephSys Comfort

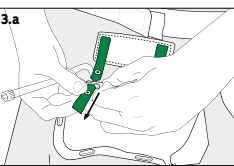

NephSys Comfort

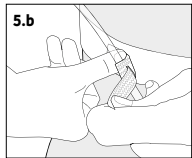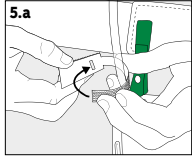

Magyar

SAUER-NephSys zsák (721.xxxx.SE), steril

Információk

A SAUER-NephSys termékek felhelyezését szakképzett ápolónak kell betanítania.

A SAUER-NephSys zsákok egyszeri használatra alkalmasak.

A SAUER-NephSys heveder szett többszöri felhasználásra is megfelelő. Vegye figyelembe a heveder címkéjén látható mosási útmutatót. A heveder szavatossága az egyedi felhasználástól függ (felhelyezés/levétel, mosás stb.). Általában 2-3 hónapig használható. A termék kereskedelmi neve és teljesítmény-jellemzői a címkén láthatók.

Rendeltetési cél és indikációk

A SAUER-NephSys heveder szett (57.42, 57.43) a SAUER-NephSys zsák tartozéka. A SAUER NephSys heveder szett egy vagy két SAUER NephSys zsáka csipőre rögzítésére szolgál. A hevedert és a zsákok kombinálva a rendszer vizelet gyűjtésére alkalmas olyan személyeknél, akiknél az elvezető rendszerek, különösen a nephrostomia a nemi szervek felett helyezkednek el.

Kockázatok és figyelmeztetések

- A SAUER-NephSys zsákokat a) nem szabad újra használni és b) nem szabad károsodott sterilitást esetén használni, hogy a fertőzésveszély ne növekedjen meg.
- A zsákszerűen használat komplikációkhoz vezethet. A vizelet felgyülemése, pl. megtört vizeletvezeték miatt, életveszélyes urosepsis kialakulásához vezethet. Ilyen esetben haladéktalanul forduljon orvoshoz, akárcsak fertőzések és tartós vizelet felgyülemelés esetén.
- A fertőzési források csökkentése érdekében ne érintse meg és ne tegye le semmilyen felületre a zsák adapterét (belső oldal a Luer-záras adapternél, külső oldal a bordázott adapternél). A tömlőt csak előtte lefertőtlenített ollóval szabad rövidebbre vágni (használon megfelelő fertőtlenítőszert, pl. felületekhez).
- Közbén ügyelni kell arra, hogy a zsákok ne az elvezető rendszer fölé helyezze, hogy a vizelet akadálytalanul lefolyhasson (pl. ne a nephrostomia csatlakozója fölé). Naponta többször ellenőrizni kell, hogy a vizelet lefolyik-e a zsákba. Kerülni kell a bemeneti cső elfordulását, megtörését és összenyomódását.
- A heveder szett komponenseinek véletlen kinyitásának/kioldásának elkerülése érdekében a komponensek a kopás jelei esetén kicserélhetők.
- Kerülje a katéternél a meghúást. A következőkre kell ügyelni:
 - A zsák adapterét húzás nélkül kösse össze a katéter csatlakozójával.
 - Mielőtt a derékszijat kinyitná, először mindig a zsák és a katéter közötti kapcsolatot húzza szét, hogy elkerülje a zsák súlya miatt a katéternél a hirtelen húzást.
- A SAUER-NephSys zsáknak egy megfelelő éjszakai zsákhoz való csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a kifolyó csap nyitva legyen és az az éjszaka folyamán ne záródjon be. Amennyiben a SAUER vizeletgyűjtő zsák használata során súlyos mellékhatást tapasztal, jelentse a gyártónak és a használó országának megfelelő illetékes hatóságának.

SAUER-NephSys zsák mellékelt bordázott adapter (leszedhető), steril ([A]. ábra lásd a 2. oldalon).

Alkalmazási utasítások ([1]–[5]. ábra lásd a 2. oldalon):

[1]. Derékszij felhelyezése és lerövidítése

Helyezze az öv szilikoncspókat tartalmazó oldalát a bőrre, az övet pedig enyhé húzással helyezze tetszés szerint a dereka és a csipője közé. Ügyeljen arra, hogy kényelmes legyen, de mégis stabilan helyezkedjen el! Egy ollóval tetszés szerint levághatja az övről a felesleges részt (1.3).

[2]. Helyezze el a tépőzáras rögzítőpárnát és rögzítse

2.1, 2.a: A tépőzáras rögzítőpárnát a test azon oldalán rögzítse, ahol az elvezető rendszer, pl. a nephrostomia található. Ehhez a tépőzáras rögzítőpárnát a rajznak megfelelően (2.1, 2.a. kép) a csipő oldala és a köldök közötti közepén rögzítse a derékszija.

2.1, 2.3: Comfort hevederszett: Típp: a Comfort változatnál ajánlott a zsákokat először a tépőzáras rögzítőpárnánál rögzíteni (3.a. kép), majd aztán a derékszijnál lévő rögzítőpárnát rögzíteni (2.a. kép).

2.a: Basic hevederszett: A tépőzáras rögzítőpárna rögzítése után (2.1. kép) a derékszijat húzza el egy kicsit a testtől és a rögzítőpárna pántjait vezesse át az öv alatt (2.2. kép). Ezután a rögzítő fogópántot hajtsa vissza és a tépőzáras rögzítőpárna első oldalára varrt fogópánton rögzítse (2.3. kép).

[3]. Zsák rögzítése a tépőzáras rögzítőpárnánál

3.1, 3.a: Ajánlatos a bevezető tömlőt az egyik kézzel helyben tartani az adapter összekötő felületével való érintkezés elkerülése érdekében. A zsákok úgy rögzítse, hogy a kifolyó csap a lépés irányába mutasson. A tépőzáras rögzítőpárna mindkét tartópántját fűzze át a zsák övének föléin és a patenttal zárja.

[4]. Zsák csatlakoztatása a katéterhez

4.1: Kösse össze a zsákon lévő férfi Luer-záras csatlakozót a nefrosztóma katéteren lévő női Luer-záras csatlakozóval az óramutató járásával megegyező irányú elfordítással.

4.2: A mellékelt fokozatos adapter használatához vágja le a csövet egy előtte lefertőtlenített ollóval (használon megfelelő fertőtlenítőszert, pl. felületekhez) a kívánt hosszúságra (egyenyes vágás). Nyomja az adaptert a tömlőre anélkül, hogy megérintené az adapter csatlakozófelületét. Távolítsa el a védőkapukat az adatterről. A zsák adapterét húzás nélkül kösse össze a katéter csatlakozójával.

[5]. A bemeneti cső biztosítása húzásgátló eszközzel

A bemeneti cső vagy a katéternél lévő zsinór elfordulási kockázatának elkerülése érdekében a csövet a derékszijnál lévő húzásgátló eszköz segítségével a megfelelő helyzetben kell rögzíteni.

5.1-5.2: Basic hevederszett: A rögzítő ragasztási pont védőfóliáját távolítsa el. A azon a helyen, ahol a cső és a derékszij keresztezik egymást, a csövet vezesse a rögzítő ragasztási pont ragasztási felületi közé (5.1. kép), nyomja ezeket össze, és a rögzítse a ragasztási pontot a derékszija. Végül a rögzítő ragasztási pont egy rögzítő fogópánt segítségével rögzítse a 5.2. képen látható módon.

5.a–c: Comfort hevederszett: A rögzítőpántot az 5.a. képnél megfelelően fűzze a bemeneti cső köré. Nyomja rá a derékszijnál lévő tépőzáras pánt széles részét arra a helyre, ahol a cső és a derékszij keresztezik egymást (5.b. kép). Húzza meg úgy a tépőzáras pántot, hogy a cső már ne tudjon kizúszni (tömlőt ne szorítsa össze). Ezt követően a vékony csíkokat nyomja rá az övre (5.c. kép).

Éjszaka

A SAUER-NephSys zsák éjszaka is az övön maradhat. Azonban kényelmesebb lehet, ha a zsákokat eltávolítja az övről és a teste mellett biztonságosan elhelyezi az ágyon. A megnövekedett éjszakai befogadóképesség érdekében a SAUER-NephSys zsákokat csatlakoztassa egy megfelelő zsákhoz. Ehhez egy összekötőcsövet kell a SAUER-NephSys zsák kifolyócsapjára dugni és az éjszakai zsák adapterével összekapcsolni. Ebben az esetben a zsák kifolyó csapjának nyitva kell maradnia.

Ürités és csere

A SAUER-NephSys zsák ürítéséhez nyissa ki a kifolyó csapot, és a vizeletet vezesse a vécébe vagy fogja fel egy megfelelő edényben. Ezután a csapot ismét zárja vissza.

A zsák cseréje esetén óvatosan húzza szét a katéterhez való csatlakozást, anélkül, hogy a csatlakozások nyílt végeit megérintené.

Ártalmatlanítás

Mielőtt kidobja a SAUER-NephSys zsákokat, ürítse ki azt, és helyezze el a maradványhulladékban. A hevederrendszert a háztartási hulladékba lehet dobni.


A MANFRED SAUER GmbH nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyek ezen használati utasítástól eltérő, szakszerűtlen használat miatt vagy a higiéniai irányelvek be nem tartása miatt keletkeznek.

Kérdések vagy problémák esetén, kérjük, forduljon egészségügyi szakemberhez vagy az ügyféltanácsadókhoz:


MANFRED SAUER GmbH · Neurot 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

	Katalógusszám
	Száraz helyen tárolandó
	Ne sterilizálja ismét
	Darabszám
	Napfénytől tartsa távol
	Svájci meghatalmazott
	Etilén-oxidos sterilizálás
	Egyszeres steril gátrendszer
	Tételszám
	Tartsa be a használati utasítást
	CE-jelölés orvostechnikai eszköz
	Felhasználható eddig a dátumig (év, hó, nap)
	Egyszeri használatra
	Központi gyógyszerészeti azonosítószám
	Drog tariff (brit NHS katalógusa)
	A termékek és szolgáltatások listája
	Ha a csomagolás károsodott, ne használja
	Gyártás dátuma
	Gyártó

[A]


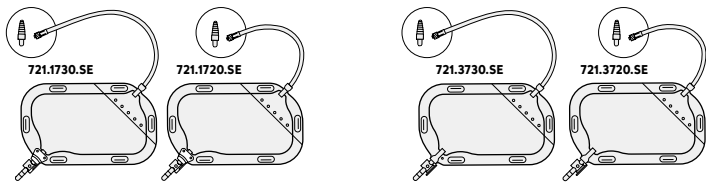


[1]

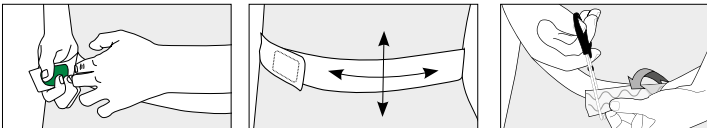


[2]

NephSys Basic

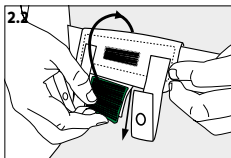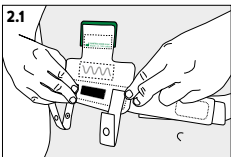


[3]

NephSys Basic


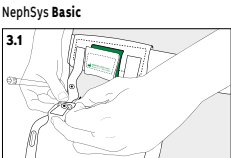


[4]

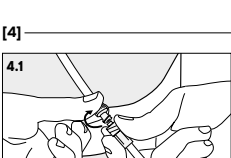


[5]


NephSys Basic

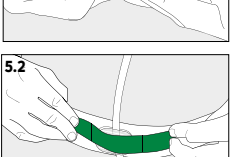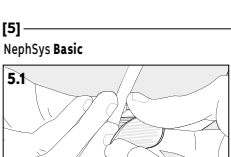




NephSys Comfort

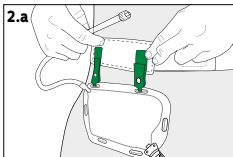

NephSys Comfort

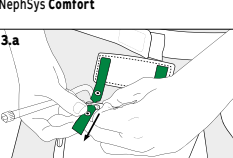

NephSys Comfort

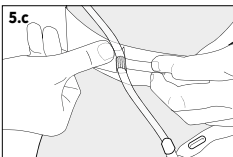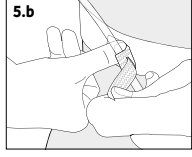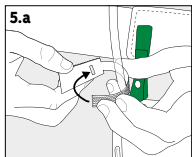

Polski

Worek SAUER NephSys (721.xxxx.SE), sterylny Informacje

Instruktaż zakładania produktów SAUER NephSys powinna przeprowadzić osoba wykwalifikowana.

Worki SAUER NephSys to produkty przeznaczone do jednorazowego użytku. Zestaw pasów SAUER NephSys jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Przestrzegać wskazań dotyczących prania na etykiecie paska. Trwałość paska zależy od sposobu indywidualnego użytkownika (zakładanie/zdejmowanie, pranie itp.). Zwykle są to 2-3 miesiące. Nazwa handlowa oraz właściwości użytkowe produktu są podane na etykiecie.

Przeznaczenie i wskazania

Zestaw pasów SAUER NephSys (57.42, 57.43) to wyposażenie dodatkowe do worka SAUER NephSys. Zestaw pasów SAUER NephSys służy do mocowania jednej lub dwóch worków SAUER NephSys na biodrze. W połączeniu przeznaczone są do zbioru moczu u osób z układami odprowadzającymi mocz powyżej narządów płciowych, zwłaszcza z cewnikami nefrostomijnymi.

Ryzyka i ostrzeżenia

- Worka SAUER NephSys nie wolno a) używać ponownie ani b) używać, gdy uszkodzona jest bariera sterylna, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia.
- Nieprawidłowe użycie może powodować powikłania. Zastój moczu, np. na skutek zagięcia drenu, może doprowadzić do zagrażającej życiu posocznicy moczwowej. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza, podobnie jak w przypadku zakażenia i utrzymującego się zastój moczu.
- W celu zmniejszenia narażenia na źródła infekcji worka nie należy dotykać powierzchni złącza adaptera worka ani dopuszczać do jej kontaktu z powierzchniami (strona wewnętrzna w przypadku adaptera Luer Lock, strona zewnętrzna w przypadku adaptera stopniowego). Do skracania drenu stosować wyłącznie sterylne nożyczki (użyć odpowiedniego środka np. do dezynfekcji powierzchni).
- Upewnić się, że worek nie jest umieszczony powyżej układu odprowadzającego mocz, aby mocz mógł swobodnie odpływać (np. nie powyżej złącza cewnika nefrostomijnego). Sprawdzaj kilka razy dziennie, czy mocz spływa do worka. Unikaj skręcenia, zagięcia i zaciśnięcia drenu wlotowego.
- Aby uniknąć niezamierzonego odpicia/poluzowania elementów zestawu pasów, należy je wymienić, jeśli wykazują oznaki zużycia.
- Unikaj pociągania za cewnik. Przestrzegać następujących zasad:
 - Połączyć adapter worka bez naprężeń ze złączem cewnika.
 - Zawsze odłączyć worek od cewnika przed odpięciem pasa brzuszego, aby uniknąć nagłego pociągnięcia za cewnik spowodowanego ciężarem worka.
- Podczas podłączania worka SAUER NephSys do odpowiedniego worka kanonoc należy upewnić się, że kurek wylotowy jest otwarty i nie zamknięty. Jeśli podczas stosowania worków do zbioru moczu SAUER dojdzie do poważnych incydentów, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym przebywa użytkownik.

Worek SAUER NephSys z dołączonym stopniowy adapter (nakładany), sterylny (Rys. [A] zobacz stronę 2):

Wskazówki dotyczące stosowania (Rys. [1]–[5] zobacz stronę 2):

[1]. Zakładanie i skracanie pasa brzuszego

W tym celu należy umieścić stronę pasa równo z liniami silikonowymi na skórze, założyć pas pomiędzy talią a biodrami, lekko pociągając stosownie do potrzeb. Zwrócić uwagę na wygodę, ale przede wszystkim stabilne dopasowanie! Za pomocą nożyczek skrócić nadmiarową część pasa odpowiednio do potrzeb (1.3).

[2]. Umieszczanie i mocowanie zapięcia na rzep

(2.1, 2.a): Przymocować zapięcie na rzep po tej stronie ciała, po której znajduje się układ odprowadzający mocz, np. cewnik nefrostomijny. W tym celu należy przymocować zapięcie na rzep do pasa brzuszego na środku między stroną biodrową a pępkiem, jak pokazano na rysunku.

(rys. 2.1, 2.3) **Zestaw pasów Basic**: Po zamocowaniu zapięcia na rzep odciągnąć pas brzuszny nieco od ciała i przełożyć łącznik zapięcia na rzep pod paskiem (rys. 2.2). Następnie zagiąć taśmę haczykową mocującą i zamocować ją do przyszytej taśmy z przodu zapięcia na rzep (rys. 2.3).

2.a: Zestaw pasów Comfort: Wskazówka: w przypadku wersji Comfort zaleca się najpierw przymocować worek do mocowania na rzep (rys. 3.a), a następnie zamocować mocowanie na rzep do pasa brzuszego (rys. 2.a).

[3]. Zamocowanie worka do mocowania na rzep

3.1, 3.a: Zaleca się trzymanie drenu wlotowego jedną ręką, aby uniknąć kontaktu z powierzchnią złącza adaptera. Zamocować worek w taki sposób, aby kurek wylotowy skierowany był w kierunku kroczu. Obie taśmy mocujące zapięcia na rzep przełożyć przez oczka na worku i zapiąć zatrzaski.

[4]. Podłączanie worka do cewnika

4.1: Męskie złącze luer lock znajdują się na worku należy podłączyć do żeńskiego złącza luer lock znajdującego się na cewniku do nefrostomii. W tym celu należy obracać je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

4.2: Aby użyć dołączonego adaptera stopniowego, zdezynfekowanymi w tym celu nożyczkami (użyć odpowiedniego środka np. do dezynfekcji powierzchni) należy przyciąć dren do żądanej długości (wykonać ciecie proste). Nasunąć adapter na wąż, nie dotykając powierzchni łączącej adaptera. Zdejmij nasadkę ochronną z adaptera. Połączyć adapter worka bez naprężeń ze złączem cewnika.

[5]. Zabezpieczanie drenu wlotowego za pomocą systemu odciążenia naprężeń

Aby zmniejszyć ryzyko przekręcenia drenu wlotowego lub pociągnięcia za cewnik, dren należy zamocować w odpowiedniej pozycji za pomocą systemu odciążenia naprężeń na pasie brzuszny.

5.1–5.2: **Zestaw pasów Basic**: Zdjąć zabezpieczenie foliowe z punktu mocowania na klej. W miejscu, gdzie dren i pas brzuszny się krzyżują, poprowadzić dren pomiędzy powierzchniami klejącymi punktu mocowania na klej (rys. 5.1), docisnąć je do siebie i zamocować punkt mocowania na klej do pasa brzuszego. Na koniec zamocować punkt mocowania na klej za pomocą taśmy haczykowej w sposób przedstawiony na rys. 5.2.

5.a–c: **Zestaw pasów Comfort**: Przełożyć pasek mocujący wokół drenu wlotowego w sposób przedstawiony na rys. 5.a. Docisnąć szeroką część paska z rzepem do pasa brzuszego w miejscu, w którym dren i pas brzuszny się krzyżują (rys. 5.b). Pasek z rzepem pociągnąć na tyle, aby nie można było wyjąć drenu (ale nie zaciskać drenu). Następnie docisnąć cienki pasek do paska (rys. 5.c).

W trakcie nocy

Worek SAUER NephSys może pozostać zamocowany do pasa także na noc. Jednakże wygodniej jest odłączyć worek od pasa i umieścić go bezpiecznie obok ciała w łóżku. W celu zwiększenia pojemności w nocy można podłączyć worek SAUER NephSys do odpowiedniego worka. W tym celu dren łączący należy nasunąć na kurek odpływowy worka SAUER NephSys i połączyć go z adapterem worka przyłożkowego. W takim przypadku kurek wylotowy worka musi pozostać otwarty.

Opróżnianie i wymiana

W celu opróżnienia worka SAUER NephSys otworzyć kurek odpływowy i spuścić mocz do toalety lub odpowiedniego pojemnika. Następnie z powrotem zamknąć kurek.

W celu wymiany worka należy ostrożnie odłączyć podłączenie do cewnika bez dotykania otwartych końców przylączy.










Utylizacja

Worek SAUER NephSys należy opróżnić przed utylizacją i wyrzucić wraz z odpadami ogólnymi. System pasów wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

Firma MANFRED SAUER GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, stosowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi lub niestosowania się do zaleceń w zakresie higieny.

W przypadku pytań lub problemów prosimy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu medycznego lub naszego doradcy klienta: MANFRED SAUER GmbH • Neurott 7–15 • 74931 Lobbach • Germany • +49 6226 960100

REF	Numer katalogowy
☂	Przechowywać w suchym miejscu
2	Nie poddawać ponownej sterylizacji
📦	Lic zba sztuk
☀	Chronić przed światłem słonecznym
CH REP	Szwajcarski pełnomocnik
STERILE EO	Sterylizacja tlenkiem etylenu
○	Pojedynczy system bariery sterylniej
LOT	Numer partii
📖 i	Postępować zgodnie z instrukcją
CE (MD) 0123	Wyrob medyczny z oznakowaniem CE
🕒	Przydatność do użycia (rok-miesiąc-dzień)
⊗	Nie nadaje się do ponownego stosowania
PZN	Centralny numer farmaceutyczny
DT	Taryfikator leków (katalog przez brytyjski NHS)
LPP	Lista produktów i usług
🚫	Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
🏭	Data produkcji
🏭	Producent

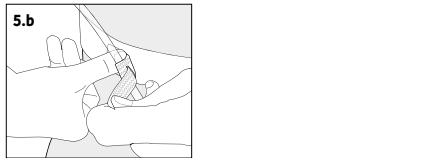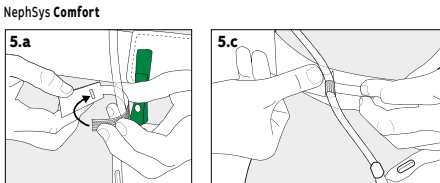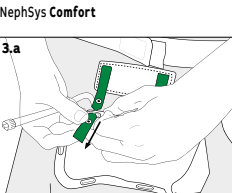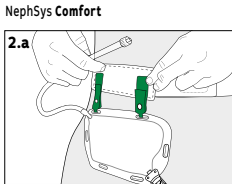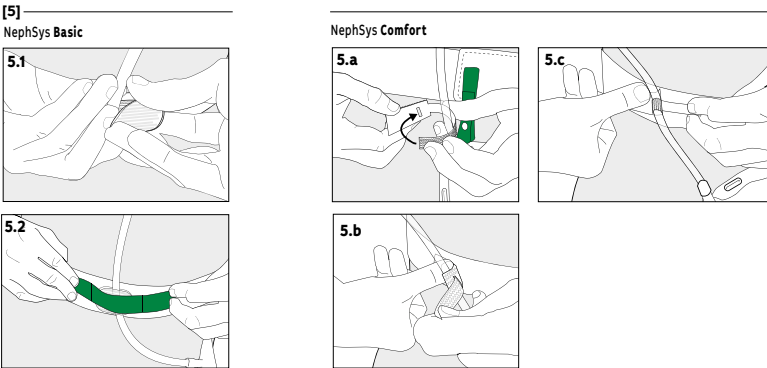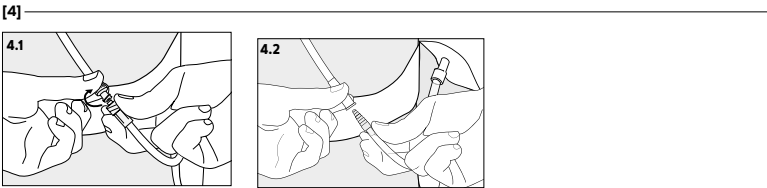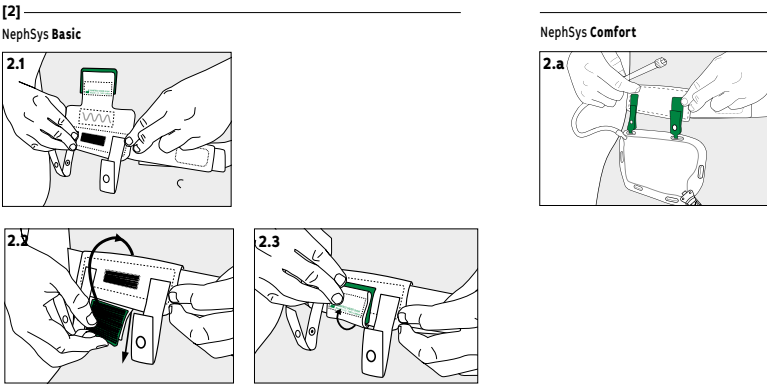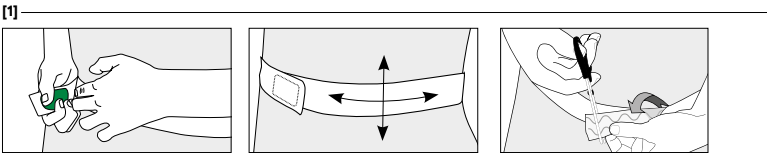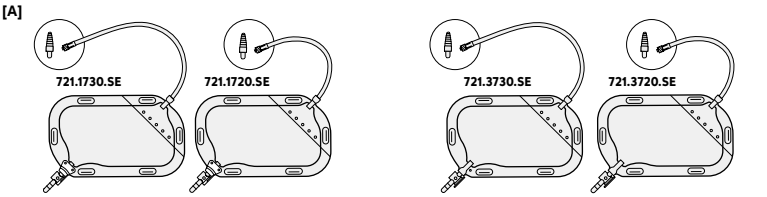

Čeština

Sáček NephSys SAUER (721.xxxx.SE), sterilní

Informace

Instruktaž ošetření pomocí produktů NephSys SAUER by měl provádět kvalifikovaný ošetřující personál.
Sáčky NephSys SAUER jsou určeny pro jednorázové použití.
Pásková sada NephSys SAUER je vhodný pro vícenásobné použití. Dodržujte pokyny pro praní na štítku pásku. Životnost pásku závisí na individuálním použití (nasazování/snímání, praní atd.). Zpravidla odpovídá 2–3 měsícům.
Obchodní název a charakteristiky produktu najdete na etiketě.

Určený účel a indikace

Pásková sada NephSys SAUER (57.42, 57.43) je příslušenství k sáčku NephSys SAUER. Sada pásková SAUER NephSys slouží k upevnění jednoho nebo dvou sáček SAUER NephSys na bok. V kombinaci jsou určeny ke sběru moči u osob s vývodem nad pohlavními orgány, zejména z nefrostomických katetrů.

Rizika a výstražná upozornění

- Sáček NephSys SAUER nesmí být používán a) opakovaně a b) v případě poškození sterilní bariéry, aby se nezvyšovalo riziko infekce.
 - Nevhodné použití může vést ke komplikacím. Hromadění moči, např. v důsledku ohnutí vývodu močových cest, může vést k život ohrožující urosepsi. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, stejně jako při výskytu infekci a přetrvávajícím hromadění moči.
 - Pro omezení zdrojů nákazy se nedotýkejte spojovací plochy adaptéru sáčku a zabraňte kontaktu adaptéru s povrchy (vnitřní strana adaptéru Luer Lock, vnější strana odstupňovaného adaptéru). Zkracování hadičky lze provádět pouze pomocí předem vydezinfikovaných nůžek (s použitím vhodného dezinfekčního prostředku, např. na povrchy).
 - Dbejte na to, aby sáček nebyl umístěn nad vývodem a moč mohla volně odtékat (např. aby nebyl nad konektorem nefrostomického katetru). Několikrát denně zkontrolujte, zda moč odtéká do sáčku. Zabraňte překroucení, ohnutí a skrčnutí přírodní hadičky.
 - Při známkách opotřebení komponenty páskové sady vyměňte, abyste se vyvarovali jejich nechtěného otevření/uvolnění.
 - Dbejte na to, aby na katetr nebyl vyvíjen tah. Dodržujte následující pokyny:
 - Adaptér sáčku spojte s konektorem katetru tak, aby na katetr nebyl vyvíjen tah.
 - Před otevřením pásku vždy nejprve odpojte sáček od katetru, abyste se vyvarovali předního tahu na katetr způsobeného vahou sáčku.
 - Při připojování sáčku NephSys SAUER k vhodnému nočnímu sáčku dbejte na to, aby byl výpustný uzávěr otevřený a přes noc se nezavřel.
- Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s použitím urinálních sběrných sáčků SAUER, musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu země, v níž je uživatel usazen.

Sáček NephSys SAUER s příloženým odstupňovaným adaptérem (nasouvací), sterilní (Obr. [A] viz strana 2):

Pokyny pro použití (Obr. [1] – [5] viz strana 2):

[1]. Nasazení a zkrácení pásku

Pásek přiložte stranou opatřenou silikonovými pružinky na kůži a mírným tahem ho umístěte na libovolné místo mezi pasem a boky. Dbejte na pohodlí, především však stabilní usazení! Přebytnou část pásku můžete nůžkami podle potřeby odstránit (1.3).

[2]. Umístění a fixace smýčkové části

- 2.1, 2.a: Upevněte smýčkovou část tu na stranu těla, na které se nachází vývod, např. nefrostomický katetr. Smýčkovou část upevněte k pásku podle obrázků (obr. 2.1, 2.a) uprostřed mezi bokem a pupkem.
- 2.1, 2.3: **Pásková sada Basic:** Po upevnění smýčkové části (obr. 2.1) pásek trochu odtáhněte od těla a poutkou smýčkové části protáhněte pod pásek (obr. 2.2). Poté přehněte fixační háčkovou část a upevněte ji na našitou háčkovou část na přední straně smýčkové části (obr. 2.3).
- 2.a: **Pásková sada Comfort:** Tip: u varianty Comfort doporučujeme nejprve upevnit sáček ke smýčkové části (obr. 3.a) a poté upevnit smýčkovou část k pásku (obr. 2.a).

[3]. Upevnění sáčku ke smýčkové části

3.1, 3.a: Doporučujeme přírodní hadičku jednou rukou přidržovat, abyste zabránili kontaktu se spojovací plochou adaptéru. Sáček upevněte tak, aby výpustný uzávěr směřoval k rozkroku. Obě přidržná pouška smýčkové části protáhněte očky sáčku a zacvakněte patentky.

[4]. Napojení sáčku na katetr

4.1: Připojte konektor Luer Lock samec na sáčku ke konektoru Luer Lock samice na nefrostomickém katetru otočením ve směru hodinových ručiček.

4.2: Pro použití příloženého odstupňovaného adaptéru zkrátte hadičku pomocí předem vydezinfikovaných nůžek (s použitím vhodného dezinfekčního prostředku, např. na povrchy) na požadovanou délku (rovný stříh). Nasuňte adaptér na hadici, aniž byste se dotkli připojovací plochy adaptéru. Odstraňte ochranný kryt z adaptéru. Adaptér sáčku spojte s konektorem katetru tak, aby na katetr nebyl vyvíjen tah.

[5]. Zajištění přírodní hadičky pomůckou pro minimalizaci tahu

Pro minimalizaci rizika překroucení přírodní hadičky nebo tahu katetru se hadička k pásku ve vhodné poloze upevňuje pomůckou pro minimalizaci tahu.

Pásková sada Basic: Odstraňte ochranné fólie fixačního lepícího bodu. V místě, ve kterém se kříží hadička a pásek, protáhněte hadičku mezi lepicími plochami fixačního lepícího bodu (obr. 5.1), lepicí plochy přitiskněte a lepicí bod upevněte k pásku. Nakonec fixační lepicí bod zafixujte pomocí fixační háčkové části, jak je znázorněno na obr. 5.2.

Pásková sada Comfort: Fixační poutku protáhněte kolem přírodní hadičky podle obr. 5.a. Širokou část fixačního pouška přitiskněte k pásku v místě, ve kterém se kříží hadička a pásek (obr. 5.b). Fixační poutku utáhněte tak, aby se hadička nedala vytáhnout (hadičku neskrčíte). Poté k pásku přitiskněte tenký proužek (obr. 5.c).

Během noci

Sáček NephSys SAUER může zůstat upevněný k pásku i během noci. Pohodlnější však může být, když sáček sejmete z pásku a bezpečně jej uložíte na lůžko vedle těla. Pro zvýšení objemu během noci lze sáček NephSys SAUER připojit k vhodnému sáčku. K tomuto účelu nasuňte spojovací hadičku na výpustný uzávěr sáčku NephSys SAUER a propojte ji s adaptérem sáčku pro pacienty upoutané na lůžko. V tomto případě musí výpustný uzávěr sáčku zůstat otevřený.

Vyprázdnění a výměna

Pro vyprázdnění sáčku NephSys SAUER otevřete výpustný uzávěr a nechte moč odtéct do toalety nebo do vhodné nádoby. Poté uzávěr opět uzavřete.

Pro výměnu sáček opatrně odpojte od katetru, aniž byste se dotkli otevřených konců připojek.






Likvidace

Před likvidací sáček NephSys SAUER vyprázdněte a zlikvidujte ve zbytkovém odpadu. Páskový systém zlikvidujte v komunálním odpadu.

Společnost MANFRED SAUER GmbH neodpovídá za škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací v rozporu s tímto návodem k použití nebo nedodržením hygienických směrnic.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy, obraťte se na svého lékaře nebo na našeho zákaznického poradce:
MANFRED SAUER GmbH · Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF	Katalogové číslo
STERIL	Uchovávejte v suchu
STERIL	Nesterilizujte opakovaně
STERIL	Počet kusů
STERIL	Chraňte před slunečním zářením
CH REP	Švýcarský zmocněný zástupce
STERILE EO	Sterilizace ethylenoxidem
STERILE	Jednoduchý sterilní bariérový systém
LOT	Číslo šarže
STERIL	Dodržujte návod k použití
CE 0123	Označení CE Zdravotnický prostředek
STERIL	Použitelné do (rok-měsíc-den)
STERIL	Není určeno k opakovanému použití
PZN	Centrální farmaceutické číslo
DT	Cenik léků (katalog hrazených léčivých přípravků britské NHS)
LPP	Seznam produktů a služeb
STERIL	Nepoužívejte v případě poškozeného obalu
STERIL	Datum výroby
STERIL	Výrobce

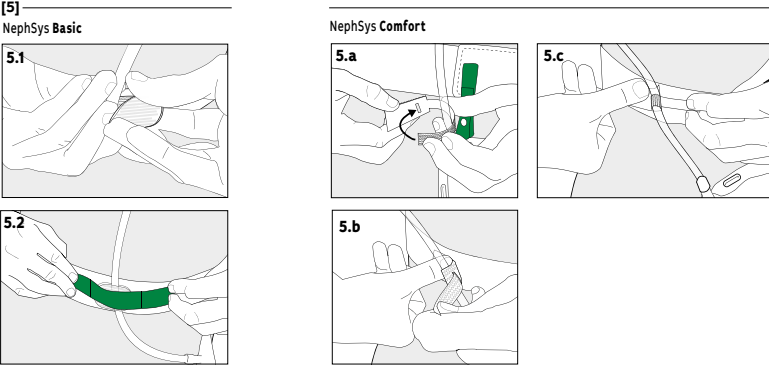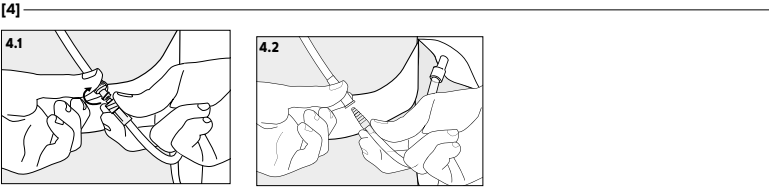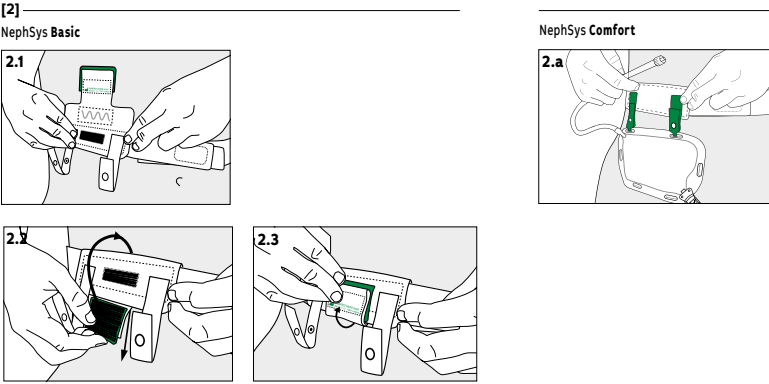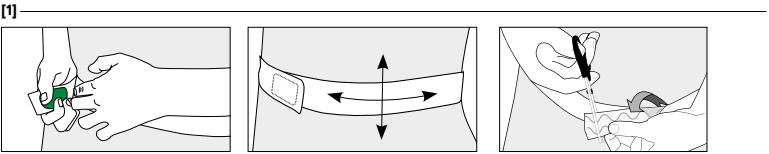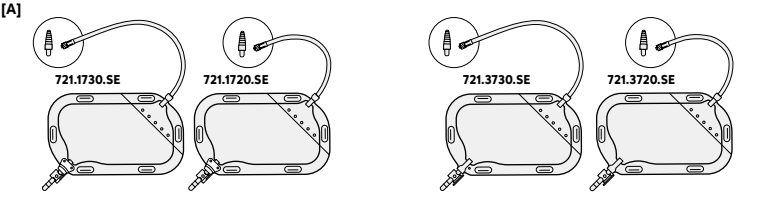

Română

Pungă SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), steril

Informații

Instrucțiunile de aplicare și utilizare a produselor SAUER-NephSys trebuie oferite de personal specializat.

Pungile SAUER-NephSys sunt de unică folosință. Setul de curele SAUER-NephSys este destinată și se adaptează unei folosințe multiple. Țineți cont de instrucțiunile de spălare de pe eticheta curelei. Termenul de valabilitate al curelei depinde de gradul de utilizare individual (aplicare/scoatere, spălare etc.). Acesta se întinde de regulă pe o durată de 2-3 luni.

Denumirea comercială și caracteristicile de performanță ale produsului apar pe etichetă.

Scopul utilizării și indicații

Setul de curele SAUER-NephSys (57.42, 57.43) este un accesoriu pentru punga SAUER-NephSys. Set de curele SAUER NephSys este utilizat pentru a atașa la sold una sau două pungi SAUER NephSys. Folosite în combinație, aceste produse sunt destinate colectării urinei la persoanele cu sisteme de drenaj al urinei implantate mai sus de organele genitale, în special la persoanele cu catetere fistulare renale.

Riscuri și avertismente

- Punga SAUER-NephSys trebuie a) să nu fie reutilizată și b) să nu fie utilizată dacă bariera sterilă este deteriorată, pentru a nu crește riscul de infecție.
- Utilizarea necorespunzătoare poate duce la complicații. O urostază, cauzată de ex. de un tub de drenaj pentru urină îndoit, poate duce la septicemia tractului urinar, care pune în pericol viața. În acest caz se va consulta imediat un medic, ca de altfel și în caz de infecții și de urostază persistentă.
- Pentru reducerea surselor de infecție, nu atingeți suprafața de conectare a adaptorului pungi și nu o aduceți în contact cu alte suprafețe (partea interioară la adaptoarele cu blocaje tip Luer, partea exterioară la adaptoarele în trepte). Scurtarea tubului trebuie să se facă doar cu o foarfecă dezinfectată în prealabil (utilizați un dezinfectant adecvat, de exemplu unul destinat dezinfectării suprafețelor).
- Aveți grijă ca punga să nu fie amplasată mai sus de sistemul de drenaj, pentru ca urina să poată curge fără obstacole (de ex. nu mai sus de conectorul cateterului fistular renal). Controlați de mai multe ori pe zi dacă urina curge în pungă. Trebuie evitate răscuirea, îndoirea și strivirea furtunului de alimentare.
- Pentru a evita desfacerea/desprinderea accidentală a componentelor setului de curele, acestea trebuie înlocuite de îndată dacă apar semne de uzură.
- Se va evita supunerea cateterului la forțe de întindere. Respectați următoarele:
 - Conectați adaptorul pungi cu conectorul cateterului fără a supune racordul la forțe de întindere.
 - Separați mereu mai întâi racordul între pungă și cateter, înainte de a deschide cureaua pentru corp, pentru a evita întinderea bruscă a cateterului cauzată de greutatea pungi.
 - La conectarea pungi SAUER-NephSys la o pungă adecvată pentru noapte, aveți grijă ca robinetul de evacuare să fie deschis și să nu se închidă accidental peste noapte.

În caz de incidente grave la momentul utilizării de pungi de colectare a urinei SAUER, acestea trebuie raportate producătorului și autorității competente din țara în care este stabilit utilizatorul.

Pungă SAUER-NephSys cu adaptor în trepte inclus (demontabil), steril (Fig. [A] vezi pagina 2):

Indicații privind utilizarea (Fig. [1] - [5] vezi pagina 2):

[1]. **Aplicați cureaua pentru corp și scurtați-o până se potrivește**

În acest scop, poziționați latura curelei cu liniile din silicon orientată spre piele și aplicați cureaua trăgând-o ușor în orice punct între talie și sold. Aveți grijă ca cureaua să fie amplasată și fixată confortabil, dar mai ales stabil! Cu o foarfecă puteți scurta după cum doriți porțiunea de curea rămasă în plus (1.3).

[2]. **Poziționați și fixați legătura cu scai**

2.1, 2.a: Fixați legătura cu scai pe aceea parte a corpului pe care se află sistemul de drenaj, de ex. cateterul fistular renal. În acest scop, fixați legătura cu scai conform ilustrației (fig. 2.1, 2.a) pe cureaua pentru corp, la mijlocul distanței între latura șoldului și ombilic.

2.1, 2.3: **Set de curele Basic:** După fixarea legăturii cu scai (fig. 2.1), îndepărtați puțin cureaua pentru corp de piele și treceți bucla legăturii cu scai pe sub cureaua pentru corp (fig. 2.2). Apoi îndoțiți banda cu cârligul de fixare și prindeți-o pe banda cu cârlig cusută pe partea din față a legăturii cu scai (fig. 2.3).

2.a: **Set de curele Comfort:** Sugestie: la varianta tip confort se recomandă să fixați mai întâi punga pe legătura cu scai (fig. 3.a), iar apoi să prindeți legătura cu scai de cureaua pentru corp (fig. 2.a).

[3]. **Fixarea pungi pe legătura cu scai**

3.1, 3.a: Este recomandat să țineți furtunul de alimentare cu o mână, pentru a evita contactul acestuia cu suprafața de conectare a adaptorului. Fixați punga astfel încât robinetul de evacuare să fie îndreptat spre zona inghinală. Treceți ambele bucle de fixare ale legăturii cu scai prin ochetele curelei pungi și închideți capsela.

[4]. **Conectați punga la cateter**

4.1: Racordați conectorul Luer lock tată de la pungă cu conectorul Luer lock mamă de la cateterul de nefrostomie prin rotirea în sensul acelor de ceasornic.

4.2: Pentru a utiliza adaptorul în trepte inclus în pachetul de livrare, scurtați tubul la lungimea dorită (taiere dreaptă) cu o foarfecă care fost dezinfectată în prealabil (utilizați un dezinfectant adecvat, de exemplu unul destinat dezinfectării suprafețelor). Împingeți adaptorul pe furtun fără a atinge suprafața de conectare a adaptorului. Scoateți capacul de protecție de pe adaptor. Conectați adaptorul pungi cu conectorul cateterului fără a supune racordul unor forțe de întindere.

[5]. **Asigurați furtunul de alimentare cu ajutorul dispozitivului de degrevare la forțele de întindere**

Pentru a diminua riscul de răscuire a furtunului de alimentare sau riscul de tragere a cateterului, tubul este fixat într-o poziție adecvată cu ajutorul dispozitivului de degrevare la forțele de întindere, aflat pe cureaua pentru corp.

5.1-5.2: **Set de curele Basic:** Îndepărtați foliile de protecție de pe punctul de lipire pentru fixare. În locul unde se încrucișează tubul și cureaua pentru corp, ghidați tubul printre suprafețele de lipire ale punctului de lipire pentru fixare (fig. 5.1), apăsați apoi suprafețele de lipire una peste alta și lipiți cu scai punctul de lipire pe cureaua pentru corp. La urmă, fixați punctul de lipire pentru fixare cu ajutorul benzii cu cârlig de fixare conform ilustrației 5.2.

5.a-c: **Set de curele Comfort:** Treceți bucla de fixare conform fig. 5.a în jurul furtunului de alimentare. Apăsăți partea lată a buclei scaiului pe cureaua pentru corp în locul în care se încrucișează tubul și cureaua pentru corp (fig. 5.b). Strângeți bucla scaiului până când tubul nu mai poate fi tras afară (nu striviți tubul). Apoi apăsați fâșia subțire pe curea (fig. 5.c).

Pe timpul nopții

Punga SAUER-NephSys poate rămâne fixată pe cureaua de corp și pe timp de noapte. Totuși, poate fi mai confortabil să îndepărtați punga de pe curea și să o plasați într-o poziție sigură lângă corp, în pat. Pentru o capacitate mai mare pe timp de noapte, punga SAUER-NephSys poate fi conectată la altă pungă adecvată. Pentru aceasta, împingeți tubul de cuplare pe robinetul de evacuare al pungi SAUER-NephSys și conectați-l la adaptorul pungi de pat. În acest caz, robinetul de evacuare al pungi trebuie să rămână deschis.

Golirea și înlocuirea

Pentru a goli punga SAUER-NephSys, deschideți robinetul de evacuare și lăsați urina să se scurgă în toaletă sau într-un recipient adecvat. Apoi închideți din nou robinetul.

Pentru a înlocui punga, desfaceți cu atenție legătura cu cateterul, fără a atinge capetele rămase deschise ale racordurilor.

Eliminarea ca deșeu

Goliți punga SAUER-NephSys înainte de eliminare și aruncați-o la gunoii menajer. Eliminați sistemul de curele la deșeurile menajere.


MANFRED SAUER GmbH nu își asumă răspunderea pentru daune sau vătămări care pot rezulta ca urmare a manipulării necorespunzătoare, contrar prezentelor instrucțiuni de utilizare sau în urma nerespectării directivelor de igienă.

În caz de întrebări sau probleme, vă rugăm să vă adresați personalului medical sau consultantilor noștri pentru clienți:


MANFRED SAUER GmbH • Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany • +49 6226 960100

REF	Număr de catalog
☂	Depozitați într-un loc uscat
STERILIZE	Nu sterilizați din nou
☑	Număr de bucăți
☀	Păstrați departe de lumina soarelui
CH REP	Împunernic pentru Elveția
STERILE EO	Sterilizare cu oxid de etilenă
○	Sistem de barieră sterilă unică
LOT	Numărul lotului
☑	Respectați instrucțiunile de utilizare
CE MD 0123	Dispozitiv medical cu marcajul CE
☑	Valabil până la (anul-luna-zia)
☒	Produs nereutilizabil
PZN	Numărul central farmaceutic
DT	Drug tariff (catalogul NHS din Regatul Unit)
LPP	Lista produselor și prestațiilor
☒	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
☑	Data fabricației
☑	Producător

[A]


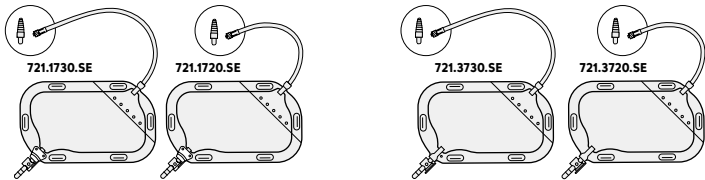


[1]

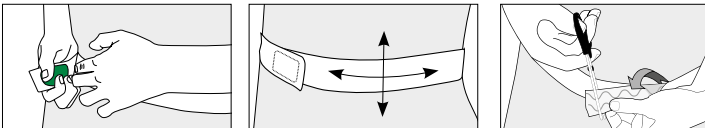


[2]

NephSys Basic

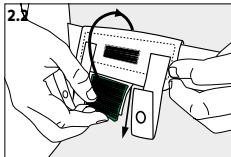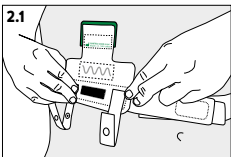


[3]

NephSys Basic

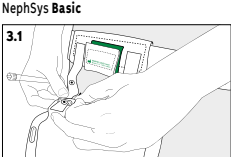


[4]

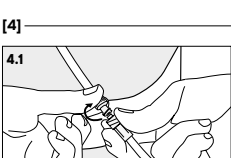


[5]


NephSys Basic

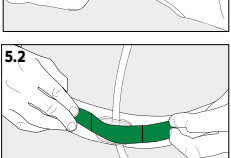




NephSys Comfort

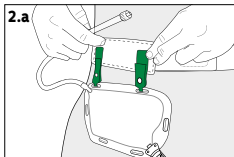

NephSys Comfort

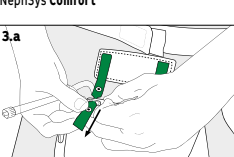

NephSys Comfort

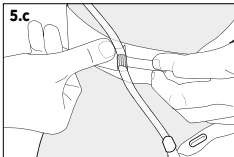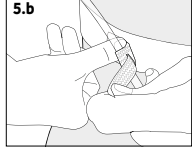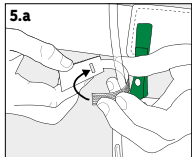

Български

Писоар SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), стерилен

Информация

За приложение на продукти SAUER-NephSys следвайте указанията на специалист. Писоарите SAUER-NephSys са предназначени за еднократна употреба. Комплектът колан SAUER-NephSys е подходящ за многократна употреба. Спазвайте указанията за пране върху етикетата на колана. Годността на колана зависи от индивидуалното му приложение (поставяне-сваляне, пране и др.). При нормална употреба тя е 2-3 месеца. Търговското наименование и работните характеристики на продукта можете да намерите върху етикетата.

Предназначение и показание

Комплектът колан SAUER-NephSys (57.42, 57.43) е аксесоар за писоара SAUER-NephSys. Комплектът за колан SAUER NephSys се използва за закрепване на една или две Писоар SAUER NephSys към бедрото. В съчетание те са предназначени за събиране на урина при пациенти с дренажни системи над половите органи и по-специално за перкутани бъбречни катетри.

Рискове и предупреждения

- Писоарт SAUER-NephSys не трябва а) да се използва повторно и б) да се използва при повредена стерилна бариера, за да не се повиши рискът от инфекция.
- Неправилната употреба може да доведе до усложнения. Задръжането на урина, например поради прегнатата тръбичка за дренаж на урината, може да доведе до животозастрашаващ уросепсис. В такъв случай, както и при инфекции и продължително задръжане на урина, трябва незабавно да се потърси лекарска помощ.
- За да редуцирате източниците на инфекция, не докосвайте повърхността на конектора на адаптера на писоара торбичката и не я допирайте до повърхности (вътрешната страна при адаптер Luer Lock, външната страна при стъпковия адаптер). Маркучът може да се скъсва само с ножици, които са предварително дезинфекцирани (с подходящ дезинфектант, напр. за повърхности).
- Внимавайте писоарът да не бъде прикрепен над дренажната система, за да може урината да се оттича свободно (напр. не я поставяйте над конектора на перкутанти бъбречен катетър). Проверявайте няколко пъти на ден дали урината се оттича в писоара. Избягвайте усукване, прегъване и прищипване на входното маркуче.
- За да не се допусне неволно откопчаване/разхлабване на компонентите от комплекта на колана, подменете ги, когато забележите признаци на износване.
- Избягвайте дърпането на катетъра. Спазвайте следните указания:
 - Свържете адаптера на писоара с конектора на катетъра без напрежение.
 - Винаги прекъсвайте първо връзката между писоара и катетъра, преди да разкопчате колана, за да избегнете внезапно издърпване на катетъра по действието на тежестта на писоара.
- При свързване на писоара SAUER-NephSys с подходяща торбичка за през нощта, винавайте изпускателното кранче да остане отворено и да не се затвори през нощта.

Ако при употребата на уринаторни торби SAUER възникнат сериозни инциденти, те трябва да бъдат докладвани на производителя и на компетентните органи на страната, в която се намира потребителят.

Писоар SAUER-NephSys с стъпков адаптер вкл. (нахлузващ се), стерилен ([A] вижте страница 2).

Указания за употреба ([1] – [5] вижте страница 2):

[1]. Поставяне и скъсяване на колана

За целта наместете колана със страната със силиконовите линии върху кожата на талията и го затегнете с леко изтегляне между талията и ханша. Поставете се да прилегне удобно, но преди всичко стабилно! Излишната част от колана може да бъде скъсена с ножици до необходимата дължина (1.3).

[2]. Позициониране и фиксиране на подложката с велкро

Прикрепете подложката с велкро към страната на тялото, от която се намира дренажната система, например перкутантият бъбречен катетър. За целта прикрепете подложката с велкро към колана по средата между страничната част на бедрото и пъпа, както е показано на илюстрацията (фиг 2.1, 2.a).

2.1, 2.3: Комплект колан Basic: След като закрепите подложката с велкро (фиг. 2.1), издръпайте колана леко вънри от тялото и прекарайте платката на подложката с велкро под колана (фиг. 2.2). След това прегнете лентата с велкро за закрепване и я прикрепете към пришитата лента с велкро върху предната страна на подложката с велкро (фиг. 2.3).

2.a: Комплект колан Comfort: Съвет: при варианта Comfort се препоръчва най-напред писоарът да се закрепят към подложката с велкро (фиг. 3.a) и след това подложката с велкро да се закрепят към колана (фиг. 2.a).

[3]. Прикрепване на писоара към подложката с велкро

3.1, 3.a: Препоръчва се входното маркуче да се хване с ръка, за да се избегне контакт със съединителната повърхност на адаптера. Фиксирайте писоара така, че изпускателното кранче да сочи към разкрача. Прекарайте двете платки за фиксиране на подложката с велкро през отворите за колана на писоара и затворете тик-так копчетата.

[4]. Свързване на писоара към катетъра

4.1: Свържете мъжката част на Luer-Lock връзката на писоара с женската част на Luer-Lock връзката на катетъра за нефростомия и завъртете по посока на часовниковата стрелка.

4.2: За да използвате приложения стъпаловиден адаптер, скъсете маркуча (прав срез) до желаната дължина с ножици, които са предварително дезинфекцирани (с подходящ дезинфектант, напр. за повърхности). Натиснете адаптера върху маркуча, без да докосвате свързващата повърхност на адаптера. Отстранете предпазната капачка от адаптера. Избягвайте опъване, когато свързвате адаптера на уринаторната торба с конектора на катетъра.

[5]. Подсигуряване на входното маркуче с втулката за намаляване на напрежението

За да намалите риска от усукване на входното маркуче или от издърпване на катетъра, фиксирайте маркучето в подходяща позиция към колана с помощта на втулката за намаляване на напрежението.

5.1–5.2: Комплект колан Basic: Отстранете предпазното фолио на лепенката за фиксиране. Прекарайте маркучето между залепващите повърхности на лепенката за фиксиране в точката на пресичане на маркучето и колана (фиг. 5.1), притиснете залепващите повърхности и залепете лепенката за фиксиране към колана. Накрая фиксирайте лепенката за фиксиране с помощта на лентата с велкро за закрепване, както е показано на фиг. 5.2.

5.a–c: Комплект колан Comfort: Прекарайте платката за фиксиране около входното маркуче, както е показано на фиг. 5.a. Притиснете широката част на платката с велкро върху колана на мястото на пресичане на маркучето и колана (фиг. 5.b). Затегнете платката с велкро така, че маркучето да не може да се издръпа (не прищипвайте маркучето). Накрая притиснете тесните ленти към колана (фиг. 5.c).

През нощта

Писоарт SAUER-NephSys може да се остави прикрепен към колана и през нощта. По-удобно ще бъде обаче писоарът да се свалят от колана и да се постави в леглото на безопасно разстояние от тялото. За да се увеличи капацитетът на събиране през нощта, писоарт SAUER-NephSys може да бъде свързан към подходящ писоар. За целта нахлузете свързващото маркуче върху изпускателното кранче на писоара SAUER-NephSys и я свържете с адаптера на уринаторната торбичка за легло. В този случай изпускателното кранче на писоара трябва да се остави отворено.

Изпразване и подмяна

За да изпразните писоара SAUER-NephSys, отворете изпускателното кранче и оставете урината да изтече в тоалетната или в подходящ съд. После отново затворете кранчето.

За да смените писоара, внимателно разкачете връзката с катетъра, без да докосвате откритите краища на съединителните изводи.

Изхвърляне на отпадъците







Преди изхвърляне изпразнете писоара SAUER-NephSys и го изхвърлете в кофата за битови отпадъци. Изхвърлете системата с колана в контейнера за домакински отпадъци.

Фирма MANFRED SAUER GmbH не поема отговорност за щети или наранявания, които могат да възникнат в резултат от неправилно боравене поради неспазване на настоящата инструкция за употреба или неспазване на правилата за поддържане на хигиената.

При въпроси или проблеми се обръщайте към медицински специалисти или към нашите клиентски консултанти:

MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF	Артикул №
	Да се съхранява на сухо място
	Да не се стерилизира повторно
	Спецификация
	Да се пазят от слънчев светлина
CH REP	Швейцарски упълномощен представител
STERILE EO	Стерилизирано с етиленов оксид
	Единична стерилна бариерна система
LOT	Номер на партида
	Да се съблюдава инструкцията за употреба
CE	СЕ-знак
0123	медицински продукт
	Да не се използва преди (година-месеци-ден)
	Да не се използва повторно
PZN	Централен идентификационен код на лекарствени продукти
DT	Тарифи на таксите за лекарствени продукти (UG)
LPP	Списък на продуктите и услугите (FR)
	Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Дата на производство
	Производител

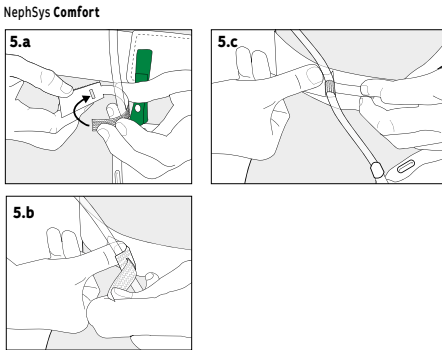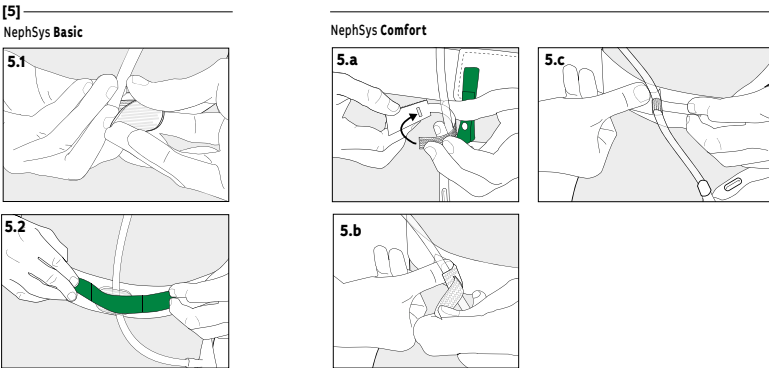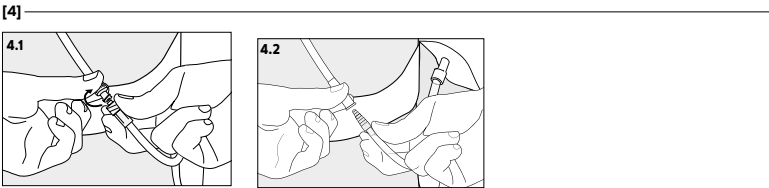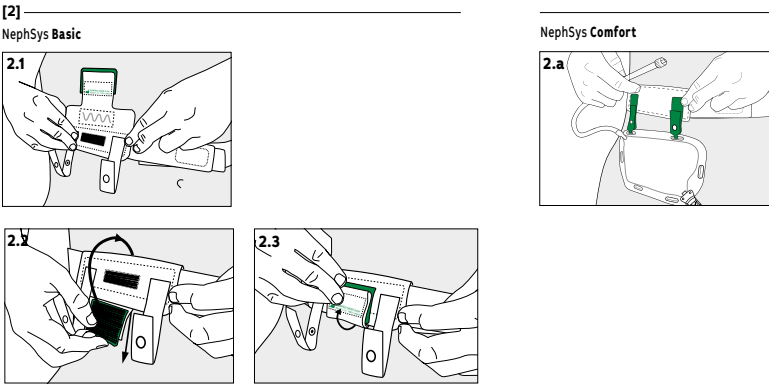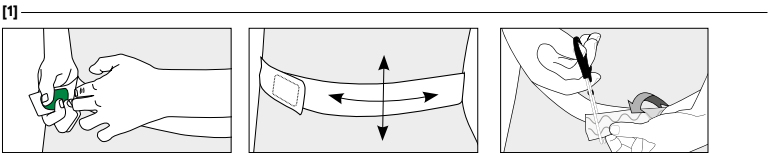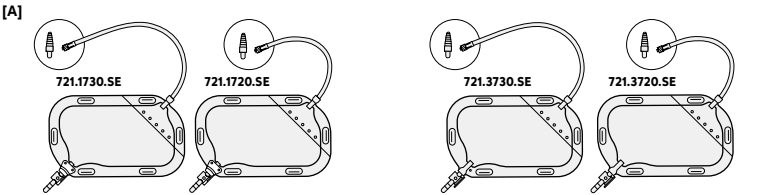

Slovenščina

Vrečke SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), sterilno

Informacije

Navodila za nego z izdelki SAUER-NephSys mora dati strokovni zdravstveni delavec.

Vrečke SAUER-NephSys so namenjene za enkratno uporabo.

Pas v kompletu SAUER-NephSys je namenjen za večkratno uporabo. Upoštevajte navodila za pranje, ki so na etiketi pasu. Življenjska doba pasu je odvisna od posameznega uporabnika (od namočanja, odlaganja, pranja itd.). Praviloma ga lahko uporabljate 2-3 mesece. Trgovski naziv in lastnosti izdelka najdete na etiketi.

Predviden namen in indikacije

Pas v kompletu SAUER-NephSys (57.42, 57.43) je dodatek vrečkam SAUER-NephSys. Komplet pasov SAUER NephSys se uporablja za pritrnitev ene ali dveh vrečke SAUER NephSys na bok. V kombinaciji sta namenjena zbiranju urina pri osebah s sistemi za odvod urina nad spolnimi organi, zlasti s katetrom ledvične fistule.

Tveganja in opozorila

- Vrečke SAUER-NephSys ne smete a) ponovno uporabiti in b) uporabiti v primeru poškodovane sterilne bariere, da ne povečate nevarnosti za okužbo.
- Zaradi neustrezne uporabe lahko nastanejo zapleti. Zastoj urina, npr. zaradi prekinjenega odvoda urina, lahko povzroči smrtno nevarno urosepto. V tem primeru je treba takoj poklicati zdravnika, enako pri okužbah in dolgotrajnem zastajanju urina.
- Za zmanjšanje možnih virov okužbe, se površine priključka nastavka vrečke ne dotikajte niti ne sme priti v stik z drugimi površinami (notranja stran pri nastavku Luer-Lock, zunanja stran pri stopenjskem adapterju). Cevko lahko skrajšate samo s pred tem razkuženimi škarkami (uporabite ustrezno razkužilo, npr. za površine).
- Pazite, da vrečke ne boste namestili nad sistem odvoda, da bo urin lahko neovirano odtekal (npr. ne nad priključkom katetra ledvične fistule). Večkrat dnevno preverjajte, ali urin odteka v vrečko. Preprečite zvijanje, prepogibanje in izklapljanje cevke.
- Obrabljene dele pasu nadomestite z novimi, da se ne bodo nenamerno odpirali/odpenjali.
- Preprečite natezanje katetra. Upoštevajte naslednje:
 - Nastavek vrečke povežite s priključkom katetra in pazite, da ni napet.
 - Vedno najprej izključite povezavo med vrečko in katetrom in šele nato odpnite pas, da ne bo teža vrečke potegnila katetra navzdol.
- Pri priključku vrečke SAUER-NephSys na ustrezno nočno vrečko pazite, da je iztok odprt in se ponoči ne bo zaprl.

Če bi med uporabo urinskih vrečk SAUER prišlo do težjih zapletov, je o tem treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države, v kateri biva uporabnik.

Vrečke SAUER-NephSys s stopenjski adapter vključno (pritrdljiv), sterilno (Slika [A] glej stran 2).

Napotki za uporabo (Slika [1] – [5] glej stran 2):

[1]. Pas namestite in skrajšajte

Stran pasu namestite skladno s silikonskimi linijami na koži, pas rahlo napnite in namestite poljubno med pasom in kolkom. Pazite, da bo nameščen stabilno in bo občutek prijeten! Odvečen pas s škarkami poljubno skrajšajte (1.3).

[2]. Blazinico z ježkom namestite in pritrдите.

2.1, 2.a: Blazinico z ježkom pritrđite na strani telesa, na kateri je sistem odvoda npr. katetra ledvične fistule. Zato blazinico z ježkom pritrđite na sredino med bok in popek na pas, kot je prikazano na sliki (Sl. 2.1, 2.a).

2.1, 2.3: **Pas v kompletu Basic:** Ko pritrđite blazinico z ježkom (Sl. 2.1), pas nekoliko povlecite od telesa in sponko blazinice z ježkom speljite pod pasom (Sl. 2.2). Nato trak z ježkom za pritrđitev speljite okrog in blazinico z ježkom pritrđite spredaj na prsih pas z ježkom (Sl. 2.3).

2.a: **Pas v kompletu Comfort:** Namig: pri različici Comfort priporočamo, da najprej vrečko pritrđite na blazinico z ježkom (Sl. 3.a) in nato blazinico z ježkom pritrđite na pas (Sl. 2.a).

[3]. Pritrdite vrečko na blazinico z ježkom

3.1, 3.a: Priporočamo, da dovodno cevko z eno roko pridržite, da preprečite stik s površino priključka nastavka. Vrečko pritrđite tako, da je iztok obrnjen v smer koraka.

Obe sponki blazinice z ježkom vpnite v obročke pasu vrečke in zapnite gumb na pritisk.

[4]. Priključite vrečko na kateter

4.1: Z obračanjem v smeri urnega kazalca povežite moški priključek luer na vrečki z ženskim priključkom luer na nefrostomskem katetru.

4.2: Pri uporabi priloženega stopenjskega nastavka s škarkami, ki ste jih pred tem razkužili (uporabite ustrezno razkužilo, npr. za površine), cevko skrajšajte na zeleno dolžino (raven rez). Adapter potisnite na cev, ne da bi se dotaknili priključne površine adapterja. Z adapterja odstranite zaščitni pokrovček. Nastavek vrečke povežite s priključkom katetra in pazite, da ni napet.

[5]. Dovodno cevko zavarujte pred natezanjem

Da preprečite zvijanje dovodne cevke ali natezanje katetra, cevko fiksirajte na primerno mesto na pasu, tako da razbremenite natezanje.

5.1-5.2: **Pas v kompletu Basic:** Odstranite zaščitne folije lepljive točke za pritrđitev. Na mestu, kjer se križata cevka in pas, napeljite cevko med lepljivima površinama lepljive točke za pritrđitev (Sl. 5.1), površini pritisnite skupaj in lepljivo točko pritrđite na pas. Na koncu točko lepljenja za pritrđitev pritrđite s trakom z ježkom, kot je prikazano na sliki 5.2.

5.a-c: **Pas v kompletu Comfort:** Sponko za pritrđitev namestite okrog dovodne cevke, kot je prikazano na sliki 5.a. Širši del sponke z ježkom pritisnite na pas, kjer se križata cevka in pas (Sl. 5.b). Sponko z ježkom tako zatisnite, da cevke ne bo več mogoče izvleči (cevke ne izklopite). Na koncu pritisnite tanjši trak na pasu (Sl. 5.c).

Ponoči

Vrečka SAUER-NephSys lahko ostane pritrđena na pasu tudi ponoči. Je pa morda lažje, če vrečko odstranite s pasu in jo v postelji namestite na varno mesto ob telesu. Za večjo prostornino ponoči lahko vrečko SAUER-NephSys povežete na ustrezno vrečko. Za to potisnite spojno cev na iztočno pipo vrečke SAUER-NephSys in jo povežite z nastavkom posteljne vrečke. V tem primeru ostane iztočna pipa vrečke odprta.

Praznjenje in menjava

Vrečko SAUER-NephSys izpraznite tako, da odprete iztočno pipo in pustite, da urin odteče v školjko ali drugo ustrezno posodo. Potem pipo zopet zaprite.

Za menjavo vrečke previdno ločite povezavo s katetrom, pri čemer se ne dotikajte odprtih koncev priključka.

Odlaganje med odpadke


Pred odlaganjem med odpadke vrečko SAUER-NephSys izpraznite in odložite med ostale odpadke. Sistem pasu odložite med običajne odpadke.

REF	Katalogna številka
	Hranite na suhem mestu
	Ne sterilizirajte ponovno
	Število kosov
	Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo
CH REP	Švicarski pooblaščen predstavnik
STERILE EO	Sterilizirano z etilenoksidom
	Enojni sterili pregradni sistem
LOT	Številka serije
	Upoštevajte navodila za uporabo
CE 0123	Oznaka CE Medicinski pripomoček
	Uporabno do (leto-mesec-dan)
	Ni za večkratno uporabo
PZN	Centralna farmacevtska številka
DT	Tarifa za zdravila (Katalog britanske NHS)
LPP	Seznam izdelkov in storitev
	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Datum izdelave
	Proizvajalec


Družba MANFRED SAUER GmbH ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, ki ni predvidena v navodilih za uporabo, ali zaradi neupoštevanja higienskih smernic.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, se obrnite na strokovne zdravstvene delavce ali na naše svetlobo:
MANFRED SAUER GmbH · Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

[A]


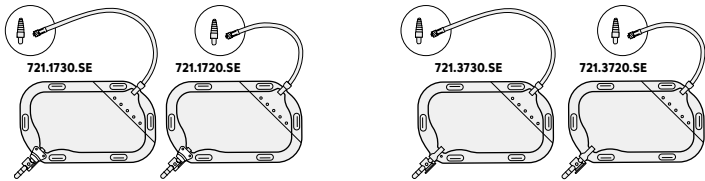


[1]

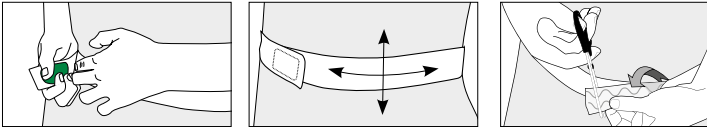


[2]

NephSys Basic

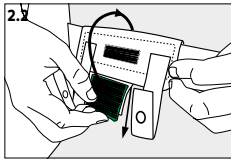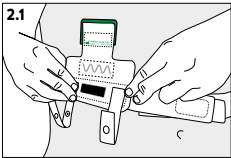


[3]

NephSys Basic

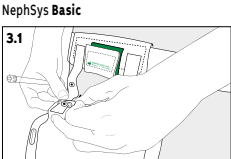



[4]

NephSys Basic

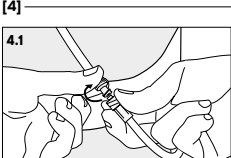


[5]


NephSys Basic

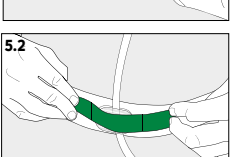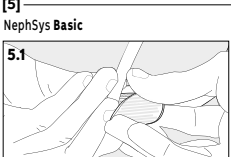

NephSys Comfort

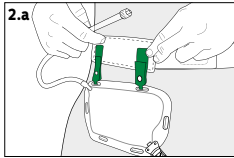


NephSys Comfort

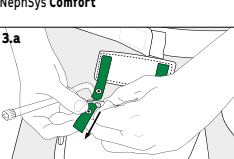

NephSys Comfort



NephSys Comfort

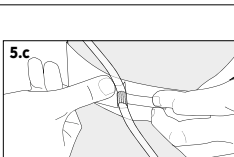

Hrvatski

Vrećica SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), sterilan

Informacije

Upute za zbrinjavanje stanja pomoću proizvoda SAUER-NephSys mora dati stručno osoblje. Vrećica SAUER-NephSys namijenjena je za jednokratnu uporabu. Komplet pojasa SAUER-NephSys namijenjen je za višekratnu uporabu. Pridrţavajuće se uputa za pranje na naljepnici pojasa. Rok trajanja pojasa ovisi o individualnoj uporabi (postavljanje/skidanje, pranje itd.). On u pravilu iznosi 2 do 3 mjeseca. Trgovački naziv i značajke proizvoda navedeni su na naljepnici.

Namjenska uporaba i indikacije

Komplet pojasa SAUER-NephSys (57.42, 57.43) pribor je za vrećicu SAUER-NephSys. Komplet pojasa SAUER NephSys sluţi za pričvršćivanje jedne ili dvije SAUER NephSys vrećice na bokove. U kombinaciji su namijenjeni prikupljanju urina u osoba s drenaţnim sustavom iznad genitalnih organa, posebno iz nefrostoma.

Rizici i upozorenja

- Vrećica SAUER-NephSys ne smije se a) ponovno upotrijebiti i b) upotrijebiti ako je oštećena sterilna barijera kako se ne bi povećao rizik od infekcije.
 - Nepravilna uporaba moţe izazvati komplikacije. Zastoj urina prouzrokovao, npr. pre-savijenom drenaţom urina, moţe izazvati stanja urosepe koja su opasna za ţivot. U tom slućaju, kao i u slućaju infekcija i perzistirajućeg zastoja urina odmah se obratite lijećniku.
 - Kako biste smanjili potencijalne izvore infekcije, nemojte dodirivati priključnu površinu adaptera vrećice ili ga dovoditi u kontakt s površinama (unutarjnom stranom adaptera za luer priključak, vanjskom stranom adaptera). Crijevo se smije skraćivati samo prethodno dezinficiranim škarama (upotrijebite prikladno dezinfekcijsko sredstvo, npr. ono za površine).
 - Vodite računa o tome da vrećicu ne postavite iznad drenaţnog sustava kako bi urin mogao nesmetano otećati (npr. ne iznad konektora nefrostome). Nekoliko puta dnevno provjerite otećje ili urin u vrećicu. Izbjegavajte savijanje, vrtanje i stezanje ulaznog crijeva.
 - Kako bi se izbjeglo nenamjerno otvaranje/otpustanje dijelova kompleta pojasa, potrebno ih je zamijeniti u slućaju dotrajaloosti.
 - Izbjegavajte povlaćenje katetera. Pridrţavajuće se sljedećeg:
 - Priključak vrećice spojite na konektor katetera bez povlaćenja.
 - Uvijek odspojite vrećicu od katetera izmeću vrećice i katetera prije otvaranja trbušnog pojasa kako biste izbjegli naglo povlaćenje katetera zbog teţine vrećice.
 - Kad spajate vrećice SAUER-NephSys na odgovarajuću vrećicu za noć, vodite računa o tome da je odvodna slavina otvorena i da se po noći ne zatvori.
- Ako prilikom uporabe urinskih vrećica SAUER dođe do pojave ozbiljnih štetnih događaja, o tome treba izvjestiti proizvođaća i nadleţno tijelo zemlje u kojoj je korisnik rezidentan.

Vrećica SAUER-NephSys uključujući nazubljeni adapter (odvojiv), sterilan (Sl. [A] vidi stranicu 2).

Upute za uporabu (Sl. [1] – [5] vidi stranicu 2):

[1]. Postavljanje i skraćivanje trbušnog pojasa

Poloţite remen izmeću struka i bokova njeţo ga povlaćći kako biste stranu pojasa sa silikonskim linijama namjestili na koţu. Vodite računa u udobnom, ali prvenstveno sigurnom namještaju! Višak pojasa po potrebi moţete odrezati škarama (1.3).

[2]. Namještavanje i pričvršćivanje ćikak trake

2.1, 2.a: Prićvrstite ćikak traku na stranu tijela na kojoj se nalazi drenaţni sustav, npr. nefrostoma. To ućinite prema slikama (slika 2.1, 2.a) tako da pričvrstite ćikak traku za trbušni pojas.

2.1, 2.3: Komplet pojasa Basic: Nakon što pričvrstite ćikak traku (slika 2.1), malo odmaknite trbušni pojas od tijela i podvucite jezićak ćikak trake ispod pojasa (slika 2.2). Zatim preklomite pričvrćne kukice i pričvrstite ih za pričvrćne kukice ušivene na prednju stranu ćikak trake (slika 2.3).

2.a: Komplet pojasa Comfort: Savjet: kod modela Comfort preporućuje se prvo pričvrstiti vrećicu na ćikak traku (slika 3.a), a zatim pričvrstiti ćikak traku na trbušni pojas (slika 2.a).

[3]. Prićvršćivanje vrećice na ćikak traku

3.1, 3.a: Preporućuje da ćvrsto drţite ulazno crijevo jednom rukom kako biste izbjegli kontakt s površinom adaptera. Vrećicu je potrebno ućvrstiti tako da slavina bude u smjeru natpisa.

Oba jezićka ćikak trake provucite kroz ušice za pojas na vrećici i zatvorite kopću.

[4]. Spajanje vrećice na kateter

4.1: Spojite muški luer priključak na vrećici sa ţenskim luer priključkom na kateteru za nefrostomiju okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu.

4.2: Za uporabu priloţenog stupnjevitog adaptera crijevo skratite na ţeljenu duţinu (ravni rez) prethodno dezinficiranim škarama (upotrijebite prikladno dezinfekcijsko sredstvo, npr. ono za površine). Gurnite adapter na crijevo bez dodirivanja spojne površine adaptera. Skinite zaštitnu kapicu s adaptera. Adapter vrećice spojite na konektor katetera bez povlaćenja.

[5]. Ulazno crijevo osigurajte mehanizmom rasterećenja.

Kako bi se smanjio rizik od savijanja ulaznog crijeva ili povlaćenja katetera, crijevo je potrebno ućvrstiti na poloţaj pomoću mehanizma rasterećenja na trbušnom pojasu.

5.1–5.2: Komplet pojasa Basic: Uklonite zaštitni film s pričvrćne toćke. Na mjestu gdje se crijevo i trbušni pojas kriţaju, provucite crijevo izmeću ljepljivih površina pričvrćne toćke (slika 5.1), pritisnite površine i pričvrstite ljepljivu toćku na trbušni pojas. Na kraju osigurajte pričvrćnu toćku pomoću ćikak trake kao što je to prikazano na slici 5.2.

5.a–c: Komplet pojasa Comfort: Postavite pričvrćni jezićak oko ulaznog crijeva kao što je to prikazano na slici 5.a. Širi dio jezićka ćikak trake pritisnite na trbušni pojas na mjesto na kojem se kriţaju crijevo i trbušni pojas (slika 5.b). Jezićak ćikak trake utisnite tako da se crijevo više ne moţe izvuci (nemojte stegnuti crijevo). Zatim pritisnite tanku traku na pojas (slika 5.c).

Po noć

Vrećica SAUER-NephSys smije ostati pričvrćena na pojas i po noć. Ipak moţe biti ućudnije vrećicu skinuti s pojasa i sigurno postaviti na krevet uz tijelo. Radi povećanja volumena noću, mogu se spojiti vrećica SAUER-NephSys i odgovarajuća vrećica. Da biste to ućinili, spojno crijevo potisnite na ispusnu slavinu vrećice SAUER-NephSys i poveţite je s adapterom vrećice za krevet. U tom slućaju slavinu vrećice ostaje otvorena.

Praţnjenje i mijenjanje

Da biste ispraznili vrećicu SAUER-NephSys otvorite slavinu i ispraznite urin u zahod ili prikladnu posudu. Nakon praţnjenja ponovno zatvorite slavinu.

Da biste promijenili vrećicu, paţljivo odspojite spoj s kateterom ne dodirujući otvorene krajeve priključaka.

Zbrinjavanje






Vrećicu SAUER-NephSys ispraznite prije zbrinjavanja u preostali otpad. Sustav traka zbrinite u kućanski otpad.

Tvrćka MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede koje mogu nastati zbog nepravilnog postupanja suprotno ovim uputama za uporabu ili zbog nepridrţavanja higijenskih smjernica.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema, obratite se medicinskim stručnjacima ili našim savjetnicima za korisnike:

MANFRED SAUER GmbH · Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

REF	Kataloţiki broj
☂	Ćuvati na suhom
STERILIZIRANO	Nemojte ponovno sterilizirati
11	Broj komada
☀	Ćuvati od sunćeve svjetlosti
CH REP	Švicarski ovlašten predstavnik
STERILE EO	Sterilizirano etilen oksidom
○	Jednostruki sustav sterilne barijere
LOT	Broj serije
📖	Pogledajte upute za uporabu
CE MD 0123	Medicinski proizvod s oznakom CE
🕒	Upotrijebiti do (godina-mjesec-dan)
🔄	Nemojte ponovno upotrijebiti
PZN	Farmaceutski centralni broj
DT	Drug tariff (Katalog lijekova britanskog NHS-a)
LPP	Popis proizvoda i usluga
🚫	Nemojte upotrijebiti ako je ambalaţa oštećena
🏭	Datum proizvodnje
🏭	Proizvođać

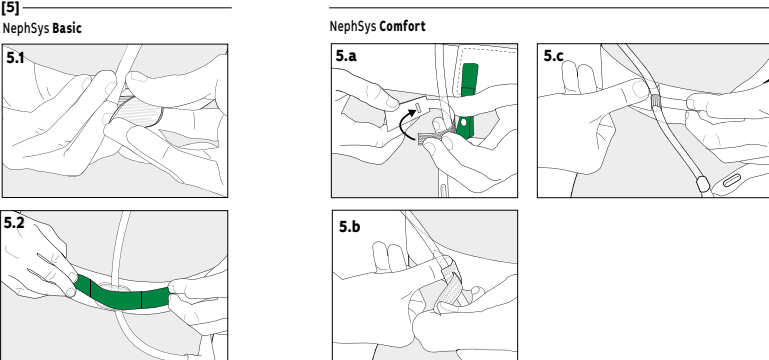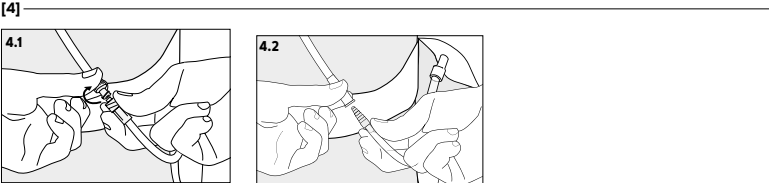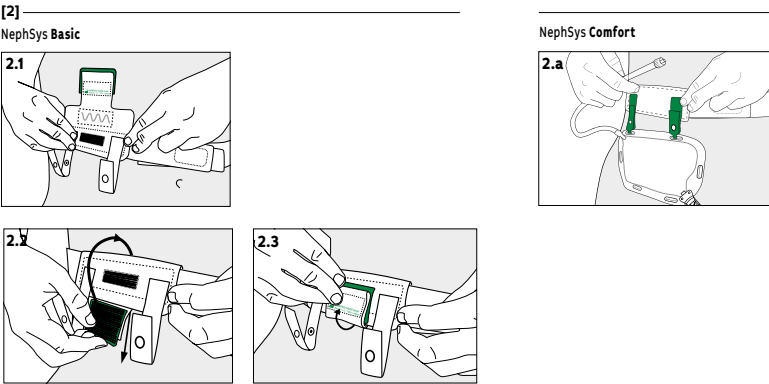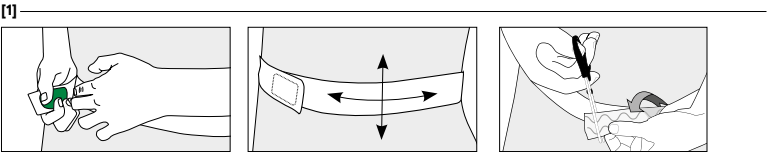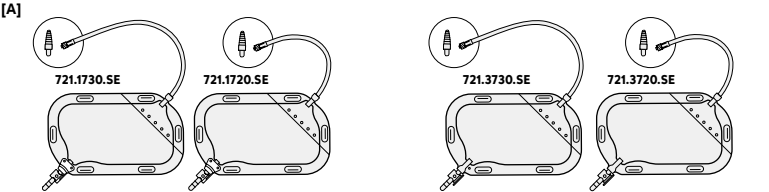

Srpski

Kesa SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), sterilno

Informacije

Uputstva za lečenje proizvodima marke SAUER-NephSys trebalo bi da pruži stručno lice. Kesa marke SAUER-NephSys je predviđena za jednokratnu upotrebu. Komplet kaiševa SAUER-NephSys je pogodan za višekratnu upotrebu. Sledite uputstva za pranje na etiketi kaiša. Trajnost kaiša zavisi od individualne upotrebe (stavljanje/skladanje, pranje itd.). To obično odgovara periodu od 2 do 3 meseca. Trgovačka oznaka i karakteristike proizvoda se nalaze na etiketi.

Namena i indikacije

Komplet kaiševa SAUER-NephSys (57.42, 57.43) je dodatak kesi SAUER-NephSys. Komplet kaiševa SAUER NephSys se koristi za pričvršćivanje jedne ili dve SAUER NephSys kesa esa na bokove. Zajedno su namenjeni sakupljanju urina kod ljudi sa drenažnim sistemima iznad genitalnih organa, posebno iz katetera bubrežne fistule.

Rizici i upozorenja

- Kesa SAUER-NephSys a) ne sme ponovo da se koristi i b) ne sme da se koristi ako je oštećena sterilna barijera, kako se ne bi povećao rizik od infekcije.
- Nepravilna upotreba može dovesti do komplikacija. Zagušenje urina, nastalo usled npr. preloma na odvodu urina, može dovesti do urosepse opasne po život. U tom slučaju odmah potražite pomoć lekara, takođe u slučaju infekcija i neprestanog zagušenja urina.
- Da biste smanjili izvore infekcije, ne dodirujte spojnu površinu adaptera kesa niti je dovodite u kontakt sa površinama (unutrašnja strana sa Luer-Lock adapterom, spoljna strana sa stepenastim adapterom). Crevo može da se skрати samo prethodno dezinfikovanim makazama (koristite odgovarajuće dezinfekciono sredstvo, npr. za površine).
- Uverite se da kesa nije postavljena iznad drenažnog sistema kako bi urin mogao slobodno da se odvodi (npr. ne iznad konektora katetera bubrežne fistule). Proverite nekoliko puta dnevno da li se urin odvodi u kesu. Izbegavajte vrtanje, prelamanje i odvajanje ulaznog creva.
- Da bi se izbeglo nenamerno otvaranje/otpuštanje delova kompleta kaiša, zamenite ih ako ukazuju na znake habanja.
- Izbegavajte povlačenje katetera. Imajte na umu sledeće:
 - Povežite adapter kesa sa konektorom katetera bez povlačenja.
 - Uvek prekinite vezu između kesa i katetera pre otvaranja kaiša oko struka, kako biste izbegli naglo povlačenje katetera zbog težine kesa.
- Kada spajate kesu SAUER-NephSys na odgovarajuću kesu za noć, vodite računa da je ispusna slavinna otvorena i da se noću ne zatvara.
- Ako prilikom upotrebe SAUER kesa za sakupljanje urina nastupe ozbiljni incidenti, isti moraju da se prijave proizvođaču i nadležnom državnom organu u državi u kojoj je korisnik nastanjen.

Kesa SAUER-NephSys stepenasti adapter uključen (nasadni), sterilno (Sl. [A] videti stranu 2).

Uputstvo za upotrebu (Sl. [1]–[5] videti stranu 2):

[1]. Stavite i skratite kaiš oko struka

Da biste to uradili, postavite stranu kaiša sa silikonskim linijama na kožu, po želji blagim povlačenjem stavite kaiš između struka i kuka. Obratite pažnju na udobno, ali pre svega stabilno naleganje. Preostali deo kaiša možete po želji da skratite makazama (1.3).

[2]. Postavite i fiksirajte podlogu za čičak

2.1, 2.a: Pričvrstite podlogu za čičak na stranu tela na kojoj se nalazi drenažni sistem, npr. kateter bubrežne fistule. Da biste to uradili, učvrstite podlogu za čičak na kaiš oko struka na sredini između strane kuka i pupka, kao što je prikazano na slici (sl. 2.1, 2.a).

2.1, 2.3: Komplet kaiševa Basic: Nakon što pričvrstite podlogu za čičak (sl. 2.1), blago povucite kaiš oko struka od tela i vodite spoju podloge za čičak ispod kaiša (sl. 2.2). Zatim prekopite traku za pričvršćivanje kuke i pričvrstite je na ušivenu traku kuke na prednjoj strani podloge za čičak (sl. 2.3).

2.a: Komplet kaiševa Comfort: Savet: kod verzije Comfort, preporučljivo je da kesu najpre zakačite na podlogu za čičak (slika 3.a) i da zatim podlogu za čičak pričvrstite na kaiš oko struka (sl. 2.a).

[3]. Pričvrstite kesu na podlogu za čičak

3.1, 3.a: Preporučuje se da ulazno crevo držite jednom rukom kako biste izbegli kontakt sa spojnou površinom adaptera. Fiksirajte kesu tako da ispusna slavinna bude usmerena u pravcu prepona. Provucite obe pričvršne spojnke na podlozi za čičak kroz ušice kaiša na kesi i zatvorite pritisnu dugmad.

[4]. Povežite kesu na kateter

4.1: Povežite muški Luer lock konektor na kesi sa ženskim Luer lock konektorom na kateteru za nefrostomiju okretanjem u smeru kazaljke na satu. **4.2:** Da bi se koristio priloženi stepenasti adapter, skratite crevo prethodno sterilisanim makazama (koristite odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju, npr. za površine) od željene dužine (ravan rez). Gurnite adapter na crevo bez dodirivanja priključne površine adaptera. Skinite zaštitni poklopac sa adaptera. Povežite adapter kesa sa konektorom katetera bez povlačenja.

[5]. Osigurajte ulazno crevo rasterećenjem povlačenja

Da bi se smanjio rizik od uvijanja ulaznog creva ili povlačenja katetera, crevo je fiksirano u odgovarajućem položaju uz pomoć rasterećenja povlačenja na kaišu oko struka.

5.1–5.2: Komplet kaiševa Basic: Uklonite zaštitne folije sa pričvršne lepljive tačke. Na mestu gde se crevo i kaiš oko struka ukrštaju, vodite crevo između lepljivih površina pričvršne lepljive tačke (sl. 5.1), pritisnite ih zajedno i pričvrstite lepljivu tačku na kaiš oko struka. Na kraju, fiksirajte pričvršnu lepljivu tačku pomoću trake za pričvršćivanje kuke, kako je prikazano na sl. 5.2.

5.a–c: Komplet kaiševa Comfort: Provucite spoju za fiksiranje oko ulaznog creva, kao što je prikazano na slici 5.a. Pritisnite široki deo spojnke čička na kaiš oko struka na mestu gde se crevo i kaiš ukrštaju (sl. 5.b). Pritegnite spoju sa čičkom tako da crevo više ne može da se izvuče (ne odvajajte crevo). Zatim pritisnite tanku traku na kaišu (sl. 5.c).

Noću

Kesa SAUER-NephSys može i noću da ostane pričvršćena za kaiš. Međutim, možda će biti udobnije da se ukloni kesa sa kaiša i da se postavi bezbedno u krevet pored tela. Noću se kesa SAUER-NephSys može povezati sa odgovarajućom kesom u cilju povećanja zapremine. Da bi se to postiglo, spojno crevo je potrebno gurnuti na ispusnu slavinu kesa SAUER-NephSys i povezati ga sa adapterom kesa za krevet. U tom slučaju ispusna slavinna kesa mora da ostane otvorena.

Pražnjenje i zamen

Da biste ispraznili kesu SAUER-NephSys, otvorite ispusnu slavinu i pustite da urin istekne u veće šolju ili odgovarajuću posudu. Posle toga ponovo zavrnite slavinu.

Da biste promenili kesu, pažljivo prekinite vezu sa kateterom ne dodirujući otvorene krajeve priključaka.






Odlaganje

Ispraznite kesu SAUER-NephSys prilikom odlaganja i odložite je u preostali otpad. Sistem kaiševa odložite u kućni otpad.

Kompanija MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede, koje mogu da nastanu usled nepravilnog rukovanja suprotno ovim uputstvima za upotrebu ili ako se ne primenjuju higijenske smernice.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema, obratite se medicinskim stručnjacima ili našim savetnicima za korisnike: **MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100**

	Kataloški broj
	Čuvajte na suvom mestu
	Nemojte ponovo da sterilizujete
	Broj komada
	Držite dalje od sunčeve svetlosti
	Ovlašćeni predstavnik za Švajcarsku
	Sterilizaciju izvedite etilen oksidom
	Sistem jednostruke sterilne barijere
	Broj serije
	Pridržavajte se uputstva za upotrebu
	CE oznaka medicinskih proizvoda
	Upotrebljivo do (godina-mesec-dan)
	Samo za jednokratnu upotrebu
	Centralni farmaceutski broj
	Drug Tariff (katalog lekova britanske NHS)
	Spisak proizvoda i usluga
	Nemojte da koristite ako je oštećena ambalaža
	Datum proizvodnje
	Proizvođač

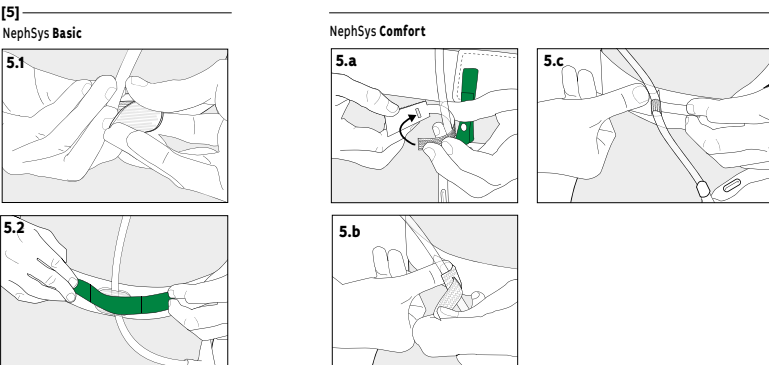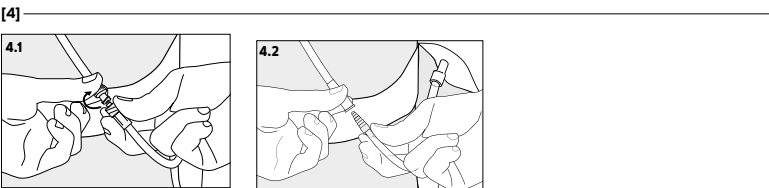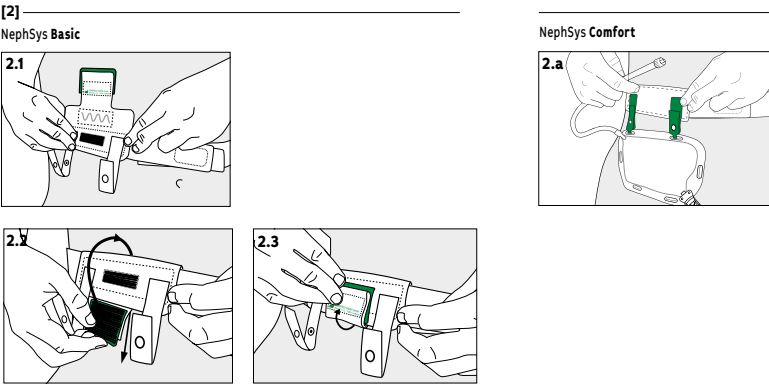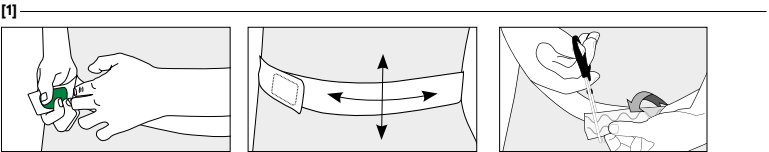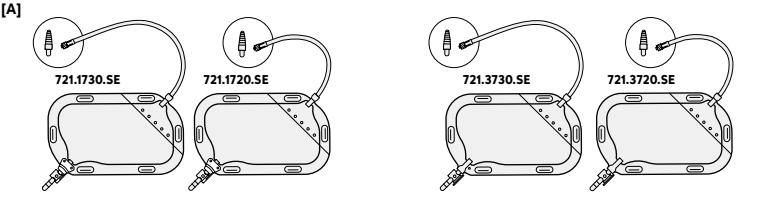

Bosanski

Vrećice SAUER-NephSys (721.xxxx.SE), sterilno

Informacije

Uputstvo o nabavi SAUER-NephSys proizvoda treba dati kvalificirano osoblje. Vrećice SAUER-NephSys namijenjene su za jednokratnu upotrebu. Pojasni set SAUER-NephSys pogodan je za višestruku upotrebu. Slijedite uputstvo za pranje na etiketi pojasa. Trajnost pojasa ovisi o individualnoj upotrebi (stavljanje / skidanje, pranje itd.). Obično traje 2-3 mjeseca. Komercijalni naziv i karakteristike proizvoda mogu se naći na etiketi.

Namjena i indikacije

Pojasni set SAUER-NephSys (57.42, 57.43) je pribor uz vrećice SAUER-NephSys. SAUER NephSys pojasni set se koristi za pričvršćivanje jedne ili dvije SAUER NephSys vrećice na bokove. U kombinaciji su namijenjeni sakupljanju urina od osoba s drenažnim sistemom iznad genitalnih organa, posebno iz katetera bubrežne fistule.

Rizici i upozorenja

- Vrećica SAUER-NephSys se ne smije a) koristiti više puta i b) koristiti ako je sterilna barijera oštećena, kako se ne bi povećao rizik od infekcije.
- Nepravilna upotreba može dovesti do komplikacija. Zastoj mokraće, npr. zbog savijenog odvodnog crijeva, može dovesti do urosepse opasne po život. U tom slučaju odmah potražite ljekara, kao i u slučaju infekcije i stalnog zastoja mokraće.
- Da biste smanjili izvore infekcije, nakon uklanjanja zaštitne kapice, ne dodirujte adapter sterilne vrećice niti ga dovodite u kontakt s površinama (unutrašnja strana Luer-Lock adaptera, vanjska strana nazubljenog adaptera). Cijev možete skratiti samo prethodno dezinficiranim makazama (upotrijebite odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju, npr. za ravne površine).
- Pazite da vrećica nije pričvršćena iznad drenažnog sistema, kako bi se urin mogao slobodno odvoditi (npr. ne iznad konektora katetera bubrežne fistule). Provjerite nekoliko puta dnevno da li mokraća otječe u vrećicu. Izbjegavajte uvrtanje, lomljenje i odvajanje ulazne cijevi.
- Da bi se izbjeglo nenamijerno otvaranje / otpuštanje dijelova kompleta pojasa, moraju se zamijeniti ako pokazuju znakove istrošenosti.
- Nemojte vući za kateter. Pridržavajte se sljedećih uputa:
 - Povežite adapter vrećice na konektor katetera bez zatezanja.
 - Uvijek prvo prekinite vezu između vrećice i katetera prije otvaranja pojasa, kako biste izbjegli naglo povlačenje katetera usljed težine vrećice.
- Kada spajate vrećicu SAUER-NephSys na odgovarajuću vrećicu za noć, vodite računa da je odvodna slavinna otvorena i da se noću ne zatvara. Ako se tokom upotrebe SAUER vrećica za sakupljanje urina pojave ozbiljni problemi, oni se moraju prijaviti proizvođaču i nadležnom organu države u kojoj korisnik živi.

Vrećice SAUER-NephSys nazubljeni adapter uključen (push-on), sterilno (Sl. [A] vidi stranicu 2).

Napomene o primjeni (Sl. [1]–[5] vidi stranicu 2):

[1]. Stavite pojas i skratite ga

Da biste to učinili, pozicionirajte bočnu stranu pojasa sa silikonskim linijama na kožu, postavite pojas između struka i bokova, uz stezanje po želji. Obratite pažnju da pojas naliježe udobno, ali prije svega stabilno! Višak trake može se skratiti makazama (1.3).

[2]. Pozicionirajte čičak podlogu i fiksirajte je.

2.1, 2.a: Pričvrstite čičak podlogu na stranu tijela na kojoj se nalazi drenažni sistem, npr. kateter bubrežne fistule. Da biste to učinili, pričvrstite čičak podlogu na pojas oko sredine, između boka i pupka, kao što je prikazano na slici (slika 2.1, 2.a).

2.1, 2.3: **Pojasni set Basic:** Nakon što pričvrstite čičak podlogu (slika 2.1), malo povucite pojas sa svog tijela i provucite spojnicu čičak podloge ispod pojasa (slika 2.2). Zatim preklopite traku sa kukom za fiksiranje i pričvrstite je na ušivenu traku sa kukom na prednjoj strani čičak podloge (slika 2.3).

2.a: **Pojasni set Comfort:** Savjet: kod verzije Comfort preporučljivo je najprije pričvrstiti vrećicu na čičak podlogu (slika 3.a), a zatim pričvrstiti čičak podlogu na pojas (slika 2.a).

[3]. Pričvrstite vrećicu za čičak podlogu

3.1, 3.a: Preporučljivo je držati dovodnu cijev jednom rukom, kako biste izbjegli kontakt s površinom priključka adaptera. Vrećicu fiksirajte tako da slavinna bude usmjerena u smjeru koraka. Provucite dva pričrvena jezička čičak podloge kroz ušice trake na vrećici i zatvorite kopče.

[4]. Spojite vrećicu sa kateterom

4.1: Spojite muški luer lock priključak na vrećici sa ženskim luer lock priključkom na kateteru za nefrostomiju okretom u smjeru kazaljke na satu. 4.2: Da biste koristili isporučeni stepeničasti adapter, prethodno dezinficiranim makazama (upotrijebite odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju, npr. za ravne površine) skratite cijevi do željene dužine (ravnim rezom). Gurnite adapter na crijevo bez dodirivanja priključne površine adaptera. Skinite zaštitni poklopac sa adaptera. Spojite adapter za cijev na priključak katetera bez zatezanja.

[5]. Osigurajte dovodnu cijev sa mehanizmom za vučno rasterećenje

Kako bi se smanjio rizik od uvijanja ulazne cijevi ili povlačenja katetera, cijev se fiksira u prikladnom položaju uz pomoć mehanizma za vučno rasterećenja na pojasu.

5.1-5.2: **Pojasni set Basic:** Uklonite zaštitnu foliju s tačke lijepljenja, za fiksiranje. Na mjestu gdje se križaju cijev i pojas, provucite cijev između lijepljivih površina tačke lijepljenja za fiksiranje (slika 5.1), pritisnite ih zajedno i pričvrstite tačku lijepljenja na pojas. Na kraju pričvrstite tačku lijepljenja za fiksiranje pomoću trake za pričvršćivanje, kako je prikazano na slici 5.2.

5.a-c: **Pojasni set Comfort:** Navucite jezičak za pričvršćivanje oko ulazne cijevi kao što je prikazano na slici 5.a. Pritisnite široki dio čičak trake na pojas na mjestu gdje se križaju cijev i pojas (slika 5.b). Pritegnite čičak traku tako da cijev više ne može biti izvučena (nemojte stiskati cijev). Zatim pritisnite tanku traku na pojas (slika 5.c).

Tokom noći

Vrećica SAUER-NephSys može ostati pričvršćena za pojas čak i noću. Međutim, možda će biti zgodnije vrećicu s pojasa i sigurno je postaviti u krevet pored tijela. Za povećani volumen mokraće tokom noći, vrećica SAUER-NephSys može se spojiti sa odgovarajućom vrećicom. Da bi se to izvelo, priključna cijev gurne se na izlaznu slavinu vrećice SAUER-NephSys i spoji na adapter noćne vreće. U tom slučaju slavinna vrećice uz nogu ostaje otvorena.

Pražnjenje i zamjena vrećice

Da biste ispraznili vrećicu SAUER-NephSys, otvorite slavinu i pustite da urin isteče u toalet ili odgovarajuću posudu. Nakon toga ponovno zatvorite slavinu.


Da biste zamijenili vrećicu, pažljivo odvojite vezu s kateterom, ne dodirujući otvorene krajeve veze.

Odlaganje u smeće


Prije odlaganja ispraznite vrećicu SAUER-NephSys i odložite je s ostalim otpadom. Pojasni sistem odložite u kućno smeće.

Kompanija MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili povrede koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja suprotno ovim uputama za upotrebu ili neprimjenjivanja higijenskih smjernica.


U slučaju pitanja ili problema, obratite se medicinskom stručnom osoblju ili našim savjetnicima za korisnike:
MANFRED SAUER GmbH · Neurtott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany · +49 6226 960100

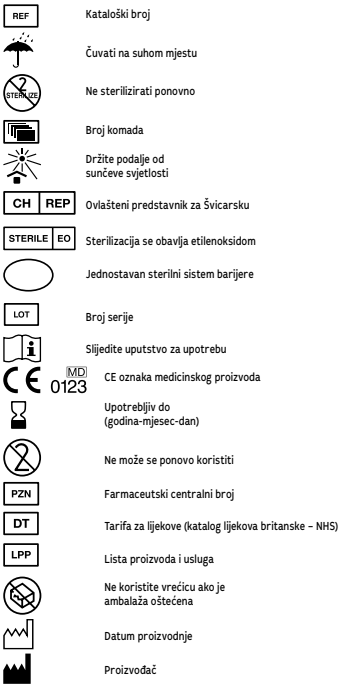

[A]


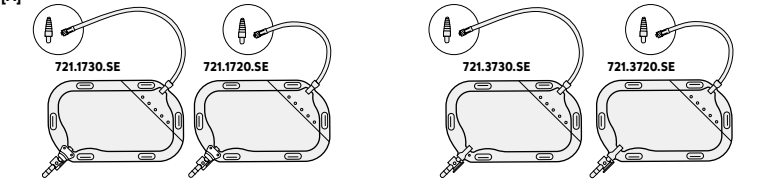


[1]

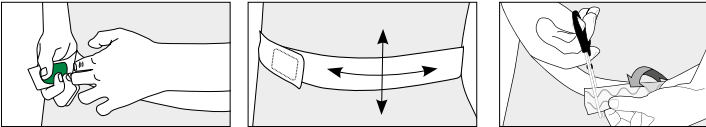


[2]

NephSys Basic

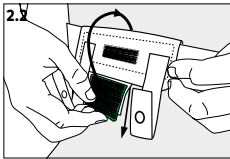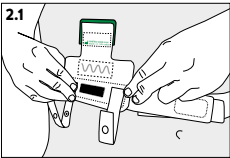


[3]

NephSys Basic


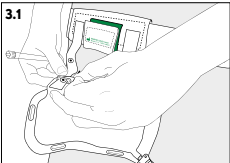


[4]


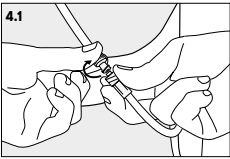


[5]


NephSys Basic

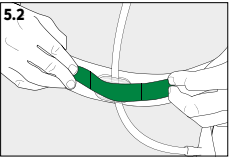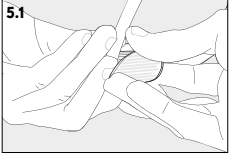


NephSys Comfort

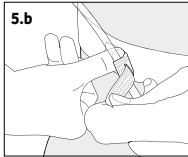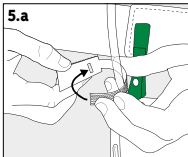

NephSys Comfort

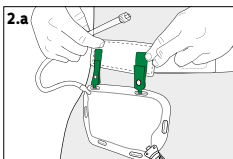

NephSys Comfort

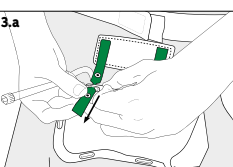

Македонски

SAUER-NephSys-кеса (721.xxxx.SE), стерилен

Информации

Упатство за користење на SAUER-NephSys-производите треба да биде дадено од страна на квалификуван медицински персонал. SAUER-NephSys-кесите се наменети за еднократна употреба. SAUER-NephSys-комплетот е наменет за повеќекратна употреба. Следете ги упатствата за начинот на перене наведени на ознаката на ременот. Рокот на траење на ременот зависи од начинот на индивидуалното користење (поставување/отстранување, перене итн.) Тој генерално изнесува 2-3 месеци. Трговското име и карактеристиките на производот се наведени на етикетата.

Намена и индикации

SAUER-NephSys-комплетот (57.42, 57.43) ремени е дополнителна опрема кон SAUER-NephSys-кесата. SAUER-NephSys комплет ремени се користи за прицврстување на една или две кеса SAUER NephSys на колковите. Во комбинација тие се наменети за собирање урина кај лица кои користат системи за дренажа над половите органи, а особено за катетер на бубрежна фистула.

Ризици и мерки на претпазливост

- SAUER NephSys-кесата не смее а) да се употребува повеќекратно и б) да се употребува доколку е оштетена стерилната бариера, со цел да се намали ризикот од инфекции.
- Неправилната употреба може да предизвика компликации. Застојот на урина, предизвикан, на пример, од превиткана уринарна дренажа, може да предизвика уросепса, состојба која е опасна по живот. Во овој случај, исто како и во случај на инфекции и постојан застој на урина, треба веднаш да контактирате со лекар.
- За намалување на изворите на инфекција, не допирајте ја со раце или на површини површината за спојување на адаптерот на кесата (внатрешната страна кај Luer-Lock-адаптерот, надворешната страна кај степенестиот адаптер). Кратењето на цревето смее да се врши само со претходно дезинфицирани ножици (да се употребува соодветно средство за дезинфекција, на пр. за површини).
- Внимавајте кесата да не е поставена над системот за дренажа, со цел урината да може непречено да истекува (на пр. не над конекторот на катетерот на бубрежната фистула). Да се вршат неколку проверки во текот на денот за да установи дали урината истекува во кесата. Да се избегнува извртување, превиткување или прекинување на доводното црево.
- Со цел да се избегне случајно отварање/олабавување на деловите на ременот, истите треба да се заменат доколку на нив се видливи знаци на истрошеност или оштетувања.
- Да се избегнува затегнување на катетерот. Придржувајте се кон следното:
 - Адаптерот на кесата да се поврзе со конекторот на катетерот без при тоа да има затегнување.
 - Секогаш прво да се прекине врската помеѓу кесата и катетерот, па потоа да се отвори ременот со цел да се избегне ненадејно затегнување на катетерот предизвикан од тежината на кесата.
- Кога ја приклучувате SAUER-NephSys-кесата на соодветна кеса за преку ноќ, внимавајте на тоа испулниот вентил да е отворен и да не се затвори во текот на ноќта. Доколку при употребата на SAUER уринарните кеси дојде до појава на сериозни несакани дејства, за тоа треба да се извести производителот и надлежниот државен орган во државата во која престојувате корисникот.

SAUER-NephSys-кеса вклучен е степенест адаптер (се прикачува), стерилен (Слики [A] видете ја страница 2).

Упатство за употреба (Слики [1] –[5] видете ја страница 2):

За таа цел поставете го ременот со страната на која има силиконски линии на кожата и ременот со лесно затегнување по желба поставете го во пределот меѓу половината и колкот. Внимавајте при тоа тој да е поставен стабилно и да е пријатно чувството при носење! Со ножица може да се скрати делот од ременот кој не е потребен (1.3).

[2]. Поставување на чичак перничето и фиксирање

2.1, 2.a: Чичак перничето прицврстете го на страната на телото на која се наоѓа системот за дренажа, на пр. катетер на бубрежна фистула. За таа цел прицврстете го чичак перничето на ременот како што е прикажано на слика (слика 2.1, 2.a) на средина помеѓу половината и папокот.

2.1, 2.3: Комплет ремени Basic: После прицврстување на чичак перничето (слика 2.1) повлечете го ременот малку од телото и протнете го преклопот на чичак перничето под ременот (слика 2.2). Потоа чичак траката за фиксирање преклопете ја и прицврстете ја на закачената чичак трака на предната страна на чичак перничето (слика 2.3).

2.a: Комплет ремени Comfort: Совет: кај Comfort- варијантата се препорачува прво да се прицврсти кесата на чичак перничето (слика 3.a) па потоа да се прицврсти чичак перничето на ременот (слика 2.a).

[3]. Прицврстување на кесата на чичак перничето

3.1, 3.a: Се препорачува доводното црево да се придржува со една рака со цел да се избегне контакт со површината за спојување на адаптерот. Кесата фиксирајте ја така што испулниот вентил да е свртен кон пределот помеѓу нозете. Протнете ги двата преклопа за прицврстување на чичак перничето низ отворите на ременот на кесата и затворете ги копчињата за притискање.

[4]. Поврзување на кесата на катетерот

4.1: Поврзете го машиот приклучок на Luer-Lock на кесата со женскиот приклучок на Luer-Lock на нефростоматскиот катетер со вртење во правец на стрелките не часовникот.

4.2: За употреба на приложените скалест адаптер, цревето да се скрати со претходно дезинфицирани ножици (да се употребува соодветно средство за дезинфекција, на пр. за површини) до саканата должина (прав рез). Турнете го адаптерот на цревето без да ја допирате површината за поврзување на адаптерот. Отстранете го заштитното капаче од адаптерот. Адаптерот на кесата да се поврзе без влечење со конекторот на катетарот.

[5]. Доводното црево прицврстете го со системот за намалување на затегнување

Со цел да се намали ризикот од извртување на доводното црево или од затегнување кај катетерот, цревето се фиксира на ременот во соодветна позиција со помош на системот за намалување на затегнување.

5.1–5.2: Комплет ремени Basic: Отстранете ги заштитните фолии на лепилото за фиксирање во форма на круг. На местото на кое се вкрстуваат цревето и ременот (слика 5.1), вметнете го цревето меѓу лепливите површини на лепилото за фиксирање во форма на круг и притиснете ги, а потоа прицврстете го лепилото во форма на круг на ременот со помош на чичак трака. Најпосле лепилото за фиксирање во форма на круг фиксирајте го со помош на чичак траката како што е прикажано на слика 5.2.

5.a–c: Комплет ремени Comfort: Каничето за фиксирање протнете го околу доводното црево како што е прикажано на слика 5.a. Широкиот дел на чичак преклопот притиснете го на ременот на местото на кое се вкрстуваат цревето и ременот. (слика 5.b) Чичак преклопот затегнете го така што цревето да не може повеќе да се извлече (не го превиткувајте цревето). Потоа притиснете ја тенката трака на ременот (слика 5.c).

Во текот на ноќта

SAUER-NephSys-кесата може и во текот на ноќта да остане прицврстена на ременот. Но може да е поудобно ако ја отстраните кесата од ременот и безбедно ја поставите во креветот до телото. За зголемена зафатнина во текот на ноќта, SAUER-NephSys-кесата може да се приклучи на соодветна кеса. За таа цел, вметнете спојно црево на испулниот вентил на SAUER-NephSys-кесата и поврзете го со адаптерот на кесата за в кревет. Во овој случај испулниот вентил на кесата мора да остане отворен.

Празнење и промена

За празнење на SAUER-NephSys-кесата, потребно е да се отвори испулниот вентил и урината да се испразни во тоалет или во соодветен сад. Потоа, повторно затворете го вентилот. За промена на кесата, внимателно прекинете ја врската со катетерот без при тоа да ги допрете отворените краеве на приклучоците.

Отстранување

Испразнете ја SAUER-NephSys-кесата пред отстранување и отпремете ја во комуналниот отпад. Системот ремени да се отпрени во домашниот отпад.

MANFRED SAUER GmbH не презема одговорност за штети или повреди кои може да настанат како резултат на несоодветно ракување кое е спротивно на ова упатство за употреба или како резултат на неприменување на упатствата за хигиена.

Ако имате какви било прашања или проблеми, контактирајте со обучени медицински лица или нашите советници за клиенти: MANFRED SAUER GmbH • Neurot 7–15 74931 Lobbach • Germany • +49 6226 960100

REF	Број на артикл
UMB	Да се чува на суво место
STERIL	Да не се стерилизира повторно
QTY	Количина
W	Не е наменет за повеќекратна употреба
CH REP	Овластен швајцарски претставник
STERILE EO	Стерилизација со етиленоксид
ONE	Едноставен стерилен бариерен систем
LOT	Број на шарка
MD 0123	Следете ги упатствата за употреба
CE	СЕ-ознака медицински производ
Y	Употребливо до (година-месец-ден)
NO	Не е наменет за повеќекратна употреба
PZN	Фармацевтски број на регистрација
DT	Тарифа на лекови (каталог на лекови на NHS во Британија)
LPP	Список на производи и услуги
NO	Да не се користи доколку пакувањето е оштетено
W	Датум на производство
FACT	Производител

فارسی

کیسه، استری SAUER-NephSys 721.xxxx.SE

معلومات

راهنمایی در مورد تهیه محصولات SAUER-NephSys باید توسط یک متخصص صورت گیرد.

کیسههای SAUER-NephSys برای یک بار استفاده طراحی شدهاند.

ست کمربند SAUER-NephSys برای چند بار استفاده مناسب است. به دستورالعملهای شستشوی مندرج در برچسب کمربند توجه کنید. دوام کمربند به استفاده شخصی (بستن/باز کردن، شستن و غیره) بستگی دارد. دوام کمربند معمولاً معادل 2 تا 3 ماه است.

نام تجاری و مشخصات عملکرد محصول را میتوان روی برچسب مشاهده کرد.

الغرض ووداعی الاستعمال

مجموعه حزام ساور نیفسیس می ملحقات لکس ساور نیفسیس. ست کمربند (57.42, 57.43) SAUER NephSys برای اتصال یک پا دو کیف SAUER NephSys به باسن استفاده می شود. وتهدف في جعلها إلى جمع البول لدى أشخاص لديهم أنظمة تصريف فوق الأعضاء التناسلية، ولا سيما من قساطر الناسور الكلوي.

المخاطر والمحاذير

- يحظر (أ) تكرار استعمال كيس ساور نیفسیس و (ب) استعماله في حالة تلف الحاجز المعقم، حتى لا يزداد خطر الإصابة.
- يمكن أن يؤدي الاستعمال غير الصحيح إلى مضاعفات. إذ أن احتياض البول، على سبيل المثال بسبب التواء مجرى تصريف البول يمكن أن يؤدي إلى إبتان البول الذي يبعد الحية. وفي هذه الحالة يجب التوجه فوراً إلى الطبيب وهذا الأمر يسري أيضاً في حال حصول إنتقالت أو احتياض مستمر للبول.
- برای کاهش منابع عفونت، لا تلمس سطح التوصيل الخاص بهائئى الكيس و لا تتركه يتلامس مع أسطح أخرى (من الداخل مع شهایی قفل من نوع Luer، من الخارج مع شهایی المذرج، شیلنگ را فقط می توان با قیچی هایی که قبلاً ضد عفونی شده کوتاه کرد (از یک ضد عفونی کننده مناسب، به عنوان مثال برای سطوح استفاده کنید).
- تأكد من عدم وضع الكيس فوق نظام التصريف حتى يمكن تصريف البول با عائق (على سبيل المثال، ليس فوق موصل قسطرة الناسور الكلوي). تحقق عدة مرات يومياً مما إذا كان البول ينساب إلى داخل الكيس. تجنب التواء خرطوم الإدخال أو انضغاطه.
- لتجنب فتح/تفكك مكونات مجموعة الحزام بشكل غير مقصود، يجب استبدالها إذا ظهرت عليها علامات الاهتراء.
- تجنب شد القسطرة. يرجى مراعاة ما يلي:
- توصيل شهایی الكيس بوسيلة القسطرة بدون شد.
- افصل دائماً الوصلة بين الكيس والقسطرة أو لا تقل حجم حزام الخصر ، و ذلك لتجنب السحب المفاجئ للقسطرة بفعل وزن الكيس.
- لدى توصيل كيس ساور نیفسیس بکيس مناسب لفترة الليل، تأكد من أن صنوبر التصريف مفتوح ولأن ينغلق أثناء الليل.

چنانچه در هنگام استفاده از کیسه های جمع اوری ادرار SAUER حادث جدی رخ دهد، در آن صورت باید این حوادث به تولید کننده و اداره مربوطه ایالتی که فرد استفاده کننده در آن اقامت دارد، اطلاع داده شود.

کیسه SAUER-NephSys آداباتور پلدار، فرو کردنی، استری شکل [A] (به صفحه 2 مراجعه کنید).

دستورالعملهای استفاده شکل [1]–[5] (به صفحه 2 مراجعه کنید):

[1] بستن و کوتاه کردن کمربند

- [1] برای این کار سمت دارای خطوط سیلیکونی کمربند را روی پوست قرار دهید و کمربند را با اندکی کشیدن به دلخواه بین کمر و باسن ببندید. به نحوه قرار گیری مطلوب و البته به خصوص محکم آن توجه کنید! با یک قیچی میتوان بخش اضافی کمربند را به دلخواه کوتاه کرد. 1.3
- [2] **قرار دادن و ثابت کردن بد چسبان در جای خود**
2.1: بد چسبان را به آن طرف بدن که سیستم تخلیه، به طور مثال کاتتر فیستول کلیه قرار دارد، متصل کنید. برای این کار بد چسبان را مطابق تصویر (تصویر 1.2 ، 2.1) در وسط بین بغل مفصل ران و ناف روی کمربند نصب کنید.
- 2.1، 2.3 **ست کمربند پایه:** پس از نصب بد چسبان (تصویر 1.2) کمربند را با کشیدن کمی از بدن جدا کرده و حلقه بد چسبان را زیر کمربند و به دور آن هدایت فشار دهید. (تصویر 2.2) سپس بند قلاب ثابت کننده را برگردانید و روی بند قلاب رو دوزی شده در چسبان نصب کنید (تصویر 3.2).
- 2.2 **ست کمربند راحتی:** نکته: در انواع راحتی توصیه میشود که ابتدا کیسه را به بد چسبان متصل کنید (تصویر 2.3) و سپس بد چسبان را به کمربند متصل کنید (تصویر 2.2).

[3] اتصال کیسه به بد چسبان

- 3.1، 3.2: توصیه میشود شیلنگ ورودی را با یک دست محکم نگه دارید تا از تماس آن با سطح اتصال قطعه مبدل جلوگیری کنید. کیسه را طوری ثابت کنید که تیر خروجی در جهت قاق شلوار باشد. دو حلقه نگهدارنده بد چسبان را از حلقههای کمربند کیسه رد کرده و دکمههای فشاری را ببندید.

[4] اتصال کیسه به کاتتر

- 4.1: با چرخش در جهت عقربه‌های ساعت، کاتکتور قفل لوئر در روی کیسه را به کاتکتور قفل لوئر ماده روی کاتر نفروستومی وصل کنید.
- 4.2: برای استفاده از قطعه مبدل در جدار ارائه شده، شیلنگ را با استفاده از قیچی که قبلاً ضد عفونی کرده اید، به طول دلخواه کوتاه کنید (برش مستقیم) (از یک ضد عفونی کننده مناسب، به عنوان مثال برای سطوح استفاده کنید). آداباتور را بدون تماس با سطح اتصال آداباتور روی شلنگ فشار دهید. درویش محافظ را از آداباتور بردارید. قطعه مبدل کیسه را بدون کشیدن به رابط کاتتر متصل کنید.

[5] شیلنگ ورودی را با کاهش دهنده فشار ایمن کنید

برای کاهش خطر پیچ خوردن شیلنگ ورودی یا کشیده شدن کاتتر، شیلنگ به کمک کاهش دهنده فشار به کمربند در یک وضعیت مناسب ثابت میشود.

- 5.1-5.2 **ست کمربند پایه:** لایههای محافظ نقطه چسبیده ثابت کننده را از آن جدا کنید. در محلی که شیلنگ و کمربند با یکدیگر تلاقی دارند، شیلنگ را بین سطوح چسبیده نقطه چسبیده ثابت کننده هدایت کنید، آنها را به یکدیگر فشار دهید و نقطه چسبیده را روی کمربند بچسبانید. در نهایت نقطه چسبیده ثابت کننده را با کمک بند قلاب ثابت کننده مانند تصویر 2.5 ثابت کنید.

- 5.3-5.4 **مجموعه الحزام** کمومورت ارتباط لسان التثبیت حول خرطوم الإدخال كما هو موضح بالشکل 5.5. اضغط الجزء العريض من لسان الفيلكرو على حزام الخصر عند نقطة تقاطع الخرطوم مع حزام الخصر b.5. ثبت لسان الفيلكرو بحيث لا يمكن أن ينسحب الخرطوم إلى الخارج (و لا يلتوي الخرطوم). ثم اضغط على الشريط الرفيق على الحزام c.5.

أثناء الليل

يمكن أيضاً استمرار تثبيت كيس ساور نیفسیس على الحزام أثناء الليل. و لكن قد يكون من المريح أكثر فصل الكيس عن الحزام و وضعه بشكل آمن على السرير بجوار الجسم. يمكن توصيل كيس ساور نیفسیس بکيس مناسب لاستيعاب الزيادة في الكمية ليلاً. ولعمل ذلك، أرح الخرطوم التآزني في اتجاه صنوبر الإخراج الموجود على كيس ساور نیفسیس، ثم قم بتوصيله بهائئى كيس جمع البول للتراش. يجب في هذه الحالة أن يظل صنوبر الإخراج بالكيس مفتوحاً.

التفريع والاستبدال

لتفريع كيس ساور نیفسیس، افتح صنوبر الإخراج لتصريف البول في مراحض أو في وعاء مناسب. ثم أغلق الصنوبر مرة أخرى. ولاستبدال الكيس، افصل وصلة القسطرة بجنز دون لمس أطراف الوصلات المفتوحة.

التخلص من المنتج


أفرغ كيس ساور نیفسیس قبل التخلص منه، و التخلص منه يكون مع بقايا النفايات (النفايات غير القابلة للتدوير). التخلص من حزام الخصر يكون مع النفايات المنزلية.

شرکت MANFRED SAUER GmbH بابت خسارات یا صدماتی که ممکن است به دلیل استفاده نادرست برخلاف این دستورالعمل استفاده یا عدم به کارگیری دستور العمل های بهداشتی ایجاد شوند، هیچ گونه مسئولیتی تقبل نمیکند.


يرجى التواصل مع الطاقم الطبي المتخصص أو خدمة العملاء لدينا إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل:

MANFRED SAUER GmbH • Neurott 7–15 • 74931 Lobbach • Germany • +49 6226 960100


[A]

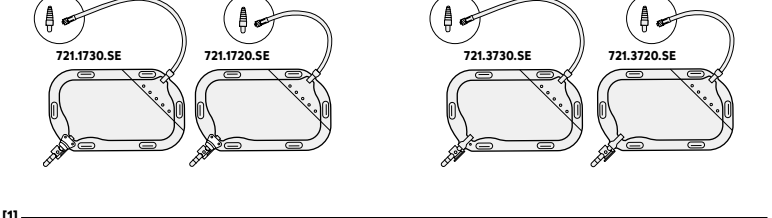

[1]

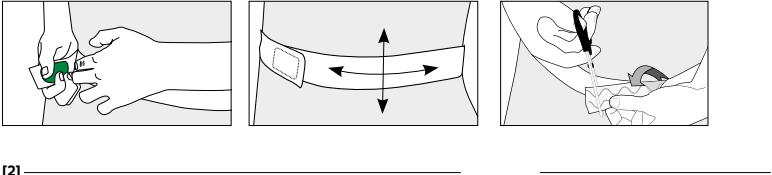


[2]

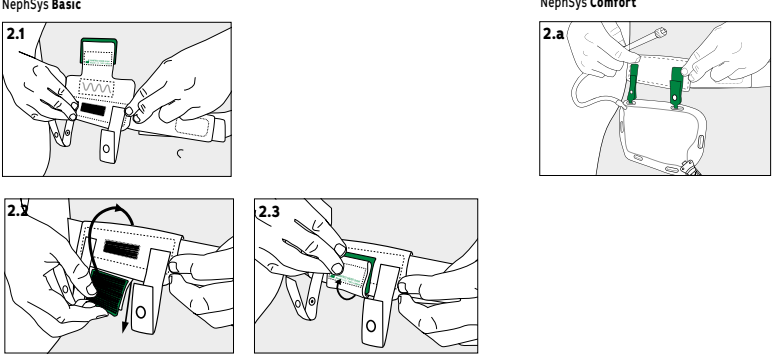


[3]



[4]

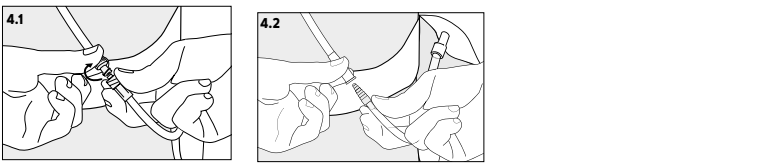

[5]

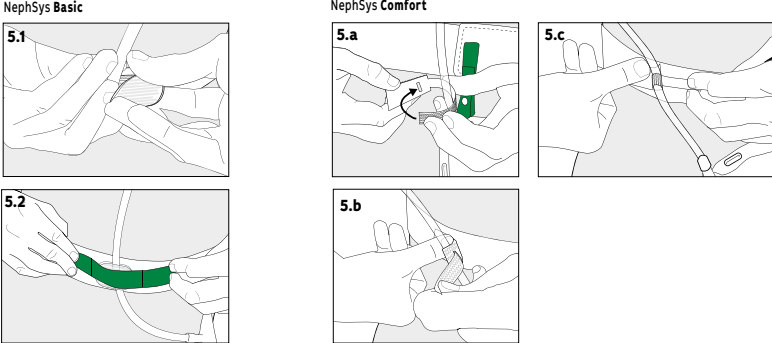

شماره کاتالوک

به صورت خشک نگهداری کنید

از استریل کردن مجدد کیسه خودداری کنید

تعداد

دور از نور خورشید نگهداری کنید

استریل سازی با اکسید اتیلان

مندوب سویسری مفوض

سیستم مانع استریل ساده

شماره سری ساخت

دستورالعمل استفاده را رعایت کنید

نشان CE محصول پزشکی

قابل استفاده تا (سال-ماموروز)

قابل استفاده مجدد نیست

شماره ثبت دارویی

نرخ دارو (UK)


فهرست محصولات و خدمات

در صورت خراب بودن بسته بندی از کیسه استفاده نکنید


تاریخ تولید

تولید کننده

NephSys Comfort

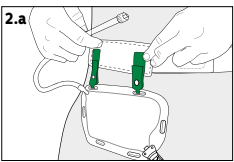

NephSys Comfort

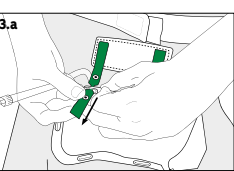

كيس ساور نيفسيس، معقم (721.xxxx.SE)

اطلاعات

يُذيعي أن يتم شرح إرشادات استعمال منتجات ساور نيفسيس من قبل متخصص.

أكياس ساور نيفسيس مخصصة للاستعمال مرة واحدة فقط.
أما حزام ساور نيفسيس فيُصنع للاستعمال عدة مرات. يرجى مراعاة إرشادات الغسل المُنوَّنة على ملصق الحزام. تتوفّر فترة صلاحية الحزام على طريقة استعمال الفرد وتختلف من شخص لآخر (ارتداء/خلع، غسل، إلخ.) و هي ما يتوافق عادةً مع مدة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر.

يمكن معرفة الاسم التجاري وخصائص أداء المنتج من الملصق.

الغرض وخواعي الاستعمال

مجموعة حزام ساور نيفسيس هي ملحقات لكيس ساور نيفسيس. تُستخدم مجموعة أحزمة SAUER NephSys (57.43, 57.42) لربط كيس واحد أو كيسيْن من أكياس SAUER NephSys بالوركين. وتهدف في مجملها إلى جمع البول لدى أشخاص لديهم أنظمة تصريف فوق الأعضاء التناسلية، ولا سيما من قسااطر الناسور الكلاوي.

المخاطر والمحاذير


- يحظر (أ) تكرار استعمال كيس ساور نيفسيس و (ب) استعماله في حالة تلف الحاجز المعقم، حتى لا يزداد خطر الإصابة.
- يمكن أن يؤدي الاستعمال غير الصحيح إلى مضاعفات. إذ إن احتباس البول، على سبيل المثال بسبب التواء مجرى تصريف البول يمكن أن يؤدي إلى إلتان البول الذي يهدد الحياة. وفي هذه الحالة يجب التوجه فوراً إلى الطبيب وهذا الأمر يسري أيضاً في حال حصول إنتفاخ أو احتباس مستمر للبول.
- لتقليل مصادر العدوى، لا تلمس سطح التوصيل الخاص بمُهَيَّئِ الكيس ولا تتركه يتلامس مع أسطح أخرى (من الداخل مع مُهَيَّئِ قفل من نوع Luer، من الخارج مع المُهَيَّئِ الفذّاز). لا يُسمح بتغيير الخرطوم أو باستخدام مقص تم تطهيره مسبقاً (استخدم مطهرة مناسبة، مثلاً، مطهر الأسطح).
- تأكد من عدم وضع الكيس فوق نظام التصريف حتى يمكن تصريف البول بلا عائق (على سبيل المثال، ليس فوق موصل قسطرة الناسور الكلاوي). تجنب التواء خرطوم الإلخال أو انتشاء أو انضغاطه. لتجنب فتح/تفكك مكونات مجموعة الحزام بشكل غير مقصود، يجب استبدالها إذا ظهرت عليها علامات الإفترء.
- تجنّب شد القسطرة. يرجى مراعاة ما يلي:
- توصيل مُهَيَّئِ الكيس بوصله القسطرة بدون شد.
- أفضل دائماً الوصلة بين الكيس والقسطرة أو لا قبل فتح حزام الخصر، و ذلك لتجنب السحب المفاجئ للقسطرة ويقل وزن الكيس.
- لدى توصيل كيس ساور نيفسيس بكيس مناسب لفترة الليل، تأكد من أن صنوبر التصريف مفتوح ولن يتغلق أثناء الليل.
- يجب على المستخدم إبلاغ الشركة المصنعة والجهة المختصة في البلد المقيم فيها بأية حوادث خطيرة تقع عند استخدام أكياس البول الخاصة بشركة "زاور".

كيس ساور نيفسيس، مهَيَّئِ مدرج، قابل للتريكب، معقم الصورة [A] (انظر الصفحة 2).


تنبيهات الاستعمال الصورة [1] – [5] (انظر الصفحة 2):

رقم الكatalog	REF
تُحفظ في مكان جاف	☔
لا تعقم الكيس مرة أخرى	🚫
عدد القطع	📦
تُخزّن بعيداً عن ضوء الشمس	☀️
التعقيم بالكسيد الإيثيلين	STERILE EO
نظام حاجز معقم بسيط	○
مندوب سويسري مفوض	CH REP
رقم الصفحة	LOT
تجب مراعاة إرشادات الاستخدام	📖
منتج طبي بعلامة الجودة الأوروبية	CE MD 0123
الصلحية حتى (يوم-شهر-عام)	🕒
ليست مخصصة لإعادة الاستخدام	🚫
الرقم الدوائي المركزي	PZN
التعريفية الدوائية (UK)	DT
قائمة المنتجات والخدمات	LPP
لا تستخدم الكيس إذا كانت عيوته تالفة	🚫
تاريخ الصنع	📅
الجهة المصنعة	🏭

[A]

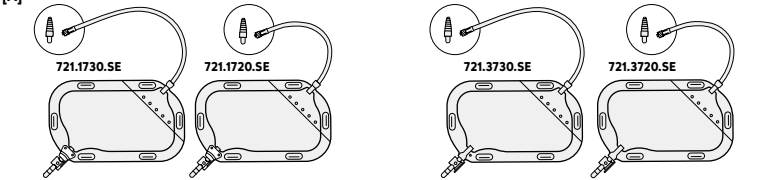


[1]

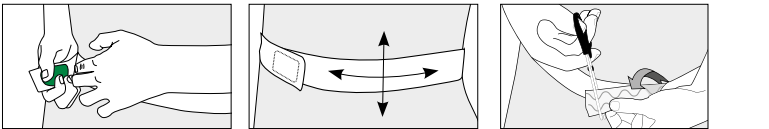


[2]

NephSys Basic

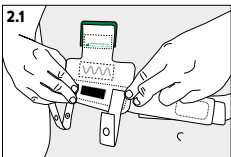


2.1

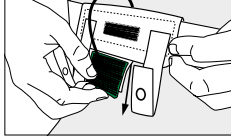


[3]

NephSys Basic

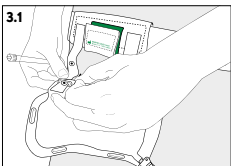


[4]

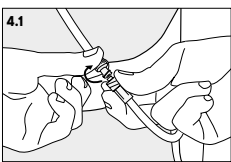


[5]

NephSys Basic

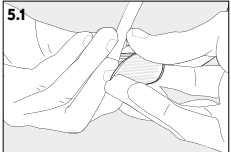


5.1

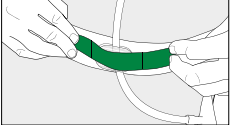

5.2


NephSys Comfort

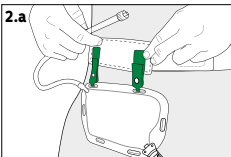

2.a




NephSys Comfort

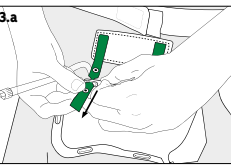

3.a



3.b

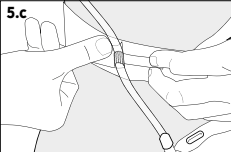


3.c




3.d

NephSys Comfort

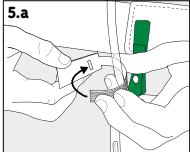

5.a

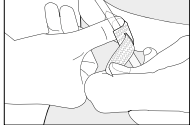

5.b

[5] آمَنَ خرطوم الإلخال من خلال تخفيف الشد

لتقليل مخاطر التواء خرطوم الإلخال أو شد القسطرة، يتم تثبيت الخرطوم في وضع مناسب من خلال تخفيف الشد على حزام الخصر.

5.1- مجموعة الحزام الأساسية: أزل واقتطع قطعة من الحزام الذي يتقاطع فيه الخرطوم وحزام 1.5 الخصر، ووجه الخرطوم بين الأسطح اللاصقة لموضع التثبيت اللاصق، واضغط عليها جميعاً وثبت الموضع اللاصق على حزام الخصر. ثبتت في النهاية موضع التثبيت اللاصق باستخدام شريط خفاف التثبيت كما هو موضح بالشكل 2.5.

5.2- ست كمريند راحتي: حلقه ثابت كنده را مطابق تصوير 5.a. از شيلنگ ورودی رد کنید. قسمت پهن حلقه چسبان روی کمريند را در محلی که شيلنگ و کمريند با یکدیگر تلاقی دارند، فشار دهید. حلقه چسبان را 5.b طوری محکم بکشید که شيلنگ دیگر قابل دارودن نباشد (شيلنگ را نمودن نکنید). سپس نوار پارک روی کمريند را فشار دهید 5.c.

در هنگام شب

کيسه SAUER NephSys را ميتوان در شب نیز به کمريند متصل نگه داشت. البته ممکن است اين کار راحت تر باشد که کيسه را از کمريند جدا کنید و در کنار بدن به صورت ايمن در تختخواب قرار دهید. برای افزایش ظرفيت در شب ميتوان کيسه SAUER NephSys را به یک کيسه مناسب متصل کرد. برای اين کار شيلنگ رابط را روی شير خروجی کيسه SAUER NephSys هل دهید و به قطعه متصل کيسه ويژه تختخواب متصل کنید. در اين حالت باید شير خروجی کيسه باز بماند.

تخليه و تعويض

جهت تخليه کيسه SAUER NephSys شير خروجی ا باز کنید و اندر را در سرويس بهداشتی يا یک ظرف مناسب بريزيد. سپس دوباره شير را ببنديد.

جهت تعويض کيسه، اتصال به کلتور را با احتياط بدون لمس سرهای آزاد اتصالات قطع کنید

دور انداختن
کيسه SAUER NephSys را قبل از دور انداختن تخليه کنید و در سطل مواد غير قابل بازیافت دور بيندازيد. سيستم کمريند را در سطل زباله خانگی دور بيندازيد. من حزام الخصر بكون مع التفات المنزلية.

لا تتحمل شركة مانفريد زاور ش.ذ.م.ب. (Manfred Sauer GmbH) أية مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات التي قد تنجم عن التعامل غير السليم مع أكياس البول بما يتعارض مع تعليمات الاستخدام هذه أو عن عدم الامتثال للتوجيهات والتعليمات الصحية.

يرجى التواصل مع الطاقم الطبي المتخصص أو خدمة العملاء لدينا إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل:

MANFRED SAUER GmbH • Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany • +49 6226 960100