



Gebrauchsanweisung	Deutsch	2
Instructions for use	English	4
Notice d'utilisation	Français	6
Istruzioni per l'uso	Italiano	8
Gebruiksaanwijzing	Nederlands	10
Bruksanvisning	Svenska	12
Brugsanvisning	Dansk	14
Käyttöohje	Suomi	16
Bruksanvisning	Norsk	18
Kasutusjuhised	Eesti	20
Instrucciones de uso	Español	22
Instruções de utilização	Português	24
Οδηγίες χρήστης	Ελληνική	26
Használati utasítás	Magyar	28
Instrukcja użytkowania	Polski	30
Návod k použití	Čeština	32
Instrucțiuni de utilizare	Română	34
Инструкция за употреба	Български	36
Navodila za uporabo	Slovenščina	38
Upute za uporabu	Hrvatski	40
Upustvo za upotrebu	Српски/Srpski	42
Upustvo za upotrebu	Bosanski	44
Упатство за употреба	Македонски	46
دستور العمل استفاده	فارسی	48
قسطرة التبؤل الخارجي ذاتية الالتصاق	العربية	50

Deutsch

Gel-Einmalkatheter für den ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus)

- Gebrauchsfertig
- Katheter mit 2 funktionellen Bereichen (Kugelkopf und Führungszone)
- Funktionsverpackung für variable Anwendung
- Gesamtlänge: ca. 430 mm, Länge ohne Konnektor: ca. 400 mm
- 4 Größen: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Anwendergruppe: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Männer

Zweckbestimmung:

Der IQ-Cath ist für die einmalige und vorübergehende Urin-Ableitung aus der Harnblase zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken bei vorliegenden Blasenentleerungsstörungen bestimmt. Es kann eine einmalige oder intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) oder Fremdkatheterisierung (IFK) durchgeführt werden.

Indikation:

Die Indikation für den ISK oder IFK wird nach entsprechender Diagnostik und abhängig von der individuellen Situation des Betroffenen gestellt.

Der IQ-Cath ist für den Katheterismus bei folgenden Indikationen geeignet: Blasenentleerungsstörungen unterschiedlicher Genese (z. B. neurogen), Detrusorunteraktivität bzw Detrusorkontraktilität, chronische Harnretention, unphysiologische Entleerung der Blase (Pressmiktion) mit und ohne Restharn.

Kontraindikation:

Der IQ-Cath kann beim Auftreten folgender Probleme nicht geeignet sein. In diesen Fällen muss auf jeden Fall vor der Anwendung ein Arzt kontaktiert werden: Verletzung der Harnröhre, Harnröhrenblutung, akute Entzündung der Harnröhre oder der Prostata, Passagehindernisse (z.B. Tumore) in der Harnröhre, am Harnröhrenschließmuskel oder der Prostata.

Anwendungshinweise:

Die erstmalige Anwendung sollte unter fachlicher Anleitung erfolgen.

Sollte innerhalb der Verpackung bereits Flüssigkeit aus dem Gelkissen ausgetreten sein, darf der Katheter nicht mehr verwendet werden.

Gelegentlich kann es bei Gelkathetern nach dem Einführen zu leichten Verzögerungen kommen, bis Urin zu fließen beginnt.

Risiken und Warnhinweise:

Bei der Verwendung von Kathetern (v.a. bei unsachgemäßer Anwendung) kann es zu einer Reizung/Infektion oder Verletzung der ableitenden Harnwege kommen. In diesem Fall ist ärztlicher Rat einzuhören.

Bei unsachgemäßer Anwendung könnte Restharn in der Blase verbleiben. Der Katheter ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung erhöht das Infektionsrisiko. Nicht ohne geeignetes steriles Gleitgel verwenden, da nicht gleitfähig. Nicht verwenden bei beschädigter Steril-Verpackung oder bei beschädigtem Katheter, da Infektionsrisiko. Wir empfehlen eine Anwendungstemperatur von 15–25 °C.

Sollten bei der Verwendung von IQ-Cath Einmalkathetern schwerwiegende Vorfälle auftreten, so sind diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes zu melden, in dem der Anwender niedergelassen ist.



Artikelnummer

Seriennummer

Trocken aufbewahren

Oben

Nicht erneut sterilisieren

Stückzahl

Vor Sonnenlicht
geschützt aufbewahren

Sterilisation mit Ethylenoxid

Einfaches Sterilbarrieresystem

Einfaches Sterilbarrieresystem mit
außen liegender Schutzverpackung

Chargennummer

Gebrauchsanweisung beachten



0123

CE-Kennzeichnung Medizinprodukt



Verwendbar bis (Jahr-Monat-Tag)



Nicht zur Wiederverwendung



Pharmazentralnummer



Drug tariff (Katalog erstattungsfähiger
Arzneimittel des britischen NHS)



Liste der Produkte und Dienstleistungen



Bei beschädigter Verpackung
nicht verwenden



Herstell datum




Hersteller



Schweizer Bevollmächtigter




Importeur

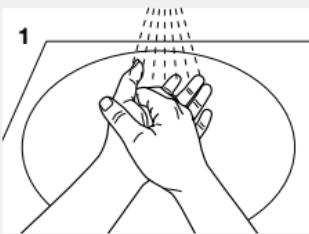


Vor der Anwendung die Hände gründlich waschen und desinfizieren.

Den gesamten Katheter (außer Konnektor) nicht direkt berühren. Als Greifhilfe die Funktionsverpackung verwenden.

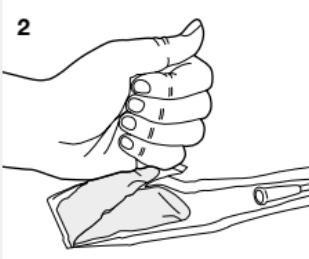


Das Gelkissen durch Knicken und Drücken öffnen. Den gesamten Inhalt in die Funktionsverpackung entleeren.

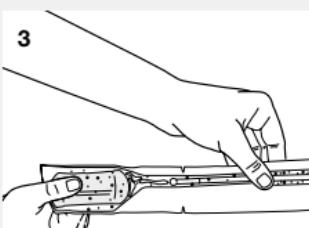


Das sterile Gleitgel in die Funktionsverpackung füllen und durch Verstreichen auf dem gesamten Katheter (außer Konnektor) verteilen.

Den vorderen Teil der Funktionsverpackung mit dem Gelkissen einreißen und mit einem Ruck abtrennen.

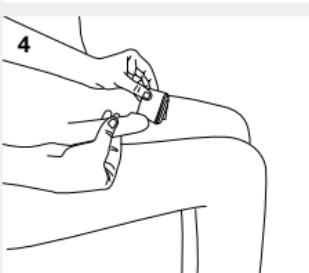


Die Harnröhrenöffnung und den Bereich darum mit einem geeigneten Schleimhautdesinfektionsmittel desinfizieren (Anweisungen des Herstellers des Desinfektionsmittels beachten).

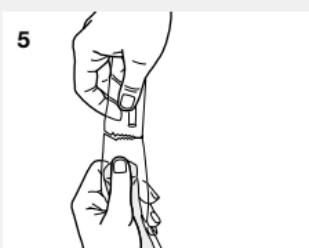


Die Funktionsverpackung am hinteren Ende öffnen. Sollte der Katheter in der Verpackung stecken bleiben, den Katheter langsam herausdrehen.

Bei Bedarf den Katheter mit einem Urin-Auffangbeutel verbinden.

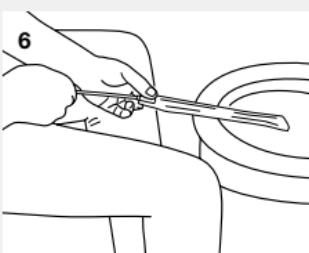

Die Funktionsverpackung kann als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu den Katheter so weit nach vorne schieben, bis der Konnektor abdichtet.

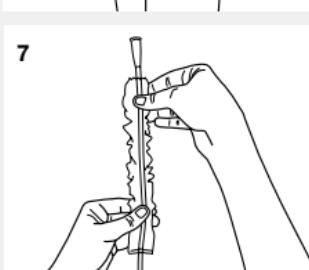

Den Katheter vorsichtig in die Harnröhre einführen, bis der Urin abläuft. Wenn kein Urin mehr fließt, den Katheter langsam herausziehen.

Den Katheter mit dem Restmüll entsorgen.

Die Manfred Sauer GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemäßer Handhabung entgegen dieser Gebrauchsanweisung oder der Nichtanwendung der hygienischen Richtlinien ergeben können.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal oder an unsere Kundenberater.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 100 · info@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

English

Single use gel catheter for ISC (Intermittent self-catheterisation)

- Ready for use
- The catheter with 2 functional zones (rounded tip and guiding zone)
- Functional packaging for variable use
- Total length: ca. 430 mm, Length without funnel: ca. 400 mm
- 4 sizes: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Group of Users: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Men

Intended use:

The IQ-Cath is a single use product designed for temporary drainage of urine from the urinary bladder in a person with bladder voiding dysfunction for therapeutic or diagnostic purposes. It is suitable for intermittent self-catheterisation (ISC) or carer-assisted clean intermittent catheterisation (CIC).

Indication:

The indication for ISC or CIC is made following relevant diagnostic tests and is dependent on the individual's situation.

The IQ-Cath is suitable for catheterisation in the following situations: bladder voiding dysfunction of various origins (e.g. neurogenic), underactive detrusor or acontractile detrusor, chronic urinary retention, abnormal micturition (straining) with or without residual urine.

Contraindication:

The IQ-Cath may be unsuitable in the following cases, and a health care professional must be consulted before use: injury of the urethra, bleeding of the urethra, acute inflammation of the urethra or prostate, obstructions (e.g. tumours) in the urethra, at the sphincter or at the prostate blocking passage.

Instructions for use:

The first use should be supervised by a professional.

If liquid has already leaked from the gel sachet into the packaging, the catheter may no longer be used.

With gel catheters, there may sometimes be a slight delay after insertion before the urine begins to flow.

Risks and Cautions:

The use of catheters (especially improper use) may cause irritation/infection of the urinary tract. You must seek medical attention if this occurs.


Improper use may cause residual urine to remain in the bladder. This catheter is intended for single use only. The risk of infection increases if the catheter is reused or reprocessed. Do not use without suitable sterile lubricating gel as it is not lubricated. Do not use if the sterile packaging or the catheter is damaged as there is a risk of infection. We recommend an operating temperature range of 15–25°C.

Any serious adverse event occurring during use of IQ-Cath must be reported to the manufacturer and the competent authority of the user's country of residence.




- | | |
|---|------------------------------|
| Article number | REF |
| Serial number | SN |
| Store in a dry place | umbrella |
| This way up | double arrows |
| Do not resterilise | crossed-out sterilize |
| Quantity | film strip |
| Keep away from sunlight | sun |
| Sterilised with ethylene oxide | empty oval |
| Single sterile barrier system | single barrier system |
| Single sterile barrier system with protective packaging outside | protective packaging outside |
| Batch number | lot |
| Observe instructions for use | flag |


- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| CE ^{MD} 0123 | CE marked medical device |
| square with a cross (X) | Use by (year-month-day) |
| circle with a diagonal line (X) | Not for reuse |
| PZN | Pharmaceutical central no. |
| DT | Drug Tariff |
| LPP | List of products and services |
| cube with a diagonal line (X) | Do not use if package is damaged |
| wavy line (Date of manufacture) | Date of manufacture |
| wavy line (Manufacturer) | Manufacturer |
| CH REP | Swiss authorised representative |
| globe icon | Importer |

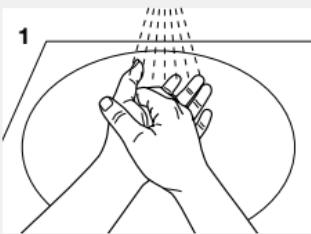


Before use, wash hands thoroughly and disinfect them. Avoid touching any part of the catheter surface (except for the funnel) directly. You can use the functional packaging as gripping aid.

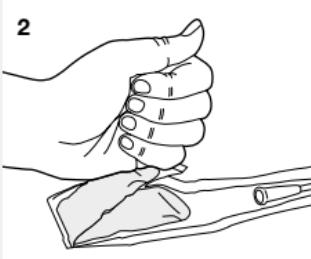


Open the gel sachet by folding and squeezing. Make sure the whole content of the sachet is emptied into the packaging.

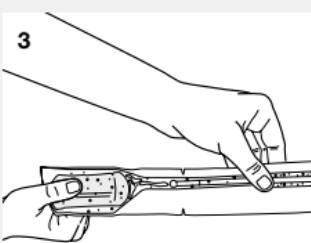


Spread the sterile lubricating gel along the full length of the catheter (except for the funnel) to make sure all of the surface is coated with gel.
Use tear marks at the front end to open the functional packaging and then tear off with a jerk including the gel sachet.

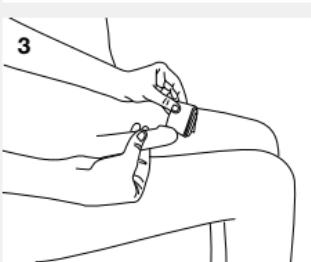


Clean the opening of the urethra and the surrounding area with a disinfectant suitable for mucous membranes (observing the instructions of the manufacturer of the disinfectant).

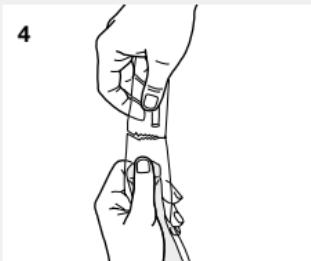

Open the packaging at the back end.
If the catheters sticks to the packaging please pull out twisting it slowly at the same time.
Attach a urine bag to the catheter if necessary.

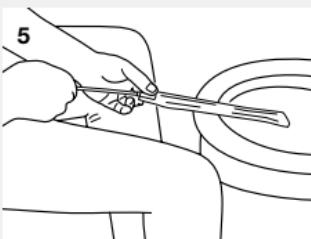

The packaging can be used as an extension for draining the urine directly into the toilet. Move the funnel towards the front to seal the packet.

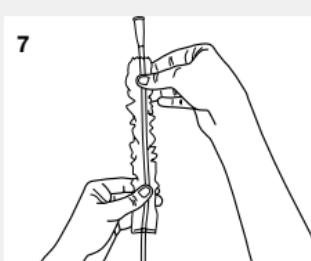

Gently insert the catheter into the urethra until the urine begins to flow. When the urine stops flowing, pull the catheter out slowly.

Dispose of the catheter according to local authority guidelines.

MANFRED SAUER GmbH does not accept responsibility for damages or injuries that may result from improper handling contrary to these instructions for use or from neglecting the hygiene guidelines.

Should you have any questions or problems, please turn to a medical professional or to our customer adviser.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Français

Sonde à usage unique pour l'autosondage intermittent à utiliser avec gel

- Prête à l'emploi
- La sonde avec 2 zones fonctionnelles (tête sphérique et zone d'introduction)
- Emballage fonctionnel utilisation variable
- Longueur totale 430 mm, Longueur sans connecteur: env. 400 mm
- 4 tailles: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Groupe d'usagers : IQ3104.xx, IQ3114.xx – Hommes

Usage auquel le dispositif médical est destiné :

la sonde IQ-Cath est destinée au drainage unique et temporaire de l'urine à des fins thérapeutiques ou diagnostiques en cas de troubles de la miction. Elle peut être utilisée pour effectuer un autosondage ou un hétérosondage unique ou intermittent.

Indication :

l'indication d'autosondage ou d'hétérosondage est posée à la suite de mesures diagnostiques correspondantes et en fonction de la situation individuelle du patient.

La sonde IQ-Cath est adaptée pour effectuer un sondage dans les indications suivantes : troubles de la miction d'étiologies diverses (par ex. neurogènes), hypoactivité ou acontractilité détrusorienne, rétention urinaire chronique, miction non physiologique (miction par poussée) avec ou sans résidu postmictionnel.

Contre-indications :

l'utilisation de la sonde IQ-Cath peut ne pas être appropriée en cas d'apparition des problèmes mentionnés ci-dessous. Dans ces cas, il convient en tout état de cause de contacter un médecin avant l'utilisation : blessure de l'urètre, saignement de l'urètre, inflammation aigüe de l'urètre ou de la prostate, obstructions (par ex. tumeurs) dans l'urètre, au niveau du sphincter de la vessie ou de la prostate qui bloquent le passage.

Instructions d'utilisation :

La première utilisation doit avoir lieu sous la supervision d'un professionnel.


Si l'emballage contient du liquide échappé du coussin de gel, la sonde ne doit plus être utilisée. Parfois, les sondes avec gel peuvent retarder légèrement l'écoulement de l'urine après insertion.

Risques et mises en garde :


l'usage de sondes (notamment en cas d'utilisation incorrecte) peut entraîner une irritation/infection ou une lésion des voies urinaires drainées. Dans un tel cas, il convient de demander conseil à un médecin.

Un résidu postmictionnel pourrait subsister dans la vessie en cas d'utilisation inappropriée. La sonde est destinée à un usage unique. La réutilisation ou le retraitement augmente le risque d'infection. Ne pas utiliser sans gel lubrifiant stérile et approprié à cet usage, car la sonde ne coulisse pas. Ne pas utiliser si la sonde ou l'emballage stérile est endommagé, car il existe un risque d'infection. Nous recommandons une température d'utilisation entre 15 et 25 °C. La survenue d'incidents sévères lors de l'utilisation des sondes à usage unique « IQ-Cath » doit être signalée au fabricant et aux autorités compétentes du pays dans lequel l'utilisateur réside.


	Référence		Dispositif médical marqué CE
	Numéro de série		Date de péremption (année-mois-jour)
	Conserver au sec		Ne pas réutiliser
	Ce côté vers le haut		Code identifiant de présentation
	Ne pas stériliser une nouvelle fois		Prix du médicament (catalogue des médicaments remboursables par le NHS)
	Quantité		Liste des produits et prestations
	Tenir à l'abri de la lumière du soleil		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Sterilised with ethylene oxide		Date de fabrication
	Système de barrière stérile unique		Fabricant
	Système de barrière stérile unique avec emballage protecteur à l'extérieur		Représentant autorisé suisse
	Numéro de lot		Importateur
	Respecter la notice d'utilisation		

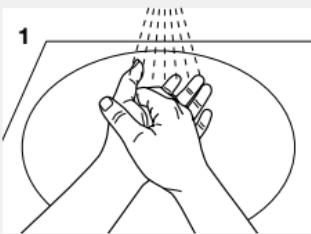


Bien se laver et désinfecter les mains avant l'usage.
Pendant le sondage, veiller à tenir la sonde à travers
l'emballage fonctionnel et éviter de la toucher directement
(sauf pour le connecteur).

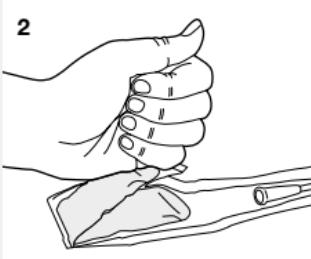


Ouvrez le coussin de gel en appuyant dessus ou en le
déroulant. Videz tout le contenu dans l'emballage.

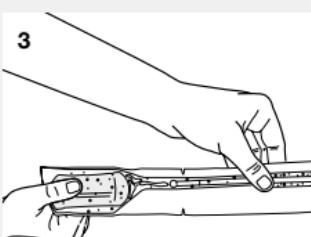


Répartissez-le gel lubrifiant stérile dans l'emballage et
sur toute la sonde (sauf pour le connecteur).
Ouvrir l'emballage en avant en utilisant la marque de
déchirement et détachez avec le coussin de lubrifiant
et puis détachez avec un coup sec.

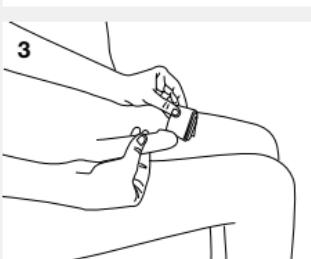


Désinfecter le méat urinaire et ses alentours avec un
désinfectant approprié aux muqueuses en suivant les
recommandations du fabricant du désinfectant.

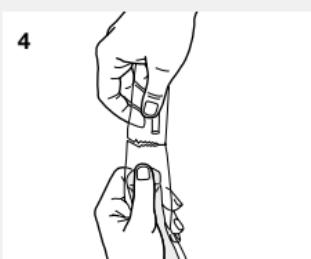

Ouvrez l'emballage à l'extrémité postérieure.
Si la sonde colle à l'emballage veuillez tourner la sonde
et plus tirez.
Branchez le tuyau au connecteur lors de l'utilisation d'une
poche urinaire.

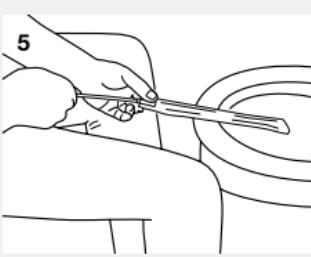

L'emballage fonctionnel peut être utilisé comme rallonge
pour l'évacuation de l'urine dans les toilettes. Pour
cela, poussez la sonde vers l'avant jusqu'à ce que le
connecteur se bouche.

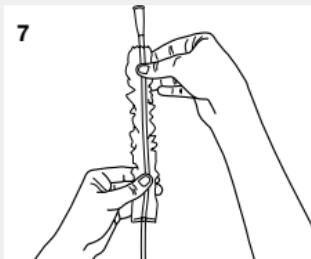

Introduire la sonde avec précaution dans l'urètre jusqu'à
écoulement de l'urine. Retirer la sonde lentement de
l'urètre quand l'urine cesse de couler.

Jeter la sonde comme indiqué dans les directives locales.

MANFRED SAUER GmbH n'assume
aucune responsabilité en cas de dom-
mages ou de blessures dus à la ma-
nipulation non conforme à la présente
notice d'utilisation ou au non-respect
des directives d'hygiène.

**Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez vous
adresser à des professionnels de la santé ou à notre service
clientèle.**



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Italiano

Catetere monouso al gel per l'autocateterismo intermittente

- Pronto all'uso
- Catetere con 2 zone funzionali (testa arrotondata e zona guida)
- Imballaggio funzionale per impiego variabile
- Lunghezza totale: ca. 430 mm, Lunghezza senza connettore: ca. 400 mm
- 4 misure: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Gruppo di utenti: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Uomini

Destinazione d'uso:

IQ-Cath è destinato ad un singolo drenaggio temporaneo dell'urina dalla vescica a scopo terapeutico o diagnostico in caso di disturbi della minzione. È possibile eseguire un autocateterismo singolo intermittente o un cateterismo assistito intermittente.

Indicazione:

L'indicazione per l'autocateterismo intermittente o il cateterismo assistito intermittente viene determinata dopo un'adeguata diagnosi e in base alla situazione individuale della persona interessata.

Il catetere IQ-Cath è adatto al cateterismo nelle seguenti indicazioni: disturbi di svuotamento della vescica di genesi diversa (ad es. neurogenici), sottoattività del detrusore o acontrattilità del detrusore, ritenzione urinaria cronica, svuotamento non fisiologico della vescica (minzione con sforzo) con e senza residui di urina.

Controindicazione:

L'IQ-Cath può non essere adatto se si verificano i seguenti problemi. In questi casi è assolutamente necessario consultare un medico prima dell'uso: lesione all'uretra, emorragia dell'uretra, infiammazione acuta dell'uretra o della prostata, ostruzione (ad es. tumori) nell'uretra, nello sfintere uretrale o nella prostata che blocca il passaggio.

Istruzioni per l'uso:

Il primo utilizzo del prodotto dovrà essere effettuato nel rispetto delle istruzioni tecniche per l'uso.

Il catetere, qualora all'interno della confezione dovesse essere già fuoriuscito del liquido cuscinetto in gel, non potrà essere più utilizzato. Nei cateteri a gel potranno occasionalmente verificarsi, dopo l'introduzione, leggeri ritardi prima che l'urina inizi a fluire.


Rischi e avvertimenti:

L'uso di cateteri (soprattutto se usati in modo improprio) può causare irritazione/infezione o lesioni alle vie urinarie. In questo caso è necessario richiedere il parere di un medico.

Se usato in modo non corretto, l'urina residua può rimanere nella vescica. Il catetere è destinato all'uso singolo. Il riutilizzo o il ritrattamento aumenta il rischio di infezione. Non utilizzare senza un lubrificante sterile adatto, in quanto non scorrevole. Non utilizzare se la confezione sterile è danneggiata o se il catetere è danneggiato per pericolo di infezione. Si consiglia una temperatura di applicazione di 15-25 °C.


Se si verificano incidenti gravi durante l'uso di cateteri monouso „IQ-Cath“, questi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente del paese in cui risiede l'utente.

	Numero dell'articolo		Utilizzabile fino (anno-mese-giorno)
	Numero di serie		Non sterilizzare nuovamente
	Conservare in luogo asciutto		Codice numerico farmaceutico centrale
	Questo lato in su		Drug Tariff (elenco dei farmaci rimborsabili del servizio sanitario nazionale britannico)
	Non sterilizzare nuovamente		Elenco dei prodotti e servizi
	Numero di pezzi		Non utilizzare in caso di confezione danneggiata
	Conservare in luogo asciutto		Data di produzione
	Sterilizzare con ossido di etilene		Produttore
	Sistema di barriera sterile singolo		Rappresentante autorizzato svizzero
	Sistema di barriera sterile singolo con confezione protettiva esterna		Importatore
	Numero del lotto		
	Osservare le istruzioni per l'uso		
	0123	MD	Marcatura CE del prodotto medico

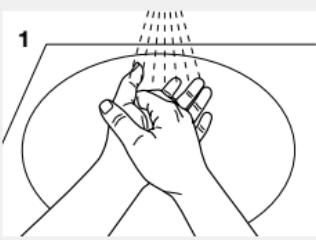


Prima dell' uso si consiglia di lavare e disinfeccare accuratamente le mani.


Evitare di toccare direttamente qualsiasi parte della superficie del catetere (eccetto il connettore). Utilizzare l'imballaggio funzionale come ausilio di presa

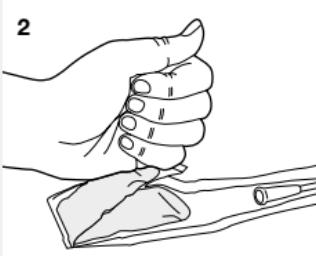


Aprire il contenitore del gel premendo o arrotolando. Svuotare l'intero contenuto nella confezione.

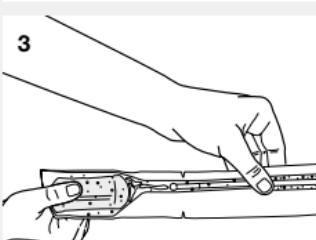


Riempire il gel lubrificante sterile nella confezione e distribuirlo su tutto il catetere (eccetto per il connettore). Utilizzare la linea di strappo posizionata nella parte anteriore contenente la busta in gel, per aprire la confezione funzionale. Successivamente tirare/strappare con decisione.

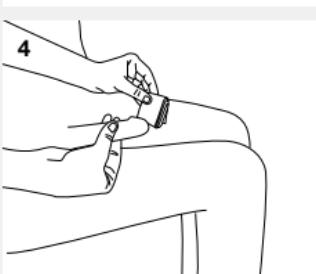


Disinfettare il meato urinario e l'ambiente circostante con un disinfettante adatto alle mucose seguendo le raccomandazioni del produttore.

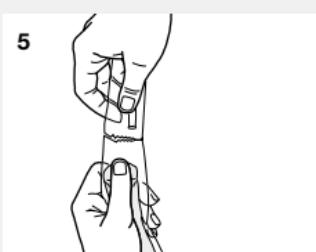

Strappare la confezione nell'estremità posteriore. Se il catetere dovesse rimanere incastrato nella confezione, estrarre il catetere ruotandolo lentamente. In caso di bisogno collegare il catetere con una sacca di raccolta dell'urina.

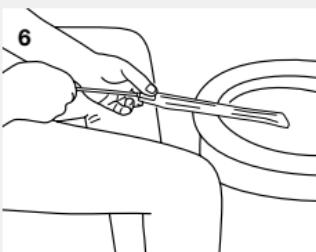

La confezione può venir usata come prolunga per uno svuotamento diretto dell'urina nella toilette. A questo scopo spingere il catetere il più avanti possibile finché il connettore chiuda ermeticamente.

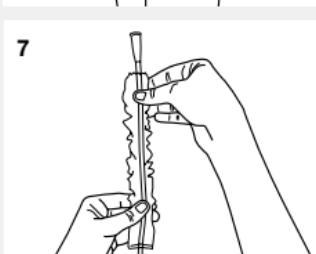

La confezione può venir usata come prolunga per uno svuotamento diretto dell'urina nella toilette. A questo scopo spingere il catetere il più avanti possibile finché il connettore chiuda ermeticamente.

Smaltire il catetere rispettando le norme locali.

MANFRED SAUER GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da una manipolazione impropria contraria alle presenti istruzioni per l'uso o dalla mancata applicazione delle linee guida igieniche.

In caso di domande o problemi, contattare il medico o il rappresentante dell'assistenza clienti.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Nederlands

Gel CIC catheter voor éénmalig gebruik (intermitterende catheterisatie)

- Gebruiksklaar
- Katheter met 2 functionele zones (bolvormige tip en inbrengzone)
- Functionele verpakking voor variabel gebruik
- Totale lengte: ca. 430 mm, Lengte zonder connector: ca. 400 mm
- 4 maten: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Gebruikersgroepen: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Mannen

Beoogd gebruik:

De IQ-Cath is bedoeld voor de eenmalige en tijdelijke urine-afvoer uit de urineblaas voor therapeutische of diagnostische doeleinden bij blaasledigingsstoornissen die behandeling vereisen. Men kan zelf een eenmalige of intermitterende katherisatie uitvoeren of deze kan door een assistent worden uitgevoerd.

Indicatie:

De indicatie voor de zelfkatherisatie of geassisteerde katherisatie wordt na de passende diagnose en afhankelijk van de individuele situatie van de betrokken gesteld.

De IQ-Cath is geschikt voor de katherisatie bij volgende indicaties: blaasledigingsstoornissen van verschillende oorsprong (bijv. neurogen), gebrekige tot geen detrusorcontractilitet, chronische urineretentie, niet-fysiologisch urineren (behoefte om te persen) met en zonder resturine.

Contra-indicatie:

De IQ-Cath kan bij het optreden van de volgende problemen niet geschikt zijn. In deze gevallen moet vóór gebruik absoluut een arts worden geraadpleegd: verwonding van de urethra, bloeding van de urethra, acute ontsteking van de urethra of van de prostaat, obstructions (bijv. tumoren) van de urethra, aan de sluitspier of van de prostaat.

Gebruikaanwijzing:

Het eerste gebruik dient plaats te vinden onder professionele begeleiding.


Als er al vloeistof uit het gelkussen in de verpakking is ontsnapt, mag de kather niet meer worden gebruikt. Af en toe kan na inbrengen van gelkathers enige vertraging ontstaan voordat de urine begint te stromen.

Risico's en waarschuwingen:

Bij het gebruik van katheren (vooral bij verkeerd gebruik) kan een irritatie/infectie of verwonding van de afvoerende urinewegen ontstaan. In dit geval dient een arts te worden geraadpleegd.


Bij verkeerd gebruik kan eventueel resturine in de blaas achterblijven. De kather is bedoeld voor eenmalig gebruik. Het hergebruik of de recycling verhoogt het risico op infectie. Niet gebruiken zonder geschikte steriele glijgel, om het glijvermogen te waarborgen. Niet gebruiken wanneer de steriele verpakking of de kather beschadigd is, vanwege de kans op infectie. Wij adviseren een gebruikstemperatuur van 15 – 25 °C.

Wanneer zich bij het gebruik van „IQ-Cath“ katheren voor eenmalig gebruik ernstige incidenten zouden voordoen, dienen deze te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker gevestigd is.

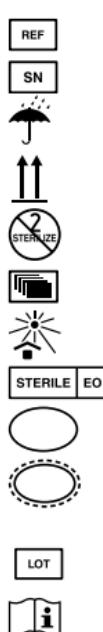


Artikelnummer
Serienummer
Droog bewaren
Deze kant naar boven
Steriliseer de zak niet opnieuw
Quantity
Beschermen tegen zonlicht
Sterilisatie met ethyleenoxide
Eenvoudig steriel barrièresysteem
Enkel steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenzijde
Lotnummer
Gebruikaanwijzing naleven


	MD 0123	CE-markering medisch hulpmiddel
		EXP (jaar-maand-dag)
		Ongeschikt voor hergebruik
PZN		Farmaceutisch centraal nummer
DT		Drug Tariff (catalogus van terugbetaalbare geneesmiddelen van de Britse NHS)
LPP		Lijst van producten en diensten
		Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is
		Productiedatum
		Fabrikant
CH REP		Zwitserse gemachtigde
		Importeur

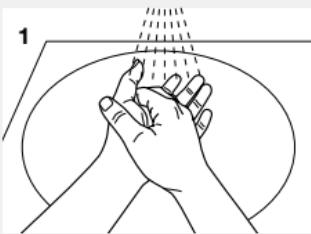


Was alstublieft uw handen grondig en desinfecteer ze. Vermijd iedere aanraking van het oppervlakte van de katheter (behalve de connector). De functionele verpakking is als grijphulp te gebruiken.

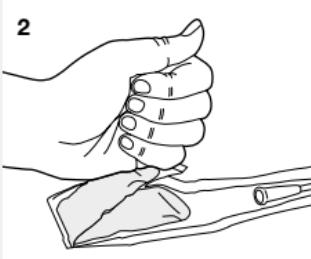


Het gelsachet openen door op de verpakking te drukken of door de verpakking op te rollen. Ledig het sachet volledig in de verpakking.

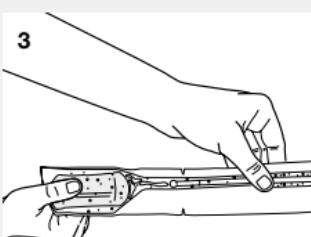


Verdeel de steriele glijgel in de verpakking over de hele lengte van de katheter zodat het oppervlakte van de katheter omgeven is door glijgel (behalve de connector). Scheur de scheurmarkeringen aan de voorzijde van de functionele verpakking in en scheur deze dan met een ruk af, inclusief het gel sachet.

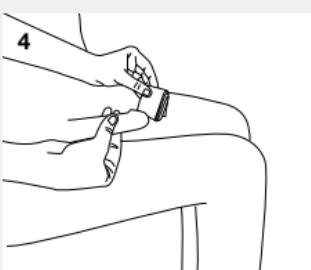


Reinig de opening van de urethra en het omliggende gebied met een desinfectans die geschikt is voor slijmvlezen (volg de instructies van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel).

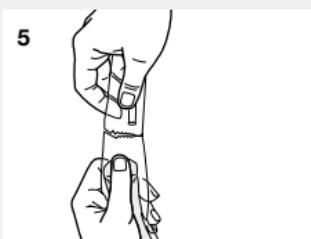

Open de verpakking aan de zijde van de connector. Als de katheter eventueel in de verpakking blijft plakken, draai de katheter er dan langzaam uit. Indien noodzakelijk sluit een urineopvangzak aan.

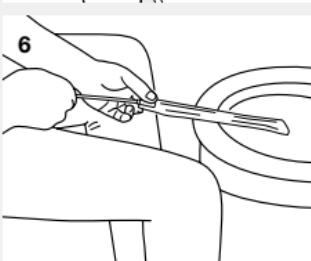

Om de urine direct in het toilet te laten afvloeien kunt u de verpakking gebruiken om de katheter te verlengen. Schuif de connector naar voren totdat de connector de verpakking afsluit.

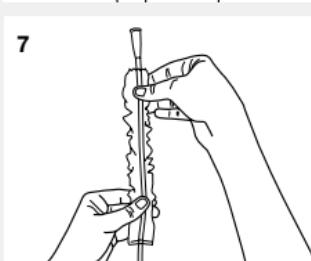

Om de urine direct in het toilet te laten afvloeien kunt u de verpakking gebruiken om de katheter te verlengen. Schuif de connector naar voren totdat de connector de verpakking afsluit.

De katheter weggooien volgende de lokale overheids richtlijnen.

MANFRED SAUER GmbH is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit onjuist gebruik dat in strijd is met deze gebruiksaanwijzingen of door het niet toepassen van de hygiënische richtlijnen.

Neem bij vragen of problemen alstublieft contact op met uw medische behandelaar of onze klantenservice.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Gel-engångskateter för RIK (ren intermittent självkateterisering)

- Klar för användning
- Kateter med 2 zoner (kulformat huvud och införingszon)
- Funktionell förpackning för mångsidig användning
- Total längd: ca 430 mm, Längd utan anslutning: ca 400 mm
- 4 storlekar: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Målgrupp: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Män

Material:

Ftalatfri PVC av medicinsk kvalitet Ytbeläggning av PVP

Avsedd användning:

IQ-Cath är en engångsprodukt för tillfällig dränering av urin från urinblåsan hos en person med dysfunktion i urinblåsan hos en person med dysfunktion i urinblåsan för terapeutiska eller diagnostiska ändamål.

Den är lämplig för ren intermittent självkateterisering (RIK) eller vårdsassisterad ren intermittent kateterisering.

Indikation:

Indikationen för RIK görs efter relevanta diagnostiska tester och är beroende av individens situation. IQ-Cath är lämplig för kateterisering i följande situationer: dysfunktion av urinblåsan av olika ursprung (ex neurogen), underaktiv detrusor eller akontraktil detrusor, kronisk urinretention, onormal miktur (ansträngning) med eller utan residual urin.

Kontraindikation:

IQ-cath kan vara olämplig i följande fall och en sjukvårdspersonal måste konsulteras före användning: urinrörskada, urinrörlödning, akut inflammation i urinröret eller prostata, hinder (ex tumörer) i urinröret, vid sfinkter eller prostata blockerande passage.

Bruksanvisning:

Första användningen bör ske under vägledning från vårdpersonal.

Om vätska redan har runnit ut ur eller gelpåsen inuti förpackningen får katetern inte längre användas. Ibland kan det dröja en stund innan urinen börjar flöda efter införandet av en gelkateter.


Risker och försiktighetsåtgärder:

Användning av katetrar (särskilt felaktig användning) kan orsaka irritation/infektion i urinvägarna. Du måste söka läkarvård om detta inträffar. Felaktig användning kan orsaka residual urin i urinblåsan. Denna kateter är endast avsedd för engångsbruk. Infektionsrisken ökar om katetern återanvänts.


Använd inte utan lämplig steril glidgel, eftersom katetern inte glider annars. Använd inte den sterila förpackningen eller katetern om den är skadad eftersom det finns risk för infektion. Vi rekommenderar en användningstemperatur på 15–25 C.

Skulle det uppstå allvarliga incidenter vid användning av IQ-Cath engångskatetrar, måste dessa anmälas till tillverkaren samt till behörig myndighet i det land där användaren är bosatt.


	Artikelnummer		CE-märkning för medicinteknisk produkt
	Serienummer		
	Förvaras torrt		Används före (år-månad-dag)
	Denna sida uppåt		Endast för engångsbruk
	Försök inte att sterilisera och återanvända den		PZN-nummer
	Antal		Drug Tariff (ersättningsbelopp från brittiska NHS)
	Skyddas mot direkt solljus		Lista över produkter och tjänster
	Produkten steriliseras med etenoxid		Använd inte om förpackningen är skadad
	Enskilt steril barriärsystem		Tillverkningsdatum
	Enskilt steril barriärsystem med skyddsförpackning utanför		Tillverkare
	Batchnummer		Schweizisk auktoriserad representant
	Följ bruksanvisningen		Importör

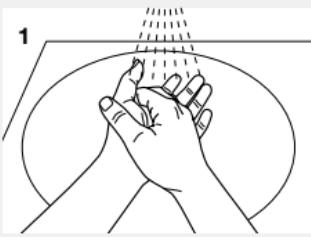


Innan användning, tvätta händerna noggrant och desinficera dem. Undvika att vidröra någon del av kataterytan (förutom konnektorn) direkt.

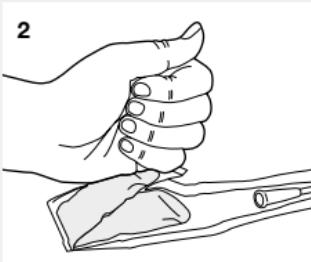


Öppna gelpåsen genom att vika och trycka på den. Töm hela innehållet i den funktionella förpackningen.

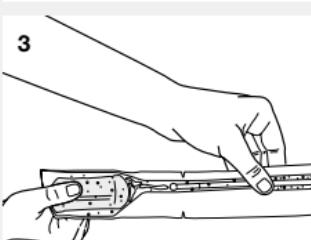


Sprid den sterila glidgelen (fyll på gelen i den funktionella förpackningen) över hela katetern (förutom kopplingen). Öppna den funktionella förpackningen på framsidan genom att riva av den vid perforeringen.

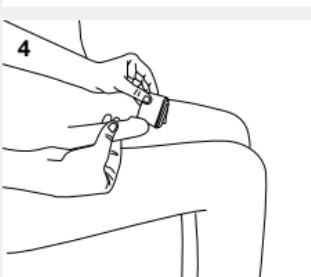


Rengör området runt urinrörets öppning med ett desinfektionsmedel som är lämpligt för slemhinnor (observera instruktionerna från tillverkarens anvisningar av desinfektionsmedlet).

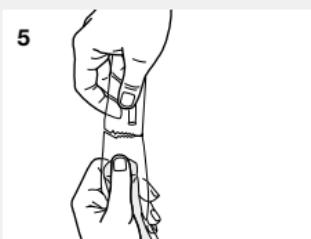

Öppna den funktionella förpackningen i den bakre änden. Om katetern fastnat i förpackningen, vrid långsamt loss den.
Anslut vid behov katetern till en urinuppsamlingspåse.

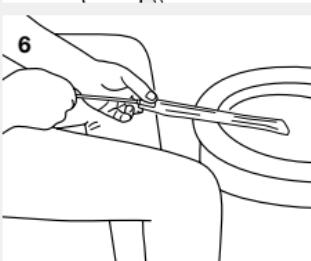

Förpackningen kan användas som förlängningskanal för att tömma urinen i toaletten. För ihop förpackningen mot den främre änden för att tillsluta.

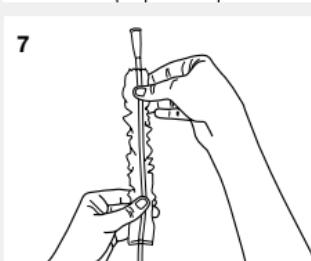

För försiktigt in katetern i urinröret tills urinen rinner ut. När urinen slutar rinna, dra långsamt ut katetern.

Sopsortera katetern som restavfall.

MANFRED SAUER GmbH ansvarar inte för eventuella skador som beror på felaktig användning ej i enlighet med denna bruksanvisning eller underlättenshet att följa de hygieniska riktlinjerna.

Om du har frågor eller problem, vänligen kontakta din vårdgivare eller våra produktspecialister.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Gel-engangskateter til intermitterende selv-kateterisering

- Brugsklart
- 2-zone-kateter (kuglehoved og indføringszone)
- Funktionsemballage til forskellig anvendelse
- Totallængde: ca. 430 mm, længde uden konnektor: ca. 400 mm
- 4 størrelser: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Brugergruppe: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Mænd

Formålsbestemt anvendelse:

IQ-Cath er beregnet til engangs- og intermitterende urinudledning fra urinblæren til behandlingsformål eller diagnostiske formål i tilfælde af vandladningsforstyrrelser. Der kan udføres en engangs- eller intermitterende selv-kateterisering (ISK) eller kateterisering af anden person (IFK).

Indikation:

Indikationen for intermitterende selv-kateterisering eller kateterisering af anden person stilles i henhold til diagnosen og afhængig af patientens individuelle situation.

IQ-Cath er egnert til kateterisering ved følgende indikationer: Forstyrrelser ved tømning af blæren af forskellig genese (f.eks. neurogen blære), detrusorunderaktivitet eller detrusorakontraktilitet, kronisk urinretention, ikke-fysiologisk tømning af blæren (presmiktion) med eller uden rest-urin.

Kontraindikation:

IQ-Cath kan være uegnet ved forekomst af følgende problemer. I disse tilfælde skal en læge under alle omstændigheder kontaktes inden anvendelsen: Skader på urinrøret, blødning i urinrøret, akut inflammation i urinrøret eller prostata, obstruktion (f.eks. tumorer) i urinrøret, urinrørets lukkemuskel eller i prostata.

Anvisninger i anvendelsen:

Første gang produktet benyttes, skal det ske under opsyn af en fagligt uddannet vejleder. Hvis der allerede er trængt væske ud af gelpuden inde i emballagen, må kateteret ikke anvendes. I enkelte tilfælde kan der efter indføring af gel-katetre gå et lille stykke tid, inden urinen løber ud.


Risici og advarsler:

Ved brugen af katetre (f.eks. ved forkert brug) kan der forekomme irritationer/infektion eller beskadigelse af de fraførende urinveje. I så fald skal en læge kontaktes.


Ved ukorrekt anvendelse kan der forekomme rest-urin i blæren. Kateteret er beregnet til engangsbrug. Ved genanvendelse eller fornyet oparbejdning øges faren for infektion. Må ikke bruges uden egnet steril, glidende gel, da kateteret ikke har evnen til at glide. Må ikke bruges ved beskadiget steril-emballage eller beskadiget kateter, da der er fare for infektion. Vi anbefaler en temperatur på 15 - 25 °C under anvendelsen.

Såfremt der ved anvendelsen af „IQ-Cath“-engangskatetre skulle opstå alvorlige hændelser, skal de indberettes til producenten og den myndighed i det land, hvor brugeren er etableret.


	Artikelnummer		MD 0123 CE-mærkning medicinsk produkt
	Seriennummer		Holdbar til (år-måned-dag)
	Skal opbevares tørt		Må ikke genanvendes
	Denne side op		Nummer på farmaceutisk central
	Må ikke steriliseres igen		Medicintarif (Katalog det britiske National HealthSystem)
	Antal		Liste over produkter og tjenester
	Beskyttes mod sollys		Må ikke anvendes i tilfælde af beskadiget emballage
	Sterilisation med ethylenoxid		Fremstillingsdato
	Simpelt steril barrièresystem		Producent
	Enkelt steril barrièresystem med beskyttende emballage udenpå		Autoriseret for Schweiz
	Batchnummer		Importør
	Følg brugsanvisningen		

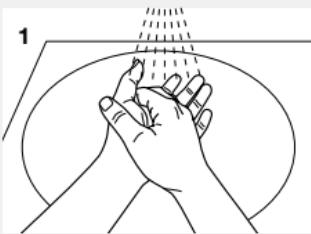

Vask hænderne grundigt, og desinficer dem, inden kateteret anvendes. Hele kateteret (undtagen konnektoren) må ikke berøres direkte. Den funktionelle emballage kan benyttes til håndteringen.

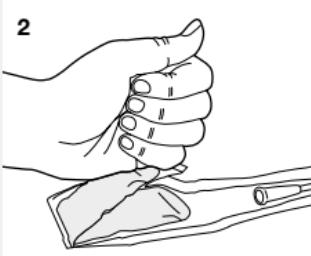


Åbn gelpuden ved at knække og trykke på den. Tøm hele indholdet ud i den funktionelle emballage.

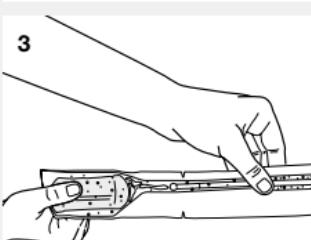


Fordel den sterile og glidende gel (påfyldes i den funktionelle emballage og) stryg hen over hele kateteret (undtagen konnektoren).

Riv den forreste del af den funktionelle emballage med gelpuden af, og fjern den med et ryk.

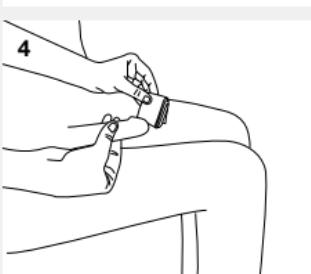


Desinficer urinrørsåbningen og området heromkring med et egnet desinfektionsmiddel til slimhinder (overhold producentens anvisninger til desinfektionsmidlet).

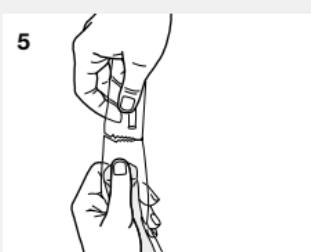


Åbn den funktionelle emballage i den bageste ende. Hvis kateteret sidder fast i emballagen, skal det drejes langsomt ud.

Efter behov kan der påsættes en urinopsamlingspose.

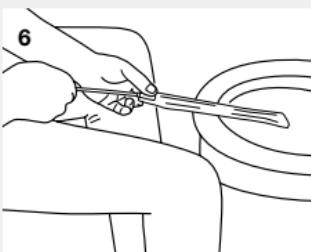

Den funktionelle emballage kan anvendes som forlænger, så urinen kan uledes direkte i toiletten. Skyd kateteret så langt fremad, at konnektoren slutter helt tæt.

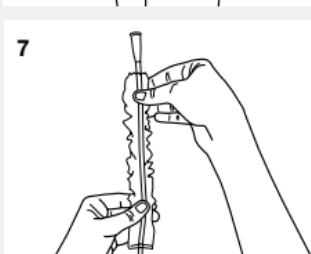

Indfør forsigtigt kateteret i urinrøret, indtil urinen løber ud. Når der ikke løber mere urin ud, trækkes kateteret langsomt ud.

Kateteret kan bortsaffaffes sammen med husholdningsaffaldfaldet.

MANFRED SAUER GmbH påtager sig intet ansvar for skader eller ulykker, som kan opstå som følge af forkert håndtering i strid med denne vejledning eller manglende anvendelse af de hygiejniske retningslinjer.

Såfremt du skulle have spørgsmål eller problemer, kan du henvende dig til det medicinske sundhedspersonale eller til vores kunderådgiver.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Geelikertakatetri itsekatetrointiin

- Käyttövalmis
- Katetrissa on kaksi alueet (pyöreä kärki ja ohjain)
- Toimintopakkaus eri käytötömahdollisuuksilla
- Kokonaispituus: n. 430 mm, Pituus ilman liitintä: n. 400 mm
- 4 kokoa: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Käyttäjäryhmät: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Miehet

Käyttötarkoitus:

IQ-Cath on suunniteltu virtsan kertaluontaiseen ja väliaikaiseen tyhjentämiseen virtsarakosta terapeutisessa tai diagnostisessa tarkoituksessa, kun virtsarakon tyhjentyminen on häiriintynyt. Välinettä voidaan käyttää kertaluontaiseen tai toistuvaan itsekatetrointiin tai avustettuun katetrointiin.

Käyttötarkoitus:

Käyttö itsekatetrointiin tai avustettuun katetrointiin asianmukaisen diagnoosin jälkeen ja riippuen asianomaisen yksilöllisestä tilanteesta.

IQ-Cath soveltuu katetrointiin seuraavissa indikaatioissa: Eri syistä johtuvat virtsarakon tyhjentymishäiriöt (esim. neurogeeniset), tyhjentäjäihasten alentunut toiminta tai supistumiskyky, krooninen virtsaretentio, virtsarakon epäfysiologinen tyhjentyminen (puristusmikto) jäännösvirtsalla ja ilman.

Käytön vasta-aiheet:

IQ-Cath ei ehkä soveltu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa. Näissä tapauksissa tulee joka tapauksessa ottaa yhteys lääkäriin ennen käyttöä: Virtsaputken vaario, virtsaputken verenvuoto, akuutti virtsaputken tai eturauhasen tulehdus, tukkeutumat (esim. kasvaimet) virtsaputkessa ja sulkijalihaksen tai eturauhasen lähettyvillä.

Käyttöohjeet:

Ensimmäisellä kerralla käytön tulisi tapahtua ammattilaisen opastamana.

Jos geelityynystä on vuotanut nestettä jo pakkauden sisällä, katetria ei saa enää käyttää. Geelikatetria käytettäessä katetrin asettamisen jälkeen voi esiintyä pientä viivästystä, ennen kuin virtsa alkaa virrata.

Vaarat ja varoitukset:

Katetrien käyttö (varsinkin epäasianmukaisesti käytettynä) voi aiheuttaa ärsytystä / infektiota tai vammoja virtsateissa. Näissä tapauksissa on otettava yhteys lääkäriin.


Jos katetria käytetään epäasianmukaisesti, virtsaa voi jäädä virtsarakkoon. Katetri on kerrokäyttöinen. Uudelleenkäyttö tai uudelleenkäsittely lisäävät infektoriskiä. Älä käytä ilman sopivaa steriliä liukastusgeeliä, koska tällöin katetri ei liu'u. Älä käytä, jos sterili pakaus tai katetri on vahingoittunut, koska tällöin on olemassa infektoriski. Suositeltu käyttölämpötila 15–25 °C.

Jos kertakäytöisten „IQ-Cath“-katetrien käytön yhteydessä ilmenee vakavia tapahtumia, näistä on ilmoitettava valmistajalle ja käyttömaan vastaavalle viranomaiselle.




Tuotenumero
Sarjanumero
Säilytettävä kuivassa tilassa
Tämä puoli ylöspäin
Älä steriloit uudelleen
Kappalemäärä
Suojattava auringonvalolta
Sterilointi eteenioksidilla
Yksinkertainen sterili suoja- ja järjestelmä
Yksi sterili suoja- ja järjestelmä, jossa suojaapakaus ulkopuolella
Eränumero
Noudata käyttöohjeita


CE 0123 MD Lääkinnällisen laitteen CE-merkintä
 Viimeinen käyttöajan kohta (vuosi-kuukausi-päivä)
 Ei voida käyttää uudelleen
PZN Lääkekeskuksen numero
DT Drug Tariff (Britannian NHS:n luettelo korvauskelpoisista lääkkeistä)
LPP Tuote- ja palveluluettelo
 Älä käytä, jos pakaus on vaurioitunut
 Valmistuspäivä
 Valmistaja
CH REP Swiss authorised representative
 Maahanluoja

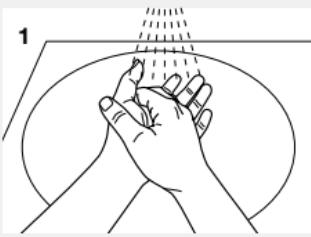


Pese ja desinfioi kätesi huolellisesti ennen katetrointia. Vedä kalvoja irti toisistaan, mutta vältä koskemasta mihinkään katetritin osaan (paitsi katetritin liittimeen) suoraan. Voit käyttää suojaapakkausta apuna katetritin käsittelyssä.

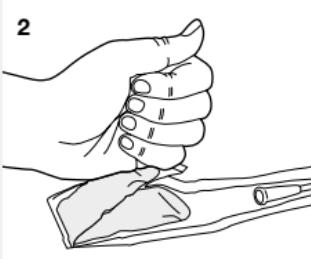


Aava liukastepussi taittamalla ja puristamalla. Purista nestemäinen liukaste katetripakkaukseen. Varmista, että pussin sisältö tyhjentyy kokonaan.

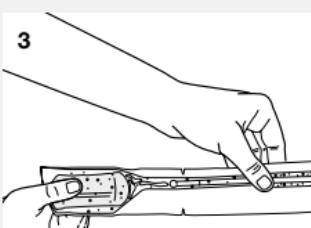

Täytä steriili voiteluaine pakkaukseen ja levitä sitä levittämällä se koko katetriin (liittimen lukun ottamatta). Aavaa pakaus repäisymerkkien kohdalta pakkausen etuosasta repimällä geelipussin sisältävä osa irti.

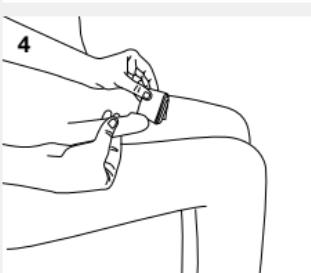


Puhdistaa virtsaputken ympäristö ja sen jälkeen sen suuaukko limakalvoille sopivalla desinfointiaineella (tarkista desinfointiaineen käyttöohjeet).

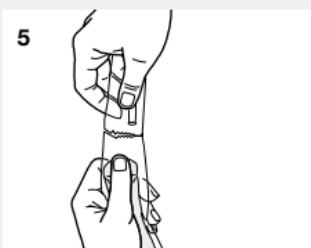


Aavaa katetripakkauksen merkitystä kohdasta kartion puoleisesta päästä.

Jos katetri ei irta paikasta, kierrä se hitaasti ulos. Tarpeen vaatiessa liitä virtsapussi katetriin.

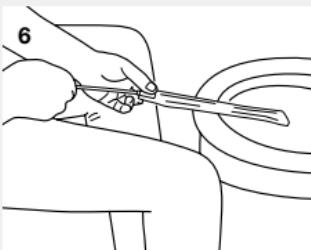

Pakkausta voi käyttää katetritin jatkeena valutettaessa virtsa suoraan pönttöön. Liitin sulkee pakkausen, kun sitä siirretään eteen.

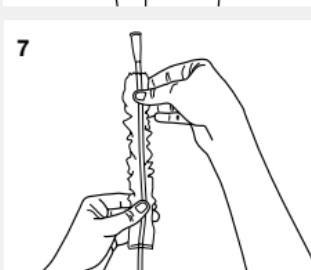

Pakkausta voi käyttää katetritin jatkeena valutettaessa virtsa suoraan pönttöön. Liitin sulkee pakkausen, kun sitä siirretään eteen.

Hävitä pakaus ohjeiden mukaisesti.

MANFRED SAUER GmbH ei vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, joita näiden käyttöohjeiden vastaisesta virheellisestä käytöstä tai hygieniamäärysten noudattamatta jättämisestä voi seurata.

Mikäli jokin asia katetroinnissa miettyttää, kysy tarvittaessa neuvoja lääkäristä tai hoitajalta.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Gel-engangskateter for ISK (intermitterende selvkaterisering)

- Klart til bruk
- 2-veis kateter (kulehode og føringssone)
- Funksjonspakning for variabel bruk
- Total lengde: ca. 430 mm, lengde uten konnektor: ca. 400 mm
- 4 størrelser: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Brukerguppe: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Menn

Bruksformål:

IQ-Cath er bestemt til engangs og midlertidig urinavledning fra urinblæren til terapeutiske eller diagnostiske formål ved foreliggende blæretømmingsforstyrrelser. Det kan gjennomføres en engangs eller intermitterende selvkaterisering (ISK) eller katerisering av andre (IFK).

Indikasjon:

Indikasjonen for ISK eller IFK stilles etter en tilsvarende diagnostikk, og avhengig av den berørtes individuelle situasjon.

IQ-Cath er egnet for katerisering ved de følgende indikasjonene: blæretømmingsforstyrrelser av forskjellige geneser (f.eks. neurogen), underaktiv detrusor eller detrusorkontraktilitet, kronisk urinretensjon, ufysiologisk tömming av blæren (urinering under press), med og uten resturin.

Kontraindikasjon:

IQ-Cath er muligens ikke egnet hvis følgende problemer oppstår. I disse tilfellene må man alltid konsultere lege før bruk: skade på urinrøret, urinrørblødning, akutt betennelse i urinrøret eller prostata, passasjehindring (f.eks. tumorer) i urinrøret, på urinrørets lukkemuskel eller på prostata.

Instrukser for bruk:

Første gangs bruk skal finne sted under faglig instruksjon.

Dersom det allerede skulle ha trengt ut væske fra gelputen, må kateret ikke brukes. Ved bruk av gelkateter kan det noen ganger oppstå små forsinkelser etter innføringen, før urinen begynner å strømme.


Risikoer og advarsler:

Ved bruk av katetre (fremfor alt ved ufagmessig bruk) kan det oppstå irritasjon/infeksjon eller skade på de avledende urinveiene. I slike tilfeller må lege konsulteres.


Ved ufagmessig bruk kan resturin bli værende igjen i blæren. Kateret er bestemt til engangs bruk. Gjenbruk eller reprosessering øker faren for infeksjon. Skal ikke brukes uten egnet steril glidegel, da produktet ikke har glideevne. Skal ikke brukes dersom den sterile emballasjen eller kateret er skadet, da det er fare for infeksjon. Vi anbefaler en brukstemperatur på 15–25 °C.

Dersom det skulle oppstå alvorlige hendelser ved bruken av «IQ-Catch»-engangskatetre, må disse meldes til produsenten og ansvarlig nasjonal myndighet der brukeren bor.


	Artikkelenummer		MD 0123	CE-merke for medisinsk produkt
	Seriennummer			Utløpstid (år-måned-dag)
	Skal oppbevares tørt			Ikke til gjenbruk
	Denne siden opp			Farmasentralnummer
	Skal ikke steriliseres på nytt			Legemiddeltariff (katalog overrefunderbare legemidler fra britiske NHS)
	Antall			Liste over produkter og tjenester
	Skal oppbevares tørt			Skal ikke brukes dersom emballasjen er skadet
	Sterilisering med etylenoksid			Produksjonsdato
	Enkelt sterilt barrièresystem			Produsent
	Enkelt sterilt barrièresystem med beskyttende utvendig emballasje			Sveitsisk autorisert organ
	Overhold bruksanvisningen			Importør

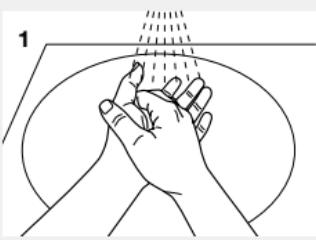

Før bruken skal hendene vaskes grundig og desinfiseres. Ingen del av kateteret (unntatt konnektor) skal berøres direkte. Bruk funksjonsemballasjen som gipehjelp.

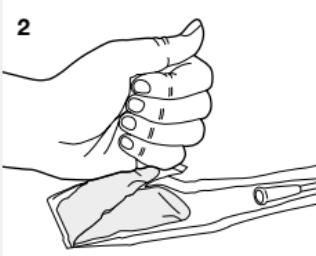


Åpne gelputten ved å bøye og trykke på den. Tøm hele innholdet i funksjonsemballasjen.

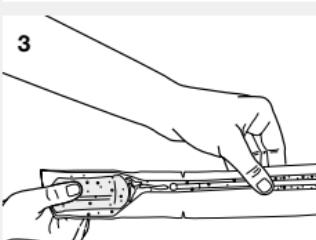


Den sterile glidegelen fylles i funksjonsemballasjen fordeles på hele kateteret (unntatt konnektor) med strykebevegelser. Åpne gelputten ved å bøye og trykke på den. Tøm hele innholdet i funksjonsemballasjen.

Riv opp den fremre delen av funksjonsemballasjen med gelputten og trekk den av med et rykk.

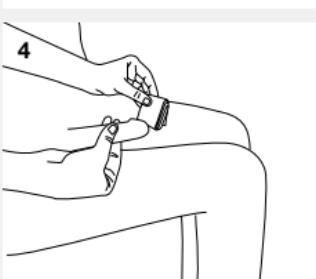


Urinrørsåpningen og området rundt den skal desinfiseres med et egnet desinfeksjonsmiddel for slimhinner (følg instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet).

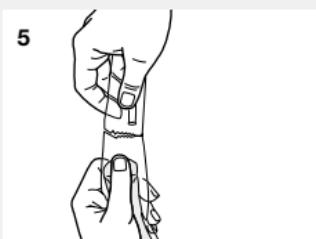


Åpne funksjonsemballasjen ved den bakre enden. Skulle kateteret bli sittende fast i emballasjen, vris kateteret langsomt ut.

Ved behov kan kateteret kobles til en urinpose.

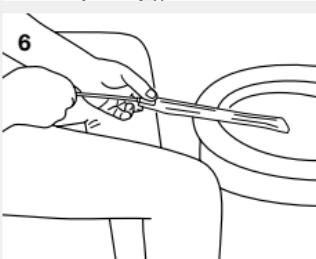

Funksjonsemballasjen kan brukes som forlengelse, slik at urinen kan renne direkte ned i toalettet. Til dette skyves kateteret så langt fremover at konnektoren tetter.

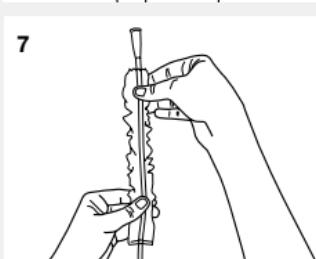

Før kateteret forsiktig inn i urinrøret inntil urinen renner ut. Når det ikke lenger strømmer ut urin, trekkes kateteret langsomt ut.

Kateteret skal kastes i restavfallet.

MANFRED SAUER GmbH påtar seg intet ansvar for personskade eller annen skade som kan føres tilbake til ufagmessig håndtering som strider mot denne bruksanvisningen eller ved manglende overholdelse av hygieniske retningslinjer.

Ved spørsmål eller problemer, må du henvende deg til medisinsk fagpersonell eller til vår kunderådgiver.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Ühekordselt kasutatav geelkateeter ISC (vahelduva enesekateeterdamise) jaoks

- On kasutusvalmis
- 2-tsooniline kateeter (kuulpea ja juhtiv tsoon)
- Funktsionaalne pakend varieeruvaks kasutamiseks
- Kogupikkus: ca 430 mm, pikkus ilma konnektorita: ca 400 mm
- 4 suurust: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Kasutajate rühm: IQ3104.xx, IQ3114.xx – mehed

Kasutusotstarve

IQ-kateeter on mõeldud ühekordseks ja ajutiseks uriini eemalejuhtimiseks kusepõiest terapeutilistel või diagnostilistel eesmärkidel põie tühjenemise häirete esinemise korral. Selle abil saab läbi viia vahelduvat enesekateeterdamist (ISC) või võörkateeterdamist (IFC).

Näidustus

ISC või IFC näidustus tehakse kindlaks päraast asjakohast diagnostikat ja olenevalt isiku individuaalsest olukorras.

IQ-kateeter on mõeldud kateeterdamiseks järgmiste näidustute korral. Erineva tekkepõhjusega (nt neurogeensed) põie tühjenemise häired, ebapiisav detruoorne surve või detruoorse aktiivsuse puudumine, krooniline kusepeetus, põie mittefisioloogiline tühjenemine (press-miktsoon) jääkuriiniga või ilma.

Vastunäidustus

IQ-kateeter ei pruugi olla sobiv järgmiste probleemide korral. Nendel juhtudel tuleb enne kasutamist tingimata arstiga ühendust võtta. Kuseteede vigastused, kuseteede veritsus, kuseteede või eesnäärme akuutne põletik, takistused (nt tuumorid) kuseteedes, kusejuhu sulgurlihases või eesnäärmes.

Kasutusjuhised

Esmakordselt peab kasutama spetsialisti juhendamisel.

Kui pakendis on juba geelpadjast välja tunginud vedelikku, ei tohi kateetrit enam kasutada. Geelkateetrite puhul võib esineda päraast sisestamist väikesi viivitusi, enne kui uriin voolama hakkab.


Ohud ja hoiatused

Kateetrite kasutamisel (eelkõige mittenõuetekohasel kasutamisel) võib tekkida kuseteede ärritus/infektsioon või vigastus. Sellisel juhul konsulteerige arstiga.

Mittenõuetekohase kasutamise korral võib põie sisse jäädä jääkuriini. Kateeter on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Korduva kasutamise või taastöötlemise korral valitseb infektsioonioht. Mitte kasutada ilma sobiva steriilse libestusgeelita, kuna pole libe. Mitte kasutada, kui steriilne pakend või kateeter on kahjustatud, kuna valitseb infektsioonioht. Soovitame kasutada temperatuuril 15–25 °C.

Kui ühekordsete kateetrite „IQ-Cath“ kasutamisel esineb raskeid ohujuhtumeid, tuleb neist teatada tootjale ja kasutaja asukohariigi pädevale asutusele.


	Artikli number	0123	Meditsiinitoote CE-märgistus
	Seerianumber		Kasutada kuni (aasta-kuu-päev)
	Hoida kuivas kohas		Mitte kasutada uesti
	Denne siden opp		Ravimikood
	Mitte uesti steriliseerida		Drug tariff (Briti riikliku tervishoiusüsteemi NHS (National Health Service) hüvitavatate ravimite kataloog)
	Tükkiarv		Toodete ja teenuste loend
	Hoida päikesevalguse eest kaitstult		Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada
	Steriliseerimine etüleenoksiidiiga		Tootmiskuupäev
	Ühe steriilse barjääriga süsteem		Tootja
	Ühe steriilse barjääriga süsteem koos väliste kaitsepakendiga		Šveitsi volitatud esindaja
	Partii number		Importija
	Järgida kasutusjuhendit		

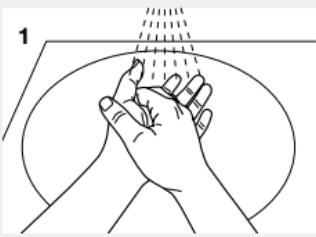

Enne kasutamist peske ja desinfitseerige hoolikalt käed. Ärge puudutage kogu kateetrit (v.a konnektor). Kasutage haaramise abivahendina funktsionaalset pakendit.




Avage geelpadi murdmise ja vajutamise teel. Tühjendage kogu sisu funktsionaalsesse pakendisse.

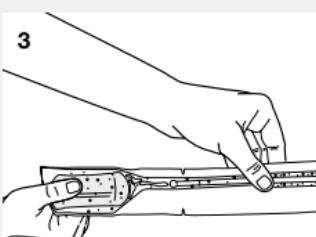


Sisestage funktsionaalsesse pakendisse steriilne li-bestusgeel ja ajage kogu kateetri peal ühtlaselt (v.a konnektor) laiali.

Rebige funktsionaalse pakendi geelpadjaga esiosa lahti ja eemaldage järsult tömmates.

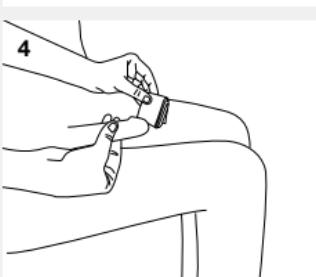

Desinfitseerige kusetoru ava ja seda ümbritsev ala sobiva limaskesta desinfitseerimisvahendiga (järgige desinfitsee-rimisvahendi tootja juhiseid).

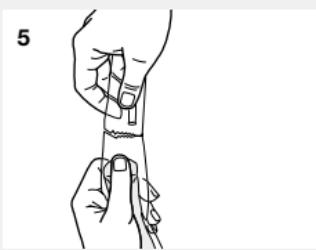


Avage funktsionaalne pakend tagumise otsa juurest. Kui kateeter jääb pakendisse kinni, keerake kateeter aeglasealt lahti.

Vajaduse korral ühendage kateeter uriini kogumiskotiga.



Funktsionaalset pakendit saab kasutada pikendusena uriini väljajuhtimiseks WC-potti. Selleks lükake kateeter nii palju ettepoole, kuni konnektor on lekkekindel.

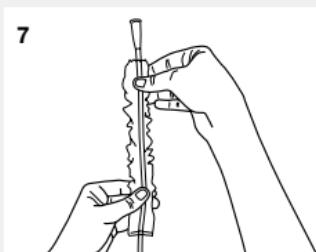

Sisestage kateeter ettevaatlikult kusetorudesse, kuni uriini välja voolab. Kui uriini enam ei voola, tömmake kateeter aeglasealt välja.

Kõrvaldage kateeter olmejäätmena.

MANFRED SAUER GmbH ei vastuta kah-justuste või vigastuste eest, mis võivad olla tingitud mittenõuetekohasest kasutamisest, kasutusjuhendi mittejärg-misest või hügieeninormide eiramisest.

Küsimuste või probleemide korral pöörduge meditsiinispes-salistide või meie klienditeenindajate poole.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Español

Gel catéter para el autosondaje intermitente

- Listo para el uso
- Catéter con 2 zonas funcionales (cabeza esférica y zona de guía)
- Envase funcional para un uso variable
- Longitud total: aprox. 430 mm, Longitud sin conector: aprox. 400 mm
- 4 tamaños: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Grupo de usuarios: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Hombres

Uso previsto:

El catéter IQ-Cath está previsto para realizar una sola evacuación urinaria temporal de la vejiga con fines terapéuticos o diagnósticos en personas con trastornos de la micción. Se puede realizar un único autosondaje intermitente o un sondaje asistido intermitente.

Indicación:

La indicación para el autosondaje intermitente o el sondaje asistido intermitente depende del diagnóstico correspondiente y de la situación individual de la persona afectada.

El catéter IQ-Cath es apropiado para el cateterismo con las siguientes indicaciones: trastornos de la micción con distintas causas (p. ej., neurógenas), hipoactividad del detrusor o ausencia de contractilidad del detrusor, retención urinaria crónica, micción no fisiológica (aumento de la presión al miccionar) con y sin orina residual.

Contraindicaciones:

El catéter IQ-Cath puede no ser apropiado si se da alguno de los siguientes problemas, en cuyo caso es absolutamente necesario ponerse en contacto con un médico antes de utilizar el producto: lesión de la uretra, sangrado uretral, inflamación aguda de la uretra o la próstata, obstrucciones (p. ej., tumores) uretrales, del músculo del esfínter uretral externo o de la próstata.

Instrucciones de uso:

El primer uso debe llevarse a cabo bajo la supervisión de personal especializado.

El catéter ya no deberá usarse si ha salido líquido del cojín de gel dentro del embalaje. En algunos casos, después de la inserción de catéteres con gel puede presentarse un ligero retraso antes de que la orina comience a fluir.


Riesgos y advertencias:

Cuando se usan catéteres (sobre todo si se usan de manera inapropiada), puede producirse una irritación/infección o lesión de las vías urinarias inferiores. En este caso, se debe consultar a un médico.


En caso de uso inapropiado, podría quedar orina residual en la vejiga. El catéter está previsto para un solo uso. La reutilización o el reprocesado aumentan el riesgo de infección. No utilizar sin emplear un lubricante estéril adecuado, pues no tiene propiedades deslizantes. No utilizar si el catéter o el envase estéril están dañados, ya que existe riesgo de infección. La temperatura de uso recomendada es de 15 – 25 °C.

Si al utilizar el catéter IQ-Cath de un solo uso se produce algún incidente importante, hay que comunicárselo al fabricante y a la autoridad responsable del país en el que está instalado el usuario.


	Número de artículo		0123	Producto sanitario con marcado CE
	Número de serie			Fecha de caducidad (año-mes-día)
	Manténgase seco			No reutilizable
	Este lado hacia arriba			Código farmacológico
	No reesterilizar			Tarifa farmacológica (catálogo de medicamentos con derecho a reembolso del NHS británico)
	Unidades			Lista de productos y servicios
	Manténgase fuera de la luz del sol			No utilizar en caso de daños en el envase
	Esterilización con óxido de etileno			Fecha de fabricación
	Ühe sterilise barjääriga süsteem			Fabricante
	Sistema de barrera estéril simple con envase protector exterior			Representante autorizado de Suiza
	Número de lote			Importador
	Consultense las instrucciones de uso			

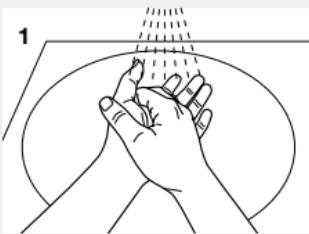


Antes de su uso lávese y desinféctese bien las manos.
Evite tocar directamente el catéter (excepto el conector).
Utilice el embalaje funcional como medio de agarre.

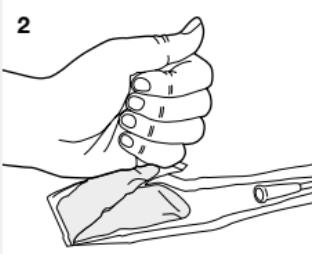


Abra la bolsita de gel doblándola y presionándola. Asegúrese de que el contenido entero de la bolsita este vaciado en el empaquetado.

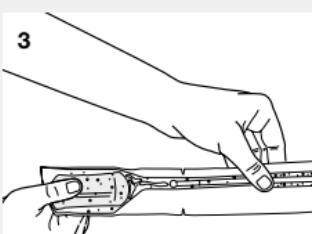


Rellene el gel estéril en el empaque y extiéndalo sobre todo el catéter (excepto el conector).
Rasgue la parte delantera del envase funcional con la almohadilla de gel y ábralo de un tirón.

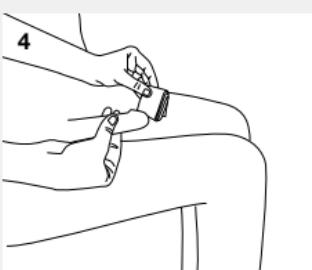


Desinfectar el orificio uretral y la zona alrededor con un desinfectante para mucosas adecuado (seguir las instrucciones del fabricante del desinfectante).

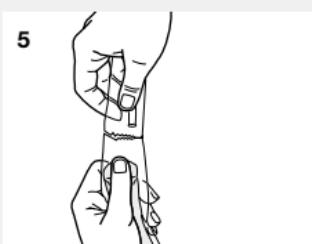

Abra el empaquetado en la parte trasera.
Si el catéter se atasca en el envase, extráigalo girando lentamente.
En caso de necesidad, ate el catéter con un bolso de orina.

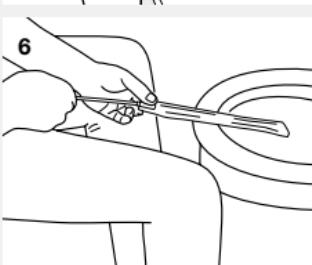

Abra el empaquetado en la parte trasera.
Si el catéter se atasca en el envase, extráigalo girando lentamente.
En caso de necesidad, ate el catéter con un bolso de orina.

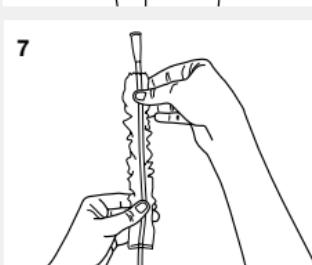

El envase funcional se puede utilizar como extensión para evacuar la orina directamente en el WC. Para ello, empuje el catéter hacia adelante hasta que el conector cierre.

Desechar el catéter conforme a las regulaciones locales.

MANFRED SAUER GmbH no asume responsabilidad alguna por los daños o lesiones que puedan derivarse de un uso inadecuado contrario a las presentes instrucciones de uso o la no aplicación de las directrices de higiene.

Si tiene cualquier duda o problema, diríjase al personal médico o a nuestro departamento de Atención al Cliente.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Português

Cateter de gel descartável para ACI (autocateterismo intermitente)

- Pronto a utilizar
- Cateter com 2 zonas funcionais (cabeça esférica e zona de guia)
- Embalagem funcional para uma aplicação variável
- Comprimento total: aprox. 430 mm, comprimento sem conector: aprox. 400 mm
- 4 tamanhos: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Grupo de utilizadores: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Homens

Finalidade:

O IQ-Cath é um cateter para derivação pontual e transitória de urina da bexiga para fins terapêuticos ou de diagnóstico em casos de disfunção de esvaziamento da bexiga. Pode ser realizada uma autocateterização intermitente (ACI) única ou uma cateterização intermitente por terceiros (CIT).

Indicação:

A indicação para realização de uma ACI ou CIT depende do diagnóstico respetivo e da situação individual do paciente.

O IQ-Cath é adequado para cateterismo nas seguintes indicações: Disfunções de esvazramento da bexiga de diferentes etiologias (p. ex., neurogénica), hipoatividade do detrusor ou incapacidade de contração do detrusor, retenção urinária crónica, bexiga neurogénica de baixa atividade (micção por pressão) com ou sem urina residual.

Contraindicações:

O IQ-Cath pode não ser adequado se ocorrerem as complicações seguintes. Nesses casos, procurar sempre aconselhamento médico previamente à aplicação: Lesões ao nível dos ureteres, hematúria, inflamação aguda dos ureteres ou da próstata, obstrução (p. ex., tumores) dos ureteres, do esfínter urinário ou da próstata.

Instruções de utilização:

A primeira utilização deve ser feita sob orientação técnica.


O cateter não pode ser utilizado, caso se verifique fuga de líquido da almofada de gel dentro da embalagem. Nos cateteres de gel pode acontecer pontualmente que, após a inserção, haja algum atraso na saída de urina.

Riscos e advertências:


Em caso de utilização de cateteres (sobretudo em caso de utilização indevida), pode ocorrer irritação/infeção ou ferimento ao nível do aparelho urinário. Nestes casos, procurar aconselhamento médico. Em caso de utilização indevida, pode verificar-se o esvaziamento incompleto da bexiga (urina residual). O cateter destina-se a uma utilização única. A reutilização ou a reciclagem aumentam o risco de infecção. Não utilizar sem gel deslizante estéril adequado, uma vez que não tem capacidade deslizante. Não utilizar, caso a embalagem estéril ou o cateter esteja danificado, devido ao perigo de infecção. Recomendamos uma temperatura de aplicação entre 15 e 25 °C.

Caso ocorram incidentes graves associados à utilização do cateter „IQ-Cath“ descartável, os mesmos devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades nacionais competentes, responsáveis no país de residência do utilizador.


	Número do artigo		0123	MD	Dispositivo médico com marcação CE
	Número de série				Utilizar até (ano-mês-dia)
	Guardar em local seco				Não reutilizável
	Este lado para cima				Autorização de introdução no mercado
	Não esterilizar de novo				Drug Tariff (catálogo dos medicamentos comparticipados pelo NHS – Serviço Nacional de Saúde britânico)
	Quantidade				Lista dos produtos e serviços prestados
	Mantar longe da luz solar				Não utilizar, se a embalagem estiver danificada
	Esterilização com óxido de etileno				Data de fabrico
	Sistema de barreira estéril único				Fabricante
	Sistema de barreira estéril único com embalagem protetora externa				Representante autorizado suíço
	Número de lote				Importador
	Respeitar as instruções de utilização				

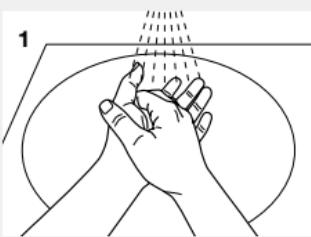

Antes da utilização, lavar e desinfetar bem as mãos. Não tocar diretamente em todo o cateter (à exceção do conector). Utilizar a embalagem funcional como auxiliar de manipulação.

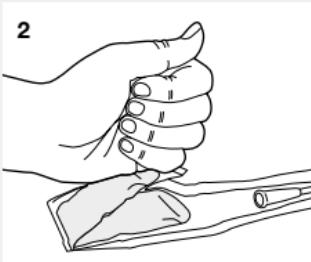


Abrir a almofada de gel, dobrando ou pressionando. Esvaziar todo o conteúdo para dentro da embalagem funcional.

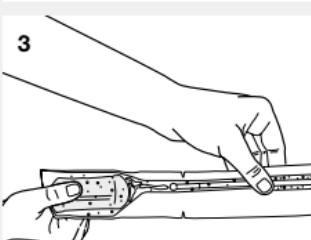


Distribuir o gel deslizante estéril deitando-o na embalagem funcional, humedecendo todo o cateter (à exceção do conector).

Abrir a parte dianteira da embalagem funcional com a almofada de gel e rasgar, separando-a da restante embalagem.

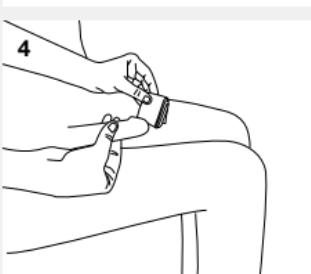


Desinfetar a abertura da uretra e a zona em volta com um desinfetante adequado para mucosas (respeitar as indicações do fabricante do desinfetante).

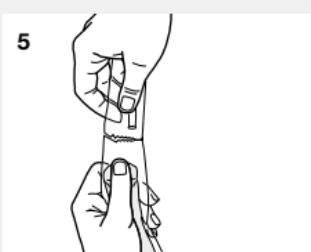


Abrir a embalagem funcional na extremidade posterior. Se o cateter ficar preso na embalagem, rodar o cateter lentamente para fora.

Caso necessário, unir o cateter ao saco de recolha de urina.

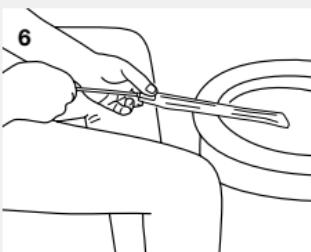

A embalagem funcional pode ser utilizada como extensão para despejar a urina diretamente para a sanita. Para o efeito, empurrar o cateter o máximo possível para a frente até que o conector vede.

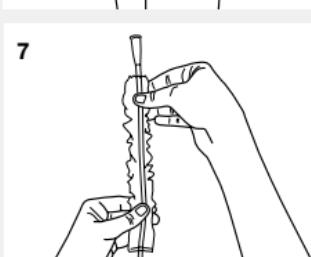

Inserir o cateter cuidadosamente na uretra, até se verificar saída de urina. Quando deixar de sair urina, retirar lentamente o cateter.

Eliminar o cateter com os restantes resíduos.

A MANFRED SAUER GmbH não aceita qualquer responsabilidade em caso de danos ou lesões que possam resultar de um manuseamento incorreto contrário a estas instruções de utilização ou da não observância das diretrizes de higiene.

Caso tenha dúvidas ou problemas, dirija-se ao pessoal médico ou ao nosso consultor comercial.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Ελληνική

Καθετήρας μίας χρήσης για τζελ για περιοδικό αυτοκαθετηριασμό

- Έτοιμο για χρήση
- Καθετήρας 2 ζωνών(σφαιρική κεφαλή, εύκαμπτη ζώνη και ζώνη καθοδήγησης)
- Λειτουργική συσκευασία για μεταβλητή εφαρμογή
- Συνολικό μήκος: περίπου 430 χιλιοστά, Μήκος χωρίς σύνδεσμο: περίπου 400 χιλιοστά
- 4 μεγέθη: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Ομάδες χρηστών: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Άνδρες

Προβλεπόμενη χρήση:

Ο IQ-Cath προορίζεται για μία και μοναδική χρήση για την προσωρινή παροχέτευση ούρων από την ουροδόχο κύστη για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς, σε περιπτώσεις διαταραχών κένωσης της ουροδόχου κύστης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας εφάπαξ ή διαλείπων αυτοκαθετηριασμός του ασθενούς ή καθετηριασμός του ασθενούς από άλλο άτομο.

Ενδείξεις:

Η ένδειξη για τον διαλείποντα αυτοκαθετηριασμό ή καθετηριασμό από άλλο άτομο τίθεται από την αντίστοιχη διάγνωση και εξαρτάται από την ατομική κατάσταση του εκάστοτε ασθενούς. Ο IQ-Cath είναι κατάλληλος για καθετηριασμό στις ακόλουθες ενδείξεις: διαταραχές κένωσης της ουροδόχου κύστης διαφορετικής αιτιολογίας (π.χ. νευρογενούς), υπολειτουργία ή μη συστατικότητα του εξωστήρα μυός, χρόνια κατακράτηση ούρων, μη φυσιολογική κένωση της ουροδόχου κύστης (ούρηση με άσκηση πίεσης) με και χωρίς υπόλειμμα ούρων.

Αντενδείξεις:

Ο IQ-Cath δεν είναι κατάλληλος για χρήση εάν έχουν παρουσιαστεί τα ακόλουθα προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με ιατρό πριν από τη χρήση: τραυματισμός της ουρήθρας, αιμορραγία της ουρήθρας, οξεία φλεγμονή της ουρήθρας ή του προστάτη, εμπόδια (π.χ. όγκοι) στην ουρήθρα, στον σφιγκτήρα της ουρήθρας ή στον προστάτη που εμποδίζουν τη διέλευση του καθετήρα..

Υποδείξεις για τη χρήση:

Η πρώτη χρήση θα πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση ειδικού.

Εάν εντός της συσκευασίας έχει ήδη διαρρεύσει υγρό από το μαξιλάρι γέλης, ο καθετήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον. Όταν χρησιμοποιούνται καθετήρες με γέλη, ενδέχεται μετά την εισαγωγή του καθετήρα να παρουσιαστεί ελαφριά καθυστέρηση, έως ότου αρχίσει η ροή των ούρων.


Κίνδυνοι και προειδοποίησεις:

Κατά τη χρήση καθετήρων (κυρίως σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης), μπορεί να προκληθεί ερεθισμός/λοιμωξη ή τραυματισμός του ουροποιητικού συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ζητείται η συμβουλή ιατρού.

Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, μπορεί να παραμείνουν στην ουροδόχο κύστη υπολείμματα ούρων. Ο καθετήρας προορίζεται για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση ή η επανεπεξεργασία αυξάνει τον κίνδυνο λοιμωξης. Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς κατάλληλο αποστειρωμένο λιπαντικό τζελ., διότι δεν ολισθαίνει. Μη χρησιμοποιείτε τον καθετήρα εάν η αποστειρωμένη συσκευασία ή ο ίδιος ο καθετήρας έχει υποστεί ζημιά, καθώς υφίσταται κίνδυνος λοιμωξης. Συνιστούμε θερμοκρασία χρήσης 15–25 °C.


Εάν κατά τη χρήση των καθετήρων μίας χρήσης «IQ-Cath» παρουσιαστούν σοβαρά περιστατικά, αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο χρήστης.

	Κωδικός προϊόντος		Ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE
	Σειριακός αριθμός		Χρήση έως (έτος-μήνας-ημέρα)
	Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος		Για μία μόνο χρήση
	Este lado para cima		Κωδικός φαρμάκου
	Μην επαναποστειρώνετε		Drug Tariff (Κατάλογος επιστροφής φαρμακευτικών προϊόντων του βρετανικού εθνικού συστήματος υγείας)
	Αριθμός τεμαχίων		Κατάλογος πρασιόντων και υπηρεσιών
	Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως		Μην το χρησιμοποιείτε, όταν η συσκευασία παρουσιάζει βλάβη
	Αποστείρωση με αιθυλενοξείδιο		Ημερομηνία κατασκευής
	Σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού		Κατασκευαστής
	Σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού με προστατευτική συσκευασία στο ξεωτερικό		Ευσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Ελβετίας
	Αριθμός παρτίδας		Εισαγωγέας
	Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης		

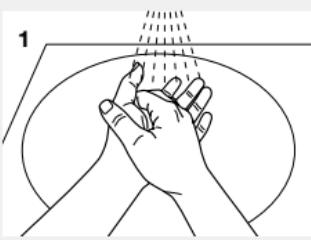


Πλύνετε καλά τα χέρια σας και απολυμάνετε τα πριν τη χρήση.


Αποφύγετε το άγγιγμα οποιαυδήποτε τμήματος της επιφάνειας του καθετήρα εκτός από τον κωνικό προσαρμογέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργική συσκευασία σαν βοήθημα κρατήματος του καθετήρα.

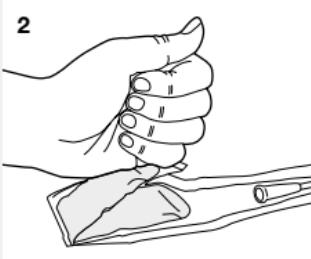


Διπλώστε πιέζοντας το φάκελο με το τζελ, έτσι ώστε όλο το περιεχόμενό του να αδειάσει μέσα στη συσκευασία του καθετήρα.

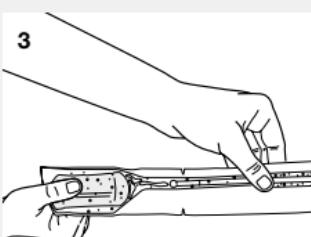


Απλώστε το αποστειρωμένο τζελ σε ολόκληρο το μήκος του καθετήρα (εκτός από τον κωνικό προσαρμογέα). Χρησιμοποιήστε τα σημεία εγκοπής στο εμπρόσθιο άκρο για να ανοίξετε τη συσκευασία και στη συνέχεια κόψτε με ένα απότομο τράβηγμα συμπεριλαμβανομένου του φακέλλου γέλης.

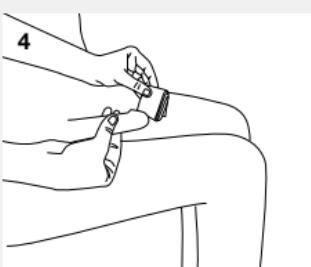


Καθαρίστε την ουρήθρα και την περιοχή γύρω της με ένα κατάλληλο απολυμαντικό βλεννογόνου (ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού).

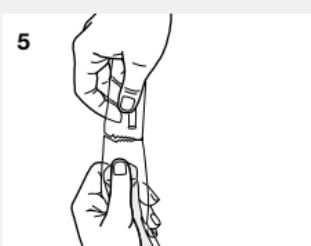

Ανοίξτε τη συσκευασία από το πίσω μέρος. Σε περίπτωση που ο καθετήρας παραμένει κολλημένος εντός της συσκευασίας, περιστρέψτε τον καθετήρα αργά για να βγει. Προσαρμόστε αν είναι απαραίτητο έναν ουροσυλλέκτη.

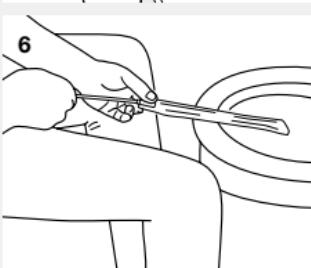

Η συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προέκταση για απευθείας ροή των ούρων στην τουαλέτα. Για το σκοπό αυτό πιέστε προς τα εμπρός τον καθετήρα, μέχρι να στεγανοποιηθεί ο κωνικός προσαρμογέας.

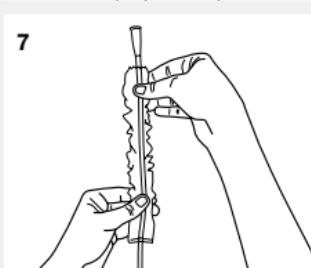

Εισάγετε προσεκτικά τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα, μέχρι να εκρεύσουν ούρα. Όταν δεν ρέουν πλέον ούρα, τραβήξτε αργά προς τα έξω τον καθετήρα.

Απορρίψτε τον καθετήρα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η MANFRED SAUER GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης, ενάντια στις παρούσες οδηγίες χρήσης, ή μη εφαρμογής των υγειονομικών οδηγιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία ή στους συμβούλους πελατών μας.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Magyar

Egyszer használatos géles katéter intermittáló önkatéterevezéshez

- Használatra kész
- 2 zónás katéter (golyós fej és bevezető zóna)
- Funkcionális csomagolás a változatos használathoz
- Teljes hossza: kb. 430 mm, hossza csatlakozó nélkül: kb. 400 mm
- 4 méret: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Felhasználói csoport: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Férfiak

Rendeltetési cél:

Az IQ-Cath katéter a vizeletnek a húgyhólyagból való egyszeri és átmeneti elvezetésére szolgál terápiás és diagnosztikai célokhoz fennálló hólyagürítési zavarok esetén. Egyszeri vagy intermittáló önkatéterevezést vagy idegen katéterevezést lehet elvégezni.

Javallatok:

Önkatéterevezés vagy idegen katéterevezés megfelelő diagnosztika alapján és az érintett személy egyedi helyzetétől függően javasolható.

Az IQ-Cath katéter a következő javallatok esetén megfelelő: Különféle eredetű (pl. neurogén) hólyagürítési zavarok, detrusor alulműködése, ill. detrusor össze nem húzódása, krónikus vizelet visszatartás, nem pszichológiai hólyagürítés maradék vizelettel és anélkül (nyomás általi vizeletürítés).

Ellenjavallatok:

Az IQ-Cath katéter a következő problémák jelentkezése esetén nem megfelelő: Ezekben az esetekben a használat előtt mindenki kérje ki orvosa tanácsát: Húgycső sérülése, húgycső vérzése, a húgycső vagy a prosztata akut gyulladása, ájtárhárítási akadályok (pl. tumorok) a húgycsőben, a húgycsőről izomnál vagy a prosztatanál.

Alkalmasítási utasítások:

Az első használatnak szakszerű utasítás mellett kell megtörténnie.


Amennyiben a csomagoláson belül már folyadék lépett ki a gélpárnából, a katétert már nem szabad használni. Alkalomadtán a géles katétereknél a bevezetés után kis késések fordulhatnak elő, amíg a vizelet elkezd folyni.

Kockázatok és figyelmeztetések:


Katéter használata (különösen nem szakszerű használat esetén) az elvezető húgyutak irritációjához/fertőzéséhez vagy sérüléséhez vezethet. Ilyen esetben kérje ki orvos tanácsát. Szakszerűtlen használat esetén a hólyagban vizelet maradhat. A katéter egyszeri használatra megfelelő. Az újból használat vagy újból előkészítés növeli a fertőzés kockázatát. Ne használja megfelelő steril síkosító gél nélkül, mivel nem csúszik. Károsodott steril csomagolás vagy károsodott katéter esetén ne használja, mivel fertőzésveszély áll fenn. Javasolt felhasználási hőmérséklet: 15–25 °C.

Amennyiben a „IQ-Cath“ egyszeri katéter használata során súlyos mellékhatást tapasztal, jelentse a gyártónak és a használó országának megfelelő illetékes hatóságnak.


	Cikkszám		MD 0123	CE-jelölés orvostechnikai eszköz
	Sorszám			Felhasználható eddig a dátumig (év, hónap, nap)
	Száraz helyen tárolandó			Nem használható újra
	Este lado para cima			Gyógyszerközponthoz száma
	Ne sterilizálja ismét			Drug tariff (a brit NHS által visszatéríthető gyógyszerek katalógusa)
	Darabszám			A termékek és szolgáltatók listája
	Napfénytől tartsa távol			Ha a csomagolás károsodott, ne használja
	Etilén-oxidos sterilizálás			Gyártás dátuma
	Egyszeres steril gátrendszer			Gyártó
	Egyszeres steril gátrendszer külső védőcsomagolással			Svájci meghatalmazott
	Tételszám			Importör
	Tartsa be a használati utasítást			

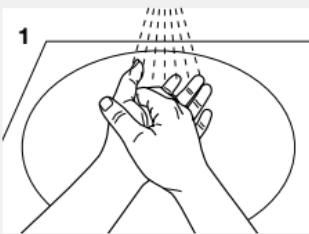

Használat előtt alaposan mossa meg és fertőtlenítse a kezét. Ne érintse meg az egész katétert (a csatlakozó kivételével). A megfogáshoz használja segítségül a funkcionális csomagolást.

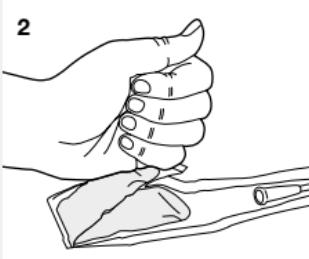


A gélpárnát töréssel és nyomással nyissa ki. Ürítse ki a teljes tartalmát a funkcionális csomagolásba.

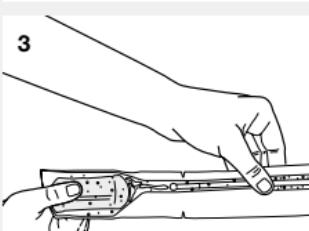


A steril síkosító gélt (töltsé a funkcionális csomagolásba és) kenő mozdulattal oszlassa el a teljes katéteren (a csatlakozó kivételével).

A funkcionális csomagolás első részét a gélpárnával együtt tépje be és egy rántással válassza le.

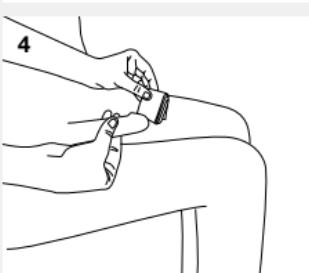

Fertőtlenítse a húgycső nyílását és a körülötte lévő területet megfelelő, nyálkahártyára való fertőtlenítőszerekkel (vegye figyelembe a fertőtlenítőszér gyártójának utasításait).

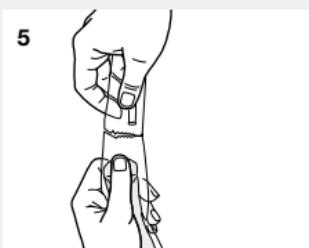


Nyissa ki a funkcionális csomagolást a hátsó végén. Amennyiben a katéter a csomagolásban maradt, lassan forditsa ki a katétert.

Szükség esetén a katétert vizeletfelfogó zsákkal is össze lehet kötni.



A funkcionális csomagolás hosszabbítóként a vizeletnek a közvetlenül a vécébe történő kifolyatására használható. Ehhez tolja előre a katétert annyira, amíg a csatlakozó eltömíti.

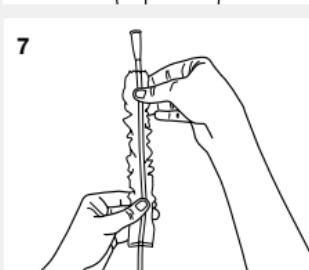

Óvatosan vezesse be a katétert a húgycsőbe, amíg a vizelet kifolyik. Ha már nem folyik több vizelet, lassan húzza ki a katétert.

A katétert helyezze a vegyes hulladékba.

A MANFRED SAUER GmbH nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérülésekért, amelyek ezen használati utasítástól eltérő, szakszerűtlen használat miatt vagy a higiéniai irányelvek be nem tartása miatt keletkeznek.

Kérdések vagy problémák esetén, kérjük, forduljon egészségügyi szakemberhez vagy az ügyféltanácsadónkhoz.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Polski

Żelowy cewnik jednorazowy do samocewnikowania przerwywanego (ISK)

- Gotowy do użycia
- Cewnik 2-strefowy (głowica kulowa i strefa do wprowadzania)
- Opakowanie funkcyjne do różnych zastosowań
- Długość całkowita: ok. 430 mm, długość bez łącznika: ok. 400 mm
- 4 rozmiary: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Grupa użytkowników: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Mężczyźni

Przeznaczenie:

Cewnik IQ-Cath jest przeznaczony do jednorazowego i tymczasowego odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w celach terapeutycznych lub diagnostycznych w przypadku zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego. Można wykonać jednorazowe lub przerywane samocefnikowanie (ISK) lub cewnikowanie przy pomocy innej osoby (IFK).

Wskazania:

Wskazania do ISK lub IFK ustalane są po odpowiedniej diagnostyce i w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Cewnik IQ-Cath jest przeznaczony do cewnikowania w przypadku następujących wskazań: Zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego o różnej genezie (np. neurogenne), niedoczytność lub kurczliwość wypieracza, przewlekłe zatrzymanie moczu, niefizjologiczne opróżnianie pęcherza moczowego (mikcja wywoływana zewnętrznym uciskiem pęcherza moczowego) z zaleganiem moczu lub bez.

Przeciwwskazania:

Cewnik IQ-Cath może być nieodpowiedni w razie występowania poniższych problemów. W następujących przypadkach przed zastosowaniem należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem: uszkodzenie cewki moczowej, krwawienie z cewki moczowej, ostre zapalenie cewki moczowej lub gruczołu krokowego, przeszkody utrudniające przejście (np. guzy) w cewce moczowej, w zwieraczu cewki moczowej lub w gruczole krokowym.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

Pierwsze zastosowanie powinno przebiegać z fachowym wsparciem.

Jeżeli z poduszki żelowej wewnętrz opakowania wyciekł płyn, cewnika nie wolno stosować. W przypadku cewników żelowych może niekiedy po założeniu wystąpić niewielkie opóźnienie w rozpoczęciu przepływu moczu.

Ryzyka i ostrzeżenia:

Podczas stosowania cewników (zwłaszcza w razie ich niewłaściwego zastosowania) może dojść do podrażnienia/zakażenia lub uszkodzenia dróg moczowych. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.


W przypadku niewłaściwego zastosowania resztki moczu mogą pozostać w pęcherzu moczowym. Cewnik jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Ponowne zastosowanie lub przygotowanie do ponownego użycia zwiększa ryzyko infekcji. Nie stosować bez odpowiedniego sterylnego żelu poślizgowego z uwagi na brak poślizgu. Nie używać w przypadku uszkodzonego sterylnego opakowania lub uszkodzonego cewnika z uwagi na ryzyko infekcji. Zalecamy temperaturę użycia w zakresie 15–25°C.

Jeśli podczas stosowania cewników jednorazowych „IQ-Cath” dojdzie do poważnych incydentów, należy to zgłosić producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym przebywa użytkownik.



- Numer artykułu
Numer seryjny
Przechowywać w suchym miejscu
Tą stroną do góry
Nie poddawać ponownej sterylizacji
Lic zba sztuk
Chronić przed światłem słonecznym
Sterylizacja tlenkiem etylenu
Pojedynczy system bariery sterylinej
System pojedynczego opakowania sterylizacyjnego z opakowaniem ochronnym na zewnątrz
Numer partii
Postępować zgodnie z instrukcją


- 0123 Wyrób medyczny z oznakowaniem CE
 Przydatność do użycia (rok-miesiąc-dzień)
 Nie nadaje się do ponownego stosowania eder
 PZN Centralny numer farmaceutyczny
 DT Taryfikator leków (katalog leków refundowanych przez brytyjski system opieki zdrowotnej NHS)
 LPP Lista produktów i usług
 Nie stosować, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
 Data produkcji
 Producent
 CH REP Szwajcarski pełnomocnik
 Importer

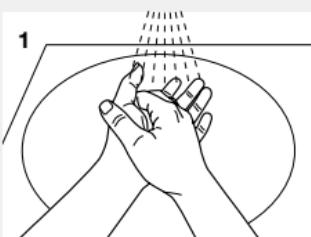


Przed zastosowaniem dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. Nie należy bezpośrednio dotykać całego cewnika (z wyjątkiem łącznika). Pomocniczo do chwytania wykorzystać opakowanie funkcyjne.




Otworzyć poduszkę żelową – w tym celu należy ją zgiąć i nacisnąć. Opróżnić całą zawartość do opakowania funkcyjnego.

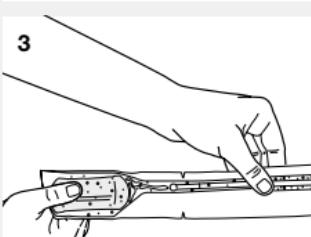


Rozprowadzić sterylny żel poślizgowy po wprowadzeniu do opakowania funkcyjnego, rozsmarowując go na całym cewniku (z wyjątkiem łącznika). Rozerwać przednią część opakowania funkcyjnego z poduszką żelową i oderwać je szarpnięciem.

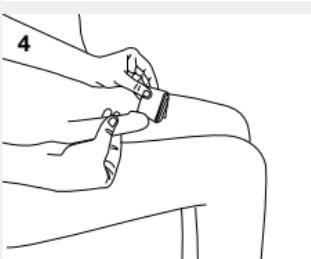


Zdezynfekować otwór cewki moczowej i obszar wokół niego odpowiednim środkiem do dezynfekcji błon śluzowych (postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka dezynfekcyjnego).

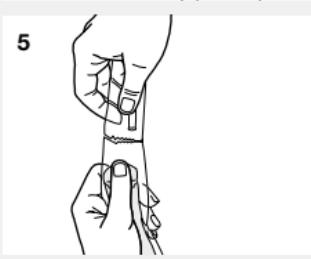

Otworzyć opakowanie funkcyjne za tylny koniec. Jeżeli cewnik utknie w opakowaniu, należy go uwolnić powolnym ruchem wykręcającym. W razie potrzeby połączyć cewnik z workiem do zbiórki moczu.

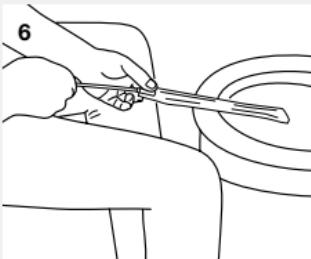

Opakowanie funkcyjne można wykorzystać jako przedłużenie do odprowadzania moczu bezpośrednio do toalety. W tym celu należy przesunąć cewnik do przodu na tyle, aby nastąpiło uszczelnienie łącznika.

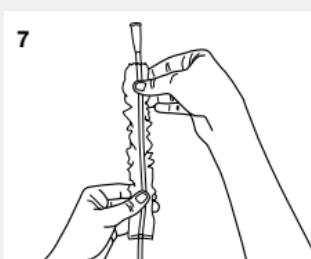

Ostrożnie wprowadzać cewnik do cewki moczowej do momentu wypływu moczu. Gdy mocz przestanie wypływać, należy powoli wyciągnąć cewnik.

Wyrzucić cewnik wraz z odpadami ogólnymi.

Firma MANFRED SAUER GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które mogą wyniknąć z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, stosowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi lub niesztosowania się do zaleceń w zakresie higieny.

W przypadku pytań lub problemów prosimy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu medycznego lub naszego doradcy klienta.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Čeština

Gelový jednorázový katetr pro ČIK (čistou intermitentní katetrizaci)

- Připraven k použití
- 2zónový katétr (kulová hlava a vodicí zóna)
- Funkční obal pro variabilní použití
- Celková délka: cca 430 mm, Délka bez konektoru: cca 400 mm
- 4 velikostí: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Skupina uživatelů: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Muži

Stanovení účelu:

IQ-Cath je určen pro jednorázové a přechodné odvedení moči z močového měchýře k terapeutickým nebo diagnostickým účelům při poruchách s vyprazdňováním močového měchýře. Lze provést jednorázovou nebo čistou autokatetizaci nebo katetizaci třetí osobou.

Indikace:

Indikace pro autokatetizaci nebo katetizaci třetí osobou se určí po odpovídající diagnostice a podle individuální situace postižené osoby.

IQ-Cath je vhodný pro katetizaci u následujících indikací: Poruchy vyprazdňování močového měchýře různého původu (např. neurogenní), snížená aktivita detruzoru popř. akontraktilita detruzoru, chronické zadržování moči, nefyziologické vyprazdňování močového měchýře (vytlačování moči) se zbytkovou močí a bez ní.

Kontraindikace:

IQ-Cath není vhodný při výskytu následujících problémů. V těchto případech je před použitím nutno kontaktovat lékaře: Poranění močové trubice, krvácení močové trubice, akutní zánět močové trubice nebo prostaty, překážky pasáže (např. nádory) v močové trubici, na svěrači močové trubice nebo prostatě.

Pokyny pro použití:

První použití by mělo probíhat pod odbornou instruktáží.


Pokud by z gelového polštářku uvnitř obalu již vytékala tekutina, nesmí se katetr dále používat. Někdy může u gelových katetrů po zavedení docházet k tomu, že moč začne vytékat s mírným zpožděním.

Rizika a výstražná upozornění:


Při použití katetrů (především v případě neodborného použití) může dojít k podráždění/infekci nebo poranění odvodních močových cest. V tomto případě je nutno si zajistit lékařskou radu. V případě neodborného použití může v močovém měchýři zůstávat zbytková moč. Katetr je určen k jednorázovému použití. Opakované použití nebo opakována příprava zvyšuje riziko infekce. Nepoužívejte bez vhodného sterilního lubrikačního gelu, protože není kluzný. Nepoužívejte v případě poškozeného sterilního obalu nebo poškozeného katetru, protože hrozí nebezpečí infekce. Doporučujeme aplikaci teplotu 15 – 25 °C.

Pokud by při použití jednorázových katetrů „IQ-Cath“ došlo k závažným případům, je nutno je nahlásit výrobci a příslušnému úřadu země, ve kterém má uživatel své sídlo.


	Číslo výrobku		Označení CE Zdravotnický prostředek
	Sériové číslo		Použitelné do (rok-měsíc-den)
	Uchovávejte v suchu		Není určeno k opakovanému použití
	Tuto stranou nahoru		Centrální farmaceutické číslo
	Nesterilizujte opakovaně		Ceník léků (katalog hrazených léčivých přípravků britské NHS)
	Počet kusů		Seznam produktů a služeb
	Chraňte před slunečním zářením		Nepoužívejte v případě poškozeného obalu
	Sterilizace ethylenoxidem		Datum výroby
	Jednoduchý sterilní bariérový systém		Výrobce
	Jednoduchý sterilní bariérový systém s vnitřním ochranným obalem		Švýcarský zmocněný zástupce
	Číslo šarže		Dovozce
	Dodržujte návod k použití		

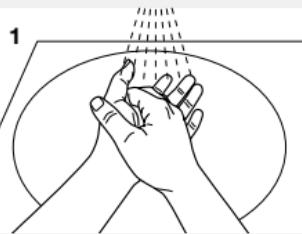

Před použitím si důkladně umyjte a desinfikujte ruce. Nedotýkejte se žádné části povrchu katetru (s výjimkou nálevky). Funkčním obalem lze použít jako úchopovou pomůcku k zachování sterility katetru.

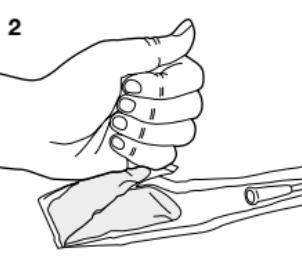


Zlomením a stlačením, vyprázdněte vložený sáček s gelem. Vyprázdněte celý obsah do obalu.

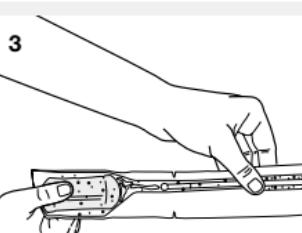

Napipetujte sterilní gel do obalu a rozdělte ho na celý katetr (kromě konektoru).


Přední díl funkčního obalu s polštářkem obsahujícím gel nathněte v místech s odtrhávací značkou a celý i s polštářkem obsahujícím gel utrhněte.

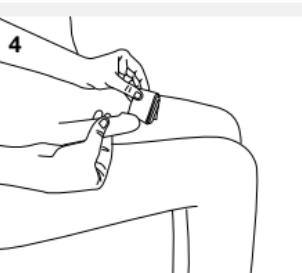


Očistěte vývod močové trubice a okolní oblasti dezinfekčním prostředkem vhodným pro sliznice (dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního přípravku).



Otevřete obal v zadní části.
Pokud by katér uvízl v obalu, pomalu jej z něj vytočte.
V případě potřeby připojte sběrný sáček na moč.

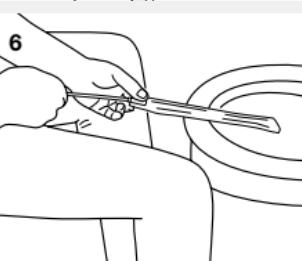

Obal může být využit k prodloužení a umožní odvod moči přímo do toalety. Stahujte obal směrem k barevnému koncovému kónusu, který dotažením do krajní polohy utěsní odtok.

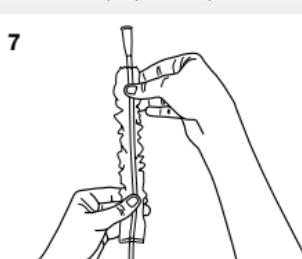

Obal může být využit k prodloužení a umožní odvod moči přímo do toalety. Stahujte obal směrem k barevnému koncovému kónusu, který dotažením do krajní polohy utěsní odtok.

Při likvidaci katetru postupujte podle místních předpisů.

Společnost MANFRED SAUER GmbH neodpovídá za škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací v rozporu s tímto návodem k použití nebo nedodržením hygienických směrnic.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy, obraťte se na svého lékaře nebo na našeho zákaznického poradce.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Cateter cu gel de unică folosință pentru ISK (auto-cateterizare intermitentă)

- Gata de utilizare
- Cateter cu 2 zone (cap cu bilă și zonă de ghidare)
- Ambalaj funcțional pentru utilizare variabilă
- Lungime totală: aprox. 430 mm, lungime fără conector: aprox. 400 mm
- 4 mărimi: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Grupa de utilizatori: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Bărbați

Scopul utilizării:

IQ-Cath este destinat pentru devierea unică și temporară a urinei din vezica urinară în scopuri terapeutice sau de diagnosticare, în prezența tulburărilor de golire a vezicii urinare. Se poate efectua auto-cateterizarea unică sau intermitentă (ISK) sau cateterizarea externă (IFK).

Indicație:

Indicația pentru ISK sau IFK se face în urma unor diagnostice adecvate și în funcție de situația individuală a persoanei în cauză.

IQ-Cath este potrivit pentru cateterizare în cazul următoarelor indicații: Tulburări de golire a vezicii urinare de geneză diferită (de exemplu, neurogenă), subactivitatea sau contractilitatea mușchiului detrusor, retenție urinară cronică, golirea non-fiziologică a vezicii urinare (micțiune imperioasă) cu și fără urină reziduală.

Contraindicație:

În cazul unor probleme, este posibil ca IQ-Cath să nu fie indicat. În aceste cazuri, trebuie contactat neapărat un medic înainte de utilizare: Leziuni ale uretrei, hemoragie uretrală, inflamație acută a uretrei sau a prostatei, obstrucție de trecere (de exemplu, tumori) în uretră, la nivelul sfîncuterului uretral sau al prostatei.

Indicații privind utilizarea:

Prima utilizare trebuie aibă loc sub îndrumarea unui profesionist.


Dacă s-a scurs deja lichid din perna de gel din interiorul ambalajului, nu se va mai utiliza cateterul. Ocazional, cateterele cu gel pot avea o ușoară întârziere după inserție până când urina începe să curgă.

Riscuri și avertismente:

Utilizarea cateterelor (în special utilizarea necorespunzătoare) poate provoca iritații/infecții sau leziuni ale tractului urinar. În acest caz, se va consulta imediat un medic.


În cazul unei utilizări necorespunzătoare, urina reziduală ar putea rămâne în vezica urinară. Cateterul este de unică folosință. Reutilizarea sau reprocesarea crește riscul de infecție. A nu se utiliza fără un lubrifiant steril adecvat, deoarece nu alunecă. A nu se utiliza în cazul unui ambalaj steril deteriorat sau al unui cateter deteriorat, deoarece există risc de infecție. Recomandăm o temperatură de utilizare de 15–25 °C.

În caz de incidente grave apărute la momentul utilizării cateterelor de unică folosință „IQ-Cath”, acestea se vor raporta producătorului și autorității competente din țara în care este stabilit utilizatorul.

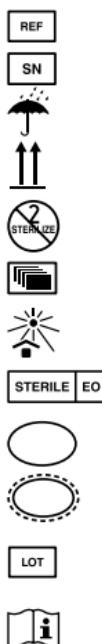


- Număr articol
Număr de serie
Depozitați într-un loc uscat
Cu partea asta în sus
Nu sterilizați din nou
Număr de bucăți
Păstrați departe de lumina soarelui
Sterilizare cu oxid de etilenă
Sistem de barieră sterilă unică
Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în exterior
Numărul lotului
Respectați instrucțiunile de utilizare


- 0123 Dispozitiv medical cu marcul CE
 Valabil până la (anul-luna-ziuă)
 Produs nereutilizabil
 Numărul central farmaceutic
 Drug tariff (catalogul medicamentelor rambursabile conform NHS din Regatul Unit)
 Lista produselor și prestațiilor
 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
 Data fabricației
 Producător
 Împoternicit pentru Elveția
 Importator

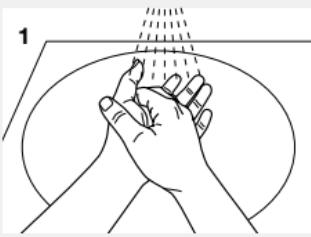

Spălați și dezinfecțați bine mâinile înainte de utilizare. Nu atingeți direct întregul cateter (cu excepția conectorului). Utilizați ambalajul funcțional ca ajutor de prindere.

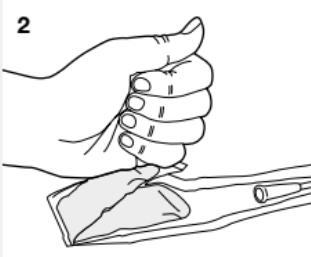


Deschideți perna de gel prin îndoire și apăsare. Goliți întregul conținut în ambalajul funcțional.

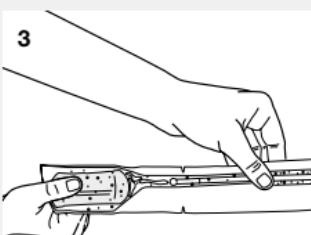


Distribuiți gelul lubrifiant steril umpleți în ambalajul funcțional și, întinzându-l pe întregul cateter (cu excepția conectorului).

Rupeți partea din față a ambalajului funcțional cu pernuța de gel și separați-o dintr-o smucitură.

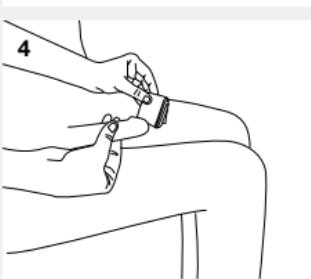

Dezinfectați orificiul uretral și zona din jurul acestuia cu un dezinfector adecvat pentru membranele mucoase (urmați instrucțiunile producătorului dezinfectorului).

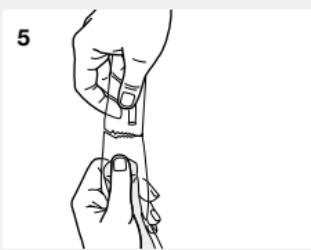


Deschideți ambalajul funcțional la capătul din spate. În cazul în care cateterul rămâne blocat în ambalaj, răsuștiți încet cateterul pentru a-l scoate.

În caz de nevoie, conectați cateterul la o pungă colecțoare de urină.



Ambalajul funcțional poate fi folosit ca o extensie, pentru a scurge urina direct în toaletă. Pentru a face acest lucru, împingeți cateterul înspre înainte, până când se etanșează conectorul.

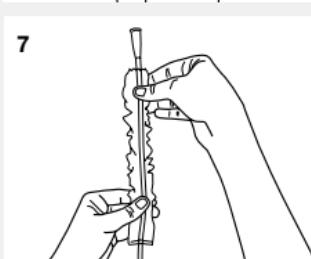

Introduceți ușor cateterul în uretră, până când se scurge urina. Când nu mai curge urină, scoateți încet cateterul.

Aruncați cateterul la deșeurile menajere.

MANFRED SAUER GmbH nu își asumă răspunderea pentru daune sau vătămări care pot rezulta ca urmare a manipulării necorespunzătoare, contrar prezentelor instrucții de utilizare sau în urma nerespectării directivelor de igienă.

În caz de întrebări sau probleme, vă rugăm să vă adresați personalului medical sau consultanților noștri pentru clienți.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Български

Еднократен катетър с гел за периодична самокатетеризация (ISK)

- Готов за употреба
- Двузонов катетър (сферична глава и направляваща зона)
- Функционална опаковка за различни приложения
- Обща дължина: прибл. 430 mm, дължина без конектор: прибл. 400 mm
- 4 размера: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Потребителска група: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Мъже

Предназначение:

Катетърът IQ-Cath е предназначен за еднократно и временно отвеждане на урината от пикочния мехур за терапевтични или диагностични цели при нарушен изпразване на пикочния мехур. С него може да се осъществява еднократна или периодична самокатетеризация (ISK) или асистирана катетеризация (IFK).

Показания:

Показанията за ISK или IFK се установяват след съответната диагностика и в зависимост от индивидуалното състояние на засегнатото лице.

Катетърът IQ-Cath е подходящ за катетеризиране при следните показания: Нарушено изпразване на пикочния мехур с различна генеза (напр. неврогенни), намалена активност или контрактилна способност на детрузора, хронично задържане на урина, нефизиологично изпразване на пикочния мехур (пресмикция) със или без остатъчна урина.

Противопоказания:

Катетърът IQ-Cath може да не е подходящ при наличие на следните проблеми. В такива случаи преди употреба за всеки случай трябва да се направи консултация с лекар: Нараняване на уретрата, кървене от уретрата, остро възпаление на уретрата или простатата, проходни препятствия (напр. тумори) в уретрата, в уретралния сфинктер или в простатата.

Указания за употреба:

Първото приложение трябва да се осъществи под професионално ръководство.

Ако течността е изтекла от подложката с гел в опаковката, катетърът не трябва да се използва. След въвеждането на катетри с гел понякога може да се получи леко забавяне, докато започне да тече урина.


Рискове и предупреждения:

При използването на катетри (и преди всичко при неправилно използване) може да се стигне до дразнене/инфекция или увреждане на пикочните пътища. В такъв случай трябва да се потърси лекарски съвет.


При неправилна употреба в пикочния мехур може да се задържа остатъчна урина. Катетърът е предназначен за еднократна употреба. Повторната употреба или повторната обработка увеличават опасността от инфекция. Да не се използва без подходящ стерилен гел лубрикант, тъй като не е хълзгав. Да не се използва при повредена стерилна опаковка или повреден катетър, тъй като има опасност от инфекция. Препоръчителен температурен диапазон за употреба 15–25°C.

Ако при използването на еднократни катетри „IQ-Cath“ възникнат сериозни инциденти, моля информирайте производителя и компетентните органи на страната, в която е регистриран потребителят.


	Артикул №		CE-знак медицински продукт
	Сериен номер		Да се използва преди (година-месец-ден)
	Да се съхранява на сухо място		Да не се използва повторно
	Тази страна нагоре		Централен идентификационен код на лекарствени продукти
	Да не се стерилизира повторно		Тарифи на таксите за лекарствени продукти (UK)
	Спецификация		Списък на продуктите и услугите (FR)
	Да се пази от слънчева светлина		Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Стерилизирано с етиленов оксид		Дата на производство
	Единична стерилна бариерна система		производител
	Единична стерилна бариерна система със защитна опаковка отвън		Швейцарски упълномощен представител
	Номер на партида		Вносител
	Да се съблюдава инструкцията за употреба		

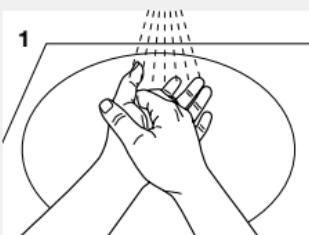

Преди употреба измийте и дезинфекцирайте старательно ръцете си. Не докосвайте директно целия катетър (с изключение на конектора). Използвайте функционалната опаковка като помагало при хващане.

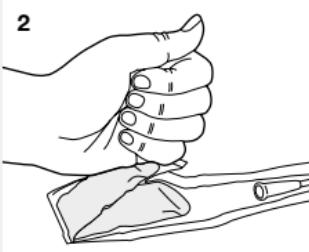


Отворете гел подложката, като я прегънете и натиснете. Излейте цлото съдържание във функционалната опаковка.

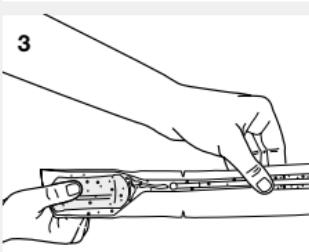


Разпределете стерилния гел лубрикант като напълните с него функционалната опаковка чрез равномерно разнасяне върху целия катетър (с изключение на конектора).

Разкъсайте предната част на функционалната опаковка с гел подложката и я откъснете с едно дърпане.

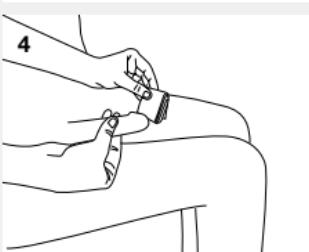


Дезинфекцирайте уретралния отвор и зоната около него с подходящ дезинфектант за лигавици (спазвайте указанията на производителя на дезинфектанта).

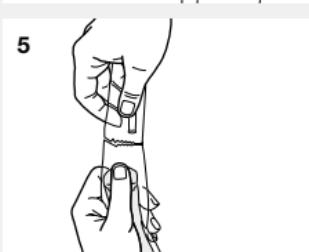


Отворете функционалната опаковка откъм задния край.

Ако катетърът остане заклинен в опаковката, извадете го с бавно въртеливо движение.

Ако е необходимо, свържете катетъра към торба за събиране на урина.

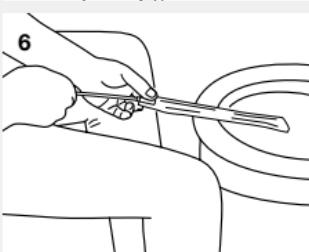

Можете да използвате функционалната опаковка като удължение за директно отвеждане на урината в тоалетната. За целта вкарайте катетъра напред, докато конекторът е напълно уплътнен.

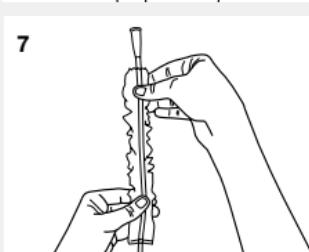

Вкарайте внимателно катетъра в уретрата, докато урината потече. След като урината престане да тече, бавно извадете катетъра.

Изхвърлете катетъра с битовите отпадъци.

Фирма MANFRED SAUER GmbH не поема отговорност за щети или наранявания, които могат да възникнат в резултат от неправилно боравене поради неспазване на настоящата инструкция за употреба или неспазване на правилата за поддържане на хигиената.

При въпроси или проблеми се обръщайте към медицински специалисти или към нашите клиентски консултанти.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Gelni kateter za enkratno uporabo za ISK (intermitentna samokateterizacija)

- Pripravljen za uporab
- Kateter z dvema conama (okrogla glava in pretočna cona)
- Funkcijska embalaža za raznoliko uporabo
- Skupna dolžina: pribl. 430 mm, dolžina brez priključka: pribl. 400 mm
- 4 velikosti: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Skupina uporabnikov: IQ3104.xx, IQ3114.xx – moški

Namen:

IQ-Cath je namenjen za enkratno uporabo in začasno odvajanje urina iz sečnega mehurja v terapevtske ali diagnostične namene v primeru težav z uriniranjem. Lahko se izvede kateterizacija za enkratno uporabo ali intermitentna samokateterizacija (ISK) ali pa kateterizacijo izvede druga oseba (IFK).

Indikacije:

Indikacije za ISK ali IFK se določijo po ustrezni diagnozi in so odvisne od posamezne situacije prizadete osebe.

IQ-Cath je primeren za kateterizacijo pri naslednjih indikacijah: Težave z uriniranjem različnega izvora (npr. nevrogeni), neaktivnost mišice detrusor ali kontraktilnost detrusorja, kronično zadrževanje urina, nefiziološko praznjenje mehurja (mikcija s pritiskom) z in brez preostalega urina.

Kontraindikacije:

IQ-Cath morda ni primeren, če se pojavijo naslednje težave. V teh primerih se morate pred uporabo na vsak način posvetovati z zdravnikom: Poškodba sečnice, krvavitev iz sečnice, akutno vnetje sečnice ali prostate, ovire (npr. tumorji) v sečnici, sečnični sfinkter ali prostata.

Napotki za uporabo:

Prva uporaba mora potekati pod strokovnim vodstvom.

Če je tekočina v embalaži že izteklia iz gelne blazinice, katetra ne smete več uporabljati. Včasih lahko po vstavtvitvi gelnega katetra pride do rahlega zamika, preden začne urin iztekat.

Nevarnosti in opozorila:


Uporaba katetrov (zlasti če se uporabljajo nepravilno) lahko povzroči draženje/okužbo ali poškodbe sečil. V tem primeru se je treba nujno posvetovati z zdravnikom.

Pri nepravilni uporabi lahko urin ostaja v mehurju. Kateter je namenjen za enkratno uporabo. Ponovna uporaba ali ponovna namestitev poveča nevarnost za okužbo. Ne uporabljajte brez primernega sterilnega gela za gladko drsenje, ker ne drsi. Ne uporabljajte, če je sterilna embalaža poškodovana ali če je poškodovan kateter, ker obstaja nevarnost okužbe. Priporočamo temperaturo uporabe 15–25 °C.


Če bi med uporabo katetrov za enkratno uporabo „IQ-Cath“ prišlo do težjih zapletov, je o tem treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države, v kateri biva uporabnik.




Številka artikla		Uporabno do (leto-mesec-dan)
Serijska številka		Ni za večkratno uporabo
Hranite na suhem mestu		Centralna farmacevtska številka
Ta stran gor		Tarifa za zdravila (Katalog zdravil britanske NHS, Nacionalne zdravstvene službe)
Ne sterilizirajte ponovno		Seznam izdelkov in storitev
Število kosov		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
Hranite zaščiteno pred sončno svetlobo		Datum izdelave
Sterilizirano z etilenoksidom		Proizvajalec
Enojni sterilni pregradni sistem		Švicarski pooblaščeni predstavnik
Enojni sterilni pregradni sistem z zunanjim zaščitnim embalažo		Uvoznik
Številka serije		
Upoštevajte navodila za uporabo		
Oznaka CE Medicinski pripomoček		

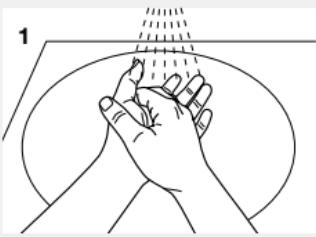

Pred uporabo roke temeljito umijte in razkužite. Ne dotikajte se neposredno celotnega katetra (razen priključka). Funkcionalno embalažo uporabite kot oprijem.

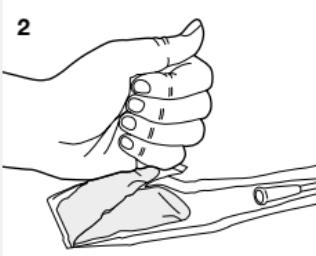


Gelno blazinico odprite tako, da prepognete in pritisnete. Izpraznите celotno vsebino v funkcijsko embalažo.

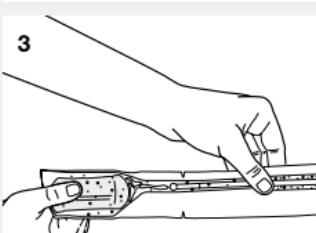


Sterilni gel napolnite v funkcionalno embalažo in z glajenjem razporedite po celotnem katetu (razen priključka).

Odtrgajte sprednji del funkcionalne embalaže z gelno blazinico in jo z enim sunkom odstranite.

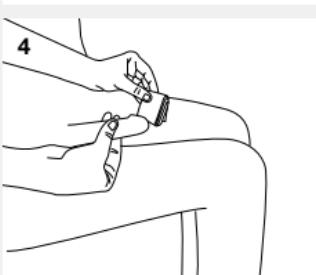


Odprtino sečnice in območje okoli nje razkužite z ustreznim razkužilom za sluznico (upoštevajte navodila proizvajalca razkužila).

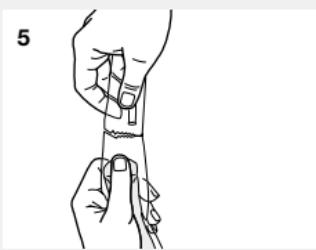

Odprite funkcijsko embalažo na zadnjem koncu. Če se kateter zatakne v embalaži, ga počasi odvijte. Po potrebi kateter povežite z vrečko za zbiranje urina.



Funkcionalno embalažo lahko uporabite kot neposredni podaljšek za odtok urina v stranišče. V ta namen potisnite kateter toliko naprej, da priključek zatesni.

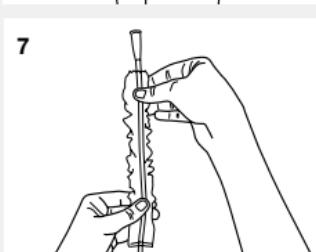

Gelni Previdno vstavite kateter v sečnico, da urin začne odtekati. Ko urin preneha teči, kateter počasi izvlecite.

Gelni Kateter odvrzite med mešane odpadke.

Družba MANFRED SAUER GmbH ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, ki ni predvidena v navodilih za uporabo, ali zaradi neupoštevanja higienskih smernic.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, se obrnite na strokovne zdravstvene delavce ali na naše svetovalce.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Jednokratni gel kateter za ISK (povremenu samokateterizaciju)

- Spremno za uporabu
- 2-zonski kateter (zaobljen vrh i zona vodilice)
- Funkcionalno pakiranje za promjenjivu uporabu
- Ukupna duljina: približno 430 mm, duljina bez priključka: približno 400 mm
- 4 veličine: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Korisnička skupina: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Muškarci

Namjena:

Kateter IQ-Cath namijenjen je za jednokratno i privremeno odvođenje mokraće iz mokraćnog mjehura u terapeutske ili dijagnostičke svrhe kod poremećaja mokrenja. Moguće je obavljati jednokratnu ili povremenu samokateterizaciju (ISK) ili vanjsku kateterizaciju (IFK).

Indikacija:

Indikacija za ISK ili IFK utvrđuje se nakon odgovarajuće dijagnoze te ovisno o individualnoj situaciji bolesnika.

Kateter IQ-Cath prikladan je za kateterizaciju kod sljedećih indikacija: Poremećaji pražnjenja mjehura različitog uzroka (npr. neurogeni), nedovoljna aktivnost detruzora ili kontraktiност detruzora, kronično zadržavanje mokraće, nefiziološko pražnjenje mjehura (mokrenje uz pritisak) sa zaostalim urinom i bez njega.

Kontraindikacija:

Kateter IQ-Cath možda neće biti prikladan u slučaju pojave problema opisanih u nastavku. U ovim je slučajevima prije uporabe svakako nužno posavjetovati se s liječnikom: ozleda mokraćne cijevi, krvarenje u mokraćnoj cijevi, akutna upala mokraćne cijevi ili prostate, začepljenja (npr. tumori) u mokraćnoj cijevi, na sfinkteru mokraćne cijevi ili prostatu.

Upute za primjenu:

Prva primjena treba se odvijati pod stručnim vodstvom.

Ako je unutar pakiranja tekućina već iscurila iz jastučića od gela, kateter se više ne smije upotrijebiti. Kod katetera s gelom ponekad nakon umetanja urin počinje teći tek nakon kratkog kašnjenja.

Rizici i upozorenja:

Uporaba katetera (osobito nestručna) može izazvati nadraženost/infekciju ili oštećenja mokraćnog sustava. U tom slučaju potrebno je potražiti liječnički savjet.


U slučaju nepravilne uporabe urin bi mogao zaostati u mjehuru. Kateter je namijenjen za jednokratnu upotrebu. Ponovna uporaba ili ponovna obrada povećavaju opasnost od infekcije. Nemojte upotrijebiti bez odgovarajućeg sterilnog gela za podmazivanje jer nije podmazan. Nemojte upotrebljavati ako je sterilno pakiranje oštećeno ili ako je oštećen kateter jer postoji opasnost od infekcije. Preporučujemo primjenu na temperaturi od 15 – 25 °C.

Ako prilikom uporabe jednokratnog katetera IQ-Cath dođe do pojave ozbiljnih štetnih događaja, o tome treba obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo zemlje u kojoj je korisnik rezidentan.




- | | |
|--|--|
| Broj artikla | |
| Serijski broj | |
| Čuvati na suhom | |
| Ova strana gore | |
| Nemojte ponovno sterilizirati | |
| Broj komada | |
| Čuvati od sunčeve svjetlosti | |
| Sterilizirano etilen oksidom | |
| Jednostruki sustav sterilne barijere | |
| Jednostruki sustav sterilne barijere s vanjskim zaštitnim pakiranjem | |
| Broj serije | |
| Pogledajte upute za uporabu | |


- | | |
|------|--|
| 0123 | ^{MD} Medicinski proizvod s oznakom CE |
| | Upotrijebiti do (godina-mjesec-dan) |
| | Nemojte ponovno upotrijebiti |
| | Farmaceutski centralni broj |
| | Drug tariff (Katalog lijekova britanskog NHS-a čiji se troškovi nadoknaduju) |
| | Popis proizvoda i usluga |
| | Nemojte upotrijebiti ako je ambalaža oštećena |
| | Datum proizvodnje |
| | Proizvođač |
| | Švicarski ovlašteni predstavnik |
| | Uvoznik |

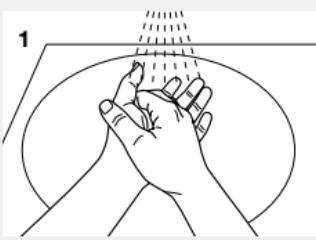


Prije uporabe temeljito operite i dezinficirajte ruke. Ne dodirujte izravno cijeli kateter (osim priključka). Upotrijebite funkcionalno pakiranje kao pomoć pri držanju.

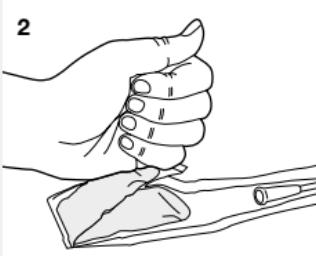


Otvorite jastučić od gela savijanjem i potiskivanjem. Ispraznите cijeli sadržaj u funkcionalno pakiranje.

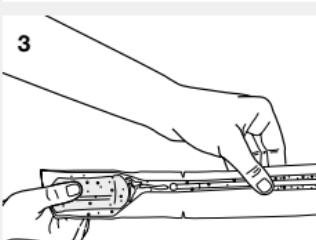

Sterilni gel za podmazivanje napunite u funkcionalno pakiranje i razmažite po cijelom kateteru (osim priključka). Otkinite prednji dio funkcionalnog pakiranja s jastučićem od gela i trzajem ga odvojite.

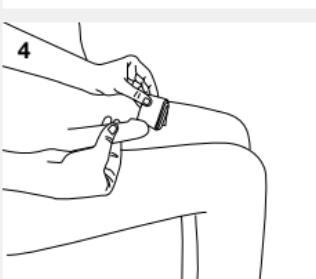


Dezinfcirajte otvor mokraće cijevi i područje oko njega odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju sluznice (slijedite upute proizvođača dezinficijensa).

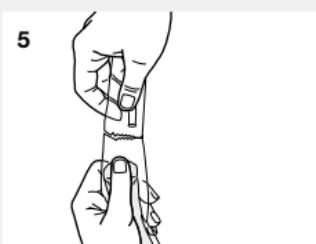


Otvorite funkcionalno pakiranje na stražnjem kraju. Ako se kateter zaglavi u pakiranju, polako ga izvucite odvijanjem.

Ako je potrebno, spojite kateter s vrećicom za priključivanje mokraće.

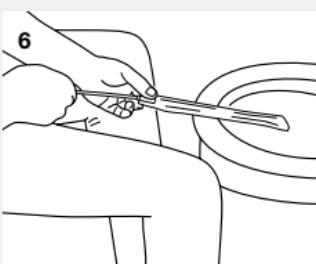

Funkcionalno pakiranje može se koristiti kao produžetak za izravno ispuštanje mokraće u zahod. Da biste to učinili, potisnite kateter prema naprijed dok se konektor ne zatvori.

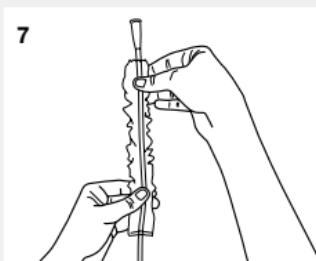

Lagano umetnite kateter u mokraćnu cijev dok mokraća ne iscuri. Kad mokraća prestane teći, polako izvucite kateter.

Kateter odložite u ostatni otpad.

Tvrta MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili ozljede koje mogu nastati zbog nepravilnog postupanja suprotno ovim uputama za uporabu ili zbog nepridržavanja higijenskih smjernica.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema, обратите се медицинским стручњацима или нашим savjetnicima за кориснике.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Jednokratni kateter obložen gelom za ISK (povremena samokateterizacija)

- Spremno za upotrebu
- 2-zonski kateter (kuglasta glava i zona za uvođenje)
- Funkcionalno pakovanje za varijabilnu upotrebu
- Ukupna dužina: oko 430 mm, dužina bez konektora: oko 400 mm
- 4 veličine: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Grupa korisnika: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Muškarci

Određivanje namene:

IQ-Cath je namenjen za jednokratnu i privremenu drenažu urina iz mokraćne bešike u terapeutske ili dijagnostičke svrhe, kod postojanja poremećaja mokrenja. Mogu se sprovesti pojedinačna ili povremena samokateterizacija (ISK) ili spoljna kateterizacija (IFK).

Indikacije:

Indikacije za ISK ili IFK se daju nakon odgovarajuće dijagnostike i zavisno od individualne situacije dotočnog lica.

IQ-Cath je prikladan za kateterizaciju kod sledećih indikacija: Poremećaji pražnjenja mokraćne bešike različitog porekla (npr. neurogeni poremećaj), nedovoljna aktivnost detrusora ili njihova kontraktilnost, hronična retencija mokraće, nefiziološko pražnjenje bešike (mokrenje pritiskom) sa i bez zaostalog urina.

Kontraindikacije:

IQ-Cath možda neće biti prikladan ako se pojave dole navedeni problemi. U ovim slučajevima se pre korišćenja obavezno mora konsultovati lekar: Povreda uretre, krvarenje u mokraćnom kanalu, akutna upala uretre ili prostate, začepljenja (npr. tumori) u mokraćnom kanalu, sfinkteru uretre ili prostati.

Uputstvo za upotrebu:

Prva upotreba bi trebalo da se odvija pod stručnim nadzorom.

Ako je unutar ambalaže tečnost iz jastučića od gela već isigurela, kateter se više ne sme koristiti. Kod katetera obloženih gelom se nakon umetanja može dogoditi da dođe do manjeg kašnjenja pre nego što urin počne da teče.


Rizici i upozorenja:

Pri korišćenju katetera (posebno pri njegovom nepravilnom korišćenju) može doći do iritacije/infekcije ili povrede mokraćnih kanala. U tom slučaju je potrebno potražiti savet lekara.


Pri nepravilnoj upotrebi ostaci urina bi se mogli zadržati u mokraćnoj bešici. Ovaj kateter je namenjen za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba ili recikliranje povećava opasnost od infekcije. Nemojte koristiti bez odgovarajućeg sterilnog gela za podmazivanje, jer ne može da klizi. Voda iz česme narušava sterilnost katetera i time dovodi do povećane opasnosti od infekcije. Nemojte koristiti ako su sterilna ambalaža ili kateter oštećeni, jer postoji opasnost od infekcije. Za korišćenje preporučujemo temperaturu od 15–25 °C.

Ako dođe do ozbiljnih nezgoda pri upotrebi „IQ-Cath“ jednokratnog katetera, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom telu u zemlji u kojoj korisnik boravi.


	Broj artikla		Upotrebljivo do (godina-mesec-dan)
	Serijski broj		Samo za jednokratnu upotrebu
	Čuvajte na suvom mestu		Centralni farmaceutski broj
	Ova strana gore		Drug Tariff (katalog lekova britanske Nacionalne zdravstvene službe za koje se nadoknaduju troškovi)
	Nemojte ponovo da sterilišete		Spisak proizvoda i usluga
	Broj komada		Nemojte da koristite ako je oštećena ambalaža
	Držite dalje od sunčeve svetlosti		Datum proizvodnje
	Sterilizaciju izvedite etilen oksidom		Proizvođač
	Sistem jednostrukе sterilne barijere		Ovlašćeni predstavnik za Švajcarsku
	Sistem jednostrukе sterilne barijere sa zaštitnim pakovanjem sa spoljašnjom stranom		Uvoznik
	Pridržavajte se uputstva za upotrebu		
	CE oznaka medicinski proizvod		

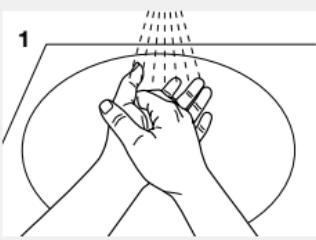

Pre korišćenja ruke temeljno operite i dezinfikujte. Čitav kateter (osim konektora) nemojte dodirivati direktno. Kao pomoć za pridržavanje upotrebite funkcionalno pakovanje.

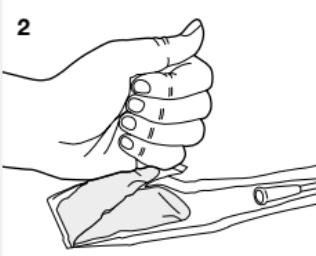


Otvorite jastučić od gela savijanjem i guranjem. Ispraznite ceo sadržaj u funkcionalno pakovanju.

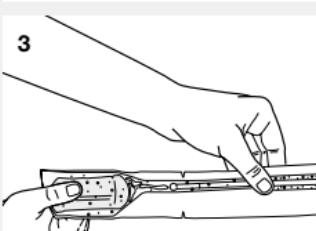


Sterilni gel za podmazivanje napunite u funkcionalno pakovanje i rasporedite po celom kateteru (osim konektora).

Prednji deo funkcionalnog pakovanja s jastučićem od gela pocepajte i odvojite naglim pokretom.

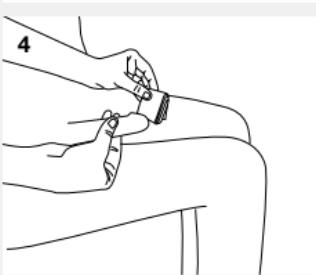

Dezinifikujte otvor uretre i područje oko nje odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju sluznice (sledite uputstva proizvođača dezinficijensa).

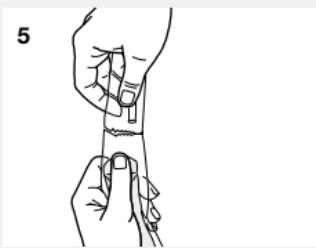


Otvorite funkcionalno pakovanje na zadnjem kraju.
Ako se kateter zaglav u pakovanju, polako ga izvucite uvrтанjem.

Ako je potrebno, spojite kateter sa urin kesom.



Funkcionalno pakovanje se može koristiti kao produžetak za ispuštanje urina direktno u toalet. Da biste to učinili, gurnite kateter prema napred dok se konektor ne zatvori.

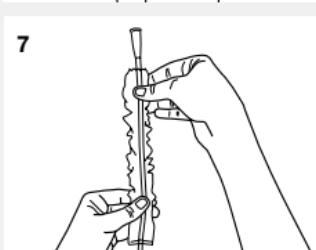

Lagano umetnute kateter u mokračni kanal, dok urin ne poteče. Kad urin prestane da teče, polako izvucite kateter.

Odložite kateter sa ostatkom otpada.

Kompanija MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede, koje mogu da nastanu usled nepravilnog rukovanja suprotno ovim uputstvima za upotrebu ili ako se ne primenjuju higijenske smernice.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema, обратите се медицинским стручњацима или нашим саветницима за кориснике.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Kateter s gelom za jednokratnu upotrebu za povremenu samokateterizaciju (ISK)

- Spreman za upotrebu
- 2-zonski kateter (kuglasta glava i zona vodilice)
- Funkcionalna ambalaža za varijabilnu primjenu
- Ukupna dužina: oko 430 mm, dužina bez konektora: oko 400 mm
- 4 veličine: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Grupa korisnika: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Muškarci

Predviđena namjena:

Kateter IQ-Cath predviđen je za jednokratnu i privremenu odvodnju urina iz mokraćnog mjehura u terapeutske ili dijagnostičke svrhe u slučaju smetnji pri pražnjenju mokraćnog mjehura. Kateter ima mogućnost provođenja jednokratne ili povremene samokateterizacije (ISK) ili vanjske kateterizacije (IFK).

Indikacija:

Indikacije za jednokratnu ili povremenu samokateterizaciju (ISK) ili vanjsku kateterizaciju (IFK) daju se nakon odgovarajuće dijagnoze i zavisno od individualnog stanja odnosne osobe. Kateter IQ-Cath prikladan je za kateterizaciju u slučaju sljedećih indikacija: smetnje pri pražnjenju mokraćnog mjehura različite geneze (npr. neurogene), smanjena aktivnost detruzora ili kontraktiност detruzora, hronično zadržavanje urina, nefiziološko pražnjenje mjehura (mokrenje pritiskom) sa i bez preostalog urina.

Kontraindikacija:

Kateter IQ-Cath možda neće biti prikladan ako se pojave sljedeći problemi. U ovim se slučajevima prije primjene neophodno obratiti ljekaru: oštećenje uretre, krvarenje uretre, akutna upala uretre ili prostate, prepreke (npr. tumor) u uretri, na sfinkteru uretre ili prostati.

Upute za primjenu:

Prva primjena treba uslijediti uz stručne upute.


Ako je tekućina iz jastučića s gelom već iscurila u ambalažu, kateter se više ne smije upotrebljavati. Kod katetera s gelom povremeno nakon uvođenja može doći do naznatne odgode prije nego što urin počne teći.

Rizici i upozorenja:


Upotreba katetera (naročito u slučaju nepravilne primjene) može rezultirati irritacijom/infekcijom ili oštećenjem urinarnog trakta. U tom je slučaju potrebno zatražiti savjet ljekara. U slučaju nepravilne primjene, u mjehuru može zaostati preostali urin. Ovaj kateter je predviđen za jednokratnu upotrebu. Ponovnom upotrebom ili ponovnom pripremom povećava se rizik od infekcije. Kateter nemojte upotrebljavati bez odgovarajućeg sterilnog gela za podmazivanje, jer kateter u suprotnom neće kliziti. Nemojte upotrebljavati ako je sterilno pakovanje oštećeno ili ako je kateter oštećen, jer postoji opasnost od infekcije. Preporučujemo temperaturu primjene od 15 - 25 °C.

Ako se pri upotrebi katetera „IQ-Cath“ za jednokratnu upotrebu pojave ozbiljni problemi, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom organu u zemlji primjene.


	Broj proizvoda		CE oznaka medicinskog proizvoda
	serijski broj		Upotrebljiv do (godina-mjesec-dan)
	Čuvati na suhom mjestu		Ne može se ponovo koristiti
	Ova strana gore		Farmaceutski centralni broj
	Ne sterilizirati ponovno		Tarifa za lijekove (katalog lijekova britanske Nacionalne zdravstvene službe – NHS)
	Broj komada		Lista proizvoda i usluga
	Držite podalje od sunčeve svjetlosti		Ne koristite vrećicu ako je ambalaža oštećena
	Sterilizacija se obavlja etilenoksidom		Datum proizvodnje
	Jednostavan sterilni sistem barijere		Proizvođač
	Jednostavan sterilni sistem barijere sa spoljnim zaštitnim pakovanjem		Ovlašteni predstavnik za Švicarsku
	Broj serije		Uvoznik
	Slijedite uputstvo za upotrebu		

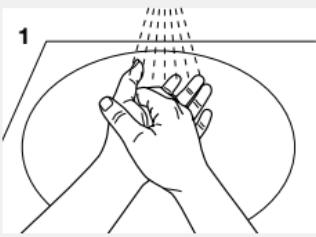


Prije primjene temeljito operite i dezinfikujte ruke. Ne-mojte direktno dodirivati cijeli kateter (osim konektora). Za pomoć pri prihvatu upotrijebite funkcionalnu ambalažu.

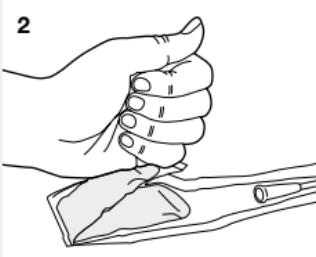


Otvorite jastučić s gelom savijanjem i pritiskanjem. Ispraznите цели садржај у функционалну амбалажу.

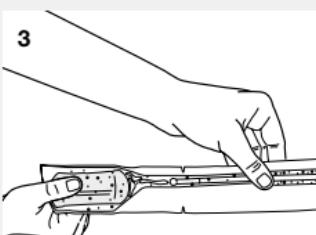

Sterilni gel za podmazivanje stavite u funkcionalnu am-balazu i razmažite po cijelom kateteru (osim konektora). Odcijepite prednji dio funkcionalne ambalaže s jastučićem s gelom i odvojite je jednim trzajem.

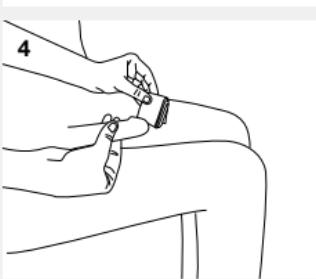

Dezinifikujte otvor uretre i područje oko njega odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju sluznice (pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za dezinfekciju).

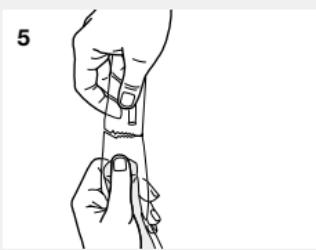


Funkcionalnu ambalažu otvorite na stražnjem kraju. Ako se kateter zaglavi u ambalaži, polako ga izvucite okretanjem.

Ako je potrebno, spojite kateter s vrećicom za prihvatanje urina.



Funkcionalna ambalaža može se upotrijebiti i kao pro-dužetak za direktni odvod urina u toalet. Za tu svrhu gurnite kateter prema naprijed dok se konektor hermetički ne zatvori.

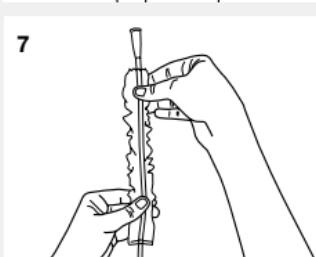

Kateter oprezno uvodite u uretru, dok urin ne poteče. Kada urin prestane teći, polako izvucite kateter.

Kateter zbrinite s ostalim otpadom.

Kompanija MANFRED SAUER GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za šte-tu ili povrede koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja suprotno ovim uputama za upotrebu ili neprimjenjivan-ja higijenskih smjernica.

U slučaju pitanja ili problema, obratite se medicinskom stručnom osoblju ili našim savjetnicima za korisnike.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

Македонски

Гел-катетер за еднократна употреба за ИСК (интермитентна самокатетеризација)

- Подготвено за употреба
- 2-зонски катетер (топчеста глава и зона за наведување)
- Функционална амбалажа за варијабилна употреба
- Вкупна должина: околу 430 mm, должина без приклучок: околу 400 mm
- 4 големини: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16

Целна група: IQ3104.xx, IQ3114.xx – Мажи

Намена:

IQ-Cath е наменет за еднократна и привремена дренажа на урина од мочниот меур за терапевтски или дијагностички цели при нарушувања на празнењето на мочниот меур. Може да се врши еднократна или интермитентна самокатетеризација (ИСК) или надворешна катетеризација (НК).

Индикација:

Индикацијата за ИСК или НК се прави по соодветна дијагностика и во зависност од индивидуалната ситуација на засегнатото лице.

IQ-Cath е погоден за катетеризација при следниве индикации: Нарушувања на празнење на мочниот меур од различно потекло (на пример, неврогено), недоволна активност на детрузорот или контрактилност на детрузорот, хронична уринарна ретенција, нефизиолошко празнење на мочниот меур (притисна микутација) со и без резидуална урина.

Контраиндикација:

IQ-Cath може да не е соодветен ако се појават следниве проблеми. Во овие случаи, мора секако да се контактира со лекар пред каква било употреба: Повреда на уретрата, крварење во уретрата, акутно воспаление на уретрата или простатата, опструкции на текот (на пр. тумори) во уретрата, уретралниот сфинктер или простатата.

Упатство за употреба:

Првата примена треба да се направи под водство на професионално лице.

Ако течноста веќе излегла од гел-перничка во пакувањето, катетерот повеќе не смее да се користи. Понекогаш, по вметнувањето на гел-катетри, може да биде потребно кратко време пред да почне да тече урина.


Ризици и мерки на претпазливост:

Употребата на катетри (особено ако се користат неправилно) може да предизвика иритација/инфекција или оштетување на уринарниот тракт. Во таков случај, веднаш побарајте медицинска помош.


Доколку се користи неправилно, во мочниот меур може да остане резидуална урина. Катетерот е наменет за еднократна употреба. Повторната употреба или повторното чистење го зголемува ризикот од инфекција. Не користете без соодветен стерилен гел за подмачкување, бидејќи не е лизгаво. Не користете ако стерилиното пакување е оштетено или ако катетерот е оштетен, бидејќи постои ризик од инфекција. Препорачуваме температура на примена од 15 – 25°C.

Доколку при употребата на катетрите за еднократна употреба „IQ-Cath“ дојде до појава на сериозни несакани дејства, за тоа треба да се извести производителот и надлежниот државен орган во државата во која престојува корисникот.


	Број на артикл		0123 СЕ-ознака медицински производ
	Сериски број		Употребливо до (година-месец-ден)
	Да се чува на суво место		Не е наменето за повеќекратна употреба
	Оваа страна нагоре		Фармацевтски број на регистрација
	Да не се стерилизира повторно		Тарифа на лекови (каталог на лекови на NHS во Велика Британија кои можат да се надоместат)
	Количина		Список на производи и услуги
	Не е наменето за повеќекратна употреба		Да не се користи доколку пакувањето е оштетено
	Стерилизација со етиленоксид		Датум на производство
	Едноставен стерилен бариерен систем		Производител
	Едноставен стерилен бариерен систем со заштитно пакување однадвор		Овластен швајцарски претставник
	Број на шаржа		Увозник
	Следете ги упатствата за употреба		

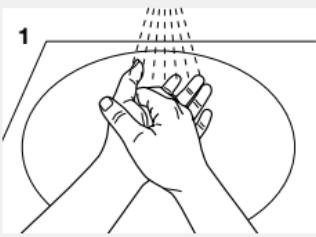

Темелно измијте и дезинфицирајте ги рацете пред употреба. Не допирајте го катетерот директно (освен приклучокот). Користете ја функционалната амбалажа за да го држите катетерот.

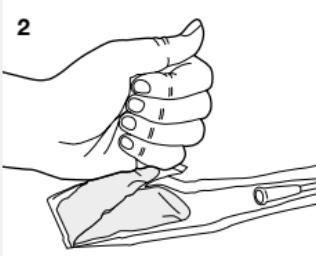


Отворете ја гел-перничката со виткање и притискање. Испразнете ја целата содржина во функционалната амбалажа.

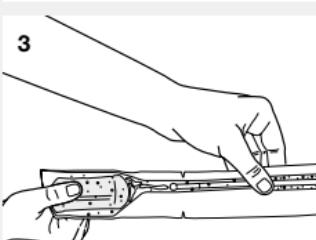


Стерилниот гел за подмачкување наполнете во функционалната амбалажа и намачкајте го по целиот катетер (освен приклучокот).


Искинете го предниот дел на функционалната амбалажа со гел-перничка и извлечете го со едно брзо повлекување.

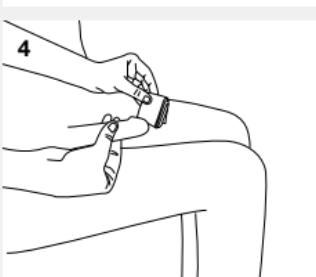


Дезинфицирајте го отворот на уретрата и пределот околу неа со соодветно мукозно средство за дезинфекција (следете ги упатствата од производителот на средствот за дезинфекција).

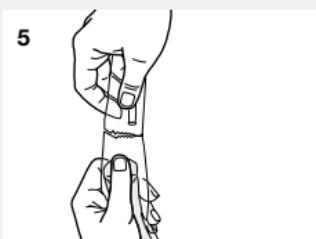

Отворете ја функционалната амбалажа на задниот крај. Ако катетерот се заглави во пакувањето, полека извадете го. Доколку е потребно, поврзете го катетерот со кеса за собирање урина.

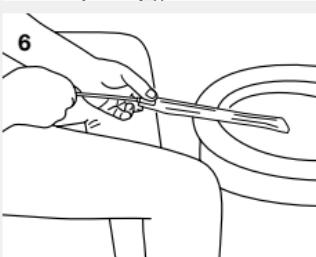

Функционалата амбалажа може да се користи како продолжеток за урината да се исцеди директно во тоалетот. За да го направите ова, турнете го катетерот напред додека приклучокот не се запечати.

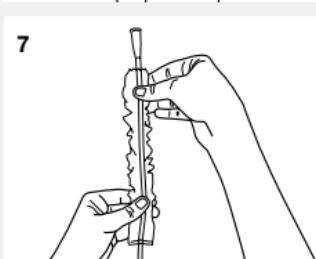

Внимателно вметнете го катетерот во уретрата додека не се исцеди урината. Кога ќе престане да тече урина, полека повлечете го катетерот.

Фрлете го катетерот со домашниот отпад.

MANFRED SAUER GmbH не презема одговорност за штети или повреди кои може да настанат како резултат на несоодветно ракување кое е спротивно на ова упатство за употреба или како резултат на неприменување на упатствата за хигиена.

Ако имате какви било прашања или проблеми, контактирајте со обучени медицински лица или нашите советници за клиенти.




MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7–15 · 74931 Lobbach · Germany


Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com


قبل از استفاده دست ها کاملاً بشویید و ضد عفونی کنید. کل سوند (بجز اتصال دهنده) را مستقیماً لمس نکنید. از بسته بندی کاربردی به عنوان دستگیره استفاده کنید.

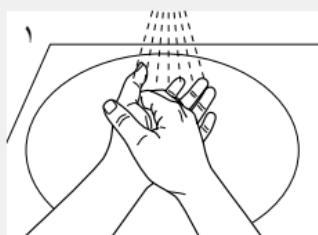


کیسه ژل را با فشار باز کنید. کل محتویات داخل بسته بندی کاربردی را خالی کنید.

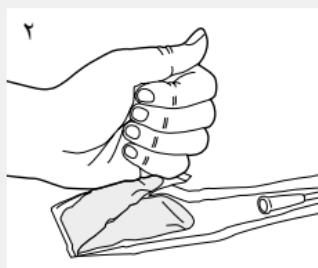

ژل روان کننده استریل را در بسته بندی کاربردی پر کنید تا روی کل آن (به جز اتصال دهنده) پخش شود. قسمت جلویی بسته بندی کاربردی را با کیسه ژل پاره کرده و با یک حرکت تند جدا کنید.

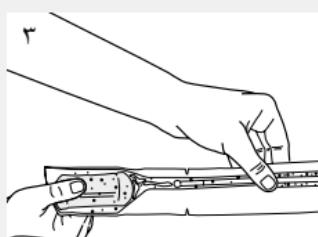

دهانه مجرای ادرار و ناحیه اطراف آن را با یک ضد عفونی کننده مناسب ضد عفونی کنید (ستور العمل سازنده ضد عفونی کننده را دنبال کنید).

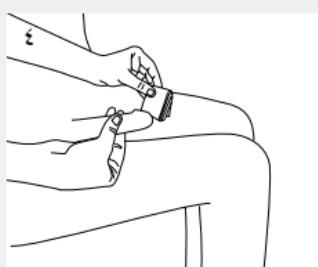


بسته بندی کاربردی را از انتهای عقب باز کنید.
اگر سوند در بسته بندی گیر کرد، سوند را به آرامی بپرسون
بکشید.
در صورت لزوم، سوند را به کیسه جمع آوری ادرار وصل
کنید.



این سوند می تواند به عنوان افزایش دهنده طول برای تخلیه مستقیم ادرار به توالی مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام این کار، سوند را به جلو فشار دهید تا اتصال دهنده بسته شود.



به آرامی سوند را وارد مجرای ادرار کنید تا ادرار به بیرون تخلیه شود. وقتی جریان ادرار متوقف شد، سوند را به آرامی خارج کنید.

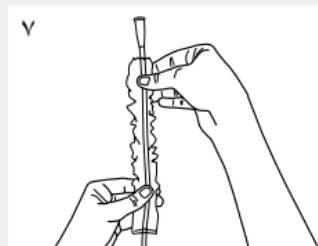

سوند را همراه زباله های باقیمانده دور بریزید.

اگر سوال یا مشکلی دارید، لطفاً با متخصصان پزشکی یا مشاوران مشتریان ما تماس بگیرید.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com

سوند ژلی یکبار مصرف برای ISK (سوند خودکار غیردانمی)

- آماده برای استفاده

- سوند 2 جهتی (سرتوپی، و بخش هادی)

- بسته بندی کاربردی برای استفاده های مختلف

- طول کل: تقریبا 430 میلی متر، طول بدون اتصال دهنده: تقریبا 400 میلی متر

- 4 اندازه: CH 10 ، CH 12 ، CH 14 ، CH 16

: مردان، پسران xx/Q3104.xx, xx/Q3114.xx کاربران

استفاده در نظر گرفته شده:

Cath برای تخالیه یکباره و موقت ادرار از مثانه برای اهداف درمانی یا تشخیصی در صورت وجود اختلالات مثانه در نظر گرفته شده است. سوند خودکار یک بار مصرف داخلی (ISK) یا سوند خارجی (IFK) را می توان در موارد مختلف مورد استفاده قرار داد.

موارد تجویز:

هر یک از IFK یا IQ پس از تشخیص مناسب و بسته به شرایط فرد موردنظر به کار برده میشود.

IQ-Cath اسوند در موارد زیر مناسب است: اختلالات تخالیه مثانه با منشاء مختلف (به عنوان مثال نوروزنیک)، کماری دترسور یا انقباض دترسور، احتباس مزمن ادرار، تخلیه غیر فیزیولوژیکی مثانه (تخلیه با فشار) با ادرار و بدون ادرار باقیمانده.

موارد منع مصرف:

در صورت بروز مشکلات زیر IQ-Cath ممکن است مناسب نباشد. در این موارد قبل از استفاده باید در هر صورت با پیشکش تصالش بگیرید: آسیب به مجرای ادراری، خونریزی مجرای ادرار، التهاب حاد مجرای ادراری یا پروسات، مواعن عبور (به عنوان مثال تومورها) در مجرای ادراری، اسفکتر مجرای ادراری یا پروسات.

توصیه های کاربردی:

اولين استفاده باید تحت راهنمایی حرفه ای انجام شود.

اگر مایع قیلا از کیسه ژل موجود در بسته بندی نشت کرده باشد، دیگر نباید از کاتر استفاده کرد. گاهی اوقات سوندهای ژلی ممکن است پس از وارد شدن و قبیل از شروع جریان ادرار تاخیر جزئی داشته باشند.

خطرات و هشدارها:

استفاده از سوند (مخصوصا در صورت استفاده نادرست) می تواند منجر به تحریک/عفونت یا آسیب به مجرای ادراری شود. در این مورد، باید از مشاوره پزشکی استفاده کرد.

در صورت استفاده نادرست، باقیمانده ادرار می تواند در مثانه باقی بماند. سوند برای مصرف یکباره در نظر گرفته شده است. استفاده مجدد از آن خطرا عفونت را افزایش می دهد. بدون ژل روان کننده مناسب و استریل از آن استفاده نکنید زیرا لغزende نیست. در صورت آسیب دیدن سوند از آن استفاده نکنید زیرا خطرا عفونت وجود دارد. توصیه می کنیم دمای استفاده از آن 15 - 25 درجه سانتیگراد باشد.

اگر هنگام استفاده از سوند یکبار مصرف "IQ-Cath" حوادث جدی رخ دهد، این موارد باید به سازنده و مقام صلاحیتدار کشوری که کاربر در آن مستقر است گزارش شود.

شرکت MANFRED SAUER GmbH بابت خسارات یا صدماتی که ممکن است به دلیل استفاده نادرست برخلاف این دستور العمل استفاده یا عدم به کارگیری دستور العمل های بهداشتی ایجاد شوند، هیچ گونه مسئولیتی تقبل نمی کند.

منتج طبی بعلامة الجودة الأوروبية



رقم المنتج

REF

رقم سري

SN

تحفظ في مكان

place

جاف



اين سمت بالا باشد

up

لا تعمق الكيس مرة أخرى

no



عدد القطع

count



تُخَرِّنْ بعيداً عن ضوء

light

الشمس



التعقيم باكسيد الإيثيلين

sterile



سيستم مائع استريل ساده

EO



REP

سيستم مائع استريل ساده با بسته

sterile bag

بندی محافظ در خارج



رقم الشحنة

lot

تجه مراعاة إرشادات


instructions

الاستخدام


مندوب سویسی مفوض

المستورد


اغسل وعمق يديك جيداً قبل الاستخدام. لا تلمس القسطرة بالكامل بشكل مباشر (باستثناء الموصل). استخدم العبوة الوظيفية لتساعدك في الإمساك بالقسطرة.

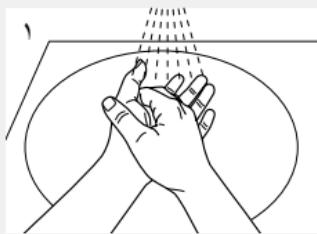


افتح وسادة الجل عن طريق ثنيها وضغطها. أفرغ المحتويات بالكامل في العبوة الوظيفية.

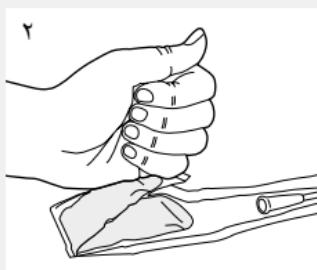


يُوزع جل التسبيل المعمق (يملاً داخل العبوة الوظيفية) ويُوضع على القسطرة بأكملها (باستثناء الموصل) عن طريق نشره عليها. مزق العبوة الوظيفية من الجزء الأمامي وشد الجزء المفصول.

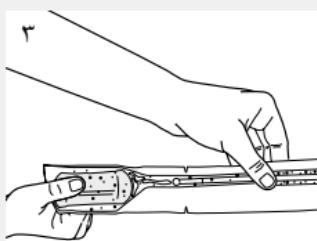


طهّر فتحة مجاري البول والمنطقة المحيطة بها بمطهر أغشية مخاطية مناسب (اتبع تعليمات الشركة المصنعة للمطهر).

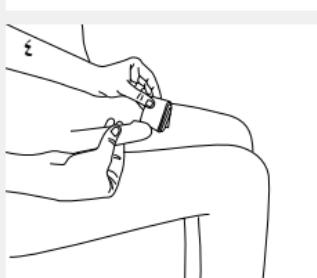


افتح العبوة الوظيفية من النهاية الخلفية. فك القسطرة ببطء إذا علت في الغلاف. يمكن توصيل القسطرة بكيس جمع البول إذا لزم الأمر.

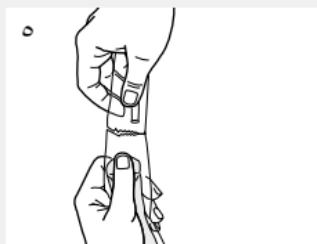

يمكن استخدام العبوة الوظيفية كوصلة لتطويل لتصريف البول مباشرةً في المرحاض. وللقيام بذلك ادفع القسطرة للأمام حتى تند الموصل.

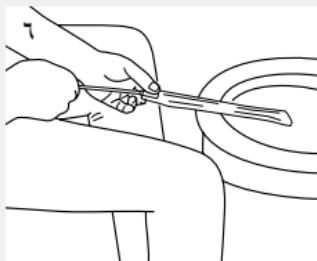

أدخل القسطرة برفق في مجاري البول إلى أن يخرج البول. عندما يتوقف البول عن الجريان اسحب القسطرة ببطء.

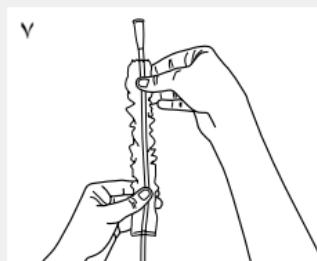

تخلص من القسطرة مع النفايات المتبقية.

يرجى التواصل مع الطاقم الطبي المتخصص أو خدمة العملاء لدينا إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 . 74931 Lobbach - Germany
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de
www.manfred-sauer.com

- القسطرة الهمامية (الجل) أحادية الاستخدام (القسطرة الذاتية المقطعة)**
- جاهزة للاستخدام
 - قسطرة مزدوجة النطاق (رأس الكرة ومنطقة التوجيه)
 - عبوة وظيفية للاستخدامات المختلفة
 - الطول الإجمالي: حوالي 430 مم، الطول بدون موصل: حوالي 400 مم
 - أحجام: CH 10 ، CH 12 ، CH 14 ، CH 16

اللغة المستهدفة: IQ3104.xx, IQ3114.xx / رجال

الغرض من الاستعمال:

ان قسطرة IQ-Cath مخصصة لتصريف البول لمراة واحدة وبصورة مؤقتة من المثانة لأغراض علاجية أو تشخيصية في حالة وجود مشاكل في إفراغ البول. يمكن اجراء قسطرة ذاتية مفردة مقطعة (ISK) أو قسطرة خارجية (IFK).

الاستطبابات:

يتم تحديد الاستطباب للقسطرة الذاتية المفردة المقطعة أو القسطرة الخارجية بعد اجراء التشخيص المناسب واعتماداً على الحالة الفردية للشخص المعنى.

تعتبر قسطرة IQ-Cath مناسبة لإجراء القسطرة في حال وجود الاستطبابات التالية: اضطرابات إفراغ المثانة لأسباب مختلفة (على سبيل المثال عصبية)، قلة نشاط العضلة النافضة أو انقباضها، احتباس البول المزمن، إفراغ غير فسيولوجي للمثانة (البول بالضغط) مع وبدون بول متberry.

مضادات الاستطباب:

قد لا تكون قسطرة IQ-Cath مناسبة في حال وقوع المشكلات التالية. في هذه الحالات يجب الاتصال بالطبيب بأي حال من الأحوال قبل الاستعمال: إصابة مجرى البول، تزيف بمجرى البول، التهاب حاد في مجرى البول أو البروستات، عوائق مرور البول (مثل الأورام) في مجرى البول أو العضلة العاصرة للإحليل أو البروستاتا.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن يكون الاستخدام لأول مرة تحت إشراف أحد المختصين.

إذا كان السائل قد تسرب بالفعل من وسادة جل داخل العبوة، فيجب عندئذ عدم استخدام القسطرة.
في بعض الأحيان قد يحدث تأخير طفيف في قسطرة الجل بعد إدخالها قبل أن يبدأ البول في الجريان.

المخاطر والتحذيرات:

يمكن أن يؤدي استخدام القسطرة (خاصة إذا استخدمت بشكل غير صحيح) إلى تهيج / عنوى أو جروح في المسالك البولية. وفي هذه الحالة يلزم طلب المشورة الطبية.
في حال استخدام القسطرة بشكل غير صحيح يمكن أن يظل البول المتبقى في المثانة. القسطرة مخصصة للاستخدام مرة واحدة. وتزيد مخاطر الإصابة بالعدوى في حال إعادة استخدامها أو معالجتها مرة أخرى. لا تُستخدم بدون جل تسبيط معقم مناسب، لأنها لا تزالق. لا تُستخدم القسطرة في حال ثلث الغلاف المعقم أو في حال ثلث القسطرة، نظراً لوجود خطر العدوى. نوصي بأن تتراوح درجة حرارة استخدام القسطرة بين 15 إلى 25 درجة مئوية.

يجب على المستخدم إبلاغ الشركة المصنعة والجهة المختصة في البلد المقيم فيها بأية حوادث خطيرة تقع عند استخدام قسطرة "IQ-Cath" الأحادية الاستخدام.

لا تتحمل شركة مايفريد زاور ش.ذ.م. (Manfred Sauer GmbH) أية مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات التي قد تنتج عن التعامل غير السليم مع أكياس البول بما يتعارض مع تعليمات الاستخدام هذه أو عن عدم الامتثال للتوجيهات والتعليمات الصحية.

منتج طبي بعلامة الجودة الأوروبية	MD 0123	رقم المنتج	
الصلاحية حتى (يوم شهر - عام)		تحفظ في مكان جاف	
ليست مخصصة لإعادة الاستخدام		هذا الجانب	
الرقم الدوائي المركزي		لا تعمق الكيس مرة أخرى	
التعرية الدوائية (قائمة الأدوية القليلة للتعرض لبيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية)		عدد القطع	
قائمة المنتجات و الخدمات		ثُخِّن بعيداً عن ضوء الشمس	
لا تستخدم الكيس إذا كانت عبوته تالفة		التعقيم باكسيد الإيثيلين	
تاريخ الصنع		نظام حاجز تعقيم منفرد	
الجهة المصنعة		نظام حاجز تعقيم منفرد مع عبوة واقية بالخارج	
مندوب سويسري مفوض	CH REP	رقم الشحنة	LOT
المستورد		تجنب مراعاة إرشادات الاستخدام	



MANFRED SAUER



2022-02 M
§16870



MD
0123



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 100 · info@manfred-sauer.de

www.manfred-sauer.com