



KIC System	Deutsch	2
KIC System	English	4
Système KIC	Français	6
Sistema KIC	Italiano	8
KIC-systeem	Nederlands	10
KIC-systemet	Svenska	12
KIC-system	Dansk	14
KIC-järjestelmä	Suomi	16
KIC-system	Norsk	18
KIC-süsteem	Eesti	20
Sistema KIC	Español	22
Sistema KIC	Português	24
Σύστημα KIC	Ελληνική	26
KIC rendszer	Magyar	28
System KIC	Polski	30
Systém KIC	Čeština	32
Sistemul KIC	Română	34
Система KIC	Български	36
Sistem KIC	Slovenščina	38
Sustav KIC	Hrvatski	40
KIC sistem	Srpski	42
KIC sistem	Bosanski	44
Систем KIC	Македонски	46
49	فارسی	KIC سیستم
51	العربية	نظام کیه آئی سی

## KIC System (KIC-Kondome, KIC-Spreizring, KIC-Kupplung)

### Zweckbestimmung und Indikation

KIC Kondome dienen der externen Urinableitung in einen Urinaufangbeutel bei männlichen Personen mit Harninkontinenz mit Restharnbildung, die durch zusätzliches regelmäßiges Katheterisieren (ISK/IFK) behandelt wird. Die Anwendung erfolgt auf intakter Haut. Das KIC System, bestehend aus KIC-Kondomen und den Zubehörten KIC-Kupplung und KIC-Spreizring, ermöglicht den ISK/IFK, ohne das Kondom vom Penis abzulösen. Dies schont die Haut und erspart einen Kondomwechsel nach jedem Katheterisieren.

### Kontraindikation

KIC-Kondome sind nicht geeignet bei Allergien/Unverträglichkeit gegenüber Latex oder anderen Materialien im Kondom oder im verwendeten Kleber/Klebefband. Hautschäden am Penis (z.B. Wunden, Ekzeme, Druckstellen); akuten Hauterkrankungen (z.B. Mykose, bakterielle Hautinfektion); ausgeprägter Phimose.

### Wichtige Hinweise zur Hygiene und Tragedauer

Beim Umgang mit Kontinenzprodukten die hygienischen Richtlinien des RKI (Robert-Koch-Institut) beachten. Um das Risiko für Infektionen gering zu halten, sollten Hygienestandards bei der Handhabung beachtet werden. Es wird empfohlen, das Kondom nach spätestens 24 Stunden zu wechseln.

### Information

- Produkt- und Handelsname sind dem Etikett zu entnehmen.
- Varianten *Original* und *Extradünn* verfügbar.
- KIC-Kupplung: nach dreimaligem Gebrauch wechseln; vor der Konnektierung mit einem neuen Kondom mit Wasser durchspülen; abnehmbar.
- KIC-Spreizring: mehrfach verwendbar; regelmäßig mit Wasser reinigen.

### Risiken und Warnhinweise

Individuelle Eignung von Latex-Urinal-Kondomen zur Versorgung der Inkontinenz mit einem Arzt klären. Anleitung zur Versorgung mit Urinal-Kondomen sollte durch eine qualifizierte Pflegefachkraft erfolgen.

Kann zu Hautirritationen/-veränderungen führen. Allergische Reaktion auf Latex möglich. Haut inspizieren, bei Auffälligkeiten Produkt nicht weiterverwenden und ärztlichen Rat einholen.

Zu enge Kondome oder unsachgemäße Handhabung von Befestigungsmitteln, können zu Druckstellen und in sehr seltenen Fällen (v.a. bei fehlender Sensitivität) auch zu Einschnürungen/Nekrosen führen. In diesem Fall ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Hinweise zur Größenauswahl und Gebrauchsanweisungen der Befestigungsmittel beachten.

### Hinweise zur Größenauswahl des KIC-Kondoms

Eine richtige Größenauswahl sorgt für guten Sitz und beugt Leckagen und Druckstellen vor. Zur Auswahl der Größe muss der Umfang des Penis etwa in der Mitte des Penisschafts gemessen werden. Wenn unter Ektion geklebt wird, erfolgt auch die Messung des Umfangs am erigierten Penis. Die produktsspezifischen Maßbänder geben den Durchmesser anhand der Umfangsmessung an.

### Anwendungshinweise

Das Kondom mit Daumen und Zeigefinger halten, die Öffnung des Kondoms über den Teller der Kupplung heben, die Kupplung in der Öffnung mittig ausrichten (Abb.1).

Kupplungshülse andrücken und durch Drehen feststellen/arretieren (Abb.2).

An Kondom und Kupplung ziehen, um die Verbindung zu überprüfen (Abb. 3).

Danach das Kondom mit einem geeigneten Befestigungsmittel anlegen, dabei die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten (z.B. SAUER-Hautkleber, SAUER-Klebefänger). Zum Trennen der Verbindung zwischen Kondom und einleitendem Schlauch des Urin-Aufangbeutels die Kupplung lösen (Abb. 4).

Die Zähnchen des Spreizrings in die Kondomöffnung führen (Abb. 5). Das Kondom durch Schließen der Scherengriffe weiten bis sich die Griffe berühren (Abb. 6).

Das Kondom mit dem Spreizring so weit nach hinten führen, dass die Eichel vollkommen frei liegt (Abb. 7).

Desinfizieren und Katheterisieren, dabei Gebrauchsanweisung des jeweiligen Katheters beachten (Abb. 8).

Die Konnekturstellen an Kupplung und Kondom trocken, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Danach das Kondom mit dem Spreizring wieder nach vorne führen (Abb. 9).











Spreizring schließen und abnehmen (Abb. 10).

Der hinter der Klebefläche verbleibende Ring kann mit einer abgerundeten Schere auf- oder ganz abgeschnitten bzw. abgerissen werden, wenn Sie Druckstellen befürchten oder der Penis sich z.B. beim Wasserlassen stark zurückzieht (Abb. 11). Aufgrund der Verletzungsgefahr darf keine spitze Schere verwendet werden. Der Einschnitt sollte rund geführt werden, damit das Kondom nicht einreißt. Beim Abschneiden oder -reißen gleichzeitig das Kondom an der Klebefläche andrücken.

Kupplung wieder anschließen usw. (Abb.1,2,3...).

### Entsorgungshinweis

KIC-Kondom, -Kupplung und -Spreizring mit dem Restmüll entsorgen.

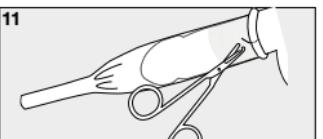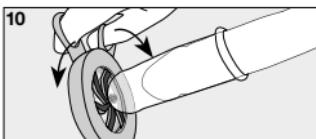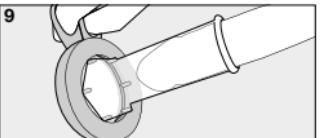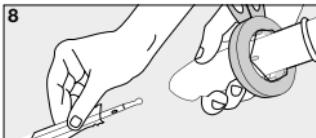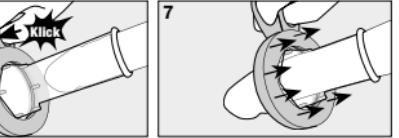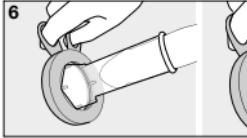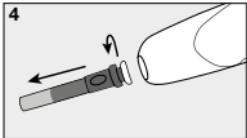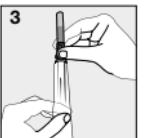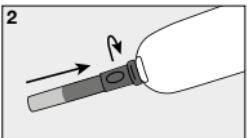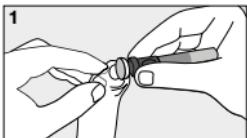

REF



Artikelnummer

Trocken aufbewahren

Stückzahl

Vor Sonnenlicht  
geschützt aufbewahren

CH REP

LOT

Schweizer  
Bevollmächtigter

Chargennummer

Gebrauchsanweisung  
beachten

CE MD

CE-Kennzeichnung  
MedizinproduktVerwendbar bis  
(Jahr-Monat-Tag)Nicht zur  
Wiederverwendung

PZN

DT

LPP



Pharmazentralnummer

Drug tariff (Katalog  
des britischen NHS)Liste der Produkte und  
Dienstleistungen

Hersteller



Importeur

LATEX

Sollten bei der Verwendung des KIC Systems schwerwiegende Vorfälle auftreten, so sind diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes zu melden, in dem der Anwender niedergelassen ist.

Die MANFRED SAUER GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die sich aus unsachgemäßer Handhabung entgegen dieser Gebrauchsanweisung oder der Nichtanwendung der hygienischen Richtlinien ergeben können.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
 Tel. +49 6226 960 100 · info@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC System (KIC sheaths, KIC sheath expander, KIC connector)

### Intended use and indication

KIC urinary sheaths are used for external urinary drainage into a urine collection bag in men with urinary incontinence with residual urine that is treated additionally with regular intermittent self or assisted catheterisation (ISC/IAC). They are used on intact skin. The KIC system, consisting of KIC sheaths and the accessories KIC connector and KIC sheath expander, allows ISC/IAC without detaching the sheath from the penis. This protects the skin and makes it unnecessary to change the sheath after every catheterisation.

### Contraindications

KIC sheaths are not suitable in case of allergies/intolerance to latex or other materials in the sheath or adhesive/adhesive tape used; skin abrasions on the penis (e.g., wounds, eczema, pressure sores); acute skin diseases (e.g., mycosis, bacterial skin infections); pronounced phimosis.

### Important information on hygiene and period of wear

When using continence products, the hygiene guidelines of the national health authorities must be observed. We recommend changing the sheath (the adhesive tape, bag) after 24 hours. The period of wear may also be less than 24 hours depending on the skin type.

### Information

- Product and trade name can be found on the label.
- Available in the *Original* and *Extra thin* variants.
- KIC connector: change after three uses; rinse with water before connecting to a new sheath; removable.
- KIC sheath expander: for multiple uses; clean with water regularly.

### Risks and warnings

Ask your doctor whether latex urinary sheaths are suitable for you for treating incontinence. Instructions on how to use urinary sheaths should be provided by a qualified nurse.

Can lead to skin irritation/changes. Allergic reaction to latex possible. Inspect the skin; if any abnormalities occur, stop using the product and seek medical advice.

If urinary sheaths are too tight or adhesives are used improperly, this may cause pressure sores and, in very rare cases (particularly in the case of lack of sensitivity), constrictions/necrosis. In this case, seek a doctor without delay. Note the information on selecting the size and the instructions for use of adhesives.

### Information on selecting the size of the KIC urinary sheath

Selecting the correct size ensures a good fit and prevents leakage and pressure sores. To select the size, the circumference of

the penis must be measured around the middle of the shaft. If it is adhered during an erection, the circumference is also measured on the erect penis. The product-specific measuring tapes state the diameter based on the circumference measurement.

### Instructions for use

Hold the sheath with the thumb and index finger, raise the opening of the sheath over the plate of the connector, align the connector in the middle of the opening (Fig. 1).

Press on the connector sleeve and twist to lock it in place (Fig. 2).

Pull on the sheath and connector to check the connection (Fig. 3).

Then apply the sheath with a suitable adhesive, observing the respective instructions for use (e.g. SAUER skin adhesive, SAUER adhesive tape) Loosen the connector to disconnect the sheath from the inlet tube of the urine collection bag (Fig. 4).

Guide the teeth of the sheath expander into the opening of the sheath (Fig. 5).

Widen the sheath by closing the scissor handles until they touch (Fig. 6).

Move the sheath down using the sheath expander until the glans is completely exposed (Fig. 7).

Disinfect and catheterise, following the instructions for use for the catheter used (Fig. 8).

Dry the connection sites on the connector and sheath to ensure a reliable connection. Then move the sheath forward again with the sheath expander. (Fig. 9)










Close and detach the sheath expander (Fig. 10).

The remaining ring beyond the adhesive area can be cut open or cut/torn off completely using scissors with rounded tips if you are worried about pressure sores or if the penis retracts considerably, e.g., when urinating (Fig. 11). Do not use scissors with pointed tips as they may cause injury. The incision should be circular in shape so that the sheath does not tear. When cutting or tearing off, press down on the adhesive area of the sheath at the same time.

Reattach the connector, etc. (Fig. 1,2,3...).

### Disposal

Dispose of the KIC sheath, connector and sheath expander in residual waste.

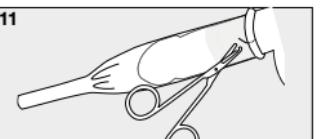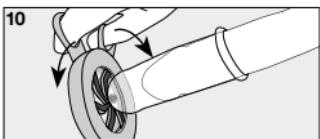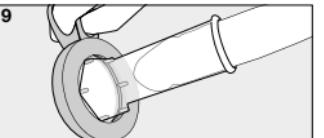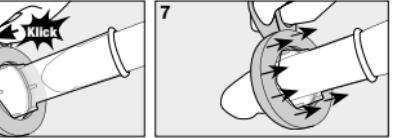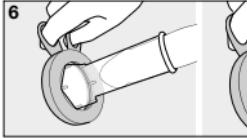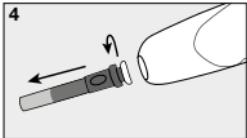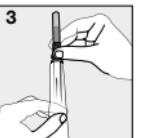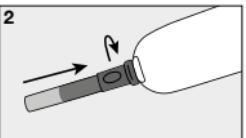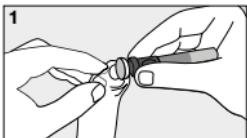

Article number



Store in a dry place



Quantity



Keep away from sunlight



Swiss authorised representative



Batch number



Observe instructions for use



CE marked medical device



Use by (year-month-day)



Not for reuse



Pharmaceutical central no.



Drug Tariff



List of products and services



Manufacturer



Importer



Latex

If serious incidents occur when using the KIC system, they must be reported to the manufacturer and competent authority of the country in which the user resides.

Manfred Sauer GmbH does not accept responsibility for damages or injuries that may result from improper handling contrary to these instructions for use or from neglecting the hygiene guidelines and the corresponding standards of care.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Système KIC (étui pénien KIC, anneau de dilatation KIC, raccord KIC)

### Utilisation prévue et indications

Les étuis péniens KIC permettent aux hommes d'évacuer l'urine par l'extérieur dans un collecteur d'urines en cas d'incontinence urinaire avec formation d'urine résiduelle pouvant être traitée par cathétérisme régulier supplémentaire (auto-cathétérisme intermittent/cathétérisme externe intermittent). Le produit doit être utilisé sur une peau saine. Le système KIC constitué de l'étui pénien KIC et du raccord KIC et de l'anneau de dilation KIC en accessoires permet l'auto-cathétérisme intermittent/le cathétérisme externe intermittent sans décoller l'étui pénien du pénis. Il permet de préserver la peau et d'éviter de changer l'étui pénien après chaque cathétérisme.

### Contre-indications

Les étuis péniens KIC ne conviennent pas en cas d'allergie ou d'intolérance au latex ou à d'autres matériaux présents dans l'étui ou la colle/la bande adhésive utilisée ; affections cutanées aiguës (par ex. mycose, infection cutanée d'origine bactérienne) ; phimosis marqué.

### Remarques importantes concernant l'hygiène et la durée de port

Respectez les directives relatives à l'hygiène des autorités nationales compétentes lors de la manipulation de produits liés à la continence. Il est recommandé de changer l'étui (la bande adhésive, la poche) au bout de 24 heures. Selon le type de peau, la durée de port peut également être inférieure à 24 heures.

### Information

- La dénomination commerciale et le nom du produit se trouvent sur l'étiquette.
- Variantes disponibles *Original* et *Extra fin*.
- Raccord KIC : remplacer après trois utilisations ; rincer à l'eau avant la connexion à un nouvel étui ; détachable.
- Anneau de dilatation KIC : utilisable plusieurs fois ; rincer à l'eau régulièrement.

### Risques et mesures de précaution

Vérifier avec un médecin l'adéquation individuelle des étuis péniens urinaires en latex pour le traitement de l'incontinence. La mise en œuvre des soins à l'aide d'étuis péniens urinaires doit être expliquée par un soignant qualifié.

Peut entraîner des irritations/altérations cutanées. Possibilité de réaction allergique au latex. Examinez la peau et en cas d'anomalie, cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Des étuis trop étroits ou une manipulation incorrecte des systèmes de fixation peuvent provoquer des hématomes et, dans de très rares

cas (notamment en cas d'absence de sensibilité) des sténoses et des nécroses. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. Respectez les informations sur le choix de la taille et les instructions d'utilisation des systèmes de fixation.

### Informations sur le choix de la taille de l'étui pénien KIC

Le choix correct de taille garantit un bon ajustement et empêche les fuites et les hématomes. Pour sélectionner la taille, mesurez la circonférence du pénis à peu près au milieu de la verge. Si la colle est appliquée sur le pénis en érection, la circonférence doit également être mesurée dans cet état. Les mètres-ruban propres au produit indiquent le diamètre d'après la mesure de la circonférence.

### Instructions d'utilisation

Maintenir l'étui pénien à l'aide du pouce et de l'index. Lever l'ouverture de l'étui pénien au-dessus de la tête du raccord. Orienter le raccord sur le centre de l'ouverture (fig. 1).

Presser la douille du raccord et la bloquer (arrêter) en la tournant (fig. 2).

Tirer sur l'étui et le raccord pour vérifier le raccordement (fig. 3).

Poser ensuite l'étui pénien avec un dispositif de fixation approprié en respectant la notice d'utilisation correspondante (p. ex. colle-peau SAUER, bandes adhésives SAUER). Pour défaire le raccordement entre l'étui pénien et le conduit d'arrivée de la poche urinaire, détacher le raccord (fig. 4).

Insérer les dents de l'anneau de dilatation dans l'ouverture de l'étui pénien (fig. 5).

Dilatier l'étui pénien en fermant les poignées des ciseaux jusqu'à ce qu'elles se touchent (fig. 6).











Ramener l'étui pénien et l'anneau de dilatation vers l'arrière jusqu'à ce que le gland soit complètement dégagé (fig. 7).

Désinfecter et sonder en suivant les instructions d'utilisation du cathéter correspondant. (fig. 8).

Sécher les points de connexion au niveau du raccord et de l'étui pénien pour garantir un raccordement sûr. Ramener ensuite l'étui pénien avec l'anneau de dilatation vers l'avant (fig. 9).

Fermier l'anneau de dilatation et le retirer (fig. 10).

L'anneau restant derrière la surface d'adhésion peut être découpé à l'aide de ciseaux à bout rond ou coupé complètement, voire arraché, si vous craignez les hématomes ou si le pénis se rétracte fortement lors de la miction (fig. 11). Compte tenu du risque de blessure, n'utilisez pas de ciseaux à bout pointu. La découpe doit être arrondie pour ne pas déchirer l'étui. En cas de découpe ou de déchirure, pressez simultanément l'étui sur la surface d'adhésion. Connecter à nouveau le raccord, etc. (Fig. 1, 2, 3..).

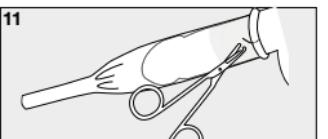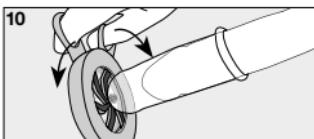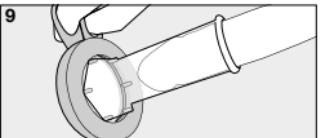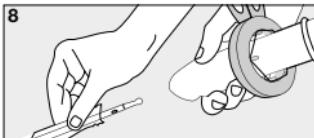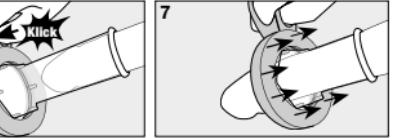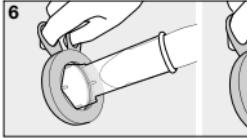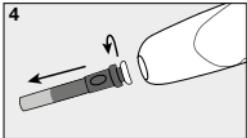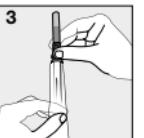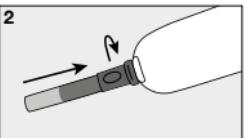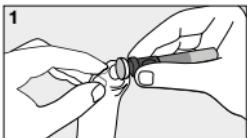

REF



Référence

Conserver au sec

Quantité

Tenir à l'abri de la lumière  
du soleil

CH

REP

Représentant  
autorisé suisse

LOT

Numéro de lot  
Respecter la notice  
d'utilisation

CE

MD

Dispositif médical  
marqué CEDate de péremption  
(année-mois-jour)

Ne pas réutiliser

PZN

Code identifiant de  
présentation

DT

Prix du médicament (NHS)

LPP

Liste des produits  
et prestations

Fabricant



Importateur



Latex

### Consignes d'élimination

Éliminer l'étui pénien, le raccord et l'anneau de dilation KIC dans les déchets ménagers.

En cas d'incidents graves liés à l'utilisation du système KIC, ceux-ci doivent être signalés au fabricant et aux administrations compétentes du pays où réside l'utilisateur.

Manfred Sauer GmbH n'assume aucune responsabilité en cas de dommages ou de blessures dus à la manipulation non conforme à la présente notice d'utilisation ou au non-respect des directives d'hygiène et des normes de soins correspondantes.

**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Sistema KIC (condom KIC, anello divaricatore KIC, guarnizione KIC)

### Scopo e indicazioni

I condom KIC sono concepiti per il drenaggio esterno dell'urina in una sacca di raccolta in soggetti di sesso maschile con incontinenza urinaria e formazione di urina residua, trattati con regolare cateterismo supplementare (autocateterismo/cateterismo assistito). L'utilizzo avviene sulla pelle priva di lesioni. Il sistema KIC, comprendente i condom KIC con i relativi accessori ovvero guarnizione KIC e anello divaricatore KIC, consente l'autocateterismo o il cateterismo assistito senza togliere il condom dal pene. Questo approccio è delicato sulla pelle ed evita di dover sostituire il condom dopo ogni cateterismo.

### Controindicazioni

I condom KIC non sono adatti in caso di allergie/intolleranza al lattice o ad altri materiali presenti nel condom o nella colla/ella fascetta biadesiva utilizzata; lesioni cutanee del pene (ad es. ferite, eczema, punti di pressione); malattie della pelle acute (ad esempio micosi, infezione batterica della cute); fimosi accentuata.

### Informazioni importanti sull'igiene e sul tempo di utilizzo

Quando si maneggiano prodotti per l'incontinenza, è necessario osservare le linee guida igieniche delle autorità regionali responsabili. Si consiglia di cambiare il condom (fascetta adesiva, sacca) dopo 24 ore. A seconda del tipo di pelle, può essere indossato per meno di 24 ore.

### Informazioni

- Il nome del prodotto e il nome commerciale sono riportati sull'etichetta.
- Varianti *Originale* e *Extra sottile*.
- Guarnizione KIC: sostituirla dopo tre utilizzi; sciacquare la guarnizione con acqua prima di innestarla su un nuovo condom; rimovibile.
- Anello divaricatore KIC: riutilizzabile; lavarlo regolarmente con acqua.

### Rischi e indicazioni di avvertenza

Chiarire con un medico l'idoneità individuale degli urocondom in lattice per il trattamento dell'incontinenza. Le istruzioni per l'uso dell'urocondom devono essere fornite da un infermiere qualificato. Può causare irritazioni/alterazioni cutanee. Sono possibili reazioni allergiche al lattice. Ispezionare la pelle; se si riscontrano anomalie, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

I condom troppo stretti o un uso improprio dei mezzi di ritenzione possono causare punti di pressione e, in casi molto rari (soprattutto in assenza di sensibilità), anche stenosi/necrosi. In questo caso, consultare immediatamente un medico. Attenersi alle indicazioni per la determinazione della misura e alle istruzioni per l'uso dei mezzi di ritenzione.

### Indicazioni per la determinazione della misura del condom KIC

La scelta della misura corretta garantisce un buon adattamento e previene perdite e punti di pressione. Per selezionare la misura, la circonferenza del pene deve essere misurata all'incirca al centro del corpo del pene. Se l'applicazione avviene in erezione, anche la misurazione della circonferenza deve essere effettuata sul pene in erezione. Le fascette di misurazione specifiche del prodotto indicano il diametro in base alla misurazione della circonferenza.

### Istruzioni per l'uso

Tenere il condom con il pollice e l'indice, sollevare l'apertura del condom sopra la placca della guarnizione, allineare la guarnizione al centro dell'apertura (Fig. 1).

Premere il manicotto della guarnizione e fissarlo/bloccarlo mediante rotazione (Fig. 2).

Tirare il condom e la guarnizione per verificare la connessione (Fig. 3).

Quindi applicare il condom con un dispositivo di fissaggio adatto, seguendo le istruzioni per l'uso corrispondenti (ad esempio colla cutanea SAUER, fascette biadesive SAUER). Per staccare la connessione tra il condom e il tubicino della sacca di raccolta dell'urina, allentare la guarnizione (Fig. 4).

Introdurre i dentini dell'anello divaricatore nell'apertura del condom (Fig. 5).

Allargare il condom chiudendo il sistema a forbice fino a quando le maniglie si toccano (Fig. 6).

Far scivolare il condom con l'anello divaricatore all'indietro in modo che il glande sia completamente libero (Fig. 7).

Disinfettare ed eseguire il cateterismo, attenendosi alle istruzioni per l'uso del catetere specifico (Fig. 8).

Asciugare i punti di connessione sulla guarnizione e sul condom per garantire una connessione sicura. Quindi far scivolare nuovamente il condom con l'anello divaricatore in avanti (Fig. 9).











Chiudere l'anello divaricatore e toglierlo (Fig. 10).

L'anello, che rimane dietro la superficie adesiva, può essere inciso o completamente reciso o strappato con le forbici dalla punta arrotondata, nel caso in cui si temano punti di pressione o se il pene, ad esempio, si ritrae bruscamente durante la minzione (Fig. 11). A causa del rischio di lesioni, non utilizzare forbici affilate. Il taglio deve essere rotondo in modo che il condom non si strappi. Durante il taglio o lo strappo, premere contemporaneamente il condom sulla superficie adesiva.

Ricollegare la guarnizione, ecc. (Fig. 1,2,3...).

### Indicazioni per lo smaltimento

Smaltire il condom, la guarnizione e l'anello divaricatore KIC con i rifiuti non riciclabili.

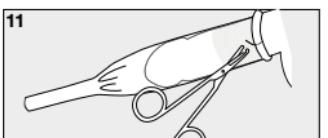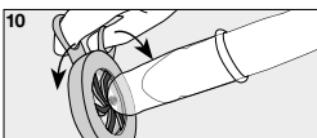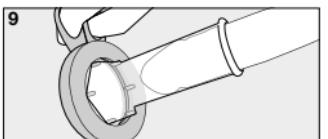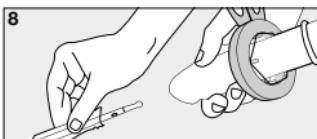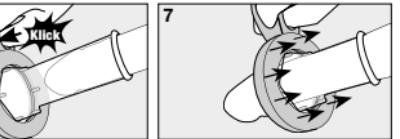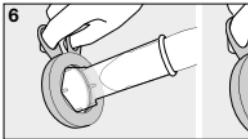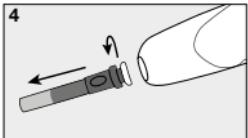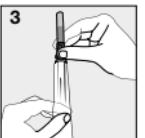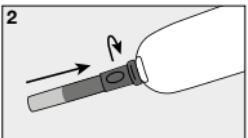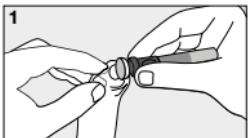

REF



Numero dell'articolo

Conservare in  
luogo asciutto

REF

Numero di pezzi  
Tenere lontano dalla  
luce del sole

CH REP

Rappresentante  
autorizzato svizzero

LOT

Numero del lotto  
Osservare le istruzioni  
per l'uso

CE HD

Marcatura CE del  
prodotto medicoUtilizzabile fino  
(anno-mese-giorno)

Non riutilizzabile

PZN

DT

LPP

Codice numerico  
farmaceutico centrale

Drug Tariff (NHS)

Elenco dei  
prodotti e servizi

Produttore



Importatore

LATEX

Qualora durante l'uso del sistema KIC dovessero verificarsi incidenti gravi, questi dovranno essere segnalati al produttore e all'autorità competente del Paese in cui vive l'utente.

Manfred Sauer GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da una manipolazione impropria contraria alle presenti istruzioni per l'uso o dalla mancata applicazione delle linee guida igieniche e degli standard di cura corrispondenti.

**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
 Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC-systeem (KIC-katheters, KIC-spreidingsring, KIC-koppeling)

### **Beoogd gebruik en indicatie**

KIC-katheters dienen voor de externe urineafvoer in een urineopvangzak bij mannen met urine-incontinentie met vorming van resturine, die behandeld wordt met aanvullende regelmatige katherisatie (zelf of door een verpleegkundige). Externe katheters worden op intacte huid gebruikt. Het KIC-systeem, bestaande uit KIC-katheters en de accessoires KIC-koppeling en KIC-spreidingsring, maakt katherisatie mogelijk zonder de katheter van de penis los te maken. Dit is zacht voor de huid en voorkomt dat de katheter na elke katherisatie vervangen moet worden.

### **Contra-indicatie**

KIC-katheters zijn niet geschikt bij allergieën/intolerantie voor latexrubber of ander materiaal in de katheter of in de gebruikte kleefstof/tape; huidletsels aan de penis (bijv. wonden, eczemen, drukplekken); acute huidaandoeningen (bijv. mycose, bacteriële huidinfectie); uitgesproken phimosis.

### **Belangrijke aanwijzingen over hygiëne en draagtijd**

Bij het gebruik van incontinentieproducten dienen de van toepassing zijnde richtlijnen voor hygiëne in acht te worden genomen. Aanbevolen wordt om de katheter (de tape, de urinezak) uiterlijk na 24 uur te verwisselen. De draagtijd kan afhankelijk van het huidtype ook minder dan 24 uur bedragen.

### **Informatie**

- De product- en handelsnaam zijn terug te vinden op het etiket.
- Verkrijgbaar in de varianten *Origineel* en *Extra dun*.
- KIC-koppeling: verwisselen na drie keer gebruiken; spoelen met water alvorens aan te sluiten op een nieuwe katheter; afneembaar.
- KIC-spreidingsring: meermaals te gebruiken; regelmatig met water reinigen.

### **Risico's en waarschuwingen**

Overleg met een arts of latexcondoomkathers geschikt zijn voor incontinentiezorg. Een gediplomeerd verpleegkundige moet instructies geven over het onderhoud van de condoomkather.

Kan huidirritatie/-veranderingen veroorzaken. Een allergische reactie op latex is mogelijk. Inspecteer de huid; stop het gebruik als er afwijkingen optreden en raadpleeg een arts.

Te strakke katheters of onjuist gebruik van de bevestigingsmiddelen kunnen leiden tot drukplekken en in zeer zeldzame gevallen (vooral bij onvoldoende sensitiviteit) ook tot bekneling en necrose. Raadpleeg in een dergelijk geval onmiddellijk een arts. Neem de maatkeuze en de gebruiksaanwijzing van de bevestigingsmiddelen in acht.

### **Instructies over de maatkeuze van de KIC-katheter**

De juiste maatkeuze zorgt voor een goede pasvorm en voorkomt lekkage en drukplekken. Voor de selectie van de maat moet de omtrek van de penis ongeveer in het midden van de penisschacht gemeten worden. Indien de katheter bij een erectie aangebracht wordt, moet ook de omtrek van de penis in erectie bepaald worden. De productspecifieke meetlinten geven de diameter aan de hand van de omtrekmeting aan.

### **Gebruiksaanwijzing**

Houd de katheter met duim en wijsvinger vast, til de opening van de katheter over de schijf van de koppeling, lijn de koppeling centraal in de opening uit (fig. 1).

Druk op de koppelingshuls en draai deze vast (fig. 2).

Trek aan de katheter en de koppeling om de verbinding te controleren (fig. 3).

Breng vervolgens de katheter aan met een geschikt bevestigingsmiddel, met inachtneming van de desbetreffende gebruiksaanwijzing (bijv. SAUER-huidlijm, SAUER-tape). Om de verbinding tussen de katheter en de inlaatslang van de urineopvangzak los te maken, draait u de koppeling los (fig. 4).

Steek de tanden van de spreidingsring in de katheropening (fig. 5). Vouw de katheter uit door de schaarhendels te sluiten totdat de hendels elkaar raken (fig. 6).

Breng de katheter met de spreidingsring zo ver naar achteren dat de eikel helemaal vrij is (fig. 7).

Desinfecteer en katheriseer volgens de gebruiksaanwijzing van de betreffende katheter (fig. 8).

Droog de verbindingspunten op de koppeling en de katheter om een goede verbinding te garanderen. Leid dan de katheter met de spreidingsring weer naar voren (fig. 9).





Sluit de spreidingsring en verwijder het (fig. 10).

Om drukplekken te voorkomen, of als de penis zich bij het urineren terugtrekt, kan de rubber ring achter de bevestigingszone verwijderd worden door deze af te knippen of los te trekken (fig. 11). Gebruik geen puntige schaar om letsel te voorkomen. Om te voorkomen dat de katheter scheurt, dient de ring geheel afgeknipt te worden. Druk bij het knippen van de ring tegelijkertijd de katheter op het zelfklevende oppervlak.

Sluit de koppeling weer aan enz. (fig. 1, 2, 3, ...).

### **Verwijderingsvoorschrift**

Verwijder de KIC-katheter, KIC-koppeling en KIC-spreidingsring met het restafval.

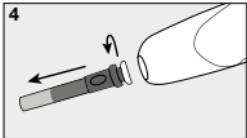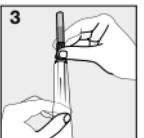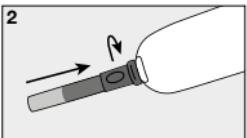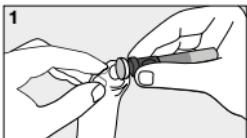

## KIC-systemet (KIC-urindroppsamlare, KIC-spänning, KIC-koppling)

### Användningsområde och indikationer

Urindroppsamlare för extern avledning av urin till en urinuppsamlingspåse för män med urininkontinens och bildning av residualurin som dessutom behandlas med regelbunden kateterisering (ISK/IFK). Endast för användning på oskadad hud. KIC-systemet, som består av KIC-urindroppsamlare med tillbehören KIC-koppling och KIC-spänning, möjliggör kateterisering utan att urindroppsamlaren lossas från penis. Det skonar huden och sparar in ett byte av urindroppsamlare efter varje kateterisering.

### Kontraindikation

KIC-urindroppsamlare är inte lämpliga vid allergier/överkänslighet mot latex eller andra material i urindroppsamlaren eller i det vävnadsplasten eller den häfttejp som används; hudskador på penis (t.ex. sår, eksem, tryckmärken); akuta hudsjukdomar (t.ex. svampinfektion, bakteriell hudinfektion); förhudsförträning.

### Viktig information om hygien och användningstid

Vid användning av inkontinensprodukter måste de nationella myndigheternas riktlinjer för hygien följas. Det rekommenderas att urindroppsamlaren (samt häfttejpen och påsen) byts efter 24 timmar. Beroende på hudtyp kan den också behöva bytas med mindre intervall än 24 timmar.

### Information

- Produkt- och handelsnamn finns på etiketten.
- Finns i varianterna *Original* och *Extratunn*.
- KIC-koppling: byts när den används tre gånger; spola genom med vatten före anslutning till en urindroppsamlare; avtagbar.
- KIC-spänning: kan användas flera gånger; rengör regelbundet med vatten.

### Risker och varningar

Rådgör med läkare om den individuella lämpligheten för användning av urindroppsamlare av latex som hjälpmittel vid inkontinens. Användning av urindroppsamlare som hjälpmittel bör ske efter konsultation med kvalificerad sjukvårdspersonal.

Kan medföra hudirritation/hudförändringar. Allergisk reaktion mot latex kan förekomma. Besiktiga huden. Vid avvikelse från det normala bör användandet av produkten avbytas och läkare rådfrågas. För trånga urindroppsamlare eller felaktig hantering av häftmedel kan medföra tryckskador och i mycket sällsynta fall (fr. a. vid bristande känslighet) även till åtsnörningar/nekroser. I dessa fall måste läkare omedelbart uppsökas. Beakta råd om val av storlek samt bruksanvisningar för häftmedel.

### Råd om val av storlek av KIC-urindroppsamlaren

Rätt val av storlek ger god passning och förebygger läckage och tryckskador. För att kunna välja rätt storlek måste man mäta penis omkrets ungefär på mitten av dess längd. Vid limning under erektion görs mätningen av den erigerade penisenomsfång. Vid användning av de produktsspecifika måttbanden anges också omkretsmalet.

### Råd om användning

Håll urindroppsamlaren mellan tummen och pekfingret och trä öppningen över kopplingsflänsen med kopplingen mitt i öppningen (fig. 1).

Tryck in kopplingshylsan och lås den genom att vrida den (fig. 2). Dra i urindroppsamlaren och kopplingen för att kontrollera anslutningen (fig. 3).

Fast därefter urindroppsamlaren med lämpligt häftmedel enligt den aktuella bruksanvisningen (t.ex. SAUER vävnadsslip, SAUER häfttejp). För att bryta anslutningen mellan urindroppsamlaren och slangen till urinuppsamlingspåsen lossas kopplingen (fig. 4).

För spänningens tänder i öppningen på urindroppsamlaren (fig. 5). Vidga urindroppsamlaren genom att föra samman saxgreppets skänklar tills de berör varandra (fig. 6).

För med spänningens tillbaka urindroppsamlaren så långt att ollonet är helt fritt (fig. 7).

Desinficera och kateterisera enligt bruksanvisningen för den aktuella katetern. (fig. 8)

Torka av anslutningsytorna på koppling och urindroppsamlare för att säkerställa en säker anslutning. Dra sedan åter fram urindroppsamlaren med spänningen (fig. 9).











Stäng spänningen och ta bort den (fig. 10).

Ringen som blir kvar bakom det limmade området kan med en rundad sax klippas upp, eller helt klippas eller rivas av om man befår risk för tryckmärken eller om penis tenderar att dra sig tillbaka mycket i samband med vattenkastning (fig. 11). För att undvika risk för skador får inga vassa saxar användas. Snittet ska klippas i en rundad form så att urindroppsamlaren inte rivas sönder. Håll fast urindroppsamlaren mot det limmade området medan ringen klippas eller rivas bort.

Anslut åter kopplingen o.s.v. (Fig. 1, 2, 3, ...).

### Anvisningar för avfallshantering

KIC-urindroppsamlare, -koppling och -spänning hanteras som restavfall.

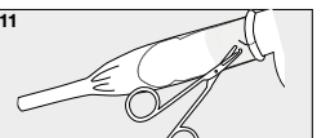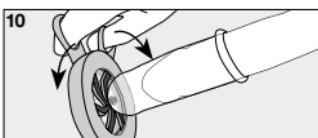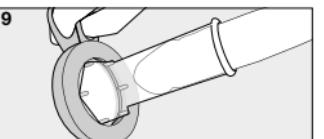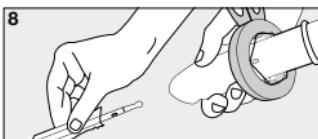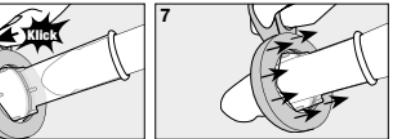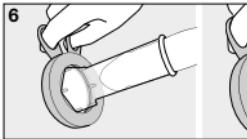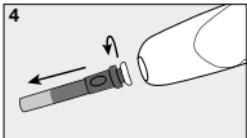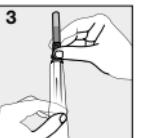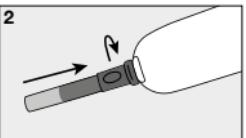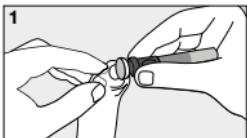

Artikelnummer



Förvaras torrt



Antal



Skyddas mot  
direkt solljus



Schweizisk auktoriserad  
representant



Batchnummer



Följ bruksanvisningen



CE-märkning för  
medicinteknisk produkt



Används före  
(år-månad-dag)



Endast för engångsbruk



PZN-nummer



Drug Tariff (ersättningsbelopp  
från brittiska NHS)



Lista över produkter  
och tjenster



Tillverkare



Importör



Latex

Om det vid användning av SAUER vävnadslim skulle förekomma allvarliga incidenter, ska dessa rapporteras till tillverkaren och behöriga myndigheter i det land där användaren är bosatt.

Manfred Sauer GmbH ansvarar inte för eventuella skador som beror på felaktig användning, ej i enlighet med denna bruksanvisning eller underlättande att följa de hygieniska riktlinjerna och motsvarande värdestandard.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC-system (KIC-kondom, KIC-spredering, KIC-kobling)

### Tilsiget anvendelse og indikation

KIC-kondomer er beregnet til ekstern urinudtømning i en urinop-samlingspose hos mandlige personer med urininkontinens med rest-urindannelse, som behandles ved hjælp af regelmæssig kateterindsættelse (ISK/IFK). Anvendelsen skal ske på intakt hud. KIC-systemet, der består af KIC-kondomer og den tilhørende KIC-kobling og KIC-spredering, gør det muligt at kateterisere uden at fjerne kondomet fra penis. Det skærer huden og overflædiggør skift af kondom efter hver kateterisering.

### Kontraindikation

KIC-kondomer er ikke egnede i tilfælde af allergier/overfølsomhed over for latex eller andre materialer i kondomet eller i det anvendte klæbemiddel/klæbebånd; hudskader på penis (fx sår, eksem, tryksteder); akutte hudsygdomme (fx mykose, bakteriel hudinfektion); udpræget phimose.

### Vigtige anvisninger for hygiejne og bæreværighed

I forbindelse med kontinensprodukter skal de ansvarlige myndigheders hygiejneretringslinjer overholdes. Der anbefales, at kondomet (klæbebåndet, posen) skiftes senest hver 24. time. Bæreværigheden kan alt efter hudtype være mindre end 24 timer.

### Information

- Produkt- og firmanavn fremgår af etiketten.
- Varianterne *Original* og *Extradünn* er tilgængelige.
- KIC-kobling: skal udskiftes efter tre ganges brug; skal skyldes igennem med vand inden samling med et nyt kondom; aftagelig.
- KIC-spredering: kan anvendes flere gange; rengøres regelmæs-sigt med vand.

### Risici og advarsler

Man bør rådføre sig med en læge omkring spørgsmålet om, hvorvidt latex-urinalkondom til behandling af inkontinens er passende. Vejledning til behandlingen med urinalkondomer bør gives af en kvalificeret sundhedsmedhjælper.

Kan fore til hudirritation/-ændringer. Allergisk reaktion på latex mulig. Undersøg huden, brug ikke produktet ved påfaldende fund, og søg råd hos en læge.

For snævre kondomer eller forkert håndtering af klæbemidler kan føre til trykmærker og i meget sjældne tilfælde (f.eks. ved manglen-de sensitivitet) indsnøringer/neksoser. I så fald skal der øjeblikkeligt søges læge. Vær opmærksom på råd om valg af størrelse og brugs-anvisningen til klæbemidlet.

### Råd til valg af størrelse på KIC-kondomer

Et rigtigt valg af størrelse giver god tilpasning og forebygger læs-ger og tryksteder. Ved valg af størrelse skal omfanget af penis måles cirkla-p midten af penisskafet. Hvis der påklæbes under erektion, skal omfanget af den erigerede penis også måles. De produktspesi-fifikke målebånd angiver diameteren ud fra omfangsmålingerne.

### Brugsanvisninger

Hold kondomet med tommel- og pegefingher, træk kondomets åb-ning over koblingsens tallerken, og hold koblingen centeret i forhold til åbningen (Fig. 1).

Tryk på koblingshylsteret, og sæt det fast ved at dreje det på (Fig. 2). Træk i kondomet og koblingen for at tjekke forbindelsen (Fig. 3). Derefter skal kondomet påsættes med et egnet klæbemiddel, og den pågældende brugsvejledning skal overholdes (f.eks. SAU-ER-hudklæber, SAUER-klæbebånd). Når forbindelsen mellem kondom og urinopfangningsposens slange skal åbnes, skal koblingen lukkes op (Fig. 4).

For de små tænder på sprederingen ind i kondomets åbning (Fig. 5). Udvid kondomet ved at lukke sakssegrebene, indtil grebene rører hinanden (Fig. 6).

Før kondomet med sprederingen så langt bagud, indtil penishovedet er helt frit (Fig. 7).

Idet du følger brugsvejledningen til det pågældende kateter, skal du desinficere og kateterisere (Fig. 8).











Tor forbindelsesstederne på koblingen og kondomet for at opnå sikker forbindelse. Bagefter skal kondomet med sprederingen efter føres fremad (Fig. 9).

Luk sprederingen, og tag den af (Fig. 10).

Den ring, der forbliver bag klæbefladen, kan skæres op eller helt af med en afrundet saks, hvis der frygtes tryksteder, eller penis fx trækker sig stærkt sammen under vandladning (Fig. 11). På grund af farenen for tilskadekomst må der ikke bruges en spids saks. Indsnittet skal holdes rundt, så kondomet ikke går i stykker. Ved afskæring eller -afrivning skal samtidigt trykkes på klæbefladen på kondomet. Sæt efter koblingen på osv. (Fig. 1, 2, 3...).

### Bortskaffelsesanvisninger

KIC-kondom, -kobling og -spredering kan kasseres som almindeligt affald.

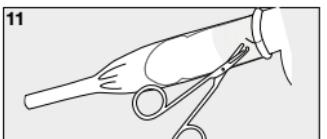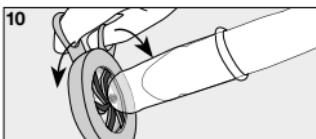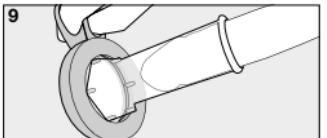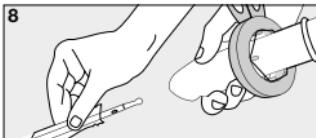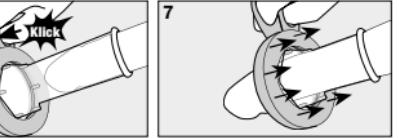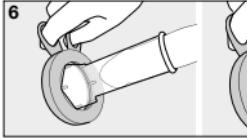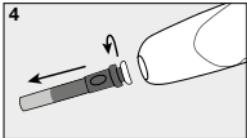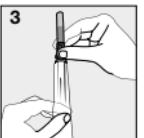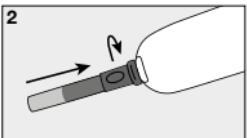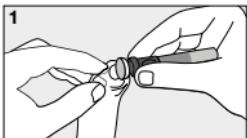

Artikelnummer



Skal opbevares tørt



Antal



Beskyttes  
mod sollys



Autoriseret for Schweiz



Batchnummer



Følg brugsanvisningen



CE-mærkning medicinsk  
produkt



Holdbar til  
(år-måned-dag)



Må ikke genanvendes



Nummer på farmaceutisk  
central



Medicintarif  
(Katalog britiske NHS)



Liste over produkter  
og tjenester



Producent



Importør



Latex

Skulle der ved anvendelse af KIC-systemet forekomme alvorlige hændelser, skal de rapporteres til fabrikanten og landets ansvarlige myndighed, hvor brugeren har bopæl.

Manfred Sauer GmbH påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser, som opstår som følge af forkert håndtering ifølge denne brugsanvisning eller manglende overholderlse af hygiejne-retningslinjerne og de tilsvarende plejestandarder.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC-järjestelmä (KIC-kondomi, KIC-levitinrengas, KIC-liitin)

### Käyttötarkoitus ja käyttöaihe

KIC-kondomien avulla ohjataan virtsa ulkoiseen virtsankeruupussiin miehillä, joilla esiintyy virtsanpidätyskyvyttömyyttä ja jäännösvirtsan muodostumista, jota hoidetaan ylimääräisellä säännöllisellä katetroinnilla (itsekatetrointi / avustettu katetrointi). Ihon on oltava ehjä urinaalikondomin käyttöä varten. KIC-järjestelmä, joka koostuu KIC-kondomista ja lisätarvikkeesta – KIC-liitännästä ja KIC-levitinrenkaasta – mahdollistaa itsekatetroinnin / avustetun katetroinnin irrottamatta kondomia peniksestä. Tämä säästää ihoa, eikä kondomia tarvitse vaihtaa jokaisen katetroinnin jälkeen.

### Vasta-aие

KIC-kondomit eivät soveltu lateksille tai jollekin muulle kondomissa tai käytettävässä liimassa/liimanauhassa esiintyvälle materiaalille allergisille/yliherkille; peniksen ihovauriot (esim. haavat, ekeesemat, painauamat); akutti ihosairaudet (esim. sieniauti, ihon bakterieeriluheidus); hyvin ahdas esinahka.

### Hygieniaa ja käytön kestoja koskevia tärkeitä ohjeita

Kontinenensituotteita käsiteltäessä on noudatettava kansallisten terveysviranomaisten laatimia hygieniamääräyksiä. Suosittelemme kondomin (liimanauhan, pussin) vaihtamista 24 tunnin kuluttua. Ihottypistä riippuen käytön kesto voi olla lyhyempi kuin 24 tuntia.

### Tiedot

- Tuote- ja kauppanimi ovat nähtävissä etiketistä.
- Saatavilla variantteina *Alkuperäinen* ja *Erikoisolut*.
- KIC-liitin: vaihda kolmen käytökerran jälkeen; huuhtele vedellä ennen yhdistämistä uuteen kondomiin; irrotettava.
- KIC-levitinrengas: uudelleenkäytettävä; puhdista säännöllisesti vedellä.

### Riskit ja varoitukset

Selvitä lääkäriltä, soveltuuko lateksinen urinaalikondomi henkilökohtaisen inkontinenssisi hoitoon. Pätevän hoitohenkilökunnan on opastettava urinaalikondomien käytössä.

Voi aiheuttaa ihoarsytystä/ihomuutoksia. Allergiset reaktiot lateksille mahdollisia. Tarkkaile ihoa. Mikäli iho-ongelmia esiintyy, käyttäjän tullee lopettaa tuotteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen. Liian pienien kondomien käytön tai kiinnitysvälineiden epäasianmukaisen käsitteily seurauksena voi syntyä painaumia ja hyvin harvinaisissa tapauksissa (ennen kaikkea tuntoherkkyyden ollessa alentunut) myös kuroumia/kuoiloita. Tällöin on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. Noudata koon valinnasta annettuja ohjeita sekä kiinnitysvälineiden käyttöohjeita.

### Ohjeita KIC-kondomin koon valintaan

Oikea koko takaa hyvän istuvuuden ja ehkäisee vuotoja ja painaumia. Koon valintaa varten peniksen ympärysmitta on mitattava noin peniksen varren puolivälistä. Jos liimaus tehdään peniksen ollessa erektiassa, myös ympärysmitan mittaus tehdään erekktion aikana. Tuotekohtaiset mittanauhat ilmoittavat halkaisijan mitatun ympärysmitan perusteella.

### Käyttöohjeet

Pidä kondomista kiinni peukalolla ja etusormella, nostaa kondomin aukko liittimen pohjan päälle ja kohdista liitin aukon keskelle (kuva 1).

Paina liittimen hylsyä ja pysäytä/lukitse käänämällä (kuva 2).

Vedä kondomista ja liittimestä liitoskuoren tarkistamiseksi (kuva 3).

Aseta tämän jälkeen kondomi paikalleen käytäneen soveltuvaltaa kiinnitysvälinettä sen käyttöohjeen mukaisesti (esim. SAUER-iholiimi, SAUER-liimanauha). Irrota liitin katkaistaksesi kondomin ja virtsa-pussin letkun väliisen liitoskuoren (kuva 4).

Vie levitinrenkaan hampaat kondomin aukkoon (kuva 5).

Levitä kondomia sulkemalla hampaita, kunnes ne koskettavat toisiaan (kuva 6).

Vedä kondomia ja levitinrengasta taakse niin pitkälle, että peniksen kärki on kokonaan näkyvissä (kuva 7).

Desinfio ja katetroi noudattaaan katetrin käyttöohjetta (kuva 8).

Kuivaa liittimen ja kondomin liitoskohdat tiiviin liitoskuoren varmistamiseksi. Vedä tämän jälkeen kondomi ja levitinrengas takaisin eteenpäin (kuva 9).











Sulje levitinrengas ja poista se (kuva 10).

Liimapinnan taakse jäävä rengas voidaan leikata pyöreäkärkisillä saksilla auki tai kokonaan pois tai se voidaan repäästä irti, mikäli pelätään painaumia tai jos penis vetätyy voimakkaasti taaksepäin esim. virtsataessa (kuva 11). Loukkaantumisvaaran takia teräväkärkisiä saksia ei saa käyttää. Leikkauksestaan on tehtävä kaareva, jotta kondomi ei repeä. Paina kondomia liimapinnan kohdalta leikatessasi tai repäistessäsi rengasta irti.

Yhdistä liitos uudelleen (kuvat 1, 2, 3).

### Hävittämishoje

Hävitä KIC-kondomi, -liitin ja -levitinrengas sekajätteenä.

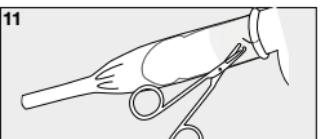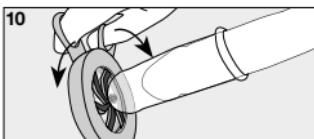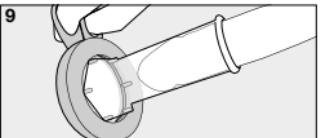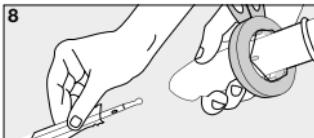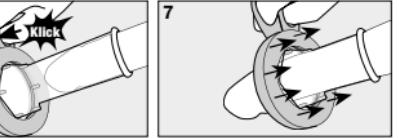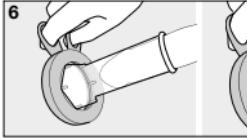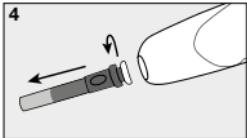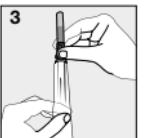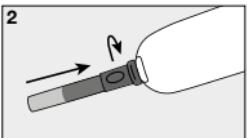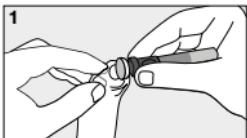

REF



Tuotenumero

Säilytettävä  
kuivassa tilassa

Kappalemäärä

Suojattava  
aurinkonvalolta

CH REP

Swiss authorised  
representative

Eränumero



Noudata käyttöohjeita

CE MD

Lääkinnällisen  
laiteen CE-merkintäViimeinen käyttöajankohta  
(vuosi-kuukausi-päivä)

Ei voida käyttää uudelleen

PZN

DT

LPP



Lääkekeskuksen numero

Drug Tariff  
(Britannian NHS:n)

Valmistaja



Maahantujoja

Lateksia

Jos KIC-järjestelmää käytettäessä esiintyy tilanteita, joilla on vaavia seurauksia, niistä on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän asuinmaan toimivaltaisille viranomaisille.

Manfred Sauer GmbH ei vastaa vahingoista tai loukkaantumisista, joita näiden käyttöohjeiden vastaisesta virheellisestä käytöstä tai hygieniamääryysten ja vastaanvien holtostandardien noudattamatta jättämisestä voi seurata.

**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC-system (KIC-uridomer, KIC-spredering, KIC-kobling)

### Bruksformål og -indikasjoner

KIC-uridomer brukes til ekstern urinavleddning i en urinpose for menn med urininkontinens med resturindannelse som behandles med ekstra regelmessig kateterisering (ISK/IFK). Bruken finner sted på intakt hud. KIC-systemet, som består av KIC-uridomer og tilbehøret KIC-kobling og KIC-spredering, muliggjør ISK/IFK, uten at uridomet må løses fra penis. Dette skåner huden og gjør uridombytte etter hver kateterisering unødvendig.

### Kontraindikasjon

KIC-uridomer er ikke egnet ved allergi/intoleranse overfor lateks eller andre materialer i uridomet, eller i limet/teipen som brukes; hudskader på penis (f.eks. sår, eksemmer, trykkssteder), akutte hudsykdommer (f.eks. mykose, bakteriell hudinfeksjon), utpreget fimoise.

### Viktig informasjon som gjelder hygiene og brukstid

I omgangen med kontinensprodukter må de hygieniske retningslinjene fra ansvarlige nasjonale myndigheter overholdes. Det anbefales å skifte uridomet (teipen, posen) etter 24 timer. Brukstiden kan være mindre enn 24 timer, avhengig av hudtypen.

### Informasjon

- Produkt- og handelsnavn er angitt på etiketten.
- Tilgjengelig i variantene *Original* og *Ekstra tynn*.
- KIC-koblingen skal byttes ut etter tre ganger bruk; skyll gjennom med vann før tilkobling til nytt kondom; kan tas av.
- KIC-sprederingen kan gjenbrukes; rengjør regelmessig med vann.

### Risikoer og advarsler

Hvorvidt lateksuridomene er egnet til behandling av inkontinens i hvert enkelt tilfelle, må avklares med en lege. Veileddingen for behandling med uridomer skal utføres av en kvalifisert sykepleier. Kan fore til hudirritasjoner/-forandringer. Allergiske reaksjoner mot lateks kan oppstå. Kontroller huden – ved uregelmessigheter skal bruken av produktet ikke fortsette og det skal søkes råd hos lege. For trange uridomer eller ufagmessig håndtering av festemidler kan føre til at det oppstår trykkpunkter, og i svært sjeldne tilfeller (fremfor alt ved manglende sensitivitet) også forsnevninger/nekrose. I slike tilfeller må lege oppsøkes øyeblikkelig. Overhold informasjon som gjelder valg av størrelse og bruksanvisningen til festemidlene.

### Informasjon som gjelder valg av størrelse på KIC-uridomet

Valg av riktig størrelse sørger for god passform, og forebygger lekkasjer og trykkpunkter. Til valg av størrelsen må penisens omkrets måles omtrent midt på penisskaftet. Dersom det limes under

ereksjon, foretas også målingen av omfanget på erigert penis. De produktspesifikke målebåndene angir diametren på basis av målingen av omkretsen.

### Instrukser for bruk

Hold uridomet med tommelfingeren og pekefingeren, løft åpningen på uridomet over skiven på koblingen, posisjoner koblingen i midten av åpningen (fig. 1).

Trykk på koblingshylsen og fest/lås den fast ved å vri (fig. 2).

Trekk i uridomet og koblingen for å kontrollere forbindelsen (fig. 3).

Fest deretter uridomet med et egnet festemiddel. Overhold den respektive bruksanvisningen (f.eks. SAUER-hudlim, SAUER-teip). For å skille forbindelsen mellom uridom og innløpsslange til urinsamleposen, må koblingen løsnes (fig. 4).

Før tennene på sprederingen inn i uridomåpningen (fig. 5).

Utvid uridomet ved å lukke sakshåndtakene inntil håndtakene berører hverandre (fig. 6).

Før uridomet bakover med sprederingen til penishodet ligger fullständig fritt (fig. 7).

Desinfiser og kateteriser i henhold til bruksanvisningen for det respektive kateteret (fig. 8).

Tørk av tilkoblingssteden på kobling og uridom for å garantere godt feste. Før deretter uridomet forover igjen med sprederingen (fig. 9).











Lukk sprederingen og ta den av (fig. 10).

Ringen som er igjen bak limeflaten kan klippes opp eller helt av med en avrundet saks, eller den kan rives av, dersom du er redd for at det oppstår trykksteder eller penis trekker seg sterkt tilbake, eksempelvis ved vannlating (fig. 11). På grunn av faren for å skade seg, må det ikke brukes en spiss saks. Innsnittet skal føres rundt, slik at ikke uridomet revner. Når du klipper eller river av, må du samtidig trykke uridomet fast mot limflatene.

Koble til koblingen igjen osv. (fig.1, 2, 3 ...)

### Instrukser om avfallshåndtering

KIC-kondomet, koblingen og sprederingen skal kastes i restavfallet.

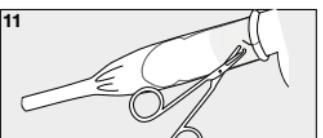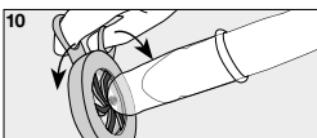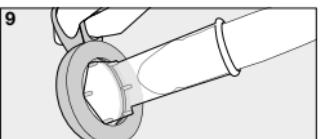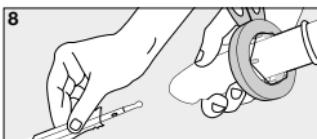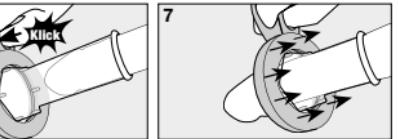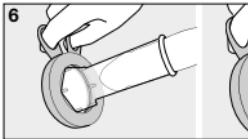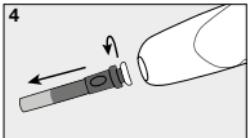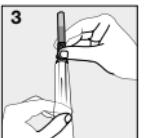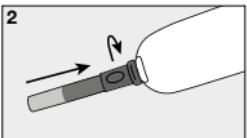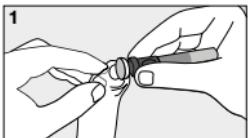

Artikkelnummer



Skal oppbevares  
tørt



Antall



Skal holdes borte fra sollys



Sveitsisk autorisert organ



Partinummer



Overhold  
bruksanvisningen



CE-merke for  
medisinsk produkt



Utløpstid  
(år-måned-dag)



Ikke til gjenbruk



Farmasentralnummer



Legemiddeltariff  
(britiske NHS)



Liste over produkter  
og tjenester



Produsent



Importør



Lateks

Dersom det skulle oppstå alvorlige hendelser ved bruken av KIC systemet, må disse meldes til produsenten og ansvarlige nasjonale myndigheter der brukeren bor.

Manfred Sauer GmbH påtar seg intet ansvar for personskade eller annen skade som kan føres tilbake til ufagmessig håndtering som strider mot denne bruksanvisningen eller ved manglende overholdelse av hygieniske retningslinjer.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC-süsteem (KIC-kondoom, KIC-laiendusröngas, KIC-ühendusosa)

### Kasutusotstarve ja näidustus

KIC-kondoome kasutatakse üriini väliseks ärajuhtimiseks üriinikogumiskotti üriinipidamatusega meestel, kellel tekkiv jääkuriin eemaldatakse täiendava korrapärase kateeterdamise (ISK/IFK) abil. Kasutatakse vigastamata nahal. KIC-süsteem, mis koosneb KIC-kondoomist ning tarvikutest (KIC-ühendusosast ja KIC-laiendusröngast), võimaldab ISK-d/IFK-d nii, et kondoomi ei pea peeniselt eemaldama. See kaitseb nahja ja säästab kondoomihetutesest pärast iga kateeterdamist.

### Vastunäidustused

KIC-kondoomid ei sobi juhul, kui esineb allergia/talumatus lateksi või muude kondoomi või kasutatavates liimides/kleplintides sisalduvate materjalide vastu; nahakahjustused (nt haavad, ekseem, survekohad); ägedad nahahaiquised (nt mikoos, bakteriaalne nahainfektsioon); väljakujunenud fimoos.

### Olulised juhised hügieeni ja kandmiskestuse kohta

Hügieen ja kandmiskestuslõikontinenti korral kasutatavate toodete käitlemisel tuleb järgida vastutavate riigiasutuste hügieeninõoudeid. Soovitav on vahetada üriinikogurit (kleepriba, kotti) hiljemalt 24 tunni möödudes. Kandmiskestus võib olenevalt nahatüübist olla ka alla 24 tunni.

### ITeave

- Toote- ja kaubanimi on märgitud etiketile.
- Saadaval on variandid *Original* ja *Eriti õhuke*.
- KIC-ühendusosa: vahetage pärast kolme kasutust; enne uue kondoomiga ühendamist loputage veega läbi; eemaldatav.
- KIC-laiendusröngas: mitmekordsest kasutatav; puuhastage korrapäraselst veega.

### Ohud ja hoiatused

Pidamatuse lahendamiseks arutage arstiga lateks-uriinikondoomi individuaalset kohandamist. Uriinikondoomide paigaldamist peab juhendama spetsialist.

Tekkida võivad nahääritused/-muutused. Võimalik on allergiline reaktioon lateksi vastu. Kontrollige nahka; körvalekallete tekkinisel ärge kasutage toodet edasi ja pöörduge arsti poole.

Liiga kitsa kondoomi või kinnitusvahendite oskamatu käsitsimise tõttu võivad tekkida muljumisjälged ning väga harvadel juhtudel (eeskätt tundetuse korral) ka ahendid/nekroosid. Sellisel juhul pöörduge kohe arsti poole. Järgige suuruse valiku juhiseid ja kinnitusvahendite kasutusjuhiseid.

### KIC-kondoomi suuruse valiku juhised

Õigesi valitud suurus tagab hea istuvuse ning väldib lekkimist ja muljumisjälgi. Suuruse valimiseks tuleb ligikaudu peenisetüve keskel mõõta peenise ümbermõõt. Erektsiooniaegsel liimimisel tuleb mõõta ka erekteerunud peenise ümbermõõt. Tootemoste mõõdu-üldintega antakse ümbermõõdu põhjal ka läbimõõt.

### Kasutusjuhised

Hoidke kondoomi pöidl ja nimetissörme vahel, töstke kondoomi ava ühendusosa plaadile, seadke ühendusosa ava keskele (joonis 1).

Vajutage ühendusosa ümbrist ja kinnitage/lukustage keerates (joonis 2).

Ühenduse kontrollimiseks tömmake kondoomi ja ühendusosa (joonis 3).

Seejärel pange kondoom sobiva kinnitusvahendiga peale ja järgige seejuures kasutusjuhendit (nt nahaliim SAUER, kleplindid SAUER). Kondoomi ja uriinikogumiskotti sissetuleva vooliku vahelise ühenduse lahtivõtmiseks vabastage ühendusosa (joonis 4).

Viige laiendusrönga sakid kondoomi avasse (joonis 5).

Laiendage kondoomi käepidemete sulgemise abil, kuni käepidemed puutuvad kokku (joonis 6).

Viige kondoomi laiendusröngabi abil nii palju tahapoole, et peeniseots oleks täiesti vaba (joonis 7).

Desinfiteerige ja kateeterdage ning järgige seejuures kateetri kasutusjuhiseid (joonis 8).

Kindla ühenduse tagamiseks kuivatage ühendusosa ja kondoomi ühenduspinnad. Seejärel tooge kondoom laiendusröngabi abil uesti ettepoole (joonis 9).

Sulgege laiendusröngas ja eemaldage see (joonis 10).











Kui kardate survekohtade teket või peenis tömbub urineerimisel tugevalt tagasi (joonis 11), siis saab liimipinnale taha jäääva rönga ümaraotsaliste käärdega lahti või täielikult ära lõigata või lahti rebinda. Vigastusohu tõttu ei ole lubatud kasutada terava otsaga kääre.

Uriinikoguri rebenemise vältimiseks tuleb sisselöögi teha kaarjal. Lõikamisel või rebimisel vajutage uriinikogurit samal ajal vastu liimiga kaetud pinda.

Sulgege ühendusosa uesti jne. (Joonised 1, 2, 3...).

### Kõrvaldamisjuhis

Kõrvaldage KIC-kondoom, -ühendus ja -laiendusröngas olmejäätmetenena.

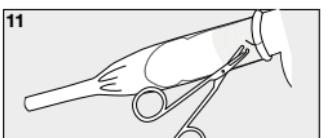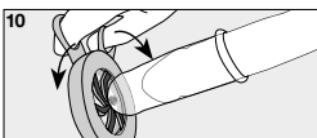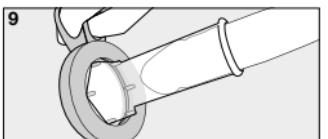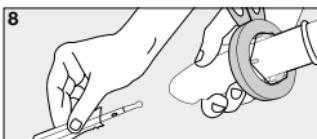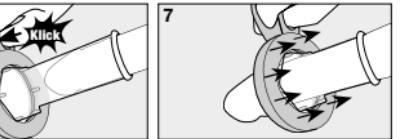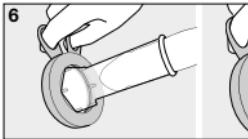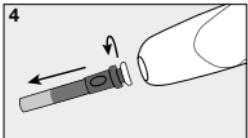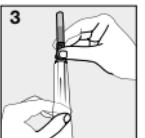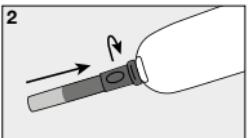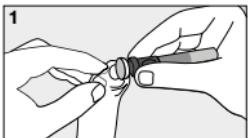

REF



Artikli number

Hoida kuivas  
kohas

Tükiarv

Hoida päikesevalguse  
eest kaitstult

CH REF

LOT



Šveitsi volitatud esindaja

Partii number



Järgida kasutusjuhendit

CE MD

Meditsiinitoote  
CE-märgistusKasutada kuni  
(aasta-kuu-päev)

Mitte kasutada uuesti

PZN

DT

LPP



Ravimikood

Drug tariff (Briti NHS)

Toodete ja teenuste loend



Tootja



Importija

LATEX

Lateks

Kui KIC-süsteemide kasutamisel esineb raskeid vahejuhtumeid, tuleb neist teatada tootjale ja kasutaja asukohariigi pädevale asutusele.

Manfred Sauer GmbH ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis võivad tuleneda kasutusjuhendile mitte vastavast käsitsimisest või hügieeninõuetega ja hooldusstandardite eiramisest.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
 Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Sistema KIC (colector de orina peneano KIC, anillo de expansión KIC, acoplamiento KIC)

### Uso previsto e indicaciones

Los colectores de orina peneanos KIC se utilizan para el drenaje externo de la orina en una bolsa de diuresis en hombres con incontinencia urinaria con formación de orina residual, que se trata mediante cateterismo regular adicional (autocateterismo intermitente/cateterismo intermitente asistido). El empleo tiene lugar sobre la piel intacta. El sistema KIC, que se compone de los colectores de orina peneanos KIC y los accesorios KIC (acoplamiento y anillo de expansión), permite el autocateterismo intermitente y el cateterismo intermitente asistido sin necesidad de retirar el colector de orina del pene. Este procedimiento es suave para la piel y no requiere un cambio del colector de orina peneano después de cada cateterismo.

### Contraindicación

Los colectores de orina peneanos KIC no deben usarse en caso de alergias/intolerancia al látex o a otro material del colector de orina o del adhesivo/cinta adhesiva; lesiones cutáneas en el pene (p. ej. heridas, eccemas, zonas de presión); enfermedades cutáneas agudas (p. ej. micosis, infección cutánea bacteriana); fimosis pronunciada.

### Notas importantes sobre la higiene y la duración del uso

Al manipular productos para la incontinencia se deben observar las directrices de higiene de las autoridades regionales competentes. Se recomienda sustituir el colector (cinta adhesiva y bolsa) tras 24 horas. En función del tipo de piel, la duración del uso puede ser inferior a 24 horas.

### Información

- El nombre comercial y el nombre del producto se indican en la etiqueta.
- Disponible en las variantes *Original* y *Extrafino*.
- Acoplamiento KIC: cambiar después de tres usos; enjuagar con agua antes de conectar a un nuevo colector de orina peneano; desmontable.
- Anillo de expansión KIC: reutilizable; limpiar con agua regularmente.

### Riesgos y advertencias

Consulte con su médico sobre la idoneidad específica de los colectores de orina peneanos de látex para el tratamiento de la incontinencia. La instrucción sobre el tratamiento con colectores de orina peneanos debe dejarse en manos de un profesional en enfermería cualificado.

Puede causar irritación/alteraciones cutáneas. Es posible que se presenten reacciones alérgicas al látex. Examine la piel y, si detecta alguna anomalía cutánea, deje de usar el producto y consulte con un médico.

El uso de colectores de orina peneanos demasiado estrechos puede

provocar puntos de presión y, en casos muy aislados, estrangulación y necrosis (en particular, en caso de ausencia de sensibilidad). En este caso, acuda inmediatamente a un médico. Observe las indicaciones sobre la selección de tamaños y las instrucciones de uso de los elementos de fijación.

### Indicaciones sobre la selección del tamaño del colector de orina peneano KIC

La selección correcta del tamaño garantiza un buen ajuste y evita fugas y puntos de presión. Para seleccionar el tamaño, es necesario medir el perímetro aproximadamente a la mitad del cuerpo del pene. Si el colector se adhiere al pene erecto, la medición de la circunferencia deberá llevarse a cabo también con el pene erecto. Las cintas de medición del producto indican el diámetro en base a la medición del perímetro.

### Instrucciones de uso

Sujete el colector de orina peneano con los dedos índice y pulgar, levante la abertura del colector sobre la placa del acoplamiento y coloque el acoplamiento en el centro de la abertura (fig. 1).

Presione el manguito de acoplamiento y girelo para fijarlo/bloquearlo (fig. 2).

Tire del colector de orina y del acoplamiento para comprobar que se haya establecido bien la conexión (fig. 3).

A continuación, coloque el colector de orina con un dispositivo de sujeción adecuado conforme a las instrucciones de uso (p. ej., adhesivo cutáneo SAUER o cinta adhesiva SAUER). Para separar la conexión entre el colector de orina peneano y el tubo de entrada de la bolsa colectora de orina es necesario desconectar el acoplamiento (fig. 4).

Introduzca los dientes del anillo de expansión en la abertura del colector de orina peneano (fig. 5).

Ensanche el colector de orina cerrando los ojos de tijera hasta que los ojos se toquen entre sí (fig. 6).











Desplace hacia atrás el colector de orina con el anillo de expansión hasta que el glande quede completamente expuesto (fig. 7).

Realice la desinfección y cateterización conforme a las instrucciones de uso del catéter respectivo (fig. 8).

Seque los puntos de conexión del acoplamiento y el colector de orina peneano a fin de garantizar una conexión segura. A continuación, vuelva a desplazar hacia delante el colector de orina peneano con el anillo de expansión (fig. 9).

Cierre el anillo de expansión y retirelo (fig. 10).

El anillo situado tras la superficie de adhesión puede recortarse con unas tijeras redondas o retirarse por completo si teme que pueda provocar un exceso de presión o que el pene retroceda considera-

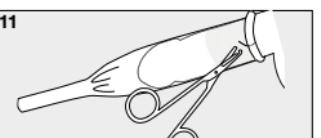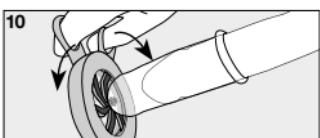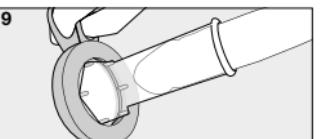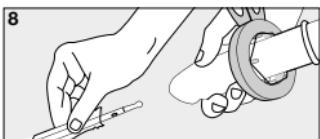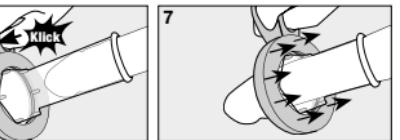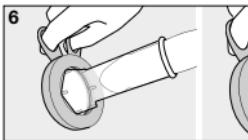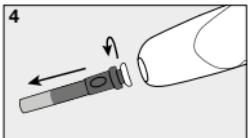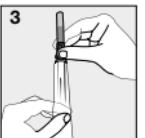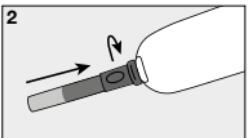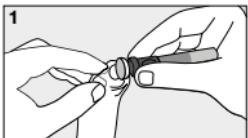

blemente, p. ej. al miccionar (Fig. 11). Debido al peligro de lesiones, no se recomienda el uso de tijeras con punta. El corte debe ser circular para evitar que el colector se desgarre. Al recortar o retirar por completo el anillo, presione simultáneamente el colector por la superficie adherida.

Vuelva a conectar el acoplamiento, etc. (fig. 1,2,3,...).

#### Instrucciones de eliminación

Elimine el colector de orina peneano KIC, el acoplamiento KIC y el anillo de expansión KIC en la basura residual.

Número de artículo

REF

Manténgase seco

Unidades

Manténgase fuera de la luz del sol

CH REP

Representante autorizado de Suiza

LOT

Número de lote

Consultense las instrucciones de uso

CE MD

Producto sanitario con marcado CE

Fecha de caducidad (año-mes-día)

No reutilizable

PZN

Código farmacológico Tarifa farmacológica (NHS británico)

DT

Lista de productos y servicios

LPP

Fabricante

Importador

Látex

Si se producen incidentes graves al usar el sistema KIC, se deberá informar al fabricante o a la autoridad competente del país en el que resida el usuario.

Manfred Sauer GmbH no asume responsabilidad alguna por los daños o lesiones que puedan derivarse de un uso indebido contrario a las presentes instrucciones de uso o del incumplimiento de las directrices de higiene y las normas de cuidado correspondientes.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Sistema KIC (Preservativos KIC, Anel expensor KIC, Acoplamento KIC)

### Finalidade e indicações

Os preservativos KIC são utilizados para recolha externa da urina para um saco coletor de urina em homens com incontinência urinária com retenção urinária que é tratada com recurso a cateterização adicional regular (auto Cl/Cl por terceiros). A utilização ocorre sobre a pele intacta. O sistema KIC, composto por preservativos KIC e pelos acessórios de acoplamento KIC e anel expensor KIC, permite o auto Cl/Cl por terceiros sem soltar o preservativo do pénis. Cuida da pele e previne a mudança de preservativo após cada cateterização.

### Contraindicações

Os preservativos KIC não são adequados para pessoas com alergias/intolerância ao látex ou a outros materiais que compõem o preservativo ou o adesivo/fita adesiva utilizado; danos cutâneos no pénis (por exemplo, feridas, eczema, contusões); doenças de pele agudas (por exemplo, micose, infecção bacteriana da pele); acentuada fíose.

### Notas importantes sobre higiene e tempo de utilização

Ao manusear produtos de continência, respeitar as diretrizes sanitárias das autoridades nacionais competentes. Recomenda-se mudar o preservativo (a fita adesiva, o saco) após 24 horas. O tempo de utilização pode ser inferior a 24 horas, dependendo do tipo de pele.

### Informação

- O nome do produto e o nome comercial constam do rótulo.
- Variantes *Originais* e *Extrafinos* disponíveis.
- Acoplamento KIC: substituir após três utilizações; antes da ligação com um preservativo novo, enxaguar com água; removível.
- Anel expensor KIC: reutilizável; lavar regularmente com água.

### Riscos e advertências

Procurar aconselhamento médico no que diz respeito à adequação individual de preservativos urinários de látex no tratamento da incontinência. As instruções para o tratamento com preservativos urinários devem ser dadas por profissionais de saúde qualificados. Pode provocar irritações cutâneas/alterações da pele. Possível reação alérgica ao látex. Iinspecionar a pele; caso sejam detetadas quaisquer anomalias, interromper a aplicação do produto e procurar aconselhamento médico.

Se forem utilizados preservativos demasiado apertados ou se os meios de fixação forem manuseados de forma incorreta, podem ocorrer pontos de pressão e, em casos muito raros (especialmente se não houver sensibilidade), constricções e necroses. Neste caso, consultar um médico imediatamente. Prestar atenção às indicações relativas à seleção do tamanho e às instruções de utilização dos materiais de fixação.

### Indicações relativas à seleção do tamanho do preservativo KIC

Uma seleção adequada do tamanho garante um ajuste correto e previne fugas e pontos de pressão. Para selecionar o tamanho, o perímetro do pénis deve ser medido aproximadamente no meio do seio uretral. Quando colado sob ereção, a medição do perímetro faz-se também no pénis ereto. As fitas métricas específicas do produto indicam o diâmetro com base na medição do perímetro.

### Instruções de utilização

Prender o preservativo com o polegar e o indicador, levantar a abertura do preservativo sobre o disco do acoplamento, centrar o acoplamento na abertura (Fig. 1).

Comprimir e prender/fixar a manga de acoplamento, rodando-a (Fig. 2).

Puxar o preservativo e o acoplamento, para verificar a aderência (Fig. 3).

Em seguida, aplicar o preservativo com um meio de fixação adequado, respeitando as instruções de utilização (p. ex., adesivo cutâneo SAUER, fitas adesivas SAUER). Para eliminar a aderência entre o preservativo e o tubo introitório do saco de recolha de urina, soltar o acoplamento (Fig. 4).

Inserir os pequenos dentes do anel expensor na abertura do preservativo (Fig. 5).

Alargar o preservativo, fechando as garras em tesoura até que se toquem (Fig. 6).

Levar o preservativo e o anel expensor o mais possível para trás, até que a glândula fique totalmente exposta (Fig. 7).











Desinfetar e cateterizar, respeitando as instruções de utilização do respectivo cateter (Fig. 8).

Secar as zonas de união do acoplamento e do preservativo, garantindo assim uma aderência segura. Voltar a puxar agora o preservativo com o anel expensor para a frente (Fig. 9).

Fechar e retirar o anel expensor (Fig. 10).

O anel que permanece atrás da superfície adesiva pode ser cortado aberto ou completamente cortado ou arrancado com uma tesoura de pontas redondas, caso sejam temidos pontos de pressão ou se o pénis se retrair fortemente, por exemplo, ao urinar (Fig. 11). Devido ao risco de lesões, não devem ser utilizadas tesouras pontiagudas. A incisão deve ser feita à volta para que o preservativo não se rasgue. Ao cortar ou arrancar, pressionar o preservativo simultaneamente contra a superfície adesiva.

Voltar a aplicar o acoplamento, e assim sucessivamente. (Fig. 1, 2, 3...).

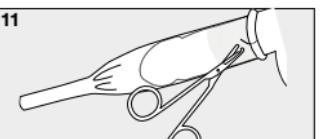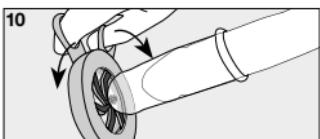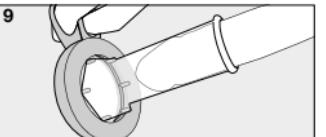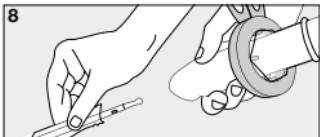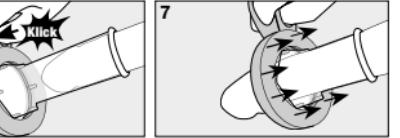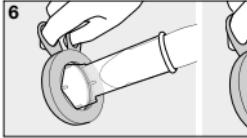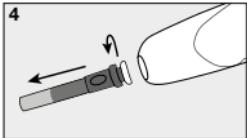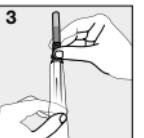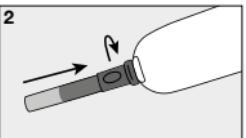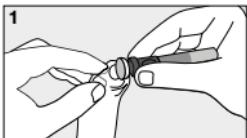

Número do artigo



Guardar em  
local seco



Quantidade



Manter longe da  
luz solar



Representante autorizado  
suiço



Número de lote



Respeitar as instruções  
de utilização



Dispositivo médico  
com marcação CE



Utilizar até (ano-mês-dia)



Não reutilizável



Autorização de introdução  
no mercado



Drug Tariff  
(NHS – Grã Bretanha)



Lista dos produtos  
e serviços prestados



Fabricante



Importador



Látex

## Indicações de eliminação

Eliminar os preservativos KIC, acoplamentos KIC e anéis expansores KIC com os restantes resíduos.

Se ocorrerem incidentes graves na utilização do sistema KIC, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do país em que o utilizador reside.

A Manfred Sauer GmbH não aceita qualquer responsabilidade por danos ou lesões que possam resultar de manuseamento incorreto contrário a estas instruções de utilização ou da não aplicação das diretrizes sanitárias e das normas de cuidados correspondentes.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Σύστημα KIC (Περιπετεϊκοί καθετήρες KIC, Δακτύλιος διάτασης KIC, Σύνδεσμος KIC)

### Προβλεπόμενη χρήση και ένδειξη

Οι Περιπετεϊκοί καθετήρες KIC χρησιμεύουν στην εξωτερική παροχή-τευση ούρων σε έναν ουρουσιαλέκτη σε άνδρες με ακράτεια ούρων με κατακράτηση ούρων, οι οποίοι υποβάλλονται σε επιπλέον τακτικό καθετηρισμό (αυτοκαθετηρισμό) ή καθετηρισμό από τρίτο άτομο). Για χρήση σε άθικτο δέρμα. Το Σύστημα KIC, που αποτελείται από Περιπετεϊκούς καθετήρες KIC, τον Σύνδεσμο KIC και τον Δακτύλιο διάτασης KIC, επιτρέπει τον αυτοκαθετηρισμό ή καθετηρισμό από τρίτο άτομο, χωρίς την αφίσερση του καθετήρα από το πέος. Αυτό προστατεύει το δέρμα και καθιστά μη απαραίτητη την αλλαγή περιπετεϊκού καθετήρα μετά από κάθε καθετηρισμό.

### Αντένδειξη

Οι Περιπετεϊκοί καθετήρες KIC δεν είναι κατάλληλοι σε περίπτωση αλλεργιών/ευαισθησίας στο λάτεξ ή σε άλλα υλικά που περιέχονται στον καθετήρα ή στη χρησιμοποιούμενη συγκολλητική ουσία/τανία, δερματικές αλλοιώσεις του πέοντος (π.χ. πληγές, εκζέματα, σημάδια), οξείες δερματικές παθήσεις (π.χ. μυκητίσια, βακτηριακή λοιμώξη του δέρματος), εξεσημασμένη φίμωση.

### Σημαντικές υποδείξεις σχετικά με την υγεινή και τη διάρκεια χρήσης

Κατά τη χρήση προϊόντων κατά της ακράτειας πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες υγεινής των αρμόδιων κρατικών αρχών. Συνιστάται η αλλαγή του καθετήρα (της συγκολλητικής τανίας, του ουρουσιαλέκτη) κάθε 24 ώρες. Η διάρκεια της χρήσης ενδέχεται να είναι μικρότερη από 24 ώρες ανάλογα με τον τόπο του δέρματος.

### Πληροφορίες

- Το όνομα του προϊόντος και η εμπορική επωνυμία αναφέρονται στην ετικέτα.
- Διατίθενται στις παραλαγές Κλασικό και Πολύ λεπτό.
- Σύνδεσμος KIC: αλλάζετε μετά από τρεις χρήσεις, έπιλεντες με νέο πριν από τη σύνδεση με νέο περιπετεϊκό καθετήρα, αφαιρούμενος.
- Δακτύλιος διάτασης KIC: πολλών χρήσεων, καθαρίζετε τακτικά με νερό.

### Κίνδυνοι και προειδοποίησεις

Συζητήστε την καταλληλότητα των περιπετεϊκών καθετήρων από λάτεξ για την αντιμετώπιση της ακράτειας με έναν ιατρό. Η καθοδήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση της ακράτειας με περιπετεϊκούς καθετήρες θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Μπορεί να επιφέρει δερματικούς ερεθισμούς/δερματικές μεταβολές. Είναι πιθανή αλλεργική αντίδραση στο λάτεξ. Ελέγχετε το δέρμα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων, μη χρησιμοποιείτε περαιτέρω το προϊόν και συμβουλευτείτε ιατρό.

Υπερβολικά στενοί καθετήρες ή ακατάλληλος χειρισμός των μέσων στερέωσης μπαρούν να επιφέρουν σημεία πίεσης και σε σπάνιες περιπτώσεις (ιδίως απουσία ευαισθησίας) συσφίξεις/νεκρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε άμεσα σε ιατρό. Ακαλούσθετε τις υποδείξεις για την επιλογή μεγέθους και τις οδηγίες χρήσης των μέσων στερέωσης.

### Υποδείξεις για την επιλογή μεγέθους του Περιπετεϊκού καθετήρα

Η ασωτή επιλογή μεγέθους διασφαλίζει την καλή εφαρμογή και αποτρέπει διαρροές και σημείες πίεσης. Για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους πρέπει να μετράται η περιφέρεια του πέοντος περίπου στη μέση του. Όταν η συγκόλληση γίνεται με το πέος υπό στήση, μετριέται και η περιφέρειά του. Οι συγκεκριμένες για το προϊόν μετροταίνες περάσουν τη διάμετρο βάσει της περιφέρειας.

### Υποδείξεις για τη χρήση

Κρατήστε τον περιπετεϊκό καθετήρα με τον αντίχειρα και τον δείκτη, σηκώστε το άνοιγμα του καθετήρα πάνω από τον δίσκο του συνδέσμου και ευθυγραμμίστε τον σύνδεσμο με το άνοιγμα (εικ. 1).

Πιέστε το περιβλήμα του συνδέσμου και σταθεροποιήστε/ασφαλίστε με πετροφόρη (εικ. 2).

Τραβήγλετε τον περιπετεϊκό καθετήρα και τον σύνδεσμο, για να ελέγχετε τη σύνδεση (εικ. 3).

Στη συνέχεια, εφαρμόστε τον περιπετεϊκό καθετήρα με ένα κατάλληλο μέσο στερέωσης, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης (π.χ. Συγκολλητικό δέρματος SAUER, Συγκολλητικές τανίες SAUER). Για τον διαχωρισμό της σύνδεσης μεταξύ περιπετεϊκού καθετήρα και σωλήνων εισορούς του ουρουσιαλέκτη, απασφαλίστε τον σύνδεσμο (εικ. 4). Εισαγάγετε τα δόντια του δακτύλιου διάτασης στο άνοιγμα του περιπετεϊκού καθετήρα (εικ. 5).











Διευμύνετε τον περιπετεϊκό καθετήρα, κλείνοντας τις λαβές του φαλιδού, μέχρι οι λαβές να έθουν σε επαφή μεταξύ τους (εικ. 6).

Με τον δακτύλιο διάτασης οδηγήστε τον περιπετεϊκό καθετήρα προς τα πίσω, ώστε ότου η βάλανος να αποκαλυψθεί πλήρως (εικ. 7).

Απολυμάνετε και καθετηριάστε, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε καθετήρα (εικ. 8).

Σεγνώντες τις θέσεις σύνδεσης στον σύνδεσμο και στον περιπετεϊκό καθετήρα, ώστε να ασφαλίσετε την ασφαλή σύνδεση. Στη συνέχεια, οδηγήστε τον περιπετεϊκό καθετήρα με τον δακτύλιο διάτασης προς τα εμπρός (εικ. 9).

Κλείστε τον δακτύλιο διάτασης και αφαιρέστε τον (εικ. 10). Ο δακτύλιος που βρίσκεται πάνω από τη συγκολλητική επιφάνεια μπορεί να κοπεί μερικώς ή ολικώς με ένα στρογγυλεμένο φαλό ή να σκιτεί σε περίπτωση που υπάρχει φόρος σημαδιών λόγω της πίεσης ή όταν

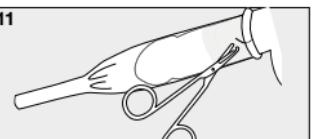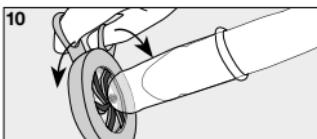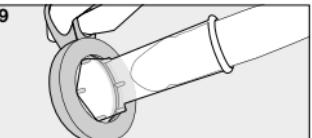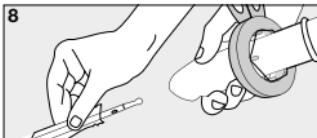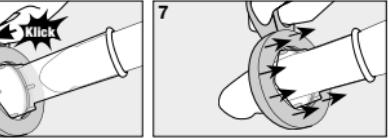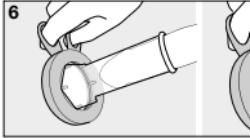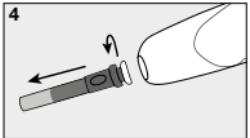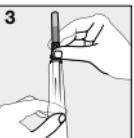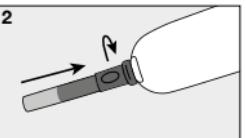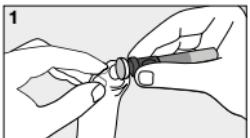

πέος τραβιέται πολύ πίσω για παράδειγμα κατά την ούρηση (Εικ. 11). Επειδή ωφίσταται κίνδυνος τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε φαλίδι με μύτη. Το κόψιμο θα πρέπει να πραγματοποιείται κυκλικά διαφορετικά ο καθετήρας μπορεί να οκιστεί. Παράλληλα με το κόψιμο ή το σκίσιμο, πιέστε τη συγκόλλητηκή επιφάνεια του καθετήρα.

Επανασυνδέστε τον σύνδεσμο κ.ο.κ. (εικ. 1,2,3,...).

#### Υπόδειξη για τη διάθεση

Απορρίπτετε τον Περιπτεικό καθετήρα KIC, τον Δακτύλιο διάτασης KIC και τον Σύνδεσμο KIC στα συνήθη απορρίμματα.

Κωδικός προϊόντος



Να φυλάσσεται σε έγρο μέρος



Αριθμός τεμαχίων



Να φυλάσσεται μακριά από το λιακό φως



Ευαναδιοτημένος αντιπρόσωπος της Ελβετίας



Αριθμός παρτίδας



Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης



Ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE



Χρήση έως  
(έτος-μηνας-ημέρα)



Για μία μόνο χρήση



Κωδικός φαρμάκου



(κατάλογος αποζημιώσις φαρμάκων του NHS του Ηνωμένου Βασιλείου)



Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών



Κατασκευαστής



Εισαγωγέας



Λάτεξ

Σε περίπτωση που κατά τη χρήση του Συστήματος KIC παρουσιάστοιν ασθράτη περιστατικά, αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας κατοικίας του χρήστη.

H Manfred Sauer GmbH δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της λανθασμένης χρήσης ενώπιον στης παρούσας οδηγίες χρήσης ή της μη εφαρμογής των υγειονομικών οδηγιών και των αντιστοιχών ιατρικών προτυπών.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC rendszer (KIC kondomok, KIC rögzítőgyűrű, KIC összekötő elem)

### Rendeltetési cél és indikáció

A KIC kondomok a vizelet vízeletfelfogó zsákba történő külső elvezetésre szolgálnak vizeletinkontinenciában szenvedő férfiak esetében, vagy abban az esetben, ha rendszeres katéterezésre (ISK/IFK) van szükség. A kondomot csak épp bőrön használja. A KIC rendszer KIC kondomkóból és kiegészítőkből, köztük KIC összekötő elemből és KIC rögzítőgyűrűből áll, és lehetővé teszi az ISK/IFK katéterezést anélkül, hogy a kondomot a péniszről le kellene venni. Ez kimeli a bőrt és megspórolja a kondomcerét minden katéterezés után.

### Ellenjavallatok

A KIC kondomok nem megfelelők a latexsel vagy a kondomban ill. a használt ragasztóban/ragasztószalagokban lévő más anyagokkal szembeni allergia/érzékenység; a pénisz bőrének károsodásai (pl. sebek, ekcéma, nyomás helyek); akut bőrbetegségek (pl. gombás megbetegedés, bakteriális bőrfertőzés); kialakult fitynaszükület esetén.

### Higiénia és a használat időtartama

A kontinencia termékek használata során tartsa be az illetékes ország hatóságainak higiéniai irányelvét. Javasoljuk, hogy a kondomot (a ragasztószalagot, a zsákokat) 24 óra elteltével cserélje ki. A használat időtartama a bőrtípustól függően akár 24 óránál kevesebb is lehet.

### Információ

- A termék neve és kereskedelmi neve a címkén láthatók.
- *Original* és *Extra vékony* változatban kaphatók.
- KIC összekötő elem: háromszori használhatatlan után cserélje ki; az új kondommal való összekötés előtt vizzel öblítse át; levehető.
- KIC rögzítőgyűrű: többször használható; rendszeresen tisztítsa vízzel.

### Kockázatok és figyelmeztetések

Kérdezze meg orvosát, hogy az inkontinencia kezelésére a latex vizeletkondomok Önnel megfelelők-e. A vizeletkondomok használatát szakképzett ápolónak kell betanítania.

Bőrritáción/tőrörváltozásokat okozhat. Latexre való allergiás reakció előfordulhat. Ellenőrizze a bőrt, és ha elváltozásokat tapasztal, ne használja tovább a terméket, hanem kérje ki orvosa tanácsát.

Ha túl szűk kondomot használ, vagy ha a rögzítőeszközök kezelése nem szakszerű, az nyomáshelyeket okozhat, és nagyon ritka esetekben (külnönen szenzitívítés hiánya esetén) elszorításokhoz/nekrózishoz vezethet. Ilyen esetben haladéktalanul forduljon orvoshoz. A méretválaszték és rögzítőeszközök használati utasításával kapcsolatban tartsa be az utasításokat.

### Utasítások a KIC kondomok méretválasztékéhez.

A helyes méretválasztás fontos annak érdekében, hogy a kondom jól illeszkedjen, ill. ne forduljon elő szivárgás és ne keletkezzenek nyomáshelyek. A méret kiválasztásához a pénisz kerületét kb. a pénisztest közepén kell megmérni. Ha a kondom erekciót során ragasztja fel, a kerület mérésnek is erekció alatt lévő péniszen kell megtöröljenne. A termékhez használt speciális mérőszalagok a kerület mérése alapján adják meg az átmérőt.

### Alkalmasági utasítások

Tartsa a kondomot a hüvelykujja és a mutató ujjja között, a kondom nyilását emelje az összekötő elem tányérja föl, helyezze az összekötő elemet a nyilás közepére (1. kép).

Az összekötő elem hüvelyére nyomja rá és elfordítással rögzítse (2. kép).

Húzza meg a kondomnál és az összekötő elemnél, hogy ellenőrizze az összekötést (lásd. 3. kép).

Ezt követően megfelelő rögzítőeszközzel fel kell helyezni a kondomot, előkben vegye figyelembe a megfelelő használati utasítást (pl. SAUER bőrragasztó, SAUER ragasztószalag). A kondom és a vizeletet felfogó zsákhöz vezető tömlő közti kapcsolat szétválasztásához oldja ki az összekötő elemet (4. kép).

Vezesse be a rögzítőgyűrű fogait a kondom nyilásába (5. kép).

Az ollós fogás zárással tágítsa ki a kondomot, amíg a fogók össze nem érnék (6. kép).

A kondomot a vezetőgyűrűvel egészen addig húzza hátra felé, amíg a makk teljesen szabaddá nem válik (7. kép).

Fertőtlenítés és katéterezés közben tartsa be az adott katéter használati utasítását (8. kép).

Az összekötő elem és a kondom találkozási helyeit törölje szárazra, a biztonságos kapcsolat biztosítása érdekében. A kondomot a vezetőgyűrűvel húzza ismét előre fel (9. kép).











Rögzítőgyűrű zárása és levétele (10. kép).

A ragasztási felület mögötti gyűrűt lekerékitett ollóval fel- vagy teljesen levághatja, ill. leszakíthatja, ha tart attól, hogy nyomáshelyek keletkeznek, vagy ha a pénisz pl. a vizesel során erősen visszahúzódik (11. kép). A sérülésveszély miatt nem szabad heges gyűrűt használni. A bemetszést kör alakban kell elvégezni, hogy a kondom ne szakadjon be. Levágás vagy leszakítás esetén a kondomot a ragasztási felületnél rá kell nyomni.

Összekötő elem újból csatlakoztatása stb. (1,2,3...kép).

### Ártalmatlanítási utasítás

A KIC kondomot, összekötő elemet és rögzítőgyűrűt helyezze a vegyes hulladékba.

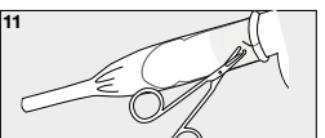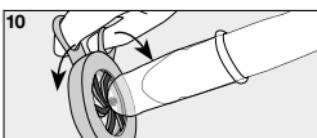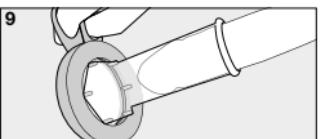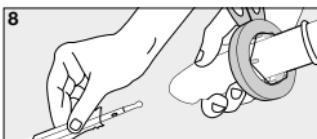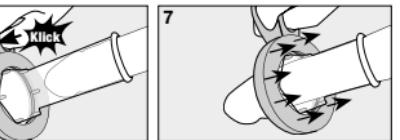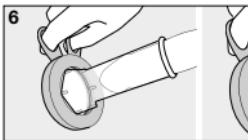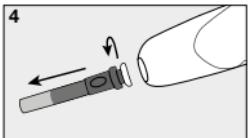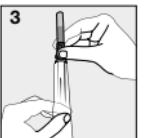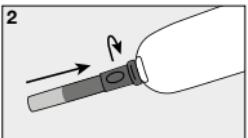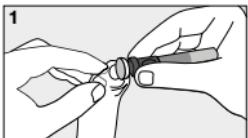

REF



Száraz helyen tárolandó

Darabszám



Napfénytől tartsa távol

CH REP

LOT



Társa be a

használáti utasítást

CE

MD



Felhasználható eddig a  
dátumig (év, hónap)



Egyszer használatos  
termék

PZN

DT

LPP



Drug tariff  
(a brit NHS katalógusa)

A termékek és  
szolgáltatások listája



Gyártó



Importör

Latex

Amennyiben a KIC rendszer használata során súlyos mellékhatást tapasztal, jelentse a gyártónak és a használó országának megfelelő illetékes hatóságának.

A Manfred Sauer GmbH nem vállal felelősséget olyan károkért vagy sérelmekért, amelyek ezen használati utasítástól eltérő, szakszerűtlen használat miatt vagy a higiéniai irányelvek, ill. vonatkozó ápolási normák be nem tartása miatt keletkeznek.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## System KIC (cewniki zewnętrzne KIC, pierścień rozwierający KIC, złącze KIC)

### Przeznaczenie i wskazania

Cewniki zewnętrzne KIC służą do zewnętrznego odprowadzania moczu do worka na moczu u mężczyzn cierpiących na nietrzymanie moczu z zaleganiem resztek moczu, leczonych dodatkowo regularnym cewnikowaniem (ISK/IFK). Stosowanie musi być wykonywane na nienaruszoną skórę. System KIC, składający się z cewników zewnętrznych KIC oraz akcesoriów: złącza KIC i pierścienia rozwierającego KIC, umożliwia cewnikowanie ISK/IFK bez konieczności zdejmowania cewnika zewnętrznego z prącia. Chroni to skórę i eliminuje konieczność zmiany cewnika zewnętrznego po każdym cewnikowaniu.

### Przeciwskazania

Cewniki zewnętrzne są nieodpowiednie w przypadku alergii/nietolerancji w odniesieniu do lateksu lub innych materiałów cewnika zewnętrznego lub stosowanego kleju/taśmy klejącej; uszkodzenia skóry na penisie (np. rany, egzema, punkty ucisku); ostre choroby skóry (np. grzybica, bakteryjne zakażenie skóry); wyraźna stulejka.

### Ważne informacje dotyczące higieny i czasu noszenia

Podczas stosowania produktów na nietrzymanie moczu należy przestrzegać wytycznych w zakresie higieny podanych przez właściwe organy państwowie. Zaleca się, aby zmienić prezerwatywę (taśmę klejącą, worek) najpóźniej po 24 godzinach. Czas noszenia zależy od rodzaju skóry i wynosi maksymalnie 24 godziny.

### Informacja

- Nazwa produktu i nazwa handlowa są podane na etykiecie.
- Dostępne warianty *Oryginalny* i *Ekstra cienki*.
- Złącze KIC: wymienić po trzykrotnym użyciu; przed połączeniem z nowym cewnikiem zewnętrznym przepłukać wodą; element zdejmowany.
- Pierścień rozwierający KIC: do wielokrotnego użytku; regularnie czyścić wodą.

### Ryzyka i ostrzeżenia

Indywidualną przydatność lateksowych cewników zewnętrznych w leczeniu nietrzymania moczu należy omówić z lekarzem. Instruktaż w zakresie używania cewników zewnętrznych powinna przeprowadzić osoba wykwalifikowana.

Może powodować podrażnienia skóry lub zmiany skórne. Możliwa reakcja alergiczna na lateks. Sprawdzić stan skóry, w przypadku nieprawidłowości należy przerwać stosowanie produktu i zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie zbyt ciasnych cewników zewnętrznych lub nieprawidłowe posługiwanie się środkami mocującymi może prowadzić

do powstania miejsc ucisku, a w bardzo rzadkich przypadkach (szczególnie w razie braku wrażliwości) – również do przewężen/martwicy. W takim przypadku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Przestrzegać wskazówek dotyczących doboru rozmiaru i instrukcji używania środków mocujących.

### Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru cewnika zewnętrznego KIC

Prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia dobre osadzenie oraz zapobiega powstawaniu nieszczytelności i miejsc ucisku. Aby wybrać rozmiar, należy zmierzyć obwód prącia mniej więcej w środku trzonu. Podczas przyklejania w czasie erekcji zaleca się również pomiar średnicy prącia we wzwodzie. Paski pomiarowe specyficzne dla produktu wskazują średnicę na podstawie pomiaru obwodu.

### Wskazówki dotyczące stosowania

Przytrzymać cewnik zewnętrznego kciukiem i palcem wskazującym, nasunąć otwór cewnika zewnętrznego nad dysk złącza, wyśrodkować złącze w otworze (rys. 1).

Naciśnąć tulejkę złącza i zablokować, wykonując obrót (rys. 2). Pociągnąć za cewnik zewnętrzny i złącze, aby sprawdzić połączenie (rys. 3).

Następnie założyć cewnik zewnętrzny przy użyciu odpowiedniego środka mocującego (np. klej do skóry SAUER, taśmy klejące SAUER) – przestrzegać przy tym odpowiedniej instrukcji użytkowania. Aby rozłączyć cewnik zewnętrzny i dren worka na moczu, należy odłączyć złącze (rys. 4).

Wprowadzić żąbki pierścienia rozwierającego do otworu w cewniku zewnętrznym (rys. 5).

Rozszerzyć cewnik zewnętrzny, zwierając uchwyty nożycowe tak, aby się ze sobą zetknęły (rys. 6).











Poprowadzić cewnik zewnętrzny razem z pierścieniem rozwierającym do tylu na tyle, aby całkowicie odsłonić żołądż (rys. 7).

Przeprowadzić dezynfekcję i cewnikowanie, przestrzegając instrukcji użytkowania danego cewnika (rys. 8).

Osuszyć miejsca połączenia na złączu i cewniku zewnętrznym, aby zagwarantować niezawodne połączenie. Następnie cewnik zewnętrzny wraz z pierścieniem rozwierającym poprowadzić z powrotem do proudu (rys. 9).

Zamknąć i zdjąć pierścień rozwierający (rys. 10).

Pierścień pozostały za klejoną powierzchnią można usunąć za pomocą zaokrąglonych nożyczek. Można go całkowicie rozcisnąć, odciąć lub oderwać. Należy unikać ucisku oraz zbyt gwałtownego odciągania penisa podczas oddawania moczu (rys. 11). Ze względu na ryzyko zranienia nie wolno używać ostro zakończonych noży-

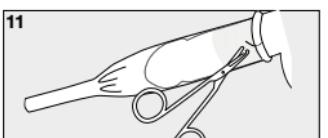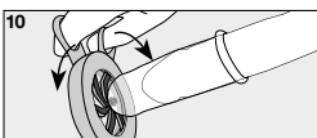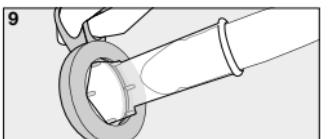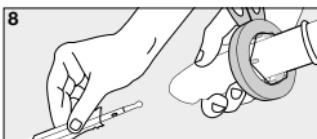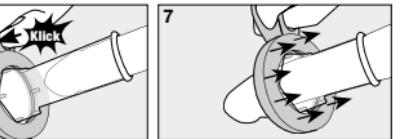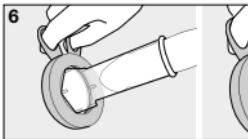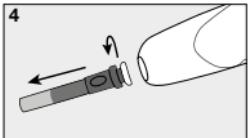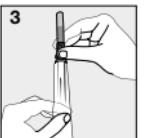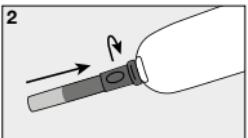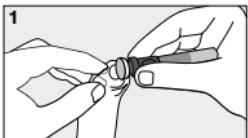

czek. Należy wykonać zaokrąglone nacięcie, aby prezerwatywa się nie rozerwała. Podczas cięcia lub odrywania należy dociskać prezerwatywę do powierzchni klejącej.

Z powrotem podłączyć złącze itd. (Rys. 1, 2, 3...).

#### **Wskazówka dotycząca utylizacji**

Wyrzucić cewnik zewnętrzny, złącze i pierścień rozwierający system KIC wraz z odpadami ogólnymi.

Numer artykułu

REF

Przechowywać w suchym miejscu

UMB

Liczba sztuk

SUN

Chronić przed światłem słonecznym

CH REP

Szwajcarski pełnomocnik

LOT

Numer partii

INFO

Postępować zgodnie z instrukcją

CE MD

Wyrob medyczny z oznakowaniem CE

HOUR

Przydatność do użycia (rok-miesiąc-dziesiąt)

X

Nie nadaje się do ponownego stosowania eder

PZN

Centralny numer farmaceutyczny

DT

Taryfikator leków (katalog NHS)

LPP

Lista produktów i usług

MOUNT

Producent

GLOBE

Importer

LATEX

Lateks

Jeśli podczas stosowania systemu KIC dojdzie do poważnych incydentów, należy to zgłosić producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym przebywa użytkownik.

Firma Manfred Sauer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z produktem, stosowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi lub niestosowania się do zaleceń w zakresie higieny oraz odpowiednich norm dotyczących pielęgnacji.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Systém KIC (kondomy KIC, roztahovací kroužek KIC, spojka KIC)

### Určený účel a indikace

Kondomy KIC slouží k externímu odvodu moči do urinálního sběrného sáčku u mužů s močovou inkontinencí s tvorbou zbytkové moči, která je ošetřována dodatečnou pravidelnou katetrizací (intermitentní autokatetrizaci / intermitentní katetrizaci provedenou druhou osobou). Aplikují se na neporušenou kůži. Systém KIC, který sestává z kondomu KIC a příslušenství ve formě spojky KIC a roztahovacího kroužku KIC, umožňuje intermitentní autokatetrizaci / intermitentní katetrizaci provedenou druhou osobou, aniž by bylo nutné sejmout kondom z penisu. Tím šetří pokožku a není třeba kondom vyměnovat po každé katetrizaci.

### Kontraindikace

Kondomy KIC nejsou vhodné při alergických/nevnásennostivitách u latéxu nebo jiném materiálu obsaženém v kondomu nebo v použitém lepidle/lepici pásku; poškození kůže na penisu (např. poranění, ekzémy, otlaky), akutní kožní onemocnění (např. mykóza, bakteriální kožní infekce), výrazná fimóza.

### Důležité pokyny pro hygienu a dobu použití

Při manipulaci s kontinentálními pomůckami je nutné dodržovat hygienické směrnice příslušných orgánů země. Doporučujeme, abyste kondom (lepici pásku, sáček) vyměnili po 24 hodinách. V závislosti na typu kůže může doba použití činit i méně než 24 hodin.

### Informace

- Obchodní název a název produktu najdete na etiketě.
- K dispozici ve variantách *Original* a *Extranek*.
- Spojka KIC: po třetím použití vyměňte; před spojením s novým kondomem propláchněte vodou; snámatelná.
- Roztahovací kroužek KIC: opakováně použitelný; pravidelně čistěte vodou.

### Rizika a výstražná upozornění

Vhodnost latexových urinálních kondomů pro ošetření inkontinence ve vašem konkrétním případě konzultujte s lékařem. Instruktáz pro ošetření pomocí urinálních kondomů by měl provádět kvalifikovaný ošetřující personál.

Může způsobit podráždění pokožky/změny na pokožce. Možná alergická reakce na latex. Pokožku sledujte, vyskytne-li se nějaká abnormalita, produkt dále nepoužívejte a konzultujte s lékařem. Použití příliš úzkých kondomů nebo nesprávná manipulace s upevňovacími prostředky mohou způsobit otlaky a ve velmi vzácných případech (především v případě snížené citlivosti) i zaškrcení/nekrozy. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dopravujte pokyny pro výběr velikosti a návody k použití upevňovacích prostředků.

### Pokyny pro výběr velikosti kondomu KIC

Výběr správné velikosti zajistí, aby kondom dobře seděl, a zabrání vzniku netěsnosti a otlaků. Pro výběr velikosti je třeba změřit obvod penisu zhruba uprostřed těla penisu. Je-li kondom lepen při erekci, provádí se i měření obvodu na ztopořeném penisu. Speciální měřicí pásky udávají průměr na základě naměřeného obvodu.

### Pokyny pro použití

Přidržte kondom palcem a ukazováčkem, otvor kondomu nasuňte na talířek spojky a spojku vyravnejte na střed otvoru (obr. 1). Přitiskněte spojovací pouzdro a otočením je upevněte/zaaretujte (obr. 2).

Zatáhněte za kondom a spojku, abyste zkontovali spojení (obr. 3). Poté nasadte kondom s vhodným upevňovacím prostředkem, přičemž dodržujte příslušný návod k použití (např. kožní lepidlo SAUER, lepicí pásky SAUER). Pro odpojení kondomu od odvodné hadičky urinálního sběrného sáčku uvolněte spojku (obr. 4).

Zoubky roztahovacího kroužku zavедte do otvoru kondomu (obr. 5). Roztahňte kondom zavíráním nůžkových rukojetí, dokud se obě rukojeti nedotyknou (obr. 6).

Kondom s roztahovacím kroužkem posuňte dozadu tak, aby byl žalud zcela volný (obr. 7). Provedte dezinfekci a katetrizaci, přičemž dodržujte návod k použití příslušného katetu (obr. 8).

Spojovaná místa na spojce a kondomu osuňte, abyste zajistili jejich bezpečné spojení. Poté kondom s roztahovacím kroužkem opět posuňte dopředu (obr. 9).











Roztahovací kroužek zavřete a sejměte (obr. 10).

Pokud se obáváte otlaků nebo se penis např. při močení silně stahuje, můžete pomocí nůžek se zaoblenými hroty nastrihnout nebo zcela odstranit, resp. odtrhnout kroužek, který zůstane za lepenou plochou (obr. 11). Kvůli nebezpečí poranění není možné použít nůžky s ostrými hroty. Nástříh by měl být veden do oblouku, aby se kondom neprotrhl. Při odstranění nebo odtržení kondomu zároveň přitlačujte k lepené ploše.

Spojku opět připojte atd. (obr. 1, 2, 3...).

### Pokyny k likvidaci

Kondom, spojku a roztahovací kroužek KIC zlikvidujte v komunálním odpadu.

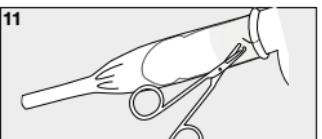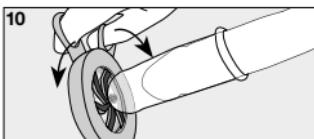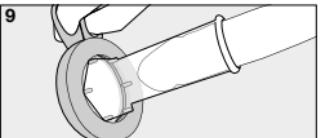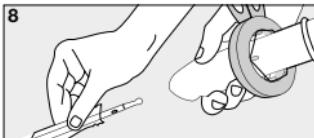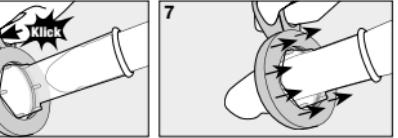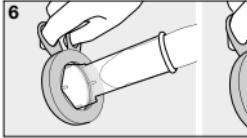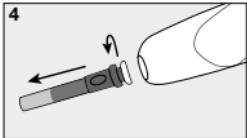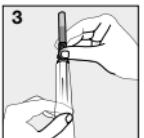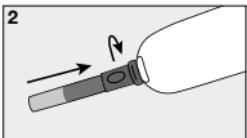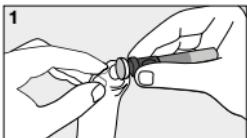

Číslo výrobku



Uchovávejte v suchu



Počet kusů



Chraňte před slunečním zářením



Švýcarský zmocněný zástupce



Číslo šarže



Dodržujte návod k použití



Označení CE Zdravotnický prostředek



Použitelné do (rok - měsíc - den)



Není určeno k opakování použití



Centrální farmaceutické číslo



Ceník léků  
(katalog britské NHS)



Seznam produktů a služeb



Výrobce



Dovozce



Latex

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s použitím systému KIC, musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu země, v níž je uživatel usazen.

Společnost Manfred Sauer GmbH neodpovídá za škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací v rozporu s tímto návodom k použití nebo nedodržením hygienických směrnic a příslušných standardů ošetřovatelské péče.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Sistemul KIC (prezervative KIC, inel de dilatare KIC, sistem de cuplare KIC)

### Scopul utilizării și indicații

Prezervativele KIC sunt utilizate pentru drenarea urinei în exterior într-o pungă pentru colectarea urinei la persoanele de sex masculin cu incontinentă urinară și urină reziduală, care sunt tratate prin cateterizare suplimentară (ISK/IFK) la intervale de timp regulate. Se aplică pe pielea intactă. Sistemul KIC, compus din prezervativele KIC și accesoriole sistem de cuplare KIC și inel de dilatare KIC, face posibilă cateterizarea ISK/IFK fără a fi necesară îndepărterea prezervativului de pe penis. Acest lucru protejează pielea și scutește pacientul de schimbarea prezervativului după fiecare cateterizare.

### Contraindicații

Prezervativele KIC nu sunt recomandate la alergii/intoleranță la latex sau la alte materiale din prezervativ sau la adezivul/banda adezivă utilizată; leziuni cutanate la nivelul penisului (de ex. râni, eczeze, puncte de presiune); afecțiuni dermatologice acute (de ex. micoză, infecție cutanată bacteriană); fimoza pronunțată.

### Indicații importante privind igiena și durata de purtare

La manipularea produselor pentru incontinentă trebuie respectate condițiile igienice impuse de autoritățile naționale competente. Se recomandă schimbarea prezervativului (benzi adezive, pungi) după 24 de ore. În funcție de tipul de piele, durata de purtare poate fi și mai scurtă de 24 de ore.

### Informație

- Denumirea produsului și denumirea comercială apar pe etichetă.
- Sunt disponibile variantele *Original* și *Extra subțire*.
- Sistem de cuplare KIC: se va înlocui după trei folosiri; înainte de a conecta sistemul la un prezervativ nou, clătiți-l bine cu apă; detasabil.
- Inel de dilatare KIC: se poate folosi de mai multe ori; a se curăța cu apă la intervale de timp regulate.

### Riscuri și avertisme

Clarificați cu un medic adecvararea individuală a prezervativelor urinare din latex pentru tratarea incontinentei. Instrucțiunile de aplicare și utilizare a prezervativelor urinare trebuie oferite de personal de îngrijire medicală calificat.

Poate duce la iritații/ modificări ale pielii. Sunt posibile reacții alergice la latex. Inspectați pielea, iar în caz de anomalii, produsul nu mai trebuie utilizat și trebuie solicitat sfatul medicului.

Dacă se utilizează prezervative prea înguste sau dacă mijloacele de fixare sunt manipulate necorespunzător, pot apărea puncte de presiune și, în cazuri foarte rare (mai ales dacă nu există sensibilitate),

și constrictii/necroze. În acest caz, se va consulta imediat un medic. Respectați indicațiile privind alegerea mărimii și instrucțiunile de utilizare a mijloacelor de fixare.

### Indicații privind alegerea mărimii prezervativului KIC

Alegerea corectă a mărimii asigură o potrivire bună și previne riscul de surgeri și de puncte de presiune. Pentru a selecta mărimea, se măsoară circumferința penisului aproxiimativ la mijlocul trunchiului penisului. Dacă prezervativul se lipște când penisul este în erecție, măsurătoarea circumferinței se face, de asemenea, pe penisul aflat în erecție. Benzile de măsurare specifice produsului indică diametrul în funcție de circumferința măsurată.

### Indicații privind utilizarea

Tineți prezervativul cu degetul mare și cu degetul arătător, ridicăți deschiderea prezervativului peste discul sistemului de cuplare, aliniați cuplarea astfel încât să fie centrată în deschiderea prezervativului (fig. 1).

Apăsați manșonul sistemului de cuplare și fixați-l/blocați-l prin rotire (fig. 2).

Trageți de prezervativ și de sistemul de cuplare pentru a verifica conexiunea (fig. 3).

Apoi, aplicați prezervativul cu un mijloc de fixare adecvat, respectând instrucțiunile de folosire ale prezervativului respectiv (de ex. adeziv SAUER pentru piele, benzi adezive SAUER). Pentru separarea îmbinării între prezervativ și tubul de intrare în punga de colectare a urinei, desfaceți sistemul de cuplare (fig. 4).

Introduceți dinții inelului de dilatare în deschiderea prezervativului (fig. 5).

Lărgiți prezervativul prin închiderea mânerelor tip foarfecă, până când mânerele se ating (fig. 6).

Ghidăți prezervativul cu inelul de dilatare în jos pe penis, până când glandul penisului este complet liber (fig. 7).











Dezinfectați și cateterizați respectând instrucțiunile de folosire ale cateterului respectiv (fig. 8).

Uscați punctele de conectare de pe sistemul de cuplare și de pe prezervativ pentru a asigura o conexiune în condiții de siguranță.

Apoi ghidați prezervativul cu inelul de dilatare din nou în sus spre vârful penisului (fig. 9).

Închideți și scoateți inelul de dilatare (fig. 10).

Inelul rămas în spațiu suprafetei adezive poate fi tăiat sau secționat complet respectiv rupt complet cu o foarfecă cu capete rotunjite dacă vă este teamă de puncte de presiune sau dacă, de ex. la urinare, penisul se retrage brusc (Fig. 11). Din cauza riscului de rănitire, nu este permisă folosirea de foarfeca cu vârf ascuțit. Tăietura trebuie

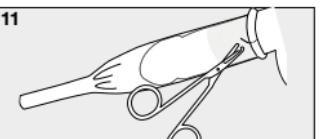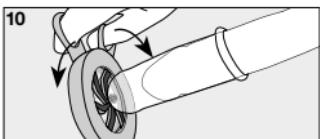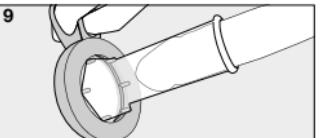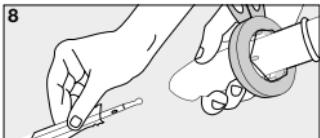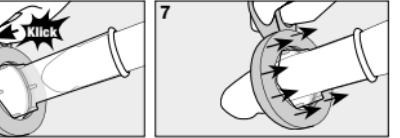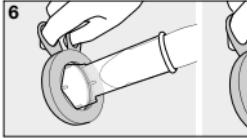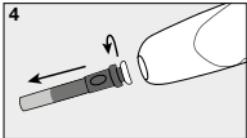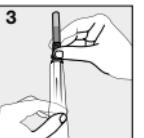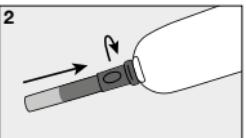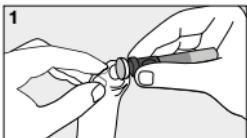

făcută cu o trajectorie rotunjită, astfel încât prezervativul să nu se rupă. Când tăiați sau rupeți, apăsați în același timp prezervativul pe suprafața adezivă.

Conectați din nou sistemul de cuplare etc. (fig. 1, 2, 3...).

#### Instrucțiuni de eliminare ca deșeu

Aruncăți prezervativul KIC, sistemul de cuplare KIC și inelul de dilatare KIC la deșeurile menajere.

Număr articol

Depozitați într-un loc uscat

Număr de bucăți

Păstrați departe de lumina soarelui

Împuñicit pentru Elveția

Numărul lotului

Respectați instrucțiunile de utilizare

Dispozitiv medical cu marcajul CE

Valabil până la (anul-luna-ziua)

Produs nereutilizabil

Numărul central farmaceutic

Drug tariff (catalogul Regatul Unit)

Lista produselor și prestațiilor

Producător

Importator

Latex

În caz de incidente grave apărute la utilizarea sistemului KIC, acestea trebuie raportate producătorului și autorității competente din țară în care este stabilit utilizatorul.

Manfred Sauer GmbH nu își asumă răspunderea pentru daune sau vătămări care pot rezulta ca urmare a manipulării necorespunzătoare, contrar prezentelor instrucțiuni de utilizare sau în urma nerespectării directivelor de igienă și a standardelor de îngrijire corespunzătoare.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Система KIC (презервативи KIC, разтварящ се пръстен KIC, съединител KIC)

### Предназначение и показания

Презервативите KIC се използват за външно отвеждане на урина в торбичка за събиране на урина при лица от мъжки пол с уринарна инконтиненция с натрупване на остатъчна урина, която се третира чрез редовна допълнителна катетеризация (ISK/IFK – интермитентна самокатетеризация/ интермитентна катетеризация от друго лице). Употребата се извършва върху незасегната кожа. Системата KIC, състояща се от презервативи KIC и аксесоарите към тях, съединител KIC и разтварящ се пръстен KIC, дава възможност за осъществяване на ISK/IFK без сваляне на презерватива от пениса. Така се щади кожата и се спомага смяна на презерватива след всяка катетеризация.

### Противопоказания

Презервативите KIC са неподходящи при алергии/ непоносимост към латекс или други материали в презерватива или в използваното лепило/ самозалепваща лента; остри кожни заболявания (напр. микоза, бактериална кожна инфекция); алергии/непоносимост спрямо материала или лепилото/лепилиния спрей/лепилна лента; изразена фимоза.

### Важни указания за хигиената и продължителност на носене

При боравене с продукти на континенция да се съближдават хигиенните директиви на компетентните държавни служби. Препоръчва се да се смени кондома (лепилната лента) след най-късно 24 часа. Продължителността на носене може според типа кожа да продължи също по-малко от 24 часа.

### Информация

- Наименованието на продукта и търговското наименование се намират върху етикета.
- Предлагат се варианти Оригинален и Свръхтънък.
- Съединител KIC: да се смени след трикратна употреба; преди свързването с нов презерватив да се промива с вода; може да се свали.
- Разтварящ се пръстен KIC: за многократна употреба; да се измива редовно с вода.

### Рискове и предупреждения

Уточнете с лекар индивидуалната пригодност на латексови уринарни презервативи за приложение при инконтиненция. Инструктажът за приложение на уринарни презервативи трябва да бъде проведен от квалифициран медицински сътрудник. Може да причини раздразнения / промени на кожата. Възможна е алергична реакция към латекса. Преглеждайте кожата и в случай на необичайни явления прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

Прекалено стегнатите презервативи или неправилното боравене със средствата за фиксиране могат да доведат до точкови натървания, а в много редки случаи (преди всичко при липса на чувствителност) и до прищипвания/ некрози. В този случай незабавно да се потърси лекар. Указания относно избора на размер и инструкции за употреба на средствата за фиксиране.

### Указания относно избора на размер на презерватива KIC

Правилният избор на размера осигурява добро прилягане и предотвратява течове и точкови натървания. За избор на размера трябва да се измери обиколката на пениса почти в средата на пениса. Ако залепването се извършва при ерекция, измерването на обиколката на пениса също се прави в състояние на ерекция. Специфичните за продукта мащабни ленти отразяват диаметъра въз основа на измерената обиколка.

### Указания за употреба

Хванете презерватива с палеца и показалеца, издърпайте отворения край на презерватива през диска на съединителя и подравнете съединителя в центъра на отвора (фиг. 1).

Притиснете втулката на съединителя към отвора и я фиксирайте / блокирайте, като я завъртите (фиг. 2).

Проверете свързването, като дръпнете презерватива и съединителя (фиг. 3).

След това поставете презерватива с подходящо средство за фиксиране, като спазвате съответните указания за употреба (напр. лепила за кожа SAUER, самозалепващи ленти SAUER). За да разкачете връзката между презерватива и входното маркуче на торбичката за събиране на урина, освободете съединителя (фиг. 4).

Вкарайте зъбчетата на разтварящия се пръстен в отвора на презерватива (фиг. 5).

Разтворете презерватива, като затворите ножичните дръжки, докато опрат една в друга (фиг. 6).











Нахлузете презерватива с разтварящия се пръстен максимално назад, докато главичката остане напълно свободна (фиг. 7).

Проведете дезинфекцията и катетеризацията, спазвайки указанията за употреба на съответния катетър (фиг. 8).

Подсушете точките на свързване на съединителя и презерватива, за да гарантирате сигурно свързване. След това нахлузете отново презерватива с разтварящия се пръстен напред (фиг. 9).

Затворете и свалете разтварящия се пръстен (фиг. 10).

Оставящият зад лепещата повърхност пръстен може да се изреже с тъла ножица или изцяло да се изреже респ. откъсне, ако се опасявате от притиснати места или пенисът силно се прибира напр. при пускане на вода (фиг. 11). Въз основа на опасност от нараняване

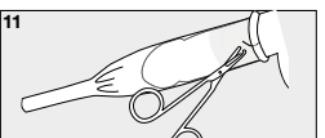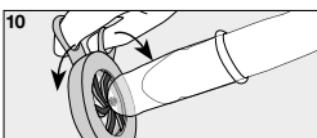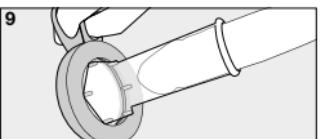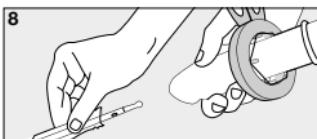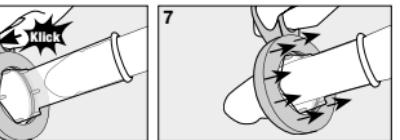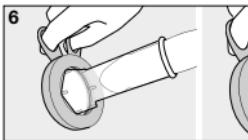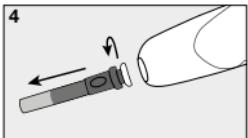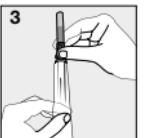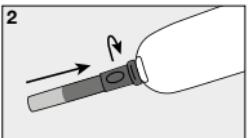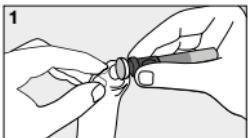

не трябва да се използва остра ножица. Разрезът трябва да е закръглен за да не се скъса кондомът. При отрязване или скъсване едновременно кондомът се притиска към лепещата повърхност.

Съвржете отново съединителя и т.н. (Фиг. 1, 2, 3...).

#### **Указание за изхвърляне на отпадъците**

Извърляйте презерватива, съединителя и разтварящия се пръстен KIC в битовите отпадъци.

Артикул №

Да се съхранява на сухо място

Спецификация

Да се пази от слънчев светлинатен

Швейцарски упълномощен представител

Номер на партида

Да се съблидава инструкцията за употреба

CE-знак  
медицински продукт

Да се използва преди (година-месец-ден)

Да не се използва повторно

Централен идентификационен код на лекарствени продукти

Тарифи на таксите за лекарствени продукти (UK)

Списък на продуктите и услуги (FR)

Производител

Вносител

Латекс

Ако при употребата на системата KIC възникнат сериозни инциденти, информирайте производителя и компетентните органи на страната, в която е регистриран потребителят.

Manfred Sauer GmbH не поема отговорност за щети или наранявания, които произтичат от неправомерна употреба спрямо тази инструкция за употреба или неспазването на хигиенните насоки и съответните стандарти за грижи.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Sistem KIC (kondomi KIC, razpiralni obroč KIC, spojka KIC)

### Predviden namen in indikacije

Kondomi KIC so namenjeni zunanemu izločanju urina v vrečko za zbiranje urina pri moških z urinsko inkontinenco mehurju z nastanjem ostalega urina, ki se zdravi z dodatno redno kateterizacijo (ISK/IFK). Uporabljajte se na intaktni nepoškodovani koži. Sistem KIC, sestavljen iz kondomov KIC in dodatkov, kot so spojke KIC in razpiralni obroč KIC, omogoča ISK/IFK, ne da bi bilo treba odstraniti kondom s penisa. To varuje kožo in prihrani menjavo kondoma po vsaki kateterizaciji.

### Kontraindikacije

Kondomi KIC niso primerni pri alergijah/preobčutljivosti na lateks ali druge materiale v kondому ali v uporabljenem lepilu/leplinem traku; zoženja v sečilih (npr. hiperplazija prostate), ki povzroča večje količine zastalega seča; poškodovana koža na penisu (npr. rane, ekcemi, otisčanci); akutne kožne bolezni (npr. mikoza, bakterijske kožne okužbe); izražena fimoza.

### Pomembna navodila za higieno in trajanje uporabe

Pri delu z izdelki za inkontinenco je treba upoštevati smernice za higieno pristojnega državnega organa. Priporočljivo je, da kondom (leplini trak, vrečko) zamenjajte najpozneje po 24 urah. Čas uporabe je glede na tip kože lahko tudi krajši od 24 ur.

### Informacije

- Naziv izdelka in trgovski naziv najdete na etiketi.
- Na voljo sta različici *Originalni* in *Ekstra tanki*.
- Spojka KIC: zamenjajte jo po trikratni uporabi; pred povezavo z novim kondomom jo splaknite z vodo; snemljiva.
- Razpiralni obroč KIC: za večkratno uporabo; redno ga čistite z vodo.

### Tveganja in opozorila

O individualni primernosti urinalnih kondomov iz lateksa za nego inkontinence se posvetujte z zdravnikom. Navodila za nego z urinalnimi kondomi mora predstaviti usposobljeni zdravstveni delavec. Lahko povzroči draženja kože/spremembe na koži. Možna je alergična reakcija na lateks. Preglejte kožo, v primeru nepravilnosti izdelek prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Če uporabljajte preozke kondome ali nepravilno uporabljate sredstva za njihovo pritrdirve, lahko nastanejo otisčanci in v zelo redkih primerih se lahko pojavijo tudi (predvsem pri neobčutljivosti) kolobarji/nekroza. V tem primeru je treba nujno poklicati zdravnika. Upoštevajte napotke za izbiro velikosti in navodila za uporabo sredstev za pritrdirve.

### Napotki za izbiro velikosti kondoma KIC

S pravilno izbiro velikosti zagotovite dobro pritrdirve ter preprečite puščanje in otisčance. Pri izbiri velikosti je treba penis izmeriti na sredini. Če kondom prilepite v erekciji, je treba tudii obseg penisa izmeriti v erekciji. Specifični merilni trakovi izdelka izmerijo premer z meritvijo obsega.

### Napotki za uporabo

Kondom držite s palcem in kazalcem, odprtino kondoma dvignite čez podstavek spojke, spojko v odprtini poravnajte na sredino (sl. 1). Pritisnite tulec spojke in ga z obračanjem pritrdirte/fiksirajte (sl. 2). Povlecite za kondom in spojko, da preverite spoj (sl. 3).

Nato namestite kondom s primerjnim sredstvom za pritrdirve, pri tem upoštevajte ustrezna navodila za uporabo (npr. lepila za kožo SAUER, leplini trakovi SAUER). Povezavo med kondomom in napeljano cevko vrečke za prestrezanje urina prekinete tako, da odvijete spojko (sl. 4).

Zobce razpiralnega obroča speljite v odprtino kondoma (sl. 5).

Kondom razširite tak, da širite škarjasta ročaja, dokler se ročaja ne dotaknetra (sl. 6).

Povlecite kondom z razpiralnim obročem toliko nazaj, da je glavica popolnoma prosta (sl. 7).

Za razkuževanje in kateterizacijo upoštevajte navodila za uporabo posameznega katetra (sl. 8).










Osušite mesta spoja na spojki in kondому, da bo povezava zagotovo varna. Potem kondom z razpiralnim obročem ponovno pomaknite naprej (sl. 9).

Zaprite razpiralni obroč in ga snemite (sl. 10).

Obroč, ki je za lepilno površino, lahko z zaokroženimi škarjami prirežete ali v celoti odrežete oz. odtrgate, če se bojite otisčancaev ali se je penis npr. med mokrenjem skrčil (sl. 11). Koničastih škarj ne smete uporabljati, ker bi to lahko privedlo do telesnih poškodb. Rez morate speljati naokrog, da se kondom ne strga. Med rezanjem ali trganjem istočasno pritisnite kondom na lepilno površino. Ponovno priključite spojko itd. (sl. 1, 2, 3...).

### Navodilo za odlaganje med odpadke

Kondom KIC, spojko KIC in razpiralni obroč KIC odvrzite med mesečne odpadke.

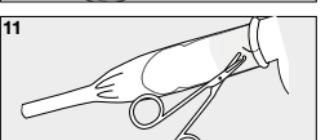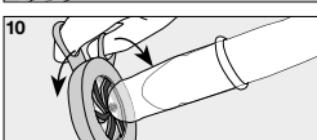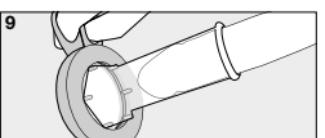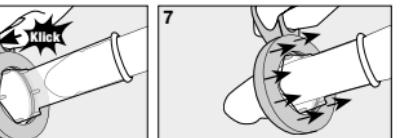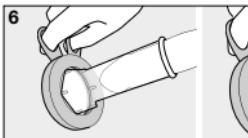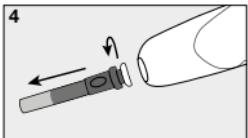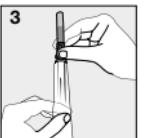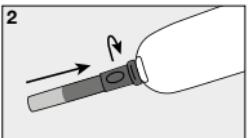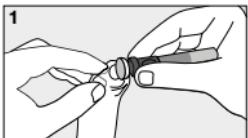

Če bi med uporabo sistem KIC prišlo do težjih zapletov, je o tem treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države, v kateri biva uporabnik.

Družba Manfred Sauer GmbH ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, ki ni predvidena v navodilih za uporabo, ali zaradi neupoštevanja higieničkih smernic in ustreznih standardov nege.



Številka artikla



Hranite na suhem mestu



Število kosov



Hranite zaščiteno pred sončno svetljbo



Švicarski pooblaščeni predstavnik



Številka serije



Upoštevajte navodila za uporabo



Oznaka CE Medicinski pripomoček



Uporabno do (leto-mesec-dan)



Ni za večkratno uporabo



Centralna farmacevtska številka



Tarifa za zdravila (Katalog zdravil britanske NHS)



Seznam izdelkov in storitev



Proizvajalec



Uvoznik



Lateks



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Sustav KIC (KIC kondomi, KIC raširni prsten, KIC spojnice)

### Namjenska uporaba i indikacija

KIC kondomi upotrebljavaju se za vanjsko odvođenje urina u vrećicu za prikupljanje urina u muškaraca s urinarnom inkontinencijom prćenom akumuliranjem rezidualnog urina koji se prazni dodatnom redovitom intermitentnom samokaterizacijom ili potpomognutom kateterizacijom. Primjenjuju se na neoštećenoj koži. Sustav KIC, koji se sastoјi od kondoma KIC i pribora – KIC spojnica i KIC proširnog prstena – omogućuje intermitentnu samokaterizaciju ili potpomognutu kateterizaciju bez odvajanja kondoma od penisa. Time se čuva koža i izbjegava promjena kondoma nakon svake kateterizacije.

### Kontraindikacija

Kondomi KIC nisu prikladni za osobe s alergijama/osjetljivošću na lateks ili druge materijale sadržane u kondomu ili u upotrijebljrenom ljeplju/vrpcu; oštećenja kože na penisu (npr. rane, ekcemi, kožni vrijeđovi / dekubitusa), akutne kožne bolesti (npr. mikoza, bakterijska infekcija kože), izražena fimoza.

### Važne informacije o higijeni i trajanju nošenja

Prilikom rukovanja proizvodima za kontinenciju potrebno je postupati u skladu s higijenskim smjernicama nadležnih tijela. Preporučuje se mijenjati kondom (ljepljivu vrpcu, vrećicu) nakon 24 sata. Ovisno o tipu kože, vrijeme nošenja može iznositi i manje od 24 sata.

### Informacija

- Naziv proizvoda i trgovački naziv navedeni su na naljepnici.
- Dostupne su varijante *Original* i ekstra tanka, *Extradünn*.
- KIC spojnica: potrebno je promijeniti nakon tri uporabe; prije povezivanja s novim kondonom potrebno je spojnicu isprati; odvojiva.
- KIC raširni prsten: višekratna uporaba; potrebno je redovito pranje vodom.

### Rizici i upozorenja

Prikladnost primjene urinarnih kondoma od lateksa za zbrinjavanje inkontinencije za svakog pojedinačnog bolesnika treba utvrditi s liječnikom. Upute za zbrinjavanje stanja pomoći urinarnih kondoma moraju dati kvalificirani medicinski njegovatelji.

Moguća pojava nadražaja/promjena na koži. Moguća je alergijska reakcija na lateks. Pregledavajte kožu, u slučaju abnormalnosti prestanite upotrebljavati proizvod i potražite savjet liječnika.

Ako se upotrebljavaju preuski kondomi ili ako se nepravilno postupa sa sredstvima za pričvršćivanje može doći do pojave dekubitusa, a u vrlo rijetkim slučajevima (posebno u slučaju neosjetljivosti dijela

tijela) i do strangulacija/nekroza. U tom slučaju odmah se obratite liječniku. Obratite pozornost na podatke o odabiru veličine i na upute za uporabu sredstava za pričvršćivanje.

### Napomene o odabiru veličine KIC kondoma

Odabir prave veličine osigurava dobro prianjanje i sprečava curenje i pojavu dekubitusa. Pri odabiru veličine opseg penisa treba mjeriti otprilike u sredini tijela penisa. Ako se kondom lijepi u stanju erekcije, i opseg se penisa mjeri u erekciji. Mjerne vrpce za određeni proizvod navode promjer na temelju mjerjenja opsega.

### Upute za uporabu

Pridržite kondom palcem i kažiprstom, podignite otvor kondoma preko ploče spojnica, spojnicu centrirajte u otvor (sl. 1).

Pritisnite čahuru spojnica i blokirajte je okretanjem (sl. 2).

Povucite kondom i spojku kako biste provjerili spoj (sl. 3).

Zatim postavite kondom s pomoću prikladnog sredstva za pričvršćivanje, pridržavajući se odgovarajućih uputa za uporabu (npr. SAUER ljeplilo za kožu, SAUER ljepljive vrpcе). Za oslobadanje kondoma od dovodnog crijeva vrećice za sakupljanje urina otpustite spojku (sl. 4).

Zuce raširnog prstena uvedite u otvor kondoma (sl. 5).

Kondom proširujte zatvaranjem ručki škara sve dok se ručke ne dodirnu (sl. 6).

Uvedite kondom s raširnim prstenom toliko prema natrag da glavič bude potpuno izložen (sl. 7).

Dezinficirajte i katerizerajte pridržavajući se uputa za uporabu odnosnog katetera (sl. 8).

Osušite mjesto kontakta na spojnici i kondomu kako biste osigurali siguran spoj. Zatim kondom ponovo vodite s pomoću raširnog prstena prema naprijed (sl. 9).











Zatvorite i uklonite proširni prsten (sl. 10).

Prsten koji ostajeiza površine ljepljenja može se skratiti ili potpuno odrezati ili otkinuti zaobljenim škaramaako, npr. strahujete od kožnih vrijeđova ili ako se penisu prilikom mokrenja jako povlači prema natrag (sl. 11). Zbog opasnosti od ozljeda ne smiju se upotrijebiti škare šiljastih vrhova. Rez treba biti okrugao, kako kondom ne bi pušnuo. Prilikom rezanja ili kidanja istodobno pritisnite kondom na površinu ljepljenja.

Ponovno priključite spojnicu itd. (Sl. 1, 2, 3...).

### Upute za zbrinjavanje

KIC kondom, spojnicu i raširni prsten odložite u ostatni otpad.

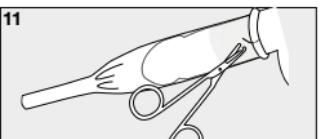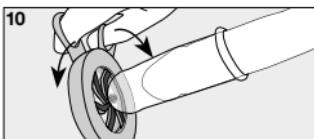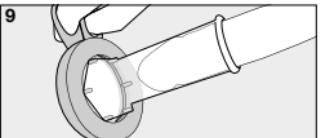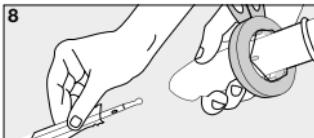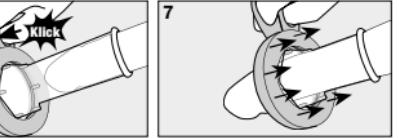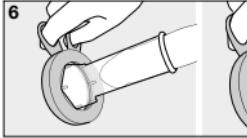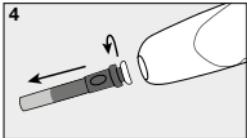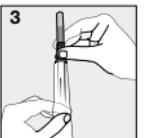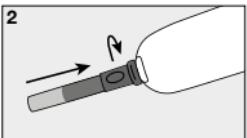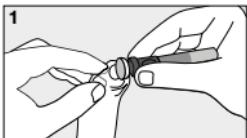

Broj artikla



Čuvati  
na suhom



Broj komada



Čuvati od  
sunčeve svjetlosti



Švicarski ovlašteni  
predstavnik



Broj serije



Pogledajte upute za  
uporabu



Medicinski proizvod  
s oznakom CE



Upotrijebiti do  
(godina-mjesec-dan)



Nemojte ponovo  
upotrijebiti



Farmaceutski centralni broj



Drug tariff (Katalog lijekova  
britanskog NHS)



Popis proizvoda i usluga



Proizvođač



Uvoznik



Lateks

Ako prilikom uporabe sustava KIC dođe do pojava ozbiljnih štetnih dogadaja, o tome treba izvijestiti proizvođača i nadležno tijelo zemlje u kojoj je korisnik rezidentan.

Tvrtka Manfred Sauer GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili ozljede koje mogu nastati zbog nepravilnog postupanja suprotno ovim uputama za uporabu ili zbog nepridržavanja higijenskih smjernica i odgovarajućih standarda njege.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC sistem (KIC kondomi, KIC ekspanzivni prsten, KIC spojnice)

### Namena i indikacija

KIC kondomi se koriste za spoljni odvod urina u vrećicu za sakupljanje urina kod muškaraca sa urinarnom inkontinencijom sa stvaranjem zaostalog urina, koja se leči dodatnom redovnom kateterizacijom (ISK/IFK). Koristi se na neoštećenoj koži. KIC sistem, koji se sastoji od KIC kondoma i dodataka poput KIC spojnice i KIC ekspanzivnog prstena, omogućava ISK/IFK bez uklanjanja kondoma sa penisa. Time se čuva koža i izbegava potreba za menjanjem kondoma nakon svake kateterizacije.

### Kontraindikacija

KIC kondomi nisu podesni ako imate alergije/intoleranciju na lateks ili druge materijale u kondomu ili na korišćeni lepak / samolepljavu traku; oštećenje kože na penisu (npr. rane, ekcemi, žuljevi); akutne kožne bolesti (npr. mikosa, bakterijska infekcija kože); izražena simoza.

### Važne napomene za higijenu i vreme nošenja

Prilikom rukovanja proizvodima za kontinenciju, moraju da se poštuju higijenske smernice nadležnih državnih organa. Preporučuje se zamena kondoma (samolepljive trake/kese) nakon 24 sata. Zavisno već od tipa kože, može da se nosi i manje od 24 sata.

### Informacije

- Naziv proizvoda i trgovačka oznaka se nalaze na etiketi.
- Dostupne su verzije *Originalni* i *Ekstra tanki*.
- KIC spojnice: zamenite nakon trećeg korišćenja; isperite vodom pre spajanja na novi kondom; odvojiva.
- KIC ekspanzivni prsten: za višekratnu upotrebu; redovno čistite vodom.

### Rizici i upozorenja

Zatražite savet lekara o pojedinačnoj sposobnosti lateksnih urinalnih kondoma za lečenje inkontinencije. Uputstva za lečenje urinalnim kondomima trebalo bi da dokažete medicinska sestra. Može dovesti do iritacija/promena na koži. Moguća alergijska reakcija na lateks. Pregledajte kožu, a u slučaju upadljivih promena prekinite primenu proizvoda i zatražite savet lekara.

Korišćenje suviše uskih kondoma ili nepravilno rukovanje pričvršćnim sredstvima može dovesti do pojave žuljeva, a u veoma retkim slučajevima (naročito kod nedostatka osjetljivosti) do stezanja/nekroza. U ovom slučaju odmah potražite pomoć lekara. Obratite pažnju na napomene o izboru veličine i uputstva za upotrebu pričvršnih sredstava.

### Napomene o izboru veličine KIC kondoma

Izborom odgovarajuće veličine obezbeđujete dobru stabilnost i sprečiti curenje i žuljeve. Da biste odabrali veličinu, obim penisa mora da se izmeri otprilike na sredini tela penisa. Ako se lepi pod erekcijom, vrši se i merenje obima na uspravnom penisu. Merne trake specifične za proizvod navode prečnik na osnovu merenja obima.

### Uputstvo za upotrebu

Držite kondom palcem i kažiprstom, podignite otvor kondoma preko ploče spojnice i spojnicu usmerite u središnji deo otvora (sl. 1). Pritisnite spojnu čauru i fiksirajte/zaključajte okretanjem (sl. 2). Povucite kondom i spojnicu da biste proverili vezu (sl. 3).

Zatim stavite kondom pomoću odgovarajućeg pričvrsnog sredstva, pritom poštujuci odgovarajuće uputstvo za upotrebu (npr. lepak za kožu marke SAUER, lepljive trake marke SAUER).

Olabavite spojnicu (sl. 4) da biste prekinuli vezu između kondoma i dovodnog creva vrećice za sakupljanje urina. Uvedite zupce ekspanzionog prstena u otvor kondoma (sl. 5).

Širite kondom zatvaranjem ručica makaza dok se ručke ne dodirnu (sl. 6).

Vucite kondom pomoću ekspanzionog prstena unazad sve dok glavić ne bude potpuno sloboden (sl. 7).

Dezinifikujte i kateretizujte poštujuci uputstvo za upotrebu korišćenog katetera (sl. 8).

Osušite tačke spajanja na spojnici i kondomu kako biste obezbedili sigurnu vezu. Potom kondom ponovo gurajte napred pomoću ekspanzionog prstena (sl. 9).











Zatvorite i uklonite ekspanzionni prsten (sl. 10).

Prsten koji ostaje iza lepljive površine može da se raseče ili potpuno odseče, odn. otkine zaobljenim makazama ako se, na primer, plastično zbuljeva ili ako se penis povlači naglo npr. prilikom mokrenja (sl. 11). Zbog opasnosti od povreda, ne smeju da se koriste oštре makaze. Rez mora da bude okrugao da se kondom ne bi pocepoao. Prilikom sećenja ili kidanja istovremeno pritisnite kondom na površinu lepljenja.

Ponovo prikopćajte spojnicu itd. (Sl. 1,2,3...).

### Napomena za odlaganje

KIC kondom, spojnicu i ekspanzionni prsten odložite sa ostatim otpadom.

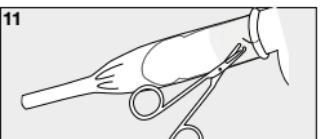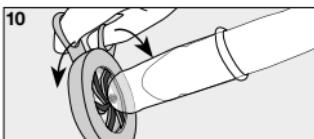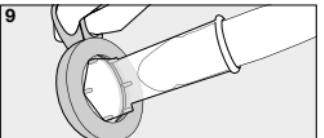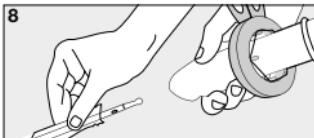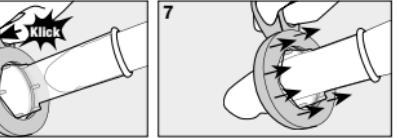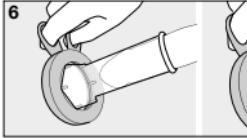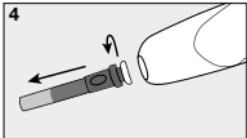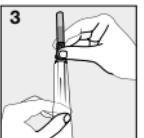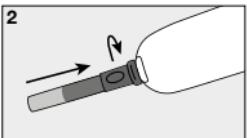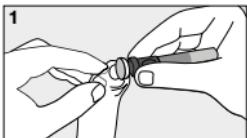

Broj artikla



Čuvajte na suvom mestu



Broj komada



Držite dalje od sunčeve svetlosti



Ovlašćeni predstavnik za Švajcarsku



Broj serije



Pridržavajte se uputstva za upotrebu



CE oznaka medicinski proizvod



Upotrebljivo do (godina-mesec-dan)



Samo za jednokratnu upotrebu



Centralni farmaceutski broj  
Drug Tariff (katalog lekova britanske NHS)



Spisak proizvoda i usluga



Proizvođač



Uvoznik



Lateks

Ako prilikom korišćenja KIC sistema dođe do ozbiljnih neželjenih reakcija, morate ih prijaviti proizvođaču i nadležnom organu države u kojoj je korisnik nastanjen.

Kompanija Manfred Sauer GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja ili povrede, koje mogu da nastanu usled nepravilnog rukovanja suprotno ovim uputstvima za upotrebu ili ako se ne primenjuju higijenske smernice i odgovarajući standardi nege.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## KIC sistem (KIC kondomi, KIC prsten za širenje, KIC spojnice)

### Namjena i indikacija

KIC kondomi služe za vanjski odvod urina u vrećicu za prihvat urina kod muškaraca s urinarnom inkontinencijom, sa stvaranjem rezidualnog urina, koja se tretira dodatnom redovnom kateterizacijom (intermittentnom samokateterizacijom ili kateterizacijom od strane trećeg lica – ISK/IFK). Za primjenu na čistoj koži. KIC sistem koji se sastoji od KIC kondoma i dodatne opreme KIC spojnica i KIC prstena za širenje, omogućuje ISK/IFK bez skidanja kondoma s penisa. To ima poštadan učinak na kožu i ne zahtjeva zamjenu kondoma nakon svake kateterizacije.

### Kontraindikacije

KIC kondomi nisu prikladni za osobe koje pate od alergija/intolerancije na lateks ili na druge materijale sadržane u kondomu ili korištenom ljeplju/korištenoj samoljepljivoj traci; oštećenje kože na penisu (npr. ranice, ekcemi, tačke pritiska); akutne kožne bolesti (npr. mikoza, bakterijska infekcija kože); izražena fimoza.

### Važne napomene o higijeni i dužini nošenja

Prilikom rukovanja proizvodima za kontinenciju moraju se poštovati higijenske smjernice nadležnih državnih tijela. Preporучuje se da se dom (ljepljiva traka, vrećica) promjeni nakon 24 sata. Dužina nošenja kondoma može biti i kraća od 24 sata, ovisno o tipu kože.

### Informacije

- Naziv proizvoda i komercijalni naziv pronaći ćete na etiketi.
- Dostupni u varijantama *Originalni* i *Ekstra tanki*.
- KIC spojnicu je potrebno zamijeniti nakon tri upotrebe; a prije spajanja s novim kondomom isprati vodom; može se skinuti.
- KIC prsten za širenje: može se upotrebljavati više puta; redovno čistite vodom.

### Rizici i upozorenja

Individualnu prikladnost urinarnih kondoma od lateksa za tretiranje inkontinencije provjerite s ljekarom. Upute za opskrbu urinarnim kondomima treba dati kvalificirano osoblje za njegu.

Proizvod može izazvati nadražaje kože/promjene na koži. Proizvod može izazvati alergijsku reakciju na lateks. Pregledajte kožu i ako uočite anomalije, proizvod nemojte više upotrebljavati i potražite savjet ljekara.

Preuski kondomi i nepropisno rukovanje sredstvima za učvršćivanje mogu izazvati nastanak žuljeva, a u vrlo rijetkim slučajevima (posebno u slučaju nedostatka osjetila) i suženja/nekroze. U tom slučaju odmah potražite ljekara. Obratite pažnju na napomene o odabiru veličine i uputstva za upotrebu sredstava za učvršćivanje.

### Napomene o odabiru veličine KIC kondoma

Pravilan odabir veličine osigurava dobro nalijeganje i sprečava propuštanje i nastanak žuljeva. Za odabir veličine potrebno je izmjeriti opseg penisa otprilike na sredini tijela penisa. Ako se lijepljenje obavlja u stanju erekcije, mjerjenje opsega obavlja se na ukručenom penisu. Na mjernim trakama specifičnim za proizvod naveden je prečnik na osnovu mjerjenja opsega.

### Napomene o primjeni

Držite kondom palcem i kažiprstom, podignite otvor kondoma preko pločice spojnike i spojnicu centrirajte u sredini otvora (sl. 1).

Pritisnite čahuru spojnike i fiksirajte/aretirajte je zakretanjem (sl. 2). Provjeru spaja obavite povlačenjem kondoma i spojnice (sl. 3).

Kondom zatim stavites prikladnim sredstvom za učvršćivanje i pritom se pridržavajte odgovarajućeg uputstva za upotrebu (npr. SAUER ljepljo za kožu, SAUER samoljepljive trake). Za odvajanje kondoma od uvedenog crijeva vrećice za prihvat urina otpustite spojnicu (sl. 4).

Zupce prstena za širenje uvedite u otvor kondoma (sl. 5).

Zatim širite zatvaranjem drški makaza, dok se drške ne dodirnu (sl. 6).

Kondom s prstenom za širenje pomaknite prema nazad tako, da potpuno oslobođuite glavicu penisa (sl. 7).

Obavite dezinfekciju i kateterizaciju i pritom se pridržavajte uputstva za upotrebu odgovarajućeg katetera (sl. 8).

Osušite spojna mesta na spojnicama i kondomu, kako biste osigurali siguran spoj. Zatim kondom s prstenom za širenje ponovo pomaknite naprijed (sl. 9).

Zatvorite prsten za širenje i skinite ga (sl. 10).











Prsten koji ostaje iza ljepljive površine može se izrezati ili potpuno odsjeci ili otkinuti zaobljenim makazama, ako vas brinu tragovi od pritisikanja ili ako se penis jako povlači, npr. pri mokrenju (sl. 11).

Zbog opasnosti od povrede ne smiju se koristiti zašiljene makaze. Rez mora biti napravljen okrugao, da kondom ne pukne. Prilikom odsjecanja ili otkidanja istovremeno pritisnite kondom na ljepljivu površinu.

Ponovo priključite spojnicu, itd. (sl. 1, 2, 3, ...).

### Upute za odlaganje

KIC kondom, KIC spojnicu i KIC prsten za širenje odložite s ostatim otpadom.

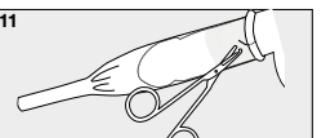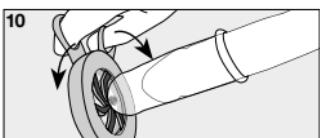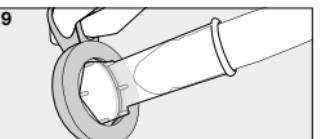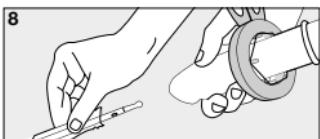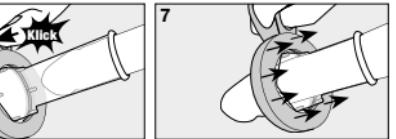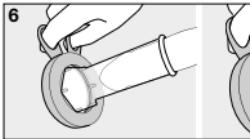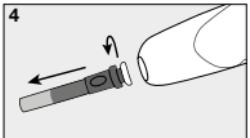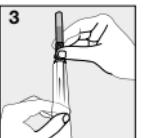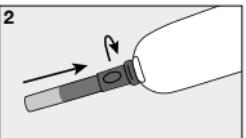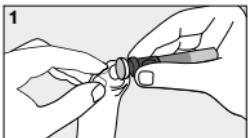

REF



Broj proizvoda

Čuvati na suhom mjestu

REF



Broj komada

REF

Držite podalje od  
sunčeve svjetlosti

CH REP

Ovlašteni predstavnik  
za Švicarsku

LOT

Broj serije  
Slijedite uputstvo  
za upotrebu

CE

CE oznaka medicinskog  
proizvoda

MD

Upotrebljiv do  
(godina-mjesec-dan)

Klik

Ne može se  
ponovo koristiti

PZN



Farmaceutski centralni broj

DT

Tarifa za lijekove (katalog  
lijekova britanske, NHS)

LPP



Lista proizvoda i usluga

PRO



Proizvođač

Uvoznik



Uvoznik

LATEX



Lateks

Ako se pri upotrebi KIC sistema pojave ozbiljni problemi, potrebno ih je prijaviti proizvođaču i nadležnom organu u zemlji primjene.

Kompanija Manfred Sauer GmbH ne preuzima nikavu odgovornost za štetu ili povrede koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja suprotno ovim uputama za upotrebu ili neprimjenjivanja higijenskih smjernica i odgovarajućih standarda njega.



MANFRED SAUER GmbH

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
 Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## Систем KIC (кондоми KIC, прстен за проширување KIC, спојка KIC)

### Намена и индикации

Кондомите KIC служат за дренажа на урина во уринарна кеса кај лица од машки пол со уринарна инконтиненција со резидуално формирање на урина која се третира со дополнителна редовна катетеризација (ISK/IFK). Се применува на здрава кожа. Системот KIC, кој се состои од кондоми KIC и додаточите спојка KIC и прстен за проширување KIC, овозможува ISK/IFK без вадење на кондомот од пенисот. Ова ја штити кожата и не мора да го менувате кондомот по секоја катетеризација.

### Контраиндикација

Кондомите KIC не се погодни за алергии/нетолеранција на латекс или други материјали содржани во кондомот или во лепилото/лепливата лента; оштетувања на кожата на пенисот (на пр. рани, егземи, модринки); акутни кожни заболувања (на пр. микоза, бактериски кожни инфекции); изразена фимоза.

### Важни упатства во врска со хигиената и времетраењето на носење

При употреба на производи за инконтиненција треба да се попрочишуваат мерките за хигиена издадени од страна на надлежниот државен орган. Се препорачува кондомот (лепливата лента, кесата) да се смени по 24 часа. Времетраењето на носење, во зависност од типот на кожата, може да биде и пократко од 24 часа.

### Информации

- Името на производот и трговското име се наведени на етикетата.
- Достапни се варијантит *Оригинал* и *Екстра-тенки*.
- Спојка KIC: промена по три употреби; Исплакнете со вода пред да поврзете нов кондом; вадлива.
- Прстен за проширување KIC: за еднократна употреба; редовно чистете го со вода.

### Ризици и мерки на препазливост

Консултирајте се со лекар за да дознаете дали латекс уринарните кондоми за лекување на инконтиненција се соодветни за вас. Упатство за користење на уринарниот кондом треба да ви даде квалификуван медицински персонал.

Може да доведе до иритации/промени на кожата. Можна е алергиска реакција на латекс. Проверувајте ја кожата, при појава на абнормалности треба да се прекине користењето на производот и да се побара совет од лекар.

Претесни кондоми или неправилно ражување со прицврстувачите може да доведат до точки на притисок, а во многу ретки

случаи (особено ако е изгубено чувството за болка) и до приклештивање/некроза. Во овој случај треба веднаш да контактирате со лекар. Следење ги информациите за избор на големина и инструкциите за употреба на прицврстувачите.

### Напомени за избор на големина на кондом KIC

Изборот на точна големина придонесува за добра поставеност и спречува протекувања и точки на притисок. Со цел да се направи избор за големината, обемот на пенисот треба да се измери приближно на средината на пенисот. Ако лепете при ерекција, се прави и мерење на обемот на пенисот во ерекција. Лентите за мерење кои се карактеристични за производот го покажуваат пречникот врз основа на мерењето на обемот.

### Упатство за употреба

Држете го кондомот со палецот и показалецот, подигнете го отворот на кондомот над плочата на спојката, порамните ја спојката во центарот на отворот (слика 1).

Притиснете на раковот на спојката и заклучете/заклучете со вртење (слика 2).

Повлечете го кондомот и спојката за да проверите дека добро се поврзани (слика 3).

Потоа ставете го кондомот со соодветно средство за прилепување следејќи го упатството за употреба на тоа средство (на пример, лепило за кожа SAUER, лепливи ленти SAUER). За да ги одврдите кондомот и влезното црво во кесата за собирање урина, олабавете ја спојката (слика 4).

Наместете ги запците на прстенот за проширување во отворот на кондомот (слика 5).











Проширете го кондомот со затворање на раките за ножици додека не се допрат раките (слика 6).

Наместете го кондомот со прстенот за проширување напред така што главата на пенисот е целосно откриена (слика 7).

Дезинфекцирайте и катетерицирайте следејќи го упатството за употреба на катетерот (слика 8).

Испуште ги точките на поврзувања на спојката и кондомот за да има сигурна врска. Потоа, повторно излизгайте го кондомот напред користејќи го прстенот што за проширување (слика 9).

Затворете и извадете го прстенот за проширување (слика 10). Прстенот кој останува зад површината со лепило може да се пресече или целосно да се отстрани со заоблен ножичка, односно може да се откне доколку стравувате од појава на модринки или доколку пенисот се повлекува видно, на пр. при мокрење (слика 11). Со цел да се избегне повреда, не смеете да користите ножици со стар врв. Засекувањето треба да биде кружно за кондомот да

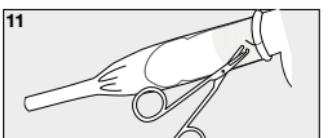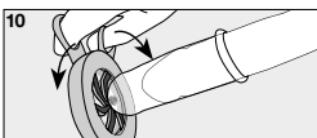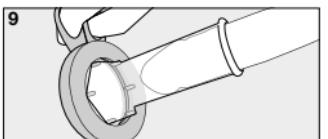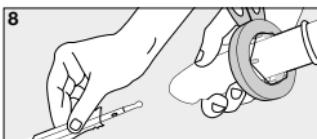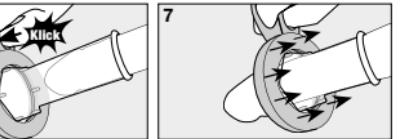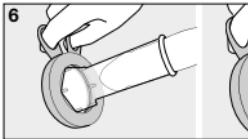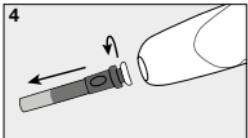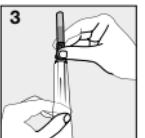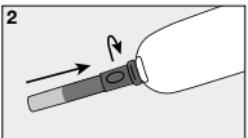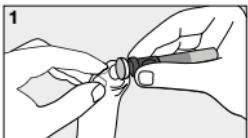

не се искине. При отсекување или откинување, истовремено притиснете го кондомот на лепливата површина. Повторно поврзете ја спојката итн. (Слика 1, 2, 3...).

#### Упатство за исфраљење

Кондомот, спојката и прстенот за проширување KIC фрлете ги со домашниот отпад.

Број на артикл

REF

Да се чува  
на суво место



Количина



Да не се изложува  
на сонце



CH REP

Овластен швајцарски  
представник

LOT

Следете ги упатствата  
за употреба



CE MD

CE-ознака медицински  
производ



Употребливо до  
(година-месец-ден)



Не е наменето за  
повеќекратна употреба



Фармацевтски број  
на регистрација



Тарифа на лекови  
(NHS во Велика Британија)



Список на производи  
и услуги



Производител



Увозник



Латекс



Доколку при употребата на системот KIC дојде до појава на сериозни несакани дејства, за тоа треба да се извести производителот и надлежниот орган во државата во која престојува корисникот.

Manfred Sauer GmbH не презема одговорност за штети или повреди кои може да настанат како резултат на несодствено ракување кое е спротивно на ова упатство за употреба или како резултат на непримениување на упатствата за хигиена и соодветните стандарди за него.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de

[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

شماره کالا

REF

به صورت خشک نگهداری  
کنید



تعداد



دور از نور خوشبید  
نگهداری کنید



مذوب سوپری مفروض

CH REP

شماره سری ساخت

LOT

دستور العمل استفاده را



رعلیت کنید

MD

نشان CE محصول  
پزشکی



قابل استفاده تا (سال-ماه-روز)



قابل استفاده مجدد نیست



شماره ثبت دارویی

PZN

نرخ دارو (کالا)

DT

(انگلستان) NHS

LPP

فهرست مخصوص لات و خدمات













تولید کننده



المستورد



لاتکس

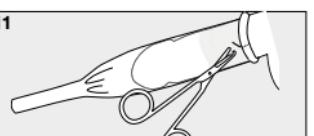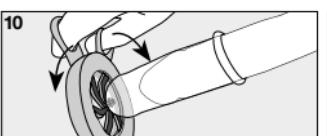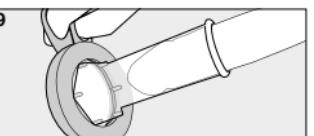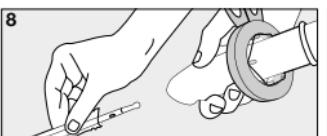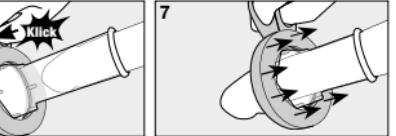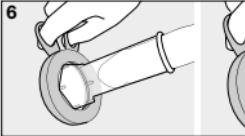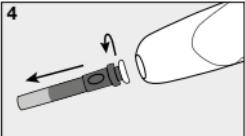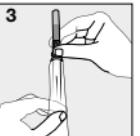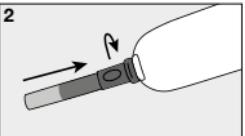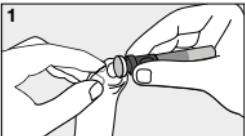

چنانچه در هنگام استفاده از سیستم KIC حوادث جدی رخ دهد، در آن صورت باید این حوادث به تولید کننده و اداره مربوطه کشوری که فرد استفاده کننده در آن اقامت دارد، اطلاع داده شود.

شرکت Manfred Sauer GmbH بایت خسارات یا صدماتی که ممکن است به تولید استفاده نادرست برخلاف این دستور العمل استفاده کنندگان از این دستور العمل های بهداشتی ایجاد شوند، هیچ گونه مسئولیتی تقبل نمی‌کنند.

تناسی به طور مثال هنگام ادرار کردن به شدت به عقب کشیده می‌شود، حلقه باقیمانده در پشت سطح جنبه را می‌توان با قیچی نوک گرد برش داد یا کاملایا برش یا با کشیدن جدا کرد (تصویر 11). به دلیل خطر مصدومیت نایاب از قیچی نوک نیز استفاده شود. هنگام جدا کردن با برش یا کشیدن، همزمان کاذنوم را به سطح جنبه شمار دهد. قطعه اتصال را دوباره وصل کنید و به همین ترتیب ادامه دهید. (تصویر 1, 2, 3...).

دستور العمل دور انداختن کاذنوم، قطعه اتصال و حلقة قابل اتساع KIC را همراه با پسماند غیر قابل بازیافت دور بیندازید.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · [export@manfred-sauer.de](mailto:export@manfred-sauer.de)  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

## سیستم KIC (کاندومهای KIC، حلقه قابل اتساع KIC، قطعه اتصال KIC)

را جویا شود.

استفاده از کاندومهای بسیار تنگ یا استفاده نادرست از لوازم اتصال ممکن است به ایجاد کوکدها و در موارد بسیار نادر (به خصوص در صورت عدم وجود قابلیت حس کردن) همچنین به انقباضات و نکروز منجر شود. در این صورت فوراً به یک پزشک مراجعه کنید. به دستور العملهای مربوط به انتخاب اندازه و راهنمایی استفاده از لوازم اتصال توجه کنید.

### دستورالعملهای مربوط به انتخاب اندازه کاندوم KIC

انتخاب اندازه صحیح موجب قرار گیری مطلوب کاندوم در جای خود مشود و از شتش و کوکود چلوگیری میکند. برای انتخاب سایز باید دور الٹ تناولی حدوداً در وسط بدنه الٹ تناولی اندازه گیری شود. در صورتی که کاندوم در حالت نعطوظ چیزیانه شود، اندازه گیری دور الٹ نیز در حالت نعطوظ صورت میگیرد. نوارهای اندازه گیری خاص مخصوص، قطر را با اندازه گیری دور الٹ اعلام میکنند.

### دستورالعملهای استفاده

کاندوم را با انگشت شست و سبابه خود نگه داری، دهانه کاندوم را از روی صفحه قفله اتصال بالا بکنید، قلعه اتصال را در مرکز دهانه تنظیم کنید (تصویر 1).

غلاف اتصال اتصال را فشار دهد و با چرخاندن محکم/قفل کنید (تصویر 2).

برای برسی اتصال، کاندوم و قطعه اتصال را بشید (تصویر 3). سپس کاندوم را با یک وسیله اتصال مناسب نصب کنید، در هنگام این کار به راهنمای استفاده مربوطه توجه کنید (به طور مثال چسب پوست SAUER، نوارچسبیهای SAUER). برای جدا کردن اتصال بین کاندوم و شیلنگ و روکودی کیسه جمع اوری ادار، قطعه اتصال را شل کنید (تصویر 4).

دندانهای را قلعه قابل اتساع را به داخل دهانه کاندوم هدایت کنید (تصویر 5).

با پستن دستههای قیچی، کاندوم را بشید تا دستهها یکدیگر را لمس کنند (تصویر 6).

کاندوم را با لفه قابل اتساع انقدر به عقب هدایت کنید که سر الٹ کاملاً از کاندوم خارج شود (تصویر 7).

عمل ضدغونی کردن و کاتتریزاسیون را انجام دهد، در هنگام این کار به راهنمای استفاده از کاتتر مربوطه توجه کنید (تصویر 8).

برای حصول اطمینان از اتصال این، نقاط اتصال در قطمه اتصال و کاندوم را خشک کنید. سپس با استفاده از حلقه قابل اتساع، مجدداً کاندوم را به جلو دادیت کنید (تصویر 9).

حلقه قابل اتساع را بیندید و بردارید (تصویر 10).

در صورتی که نگران ایجاد کوکودی هاشستید یا در صورتی که الٹ

کاربرد و موارد تجویز

کاندومهای KIC ادرار برای انتقال ادرار به خارج در یک کیسه جمع اوری ادرار در افراد مذکور مبتلا به بیاختیاری ادرار همراه با تشکیل ادرار باقیمانده که با کاتتریزاسیون منظم تمکیلی (ISK/IFK) درمان میشود، کاربرد دارد. استفاده روی پوست سالم صورت میگیرد. سیستم KIC که از کاندومهای KIC و لوازم جانبی قطعه اتصال KIC و حلقه قابل اتساع KIC تشکیل شده است، امکان اجسام ISK/IFK را بدهن جواز کار کندوم از الٹ تناولی فراهم میکند. این کار از پوست محافظت نموده و نیاز به تعویض کاندوم پس از هر بار کاتتریزاسیون را مرتrete مینماید.

موارد عدم تجویز

کاندومهای KIC در موارد حساسیت/نامناسبگاری نسبت به لاتکس یا سایر مواد موجود در کاندوم یا موجود در چسب/نوار چسب استفاده شده مناسب نیستند؛ اسیب‌های یوتوسی در الٹ تناولی مردان (به طور مثال زخم ها، اگرما، کوکودی ها)؛ بیماری های یوتوسی حد (به طور مثال بیماری قارچی، عفونت یوتوسی باکتریایی)؛ فیمزوزیس آشکار.

توصیه های مهم در مورد بهداشت و مدت استفاده

(جاگرگرین) بهداشت و مدت استفاده: در استفاده از محصولات کنترل ادرار باید دستور العمل های بهداشتی ادارات ایالاتی مربوطه را رعایت شوند. توصیه می شود که کاندوم (نوار چسب، کیسه) را پس از 24 ساعت تعویض کنید. مدت استفاده ممکن است بسته به نوع پوست حتی کمتر از 24 ساعت باشد.

### اطلاعات

- نام محصول و نام تجاری را میتوان از روی برچسب مشاهده کرد.
- انواع اصل و فرقه‌العاده نازک موجود است.
- قطعه اتصال KIC: بعد از سه بار استفاده تعویض کنید. قبل از اتصال کاندوم جدید با آب کاملاً پوشیده؛ قابل جدا شدن.
- حلقه قابل اتساع KIC: قابل استفاده برای چند بار؛ مرتبی با آب تمیز کنید.

### خطرات و هشدارها

در مورد مناسب بودن کاندومهای ادرار لاتکس برای فرد جهت درمان بیاختیاری با یک پزشک مشورت کنید. راهنمایی جهت درمان به وسیله کاندومهای ادراری باید توسط متخصص پرستاری و اجد شرایط انجام شود.

ممکن است موجب تحریکات/تغییرات پوستی شود. واکنش الرژیک به لاتکس محتمل است. پوست را بررسی کنید، در صورت بروز موارد غیر عادی دیگر از این محصول استفاده نکنید و توصیه پزشک

رقم المنتج

REF

تُحفظ في مكان جاف



عدد القطع



تُخزن بعيداً عن  
ضوء الشمس



مذنب سويسري مفروش

CH

REP

رقم الشحنة

LOT

تجب مراعاة  
إرشادات الاستخدام



منتوج طبي بعلامة  
الجودة الأوروبية

CE MD

الصلاحية حتى  
(يومشهر-عام)



ليست مخصصة لإعادة  
الاستخدام



الرقم الوابي المركزي

PZN

تعرفة الأدوية (NHS)

DT

قائمة المنتجات و الخدمات

LPP


الجهة المصنعة



المستورد



لأنكـن

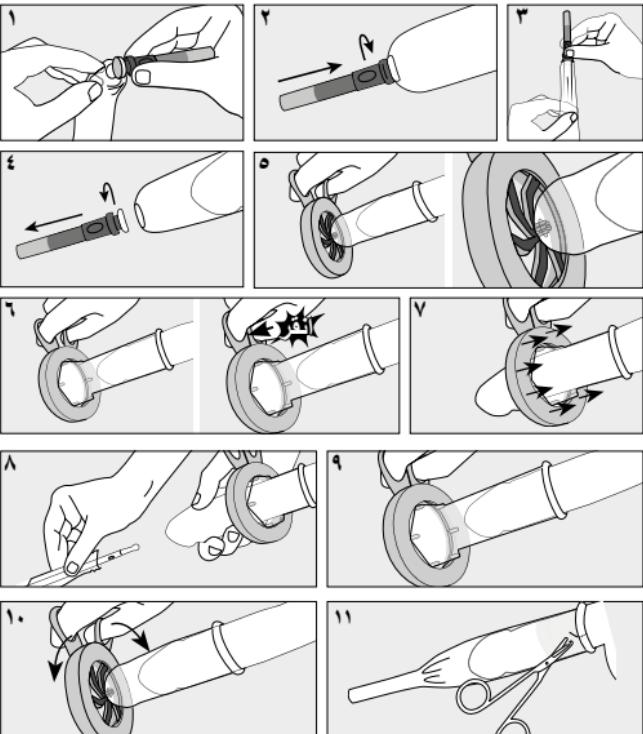

في حال وقوع حوادث خطيرة عند استخدام نظام كيه اي سي (KIC)  
يجب إبلاغ الجهة المصنعة والسلطة المختصة في البلد الذي يُعمَّ فيه  
المستخدم.

إرشادات التخلص من المنتج  
تخلص من قسطرة كيه اي سي (KIC) وقارنة كيه اي سي (KIC)  
وحلقة مباعدة كيه اي سي (KIC) مع بقية القمامـة.

لا تتحمل شركة مانفريد ساور ش.ذ.م.م. (MANFRED SAUER GmbH)  
أية مسؤولية عن الأضرار أو الإصابات التي قد تنتج عن التعامل غير السليم  
مع أكياس البول بما يتعارض مع تعليمات الاستخدام هذه أو عن عدم الامتثال  
للترجيحات والتلبيبات الصحيـة.



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany  
Tel. +49 6226 960 104 · export@manfred-sauer.de  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)

نظام كيه آي سي (قسطرات كيه آي سي، حلقة مباعدة كيه آي سي، قارنة كيه آي سي)

لوسائل التثبيت إلى نشوء قرحة ضغط و في حالات نادرة جداً ( خاصة إذا كان هناك نقص في الإحساس) أيضاً تضيقـات / تغيرات . في هذه الحالة يجب استشارة طبيب على الفور. التزم بمراعاة الإرشادات الخاصة باختيار المقاييس وتعليمات استخدام وسائل التثبيت.

#### إرشادات اختبار مقاييس قسطرة كيه آي سي (KIC)

يعنى الاختبار الصحيح للمقاييس بتحقق ثبات جيد ويفى من التسربات وقرحات الانضغاط، ويجب لاختبار الحجم قياس محيط القضيب تقريباً في منتصف جسم القضيب. في حال المتصق عند الانتصاص، يقلن كذلك محيط القضيب المتتصص. تحدد اشرطة القياس الخاصة بالمنتج القطر بناء على قياس المحيط.

#### إرشادات الاستخدام

تثبت القسطرة بواسطة إصبعين لإبعاده والبسائه، وارفع فتحة القسطرة فوق قرحة القارنة، وأضبط القرنة في منتصف الفتحة (الشكل ١). اضغط غلاف القرنة وأحكم التثبيت (الغلق من خلال التدوير (الشكل ٢). شد القرضة وقارنة، كي تتأكد من الارتباط بينهما (الشكل ٣). رُكِّب بعد ذلك القسطرة باستخدام وسيلة تثبيت باسبية، وانتهاء ذلك إلى مراعاة دليل الاستخدام المناسب (مثلاً لاصق زاور الجلدي، أشرطة زاور اللاصقة). حل القرنة لفصل القسطرة عن الخرطوم الواصل لكيس تجميع البول (الشكل ٤).

مرر سرقة المباعدة في فتحة القسطرة (الشكل ٥).

وسيغ القسطرة من خلال غلق مقاييس المقص إلى أن تلامس المقاييس (الشكل ٦). حرك القسطرة باستخدام حلقة المباعدة إلى الوراء حتى الحد الأقصى، بحيث تكشف الحشمة بالكامل (الشكل ٧). غم وقسطر، والتزم بمراعاة دليل استخدام القسطرة المناسب (الشكل ٨).

جُفِّف مواضع الاتصال في القرنة والقسطرة كي تتضمن ارتباطاً أميناً. أعد بعد ذلك تمرير القسطرة إلى الأمام بواسطة حلقة المباعدة (الشكل ٩).

أغلق حلقة المباعدة وأزليها (الشكل ١٠)

يمكن فتح الحلقة المتباعدة خلف السطح اللائق أو قلعها بالكامل أو تمزيقها بمقعدين مستدير الأطراف إذا كنت تخشى تكون حفرات ضغط أو إذا تراجعت القضيب بشكل جاد عند التبول، على سبيل المثال (الشكل ١١). ويجب عدم استخدام مقص حاد بسبب خطر حدوث إصابة. يجب عمل الشق بشكل دائري حتى لا تترافق القسطرة. عند القطع أو التمزيق اضغط في الوقت نفسه على السطح اللائق للقسطرة. أعد توصيل القرنة... الخ. (الشكل ١ و ٢ و ٣ ...).

الغرض من الاستخدام ودوعي الاستعمال تعلم قسطرات كيه آي سي (KIC) على التصريف الخارجي للبول مع تكوين كيس تجميع البول للأشخاص المصابين بسلس البول مع تكوين بول متى، يعالج من خلال قسطرة منقطعة إضافية (قسطرة ذاتية منقطعة (ISK)) / قسطرة خارجية منقطعة (((IFK)). ويجري الاستخدام على جلد سليم. يتيح نظام كيه آي سي (KIC)، المكون من قسطرات كيه آي سي (KIC) ولملحقاتها قارنة كيه آي سي (KIC) وحلقة مباعدة كيه آي سي (KIC)، القسطرة الذاتية المنقطعة (القسطرة الخارجية المنقطعة دون حل القسطرة عن القضيب. وهذا من شأنه أن يحافظ على الجلد ويوفر معاناة تغيير القسطرة بعد كل عملية قسطرة.

#### موانع الاستعمال

قسطرات كيه آي سي (KIC) ليست مناسبة في حالات الحساسيات/عدم تحمل اللاتكس أو المواد الأخرى الموجودة في القسطرة أو في اللاصق/الشريط اللاصق المستخدم؛ أضرار جلدية حول القضيب (مثل الجروح والأكزيما) وفرحة الضغط؛ أمراض الجلد الحادة (مثل الفطريات، عورى الجلد البكتيري)؛ تضيق واضح للقلبة.

#### إرشادات مهمة حول الصحة الشخصية ومدة الاستخدام

تجنب مراعاة الواقي الصناعي لسلطات الدولة المخصصة عند التعامل مع منتجات سلس البول. ويفوضني بتغيير القسطرة (الشريط اللاصق، والكيس) بعد ٢٤ ساعة. ويمكن أن تقل مدة الاستخدام عن ٢٤ ساعة حسب نوع البشرة.

#### معلومات

- يمكن معرفة اسم المنتج والاسم التجاري من الملصق.
- تتوفر في نوعين الأصلي وفائق الرقة
- قارنة كيه آي سي (KIC): شُتُّت بعد ثلاث مرات من الاستخدام؛ تُشفَّط بالماء قبل التوصيل مع قسطرة جديدة؛ إبالة للشك.
- حلقة مباعدة كيه آي سي (KIC): قبلة لاستخدام عدة مرات؛ تُنظف بالماء بانتظام.

#### المخاطر والإرشادات التحذيرية

استشر الطبيب لمعرفة ما إذا كانت قسطرات التبول الخارجي من اللاتكس مناسبة لعلاج الحالات الفردية من سلس البول. ويجب إجراء التوجيه للعلاج باستخدام قسطرات التبول الخارجي من خلال قادر تمربيض مؤهل.

يمكن أن تؤدي إلى حدوث تهيجهـات/تغيرات في الجلد. ويمكن أن تحدث توبيخة حساسية ضد اللاتكس. تفحص الجلد حال حدوث ملقطة للنظر وأطلب مسحورة طبية.

يمكن أن تؤدي القسطرات الضيقة جداً أو الاستعمال غير المناسب



2022-02

§15767



**MANFRED SAUER GmbH**

Neurott 7-15 · 74931 Lobbach · Germany

Tel. +49 6226 960 100 · [info@manfred-sauer.de](mailto:info@manfred-sauer.de)  
[www.manfred-sauer.com](http://www.manfred-sauer.com)