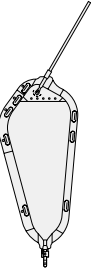


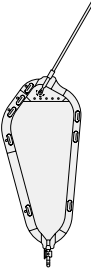
Auszug aus dem Gesamtsortiment


Die Beutel sind in Packungen mit 10, 30 oder 50 Stück erhältlich.

SAUER-Rollibeutel ohne Adapter

Einlauf: ohne Adapter; harter Schlauch, 20 cm, kürzbar; Rücklaufventil

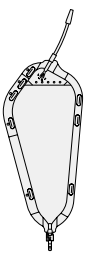
Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.
	1,3 l 10 St.	701.1020-10
	1,3 l 30 St.	701.1020-30
	1,3 l 50 St.	701.1020-50
	0,7 l 10 St.	702.1020-10
	0,7 l 30 St.	702.1020-30
	0,7 l 50 St.	702.1020-50

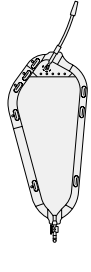
Drehhahn	Menge	Best.Nr.
	1,3 l 10 St.	701.3020-10
	1,3 l 30 St.	701.3020-30
	1,3 l 50 St.	701.3020-50
	0,7 l 10 St.	702.3020-10
	0,7 l 30 St.	702.3020-30
	0,7 l 50 St.	702.3020-50

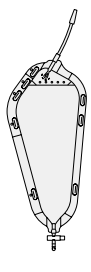
Schiebehahn	Menge	Best.Nr.
	1,3 l 10 St.	701.2020-10
	1,3 l 30 St.	701.2020-30
	1,3 l 50 St.	701.2020-50
	0,7 l 10 St.	702.2020-10
	0,7 l 30 St.	702.2020-30
	0,7 l 50 St.	702.2020-50

SAUER-Rollibeutel mit fest montiertem Adapter (* auch steril erhältlich)

Einlauf: fest montierter Adapter; weicher Schlauch, 12 cm, nicht kürzbar; Rücklaufventil

Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.
	1,3 l 10 St.	701.1112-10*
	1,3 l 30 St.	701.1112-30*
	1,3 l 50 St.	701.1112-50*
	0,7 l 10 St.	702.1112-10*
	0,7 l 30 St.	702.1112-30*
	0,7 l 50 St.	702.1112-50*

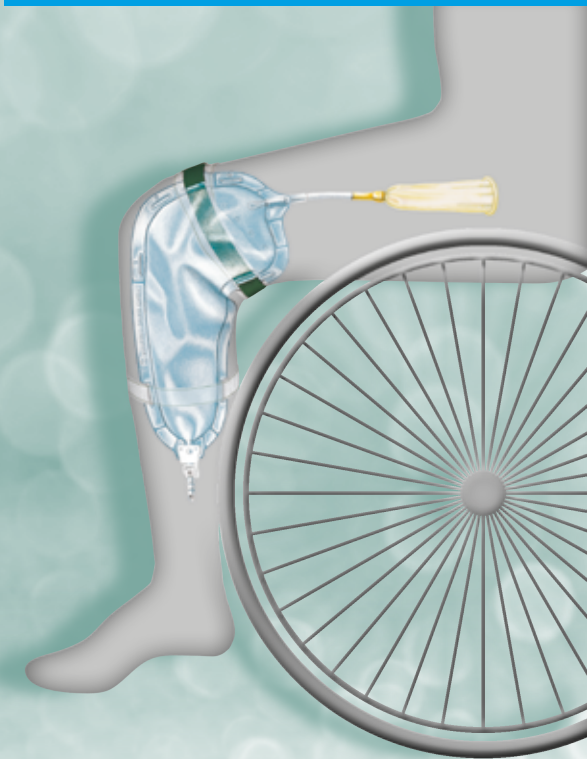
Drehhahn	Menge	Best.Nr.
	1,3 l 10 St.	701.3112-10
	1,3 l 30 St.	701.3112-30
	1,3 l 50 St.	701.3112-50
	0,7 l 10 St.	702.3112-10
	0,7 l 30 St.	702.3112-30
	0,7 l 50 St.	702.3112-50

Schiebehahn	Menge	Best.Nr.
	1,3 l 10 St.	701.2112-10*
	1,3 l 30 St.	701.2112-30*
	1,3 l 50 St.	701.2112-50*
	0,7 l 10 St.	702.2112-10*
	0,7 l 30 St.	702.2112-30*
	0,7 l 50 St.	702.2112-50*



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Rollibeutel
... der Beinbeutel für Rollstuhlfahrer



Urin-Beinbeutel in angewinkelter Form für besseren Tragekomfort

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail.

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY

Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.



MANFRED SAUER GMBH Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com
Hersteller von Medizinprodukten

Sicherheit und Tragekomfort

Diese Beutel in angewinkelter Form zur Befestigung am Bein wurden eigens für Rollstuhlfahrer entwickelt. Sie sind an die sitzende Haltung angepasst und bieten ein hohes Maß an Tragekomfort, Flexibilität und Sicherheit. Aufgrund der vielfältigen Ausstattungsmerkmale ist eine genaue Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse möglich.



Auch für Fußgänger

SAUER-Rollibeutel

Hohes Fassungsvermögen

1,3 Liter geben Unabhängigkeit von unzugänglichen Toiletten und damit Sicherheit für unterwegs und im Beruf. Die kleineren Beutel mit 0,7 Liter eignen sich eher für Kinder und Heranwachsende.

Angewinkelte Form

Der schräge Einlaufschlauch und die spezielle Form sind Voraussetzung für das zuverlässige Funktionieren dieser Beutel in der Rollstuhlsituation – bequemes Tragen am Bein, äußerlich nicht erkennbar, sicheres Abfließen des Urins und leichtes Entleeren.

Strukturierte Folie

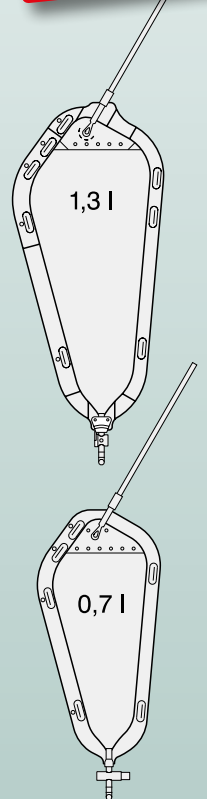
Diese ist sehr robust und hat eine geprägte Oberfläche, um Schweißbildung und das Anhaften auf der Haut zu verhindern.



100 %-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

Auch in anderen Varianten erhältlich



Merkmale

1 Der Anschluss

mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:

- ohne Adapter: zum direkten Anschluss an SAUER-Urinal-Kondome
- glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome
- gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter



glatter Adapter



gestufter Adapter



ohne Adapter

2 Der Einlaufschlauch

in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.

3 Der Ventilkörper

gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.

4 Das Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.

5 Die Gurtösen

bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.

6 Der Auslaufhahn

für ein sauberes Entleeren des Beutels:

- Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
- Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
- Schiebebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden

7 Die Schweißung

Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.



Schwenkhahn



Drehhahn



Schiebebehahn