

SAUER-Comfort

Selbstklebende Urinal-Kondome


Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien. Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. In 11 Größen erhältlich.

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

SAUER-Comfort – Standard

Länge 130 mm, Pufferzone 75 mm, normaler Kleber


Ø mm	Best.-Nr.	PZN
18	97.18	00590668
20	97.20	00590674
22	97.22	00590680
24	97.24	00590697
26	97.26	00590705
28	97.28	00590711
30	97.30	00590728
32	97.32	00590734
35	97.35	00590740
37	97.37	00590757
40	97.40	00590763

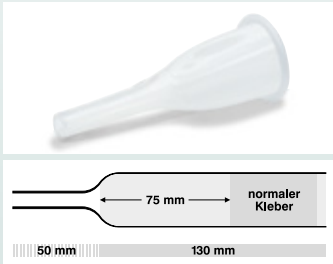

SAUER-Comfort – Blau

Länge 130 mm, Pufferzone 75 mm, starker Kleber


Ø mm	Best.-Nr.	PZN
18	97.7501.18	00287295
20	97.7501.20	00464188
22	97.7501.22	00464194
24	97.7501.24	00464202
26	97.7501.26	00464219
28	97.7501.28	00464225
30	97.7501.30	00464231
32	97.7501.32	00464248
35	97.7501.35	00464254
37	97.7501.37	00464260
40	97.7501.40	00464277

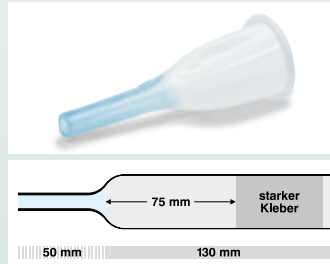

SAUER-Comfort – Grün

Länge 115 mm, Pufferzone 60 mm, normaler Kleber


Ø mm	Best.-Nr.	PZN
18	97.6000.18	00464283
20	97.6000.20	00464308
22	97.6000.22	00464314
24	97.6000.24	00464320
26	97.6000.26	00464337
28	97.6000.28	00464343
30	97.6000.30	00464366
32	97.6000.32	00464372
35	97.6000.35	00464389
37	97.6000.37	00464395
40	97.6000.40	00464403

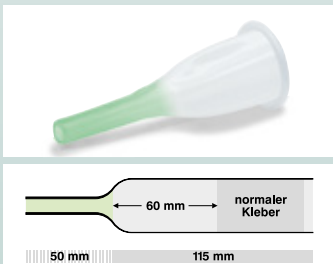

SAUER-Comfort – Rot

Länge 115 mm, Pufferzone 60 mm, starker Kleber

Ø mm	Best.-Nr.	PZN
18	97.6001.18	00464426
20	97.6001.20	00464449
22	97.6001.22	00464455
24	97.6001.24	00464461
26	97.6001.26	00464478
28	97.6001.28	00464484
30	97.6001.30	00464490
32	97.6001.32	00464509
35	97.6001.35	00464515
37	97.6001.37	00464521
40	97.6001.40	00464538

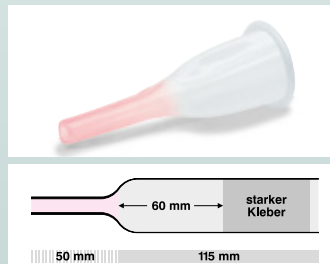

MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Comfort

Sicherheit und einfache Handhabung

Sauer
Comfort



Bei Fragen zu Urinal-Kondomen und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater:

Tel. +49 6226 960 069
info@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.




MANFRED SAUER GMBH Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010
Hersteller von Medizinprodukten info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Das selbstklebende Urinal-Kondom mit der einzigartigen Pufferzone

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannt und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.


Probleme

Bei der Anwendung eines Urinal-Kondoms können unterschiedliche Probleme auftreten, die oft auch mit den Eigenschaften des gewählten Kondoms zusammenhängen. Um den aufgeführten Problemen entgegenzuwirken, muss ein Urinal-Kondom besonders hohe Anforderungen erfüllen.

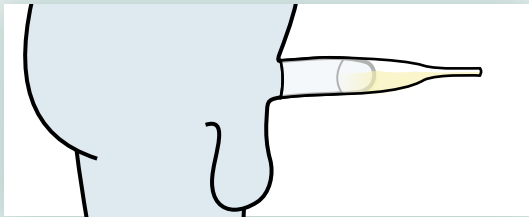


Pfützenbildung

Bei Kondomen aus festerem Material bleibt häufig ein Urinrest im Kondom zurück.

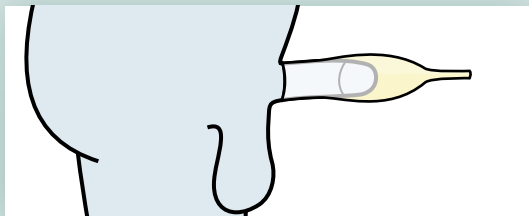

Urinstau

Bei hohem Spontanurin kann der Urin nicht schnell genug in den Beutel abgeleitet werden.

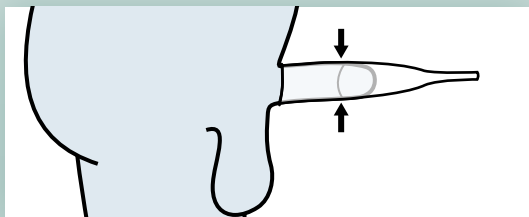

Keine passende Größe?

Schlecht angepasste Kondome ermöglichen meist keine sichere Klebeverbindung.

SAUER-Comfort Selbstklebende Urinal-Kondome

Aus eigener Entwicklung und Produktion. Die Kondome werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und haben die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

1 Schlauchansatz

Zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Je nach Ausführung des Kondoms ist der Schlauchansatz unterschiedlich gefärbt.

Länge: 50 mm

2 Pufferzone

Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Länge der Pufferzone: 75 mm oder 60 mm

3 Klebezone

Wahlweise mit **normalem oder starkem Kleber** ausgerüstet. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, das ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.

Länge der Klebezone: 50 mm


4 11 Größen

Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–40 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit des Kondoms, umso sicherer ist die Klebeverbindung.



Maßband

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.

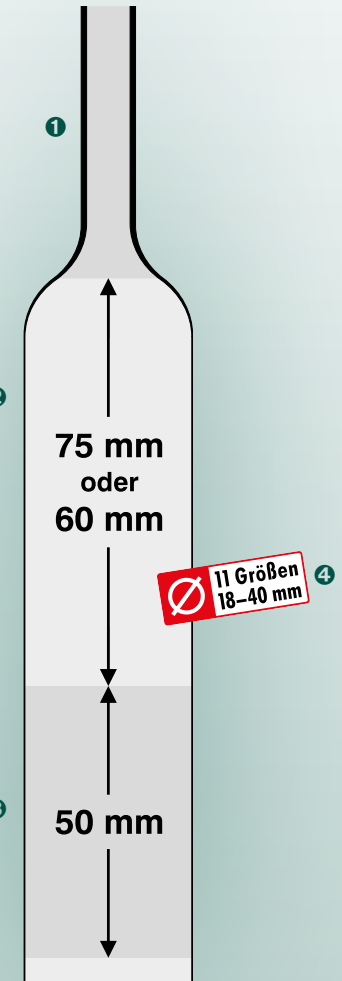

100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.