

SAUER-Comfort


Selbstklebende Urinal-Kondome

Kondom und Kleber bestehen aus synthetischen Materialien.
Mit angetauchtem Schlauchansatz, zum Anschluss an alle
Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter.
In 11 Größen erhältlich.

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur
Kondomgröße) liegt bei.

SAUER-Comfort – Standard


Länge 130 mm, Pufferzone 75 mm, normaler Kleber

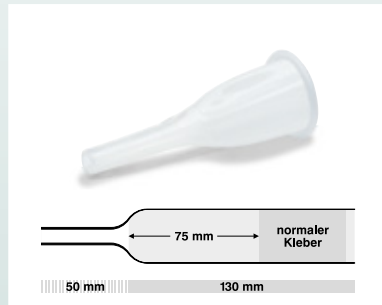

Ø mm	Best.-Nr.
18	97.18
20	97.20
22	97.22
24	97.24
26	97.26
28	97.28
30	97.30
32	97.32
35	97.35
37	97.37
40	97.40

SAUER-Comfort – Blau


Länge 130 mm, Pufferzone 75 mm, starker Kleber

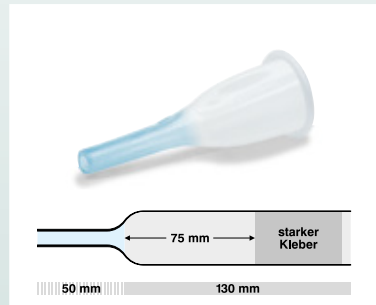

Ø mm	Best.-Nr.
18	97.7501.18
20	97.7501.20
22	97.7501.22
24	97.7501.24
26	97.7501.26
28	97.7501.28
30	97.7501.30
32	97.7501.32
35	97.7501.35
37	97.7501.37
40	97.7501.40

SAUER-Comfort – Grün


Länge 115 mm, Pufferzone 60 mm, normaler Kleber

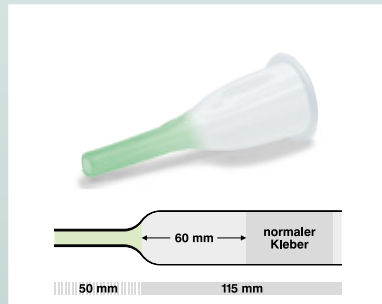

Ø mm	Best.-Nr.
18	97.6000.18
20	97.6000.20
22	97.6000.22
24	97.6000.24
26	97.6000.26
28	97.6000.28
30	97.6000.30
32	97.6000.32
35	97.6000.35
37	97.6000.37
40	97.6000.40

SAUER-Comfort – Rot

Länge 115 mm, Pufferzone 60 mm, starker Kleber

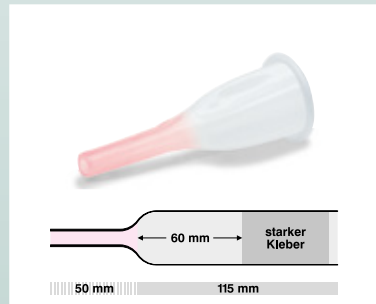

Ø mm	Best.-Nr.
18	97.6001.18
20	97.6001.20
22	97.6001.22
24	97.6001.24
26	97.6001.26
28	97.6001.28
30	97.6001.30
32	97.6001.32
35	97.6001.35
37	97.6001.37
40	97.6001.40



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Comfort

Sicherheit und einfache Handhabung

Sauer
Comfort



Bei Fragen zu unseren selbstklebenden Urinal-Kondomen
und Musterwünschen rufen Sie uns an oder schreiben uns
eine E-Mail.

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.


MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Das selbstklebende Urinal-Kondom
mit der einzigartigen Pufferzone


Probleme

Bei der Anwendung eines Urinal-Kondoms können unterschiedliche Probleme auftreten, die oft auch mit den Eigenschaften des gewählten Kondoms zusammenhängen. Um den aufgeführten Problemen entgegenzuwirken, muss ein Urinal-Kondom besonders hohe Anforderungen erfüllen.

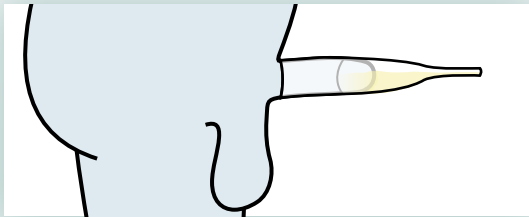


Pfützenbildung

Bei Kondomen aus festerem Material bleibt häufig ein Urinrest im Kondom zurück.

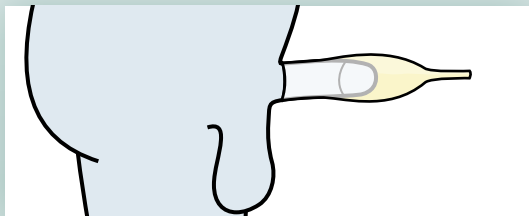

Urinstau

Bei hohem Spontanurin kann der Urin nicht schnell genug in den Beutel abgeleitet werden.

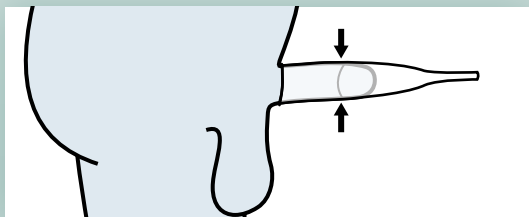

Keine passende Größe?

Schlecht angepasste Kondome ermöglichen meist keine sichere Klebeverbindung.

SAUER-Comfort Selbstklebende Urinal-Kondome

Aus eigener Entwicklung und Produktion. Die Kondome werden in unserem Betrieb in Lobbach hergestellt und haben die Merkmale, die für den Anwender entscheidend sind, wenn es um einfache Handhabung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und nicht zuletzt um einen hohen Tragekomfort geht.

1 Schlauchansatz

Zum Anschluss an alle Urin-Bein- und -Bettbeutel mit und ohne Adapter. Je nach Ausführung des Kondoms ist der Schlauchansatz unterschiedlich gefärbt.

Länge: 50 mm

2 Pufferzone

Bietet einen ausreichenden Puffer bei hohem Spontanurin, um die Klebung nicht zu belasten, was zum Ablösen des Kondoms führen könnte. Die Puderung wirkt dem Zusammenkleben des Kondoms während der Anwendung entgegen, sie gibt der Pufferzone ein leicht milchiges Aussehen.

Länge der Pufferzone: 75 mm oder 60 mm

3 Klebezone

Wahlweise mit **normalem oder starkem Kleber** ausgerüstet. Im Bereich der Klebezone ist das Kondom transparent, das ermöglicht jederzeit eine Beurteilung des Hautbildes, ohne das Kondom ablösen zu müssen.


Länge der Klebezone: 50 mm

4 11 Größen

Durch die fein abgestuften Größen (Durchmesser 18–40 mm) ist eine exakte Anpassung möglich. Je höher die Passgenauigkeit des Kondoms, umso sicherer ist die Klebeverbindung.

Maßband

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.

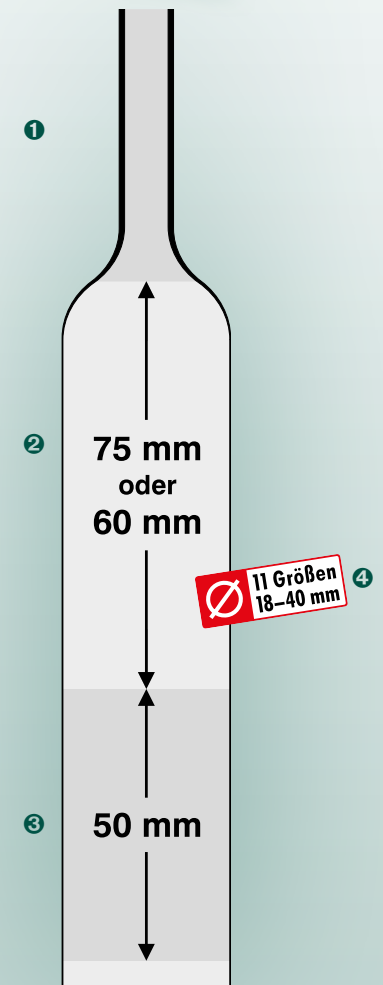

100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Urinal-Kondome *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.