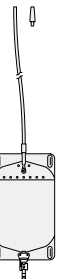
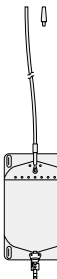



# Auszug aus dem Gesamtsortiment

Die Beutel sind in Packungen mit 10, 30 oder 50 Stück erhältlich.




## SAUER-Fußgängerbeutel mit glattem Adapter\* und einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)

Einlauf: mit aufsteckbarem Adapter; weicher Schlauch, 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil

Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	Drehhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	Schiebehahn	Menge	Best.Nr.	PZN
	0,6 l	10 St. <b>710.1345-10</b>	06095705		0,6 l	10 St. <b>710.3345-10</b>	06095763		0,6 l	10 St. <b>710.2345-10</b>	06095846
	0,6 l	30 St. <b>710.1345-30</b>	06095711		0,6 l	30 St. <b>710.3345-30</b>	06095786		0,6 l	30 St. <b>710.2345-30</b>	06095852
	0,6 l	50 St. <b>710.1345-50</b>	06095728		0,6 l	50 St. <b>710.3345-50</b>	06095792		0,6 l	50 St. <b>710.2345-50</b>	06095869
	1,0 l	10 St. <b>711.1345-10</b>	06096550		1,0 l	10 St. <b>711.3345-10</b>	06096596		1,0 l	10 St. <b>711.2345-10</b>	06096627
	1,0 l	30 St. <b>711.1345-30</b>	06096567		1,0 l	30 St. <b>711.3345-30</b>	06096604		1,0 l	30 St. <b>711.2345-30</b>	06096633
	1,0 l	50 St. <b>711.1345-50</b>	06096573		1,0 l	50 St. <b>711.3345-50</b>	06096610		1,0 l	50 St. <b>711.2345-50</b>	06096656

## SAUER-Sportbeutel mit glattem Adapter\* und diagonalem Einlauf

Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter; Rücklaufventil

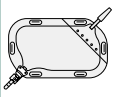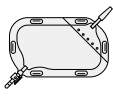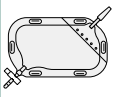Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	Drehhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	Schiebehahn	Menge	Best.Nr.	PZN
	0,5 l	10 St. <b>721.1100-10</b>	06097288		0,5 l	10 St. <b>721.3100-10</b>	06097348		0,5 l	10 St. <b>721.2100-10</b>	05358031
	0,5 l	30 St. <b>721.1100-30</b>	06097294		0,5 l	30 St. <b>721.3100-30</b>	06097354		0,5 l	30 St. <b>721.2100-30</b>	05358025
	0,5 l	50 St. <b>721.1100-50</b>	06097302		0,5 l	50 St. <b>721.3100-50</b>	06097360		0,5 l	50 St. <b>721.2100-50</b>	05358019

\*SAUER-Fußgängerbeutel sind auch mit gestuftem Adapter erhältlich, zum Teil auch in steriler Ausführung.

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

Tel. +49 6226 960 069  
info@manfred-sauer.de



**MADE IN GERMANY** Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

**MANFRED SAUER GMBH** Hersteller von Medizinprodukten  
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010  
info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

**MANFRED SAUER GMBH**  
Hersteller von Medizinprodukten

**SAUER-Beinbeutel**  
... für Fußgänger und Rollstuhlfahrer



**Verschiedene Beutelformen**  
mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannte und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.

# Urin-Beinbeutel




Die Urin-Beinbeutel stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach auf Hochfrequenz-Schweißmaschinen gefertigt. Durch unterschiedliche Formen, Größen und vielfältige Ausstattungsmerkmale wird weitestgehend den Bedürfnissen und Wünschen des Anwenders entsprochen.



**Auch für Rollstuhlfahrer**


## SAUER-Fußgängerbeutel (auch für Rollstuhlfahrer)

- Rechteckige Form; gerader Einlauf; Fassungsvermögen 0,6l oder 1,0 l; wahlweise mit einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)
- Einlauf: aufsteckbarer Adapter, glatt oder gestuft; weicher Schlauch, 15 cm oder 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

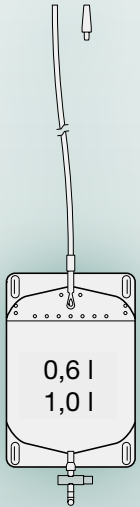

## SAUER-Sportbeutel

- Gerader oder diagonaler Einlauf; Fassungsvermögen 0,5 l
- Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter, glatt oder gestuft; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

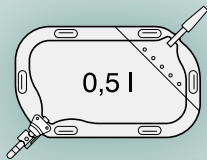

### 100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Funktionalität geprüft.

## Merkmale

### 1 Der Anschluss

mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:

- glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome
- gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter

### 2 Der Einlaufschlauch

in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.

### 3 Der Ventilkörper

gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.

### 4 Das Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.

### 5 Die Gurtösen

bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.

### 6 Der Auslaufhahn

für ein sauberes Entleeren des Beutels:

- Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
- Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
- Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden

### 7 Die Schweißung

Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.

### 8 Die Beschichtung

Um den direkten Kontakt der Beutelfolie mit der Haut zu vermeiden, können alle Urin-Auffangbeutel (außer Bettbeutel) mit einer einseitigen Beschichtung (Viskose-Flock) versehen werden.



glatter Adapter



gestufter Adapter



Drehhahn



Schwenkhahn



Schiebehahn