
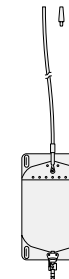



Auszug aus dem Gesamtsortiment

Die Beutel sind in Packungen mit 10, 30 oder 50 Stück erhältlich.

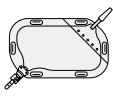
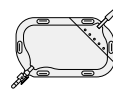
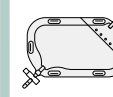
SAUER-Fußgängerbeutel mit glattem Adapter* und einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)

Einlauf: mit aufsteckbarem Adapter; weicher Schlauch, 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil

Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.	Drehhahn	Menge	Best.Nr.	Schiebehahn	Menge	Best.Nr.
	0,6 l	10 St.		0,6 l	10 St.		0,6 l	10 St.
	30 St.	710.1345-30		30 St.	710.3345-30		30 St.	710.2345-30
	50 St.	710.1345-50		50 St.	710.3345-50		50 St.	710.2345-50
	1,0 l	10 St.		1,0 l	10 St.		1,0 l	10 St.
	30 St.	711.1345-30		30 St.	711.3345-30		30 St.	711.2345-30
	50 St.	711.1345-50		50 St.	711.3345-50		50 St.	711.2345-50

SAUER-Sportbeutel mit glattem Adapter* und diagonalem Einlauf

Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter; Rücklaufventil

Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.	Drehhahn	Menge	Best.Nr.	Schiebehahn	Menge	Best.Nr.
	0,5 l	10 St.		0,5 l	10 St.		0,5 l	10 St.
	30 St.	721.1100-30		30 St.	721.3100-30		30 St.	721.2100-30
	50 St.	721.1100-50		50 St.	721.3100-50		50 St.	721.2100-50

*SAUER-Fußgänger- und -Sportbeutel sind auch mit gestuftem Adapter erhältlich, zum Teil auch in steriler Ausführung.

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail.

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

MANFRED SAUER GMBH Hersteller von Medizinprodukten
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

SAUER-Beinbeutel ... für Fußgänger und Rollstuhlfahrer



**Verschiedene Beutelformen
mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen**

Urin-Beinbeutel



Die Urin-Beinbeutel stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach auf Hochfrequenz-Schweißmaschinen gefertigt. Durch unterschiedliche Formen, Größen und vielfältige Ausstattungsmerkmale wird weitestgehend den Bedürfnissen und Wünschen des Anwenders entsprochen.



Auch für Rollstuhlfahrer

SAUER-Fußgängerbeutel (auch für Rollstuhlfahrer)

- Rechteckige Form; gerader Einlauf; Fassungsvermögen 0,6l oder 1,0 l; wahlweise mit einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)
- Einlauf: aufsteckbarer Adapter, glatt oder gestuft; weicher Schlauch, 15 cm oder 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

SAUER-Sportbeutel

- Gerader oder diagonaler Einlauf; Fassungsvermögen 0,5 l
- Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter, glatt oder gestuft; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Funktionalität geprüft.

Merkmale

1 Der Anschluss

mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:

- glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome
- gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter

2 Der Einlaufschlauch

in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.

3 Der Ventilkörper

gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.

4 Das Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.

5 Die Gurtösen

bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.

6 Der Auslaufhahn

für ein sauberes Entleeren des Beutels:

- Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
- Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
- Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden

7 Die Schweißung

Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.

8 Die Beschichtung

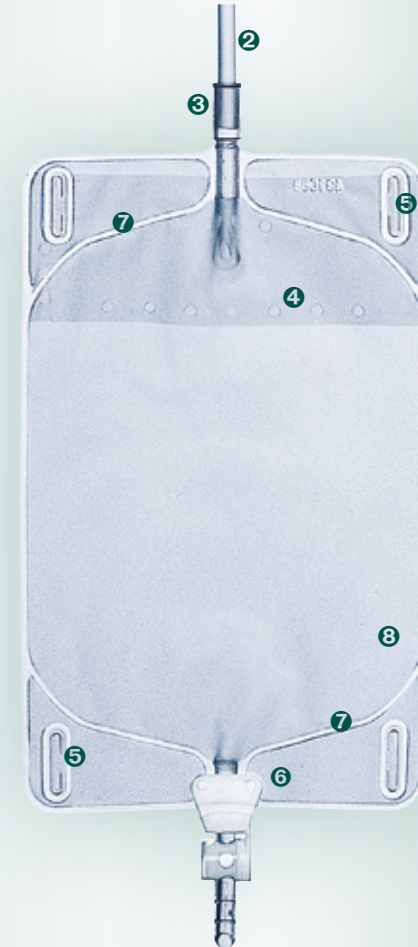
Um den direkten Kontakt der Beutelfolie mit der Haut zu vermeiden, können alle Urin-Auffangbeutel (außer Bettbeutel) mit einer einseitigen Beschichtung (Viskose-Flock) versehen werden.



glatter Adapter



gestufter Adapter



Drehhahn



Schwenkhahn



Schiebehahn