

## Auszug aus dem Gesamtsortiment

### SAUER-Fußgängerbeutel

Einlaufschlauch 45 cm, weich, kürzbar  
Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

#### Schwenkhahn

Anschluss	Fassungsvermögen	Menge	Best.-Nr./REF
glatter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	<b>710.1345-10</b>
		30 St.	<b>710.1345-30</b>
gestufter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	<b>710.1445-10</b>
		30 St.	<b>710.1445-30</b>
glatter Adapter aufsteckbar	1,0 l	10 St.	<b>711.1345-10</b>
		30 St.	<b>711.1345-30</b>

#### Schiebehahn

glatter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	<b>710.2345-10</b>
		30 St.	<b>710.2345-30</b>
gestufter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	<b>710.2445-10*</b>
		30 St.	<b>710.2445-30*</b>
glatter Adapter aufsteckbar	1,0 l	10 St.	<b>711.2345-10</b>
		30 St.	<b>711.2345-30</b>

#### Drehhahn

gestufter Adapter aufsteckbar	1,0 l	10 St.	<b>711.3445-10*</b>
		30 St.	<b>711.3445-30*</b>

\* auch steril erhältlich

### SAUER-Sportbeutel

Ohne oder mit fest montiertem Adapter, Fassungsvermögen 0,5 l  
Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

#### Schwenkhahn

Anschluss	Einlauf	Menge	Best.-Nr./REF
glatter Adapter fest montiert	diagonal	10 St.	<b>721.1100-10</b>
		30 St.	<b>721.1100-30</b>

#### Schiebehahn

glatter Adapter fest montiert	diagonal	10 St.	<b>721.2100-10</b>
		30 St.	<b>721.2100-30</b>

### SAUER-Rechteckbeutel

Fest montierter Adapter, Fassungsvermögen: 0,6 l  
Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

#### Schiebehahn

Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF
gestufter Adapter fest montiert	32 cm, weich, nicht kürzbar	10 St.	<b>732.2232-10</b>
		30 St.	<b>732.2232-30</b>



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

## SAUER-Beinbeutel

... für Fußgänger und Rollstuhlfahrer



**Verschiedene Beutelformen  
mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen**



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.



MANFRED SAUER GMBH  
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany  
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011  
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam:

**Tel. +49 6226 960 104**  
**export@manfred-sauer.de**

## Urin-Beinbeutel

Die Urin-Beinbeutel stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach auf Hochfrequenz-Schweißmaschinen gefertigt. Durch unterschiedliche Formen, Größen und vielfältige Ausstattungsmerkmale wird weitestgehend den Bedürfnissen und Wünschen des Anwenders entsprochen.



## SAUER-Fußgängerbeutel

(auch für Rollstuhlfahrer)

- Rechteckige Form; gerader Einlauf; Fassungsvermögen 0,6l oder 1,0 l; wahlweise mit einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)
- Einlauf: aufsteckbarer Adapter, glatt oder gestuft; weicher Schlauch, 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn




## SAUER-Sportbeutel

- Gerader oder diagonaler Einlauf; Fassungsvermögen 0,5 l
- Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter, glatt oder gestuft; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

## SAUER-Rechteckbeutel

- Fassungsvermögen 0,6 l
- Einlauf: gestufter Adapter, fest montiert; Schlauch 8 cm oder 32 cm, nicht kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schiebehahn

**Auch in anderen Varianten erhältlich**

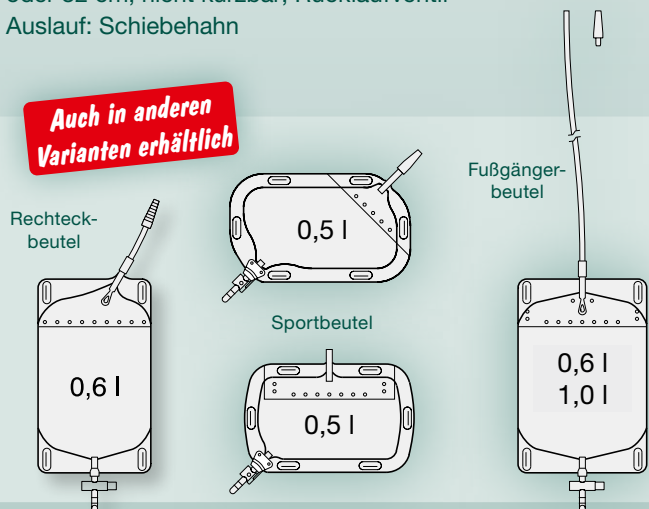

## Merkmale

- Der Anschluss**  
mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:
  - glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome
  - gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter
- Der Einlaufschlauch**  
in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.
- Der Ventilkörper**  
gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.
- Das Rücklaufventil**  
verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.
- Die Gurtösen**  
bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.
- Der Auslaufhahn**  
für ein sauberes Entleeren des Beutels:
  - Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
  - Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
  - Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden
- Die Schweißung**  
Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.
- Die Beschichtung**  
Um den direkten Kontakt der Beutelfolie mit der Haut zu vermeiden, können alle Urin-Auffangbeutel (außer Bettbeutel) mit einer einseitigen Beschichtung (Viskose-Flock) versehen werden.

### 100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

