

Auszug aus dem Gesamtsortiment

Urin-Beinbeutel für Rollstuhlfahrer

Fassungsvermögen 1,3 Liter

Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

Schwenkhahn

Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	701.1020-10	00559204	15.25.05.5001
		30 St.	701.1020-30	00571116	15.25.05.5001
glatter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	701.1112-10*	00650991	15.25.05.5006
		30 St.	701.1112-30*	00669370	15.25.05.5006

Schiebehahn

gestufter Adapter fest montiert	22 cm weich	10 St.	701.2222-10*	06094686	15.25.05.5008
		30 St.	701.2222-30*	06094692	15.25.05.5008
gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	701.2435-10*	06094841	15.25.05.5024
		30 St.	701.2435-30*	06094858	15.25.05.5024

Drehhahn

gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	701.3435-10	06094781	15.25.05.5026
		30 St.	701.3435-30	06094798	15.25.05.5026

* auch steril erhältlich

PZN = Pharmazentralnummer

HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam:

Tel. +49 6226 960 100
info@manfred-sauer.de

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannt und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.

Fassungsvermögen 0,7 Liter

Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

Schwenkhahn

Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
ohne Adapter	20 cm hart kürzbar	10 St.	702.1020-10	06094901	15.25.05.5002
		30 St.	702.1020-30	06094918	15.25.05.5002
gestufter Adapter fest montiert	12 cm weich	10 St.	702.1212-10	06095303	15.25.05.5037
		30 St.	702.1212-30	06095326	15.25.05.5037

Drehhahn

gestufter Adapter aufsteckbar	35 cm weich kürzbar	10 St.	702.3435-10	06095579	15.25.05.5032
		30 St.	702.3435-30	06095585	15.25.05.5032

PZN = Pharmazentralnummer

HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten


Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Rollibeutel
... der Beinbeutel für Rollstuhlfahrer

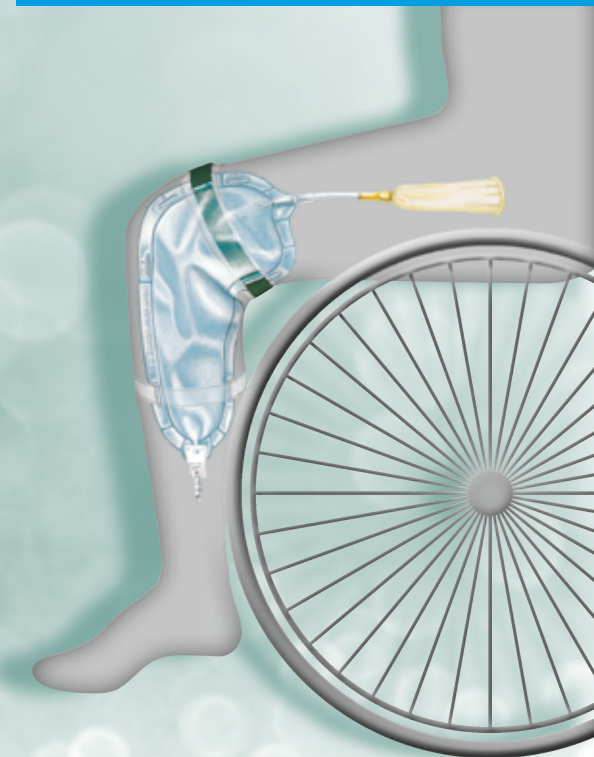

Urin-Beinbeutel in angewinkelter Form für besseren Tragekomfort

Sicherheit und Tragekomfort

Diese Beutel in angewinkelter Form zur Befestigung am Bein wurden eigens für Rollstuhlfahrer entwickelt. Sie sind an die sitzende Haltung angepasst und bieten ein hohes Maß an Tragekomfort, Flexibilität und Sicherheit. Aufgrund der vielfältigen Ausstattungsmerkmale ist eine genaue Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse möglich.

SAUER-Rollibeutel

Hohes Fassungsvermögen

1,3 Liter geben Unabhängigkeit von unzugänglichen Toiletten und damit Sicherheit für unterwegs und im Beruf. Die kleineren Beutel mit 0,7 Liter eignen sich eher für Kinder und Heranwachsende.

Angewinkelte Form

Der schräge Einlaufschlauch und die spezielle Form sind Voraussetzung für das zuverlässige Funktionieren dieser Beutel in der Rollstuhlsituation – bequemes Tragen am Bein, äußerlich nicht erkennbar, sicheres Abfließen des Urins und leichtes Entleeren.

Strukturierte Folie

Diese ist sehr robust und hat eine geprägte Oberfläche, um Schweißbildung und das Anhaften auf der Haut zu verhindern.


Auch für Fußgänger



Auch in anderen Varianten erhältlich

100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

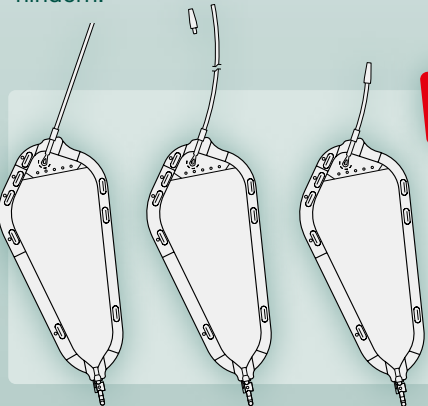

Merkmale

1 Der Anschluss

mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:

- ohne Adapter: zum direkten Anschluss an SAUER-Urinal-Kondome.
- glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome.
- gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter.

2 Der Einlaufschlauch

in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.

3 Der Ventilkörper

gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.

4 Das Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.

5 Die Gurtösen

bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.

6 Der Auslaufhahn

für ein sauberes Entleeren des Beutels:

- Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion.
- Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels.
- Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden.

7 Die Schweißung

Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.



glatter Adapter



gestufter Adapter



ohne Adapter



Schwenkhahn



Schwenkhahn gedreht für Linksträger



Drehhahn



Schiebehahn