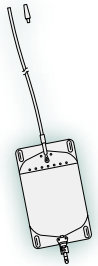


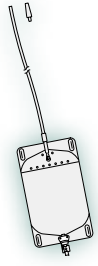
Auszug aus dem Gesamtsortiment

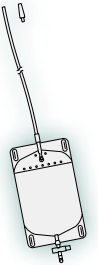
Die Beutel sind in Packungen mit 10, 30 oder 50 Stück erhältlich.

SAUER-Fußgängerbeutel mit glattem Adapter*
und einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)

Einlauf: mit aufsteckbarem Adapter; weicher Schlauch, 45 cm,
kürzbar; Rücklaufventil

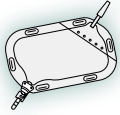
Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	HMV-Nr.
	0,6 l	10 St. 710.1345-10	06095705	15.25.05.1061
	0,6 l	30 St. 710.1345-30	06095711	15.25.05.1061
	0,6 l	50 St. 710.1345-50	06095728	15.25.05.1061
	1,0 l	10 St. 711.1345-10	06096550	15.25.05.1068
	1,0 l	30 St. 711.1345-30	06096567	15.25.05.1068
	1,0 l	50 St. 711.1345-50	06096573	15.25.05.1068

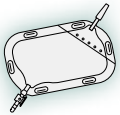
Drehhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	HMV-Nr.
	0,6 l	10 St. 710.3345-10	06095763	15.25.05.1137
	0,6 l	30 St. 710.3345-30	06095786	15.25.05.1137
	0,6 l	50 St. 710.3345-50	06095792	15.25.05.1137
	1,0 l	10 St. 711.3345-10	06096596	15.25.05.1068
	1,0 l	30 St. 711.3345-30	06096604	15.25.05.1068
	1,0 l	50 St. 711.3345-50	06096610	15.25.05.1068


Schiebehahn	Menge	Best.Nr.	PZN	HMV-Nr.
	0,6 l	10 St. 710.2345-10	06095846	15.25.05.1061
	0,6 l	30 St. 710.2345-30	06095852	15.25.05.1061
	0,6 l	50 St. 710.2345-50	06095869	15.25.05.1061
	1,0 l	10 St. 711.2345-10	06096627	15.25.05.1068
	1,0 l	30 St. 711.2345-30	06096633	15.25.05.1068
	1,0 l	50 St. 711.2345-50	06096656	15.25.05.1068

SAUER-Sportbeutel mit glattem Adapter*
und diagonalem Einlauf

Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter; Rücklaufventil

Schwenkhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	HMV-Nr.
	0,5 l	10 St. 721.1100-10	06097288	15.25.05.1031
	0,5 l	30 St. 721.1100-30	06097294	15.25.05.1031
	0,5 l	50 St. 721.1100-50	06097302	15.25.05.1031

Drehhahn	Menge	Best.Nr.	PZN	HMV-Nr.
	0,5 l	10 St. 721.3100-10	06097348	15.25.05.1134
	0,5 l	30 St. 721.3100-30	06097354	15.25.05.1134
	0,5 l	50 St. 721.3100-50	06097360	15.25.05.1134

Schiebehahn	Menge	Best.Nr.	PZN	HMV-Nr.
	0,5 l	10 St. 721.2100-10	05358031	15.25.05.1132
	0,5 l	30 St. 721.2100-30	05358025	15.25.05.1132
	0,5 l	50 St. 721.2100-50	05358019	15.25.05.1132

*SAUER-Fußgänger- und -Sportbeutel sind auch mit gestuftem Adapter erhältlich, zum Teil auch in steriler Ausführung.

SAUER-Beinbeutel ... für Fußgänger und Rollstuhlfahrer



**Verschiedene Beutelformen
mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen**

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam:

Tel. +49 6226 960 069
info@manfred-sauer.de

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannt und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.

 **MANFRED SAUER GMBH**
Hersteller von Medizinprodukten
Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Urin-Beinbeutel



Die Urin-Beinbeutel stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach auf Hochfrequenz-Schweißmaschinen gefertigt. Durch unterschiedliche Formen, Größen und vielfältige Ausstattungsmerkmale wird weitestgehend den Bedürfnissen und Wünschen des Anwenders entsprochen.

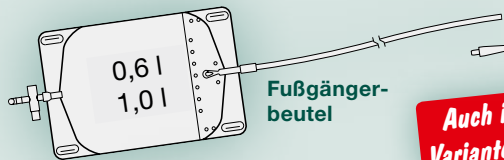
SAUER-Fußgängerbeutel (auch für Rollstuhlfahrer)

- Rechteckige Form; gerader Einlauf; Fassungsvermögen 0,6l oder 1,0 l; wahlweise mit einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)
- Einlauf: aufsteckbarer Adapter, glatt oder gestuft; weicher Schlauch, 15 cm oder 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

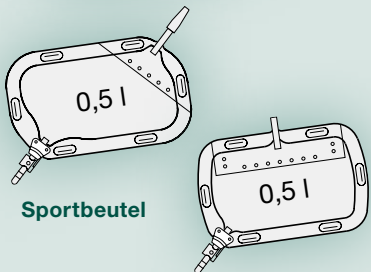


SAUER-Sportbeutel

- Gerader oder diagonaler Einlauf; Fassungsvermögen 0,5 l
- Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter, glatt oder gestuft; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn



Auch in anderen Varianten erhältlich



100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

Merkmale

1 Der Anschluss

mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:

- glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome
- gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter

2 Der Einlaufschlauch

in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.

3 Der Ventilkörper

gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.

4 Das Rücklaufventil

verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.

5 Die Gurtösen

bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.

6 Der Auslaufhahn

für ein sauberes Entleeren des Beutels:

- Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
- Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
- Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden

7 Die Schweißung

Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.

8 Die Beschichtung

Um den direkten Kontakt der Beutelfolie mit der Haut zu vermeiden, können alle Urin-Auffangbeutel (außer Bettbeutel) mit einer einseitigen Beschichtung (Viskose-Flock) versehen werden.



glatter Adapter



gestufter Adapter



Drehhahn



Schwenkhahn



Schiebehahn