

Versionen des IQ-Cath

Hydrophiler Einmalkatheter

	IQ-Cath	Gebrauchsfertig	Extra	Länge	CH
Funktions- verpackung	20 <input type="checkbox"/>	Nein	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
	21 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
Peelver- packung NEU	29	Nein	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
	29	Nein	–	33 cm	● ○ ● ● ● ●
	29	Nein	–	17 cm	● ○ ● ● ● ●
	23	Sofort	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
	23	Sofort	–	33 cm	● ○ ● ● ● ●
	23	Sofort	–	17 cm	● ○ ● ● ● ●
	43	Sofort	Sleeve	43 cm	● ○ ● ● ● ●
43	Sofort	Sleeve	33 cm	● ○ ● ● ● ●	
Urin-Auf- fangbeutel	26 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
<input type="checkbox"/> Auch mit Umverpackung erhältlich.					10 12 14 16 18

Gel-Einmalkatheter

	IQ-Cath	Gebrauchsfertig	Extra	Länge	CH
Funktions- verpackung	30 <input type="checkbox"/>	Nein	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
	31 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
	32	Sofort	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
Urin-Auf- fangbeutel	36 <input type="checkbox"/>	Ja	–	43 cm	● ○ ● ● ● ●
<input type="checkbox"/> Auch mit Umverpackung erhältlich.					10 12 14 16 18

Haben Sie Fragen zum Einmalkatheter IQ-Cath?

Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail:

Tel. +49 6226 960 104
export@manfred-sauer.de



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten


iQCATH

... der 3-Zonen-Katheter



**Einmalkatheter für
 schonendes Katheterisieren**

3-Zonen-Katheter

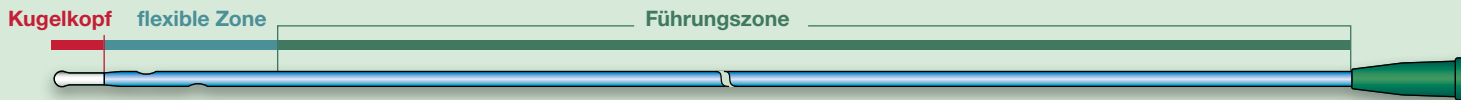

Aufbau des IQ-Cath


4–6 × am Tag, 150 × im Monat, 1800 × im Jahr. Etwa so häufig führt ein durchschnittlicher Anwender des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in

die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!



Kugelkopf (patentiert)

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.

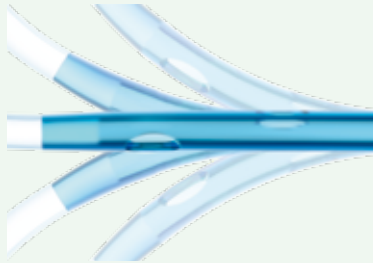

Flexible Zone (patentiert)

Durch die Kombination aus Kugelkopf und flexibler Zone kann der IQ-Cath schonend dem Verlauf der Harnröhre folgen.



Führungszone

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.



Verrundete Augen:

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.



Anwenderfilme wurden von Betroffenen für Betroffene erstellt. Die Filme sollen helfen, die für Sie beste Handhabung des IQ-Cath beim intermittierenden Katheterismus zu finden.

Ausführungen

Sleeve

Berührungsfreies Einführen

Der Sleeve, eine dünne Folie, umschließt vollkommen den Katheter und gewährleistet ein berührungsfreies Einführen.



Peelverpackung

Einfache Handhabung

Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.




Funktionsverpackung

Variable Anwendung

Die Funktionsverpackung kann als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu den Katheter so weit nach vorne schieben, bis der Konnektor abdichtet.

Reißmarken

- 1 Öffnen
- 2 ruckweises Abreißen erzeugt ein Folienstück (Gleiter), das als Einführhilfe dient

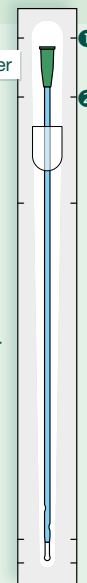

All In One

Version ...

... für den hydrophilen oder den Gel-Katheter. Fassungsvermögen des Auffangbeutels 1 Liter.

