
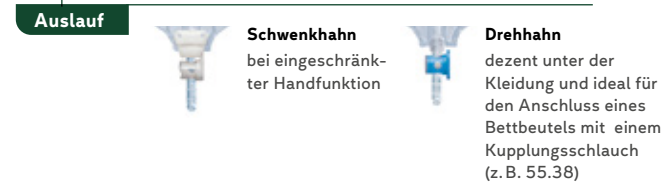


» SAUER-NephSys-Beutel

SCHWENKHAHN	Menge	Best.-Nr.	PZN
0,5 l, Schwenkhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 20 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.1720.SE	18154850
0,5 l, Schwenkhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 30 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.1730.SE	18154867
DREHHAHN	Menge	Best.-Nr.	PZN
0,5 l, Drehhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 20 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.3720.SE	18154873
0,5 l, Drehhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 30 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.3730.SE	18154896

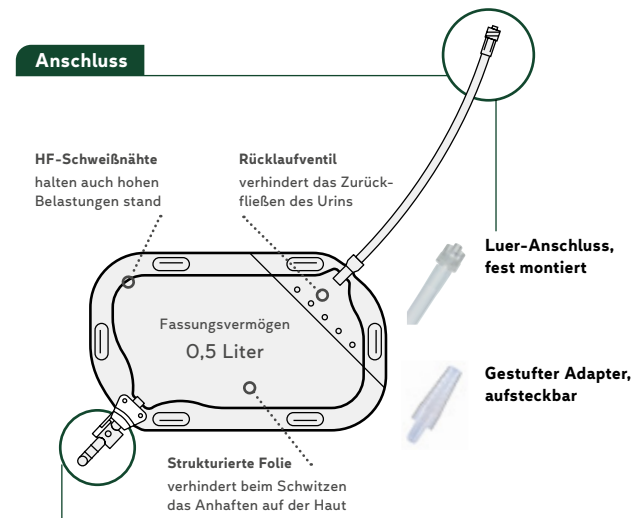

» SAUER-NephSys-Gurtset Basic

BASIC	Menge	Best.-Nr.	PZN
SAUER-NephSys-Gurtset Basic, 1 Leibgurt, 1500 mm x 38 mm, 2 Klett pads, 2 Fixier-Hakenbänder, 4 Fixier-Klebeunkte	1 Set	57.42	18181120

Zugentlastung, 1 Fixier-Hakenband, 10 Fixier-Klebeunkte	1 Set	57.40	18181114
Zubehör	10 Fixier-Klebeunkte 1 Fixier-Hakenband		

» SAUER-NephSys-Gurtset Comfort

COMFORT	Menge	Best.-Nr.	PZN
SAUER-NephSys-Gurtset Comfort, 1 Leibgurt, 1700 mm x 38 mm, 2 Klett pads, 2 Fixierlaschen	1 Set	57.43	18181137

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...

06226 960 100
Festnetz oder per WhatsApp


info@manfred-sauer.de

» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach

MANFRED SAUER
Neurott 7 – 15 · 74931Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960100 · Fax +49 6226 960010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER

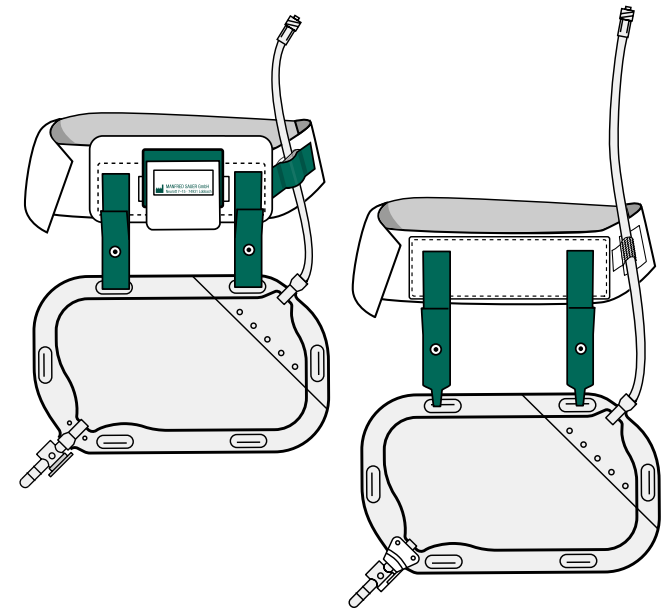


» SAUER-NEPHSYS


Nephrostomie-Drainagesystem
SAUER-NephSys
Beutel steril
Gurtset Basic
Gurtset Comfort



Das SAUER-NephSys-System kann diskret und unauffällig unter der Kleidung getragen werden.

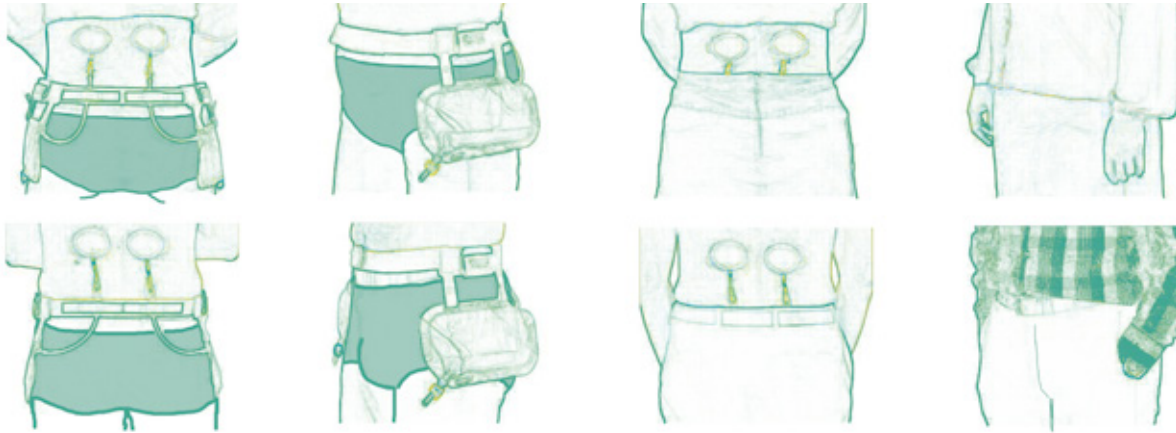


Das SAUER-NephSys-System ist sowohl für die ein- als auch für die beidseitige Anwendung geeignet.

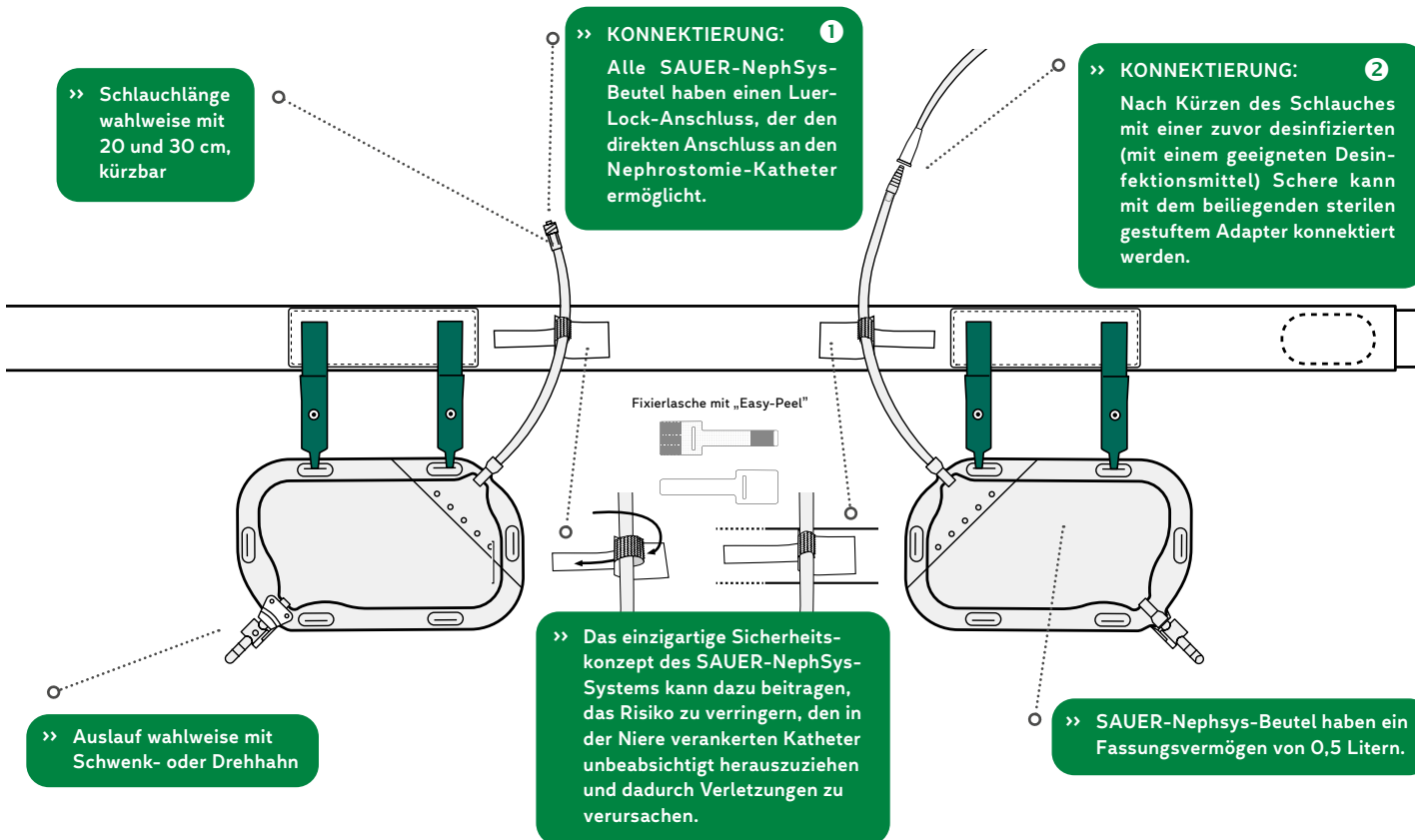

1. Leibgurt anlegen und kürzen



Dazu die Gurt-Seite mit den Silikonlinien auf der Haut positionieren, den Gurt unter leichtem Zug nach Belieben zwischen Taille und Hüfte anlegen.

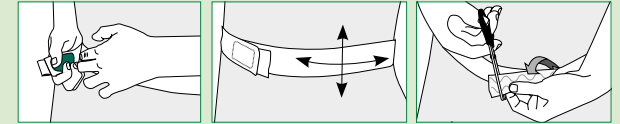


2. Klettpad positionieren und fixieren

Das Klettpad an der Körperseite befestigen, an der sich das ableitende System, z. B. der Nierenfistelkatheter, befindet. *Tip:* bei der Comfort-Variante empfiehlt es sich, zuerst den Beutel am Klettpad zu befestigen

Basic

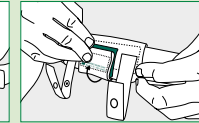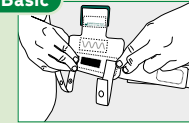

Comfort

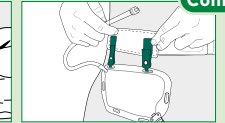


3. Beutel am Klettpad befestigen

Die beiden Haltetaschen des Klett pads durch die Gurtösen des Beutels fädeln und die Druckknöpfe schließen.


Basic




Comfort

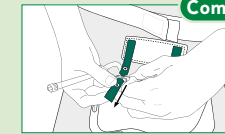

4. Beutel an Katheter konnektieren

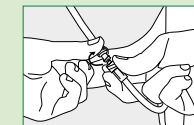

1 Verbinden Sie den männlichen Luer-Lock-Anschluss am Beutel mit dem weiblichen Luer-Lock-Anschluss am Nephrostomiekatheter durch Drehen im Uhrzeigersinn.


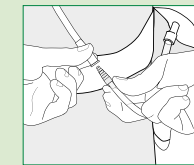


2 Zur Nutzung des beigelegten gestuften Adapters den Schlauch mit einer zuvor desinfizierten Schere (geeignetes Desinfektionsmittel, z. B. für Oberflächen, verwenden) auf die gewünschte Länge kürzen (gerader Schnitt). Dann den Adapter aufstecken. Den Adapter des Beutels zugfrei mit dem Konnektor des Katheters verbinden.

5. Einlaufschlauch mit der Zugentlastung sichern

Um das Risiko des Verdrehens des Einlaufschlauches oder Zuges am Katheter zu vermindern, wird der Schlauch mit Hilfe der Zugentlastung am Leibgurt in einer geeigneten Position fixiert.

Basic

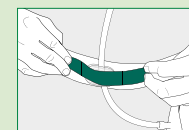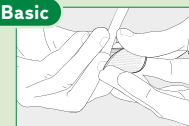

Comfort

