



>> SAUER-NephSys-Beutel

SCHWENKHAHN	Menge	Best.-Nr.	PZN
0,5 l, Schwenkhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 20 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.1720.SE	18154850
0,5 l, Schwenkhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 30 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.1730.SE	18154867
DREHHAHN	Menge	Best.-Nr.	PZN
0,5 l, Drehhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 20 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.3720.SE	18154873
0,5 l, Drehhahn, Luer-Anschluss, fest montiert, diagonaler Einlauf, Schlauch 30 cm, Rücklaufventil, Kupplungsschlauch, gestufter Adapter, aufsteckbar, steril	10 Stück	721.3730.SE	18154896

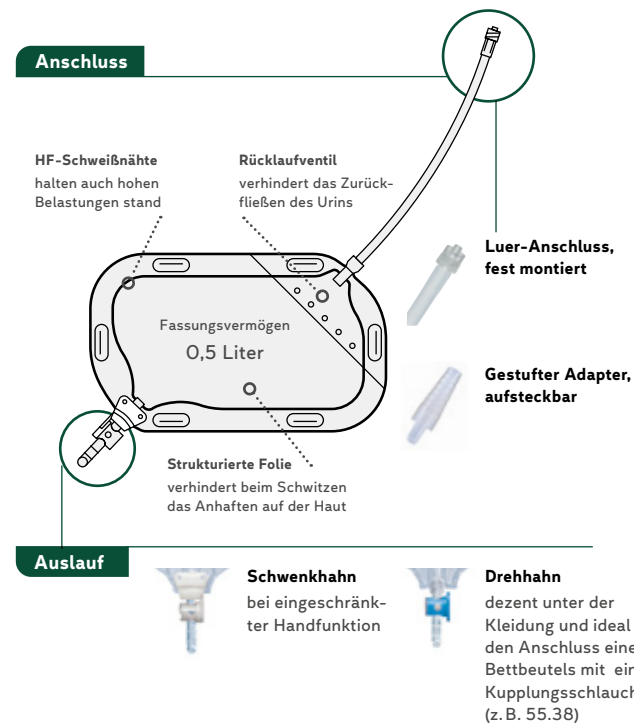


>> SAUER-NephSys-Gurtset Basic


BASIC	Menge	Best.-Nr.	PZN
SAUER-NephSys-Gurtset Basic, 1 Leibgurt, 1500 mm x 38 mm, 2 Klett pads, 2 Fixier-Hakenbänder, 4 Fixier-Klebepunkte	1 Set	57.42	18181120
Zugentlastung, 1 Fixier-Hakenband, 10 Fixier-Klebepunkte	1 Set	57.40	18181114
COMFORT	Menge	Best.-Nr.	PZN
SAUER-NephSys-Gurtset Comfort, 1 Leibgurt, 1700 mm x 38 mm, 2 Klett pads, 2 Fixierlaschen	1 Set	57.43	18181137

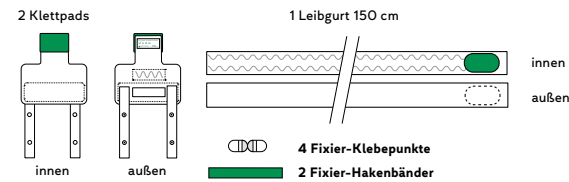

>> SAUER-NephSys-Gurtset Comfort

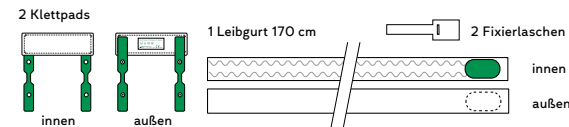

MANFRED SAUER

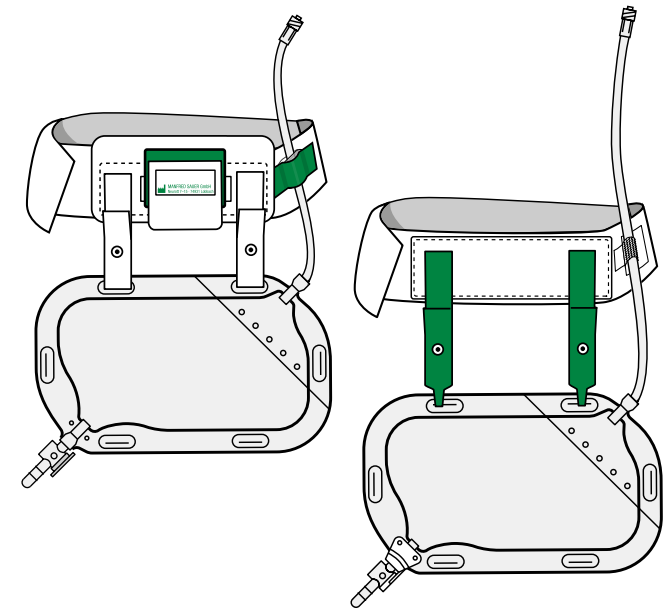

>> SAUER-NEPHSYS

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...

+49 6226 960100
Festnetz oder per WhatsApp

@ info@manfred-sauer.de

Kontakt und Social Media



>> MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach

MANFRED SAUER


Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
Tel. +49 6226 960100 · Fax +49 6226 960010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com




Nephrostomie-Drainagesystem
SAUER-NephSys
Beutel steril
Gurtset Basic
Gurtset Comfort



Das SAUER-NephSys-System kann diskret und unauffällig unter der Kleidung getragen werden.

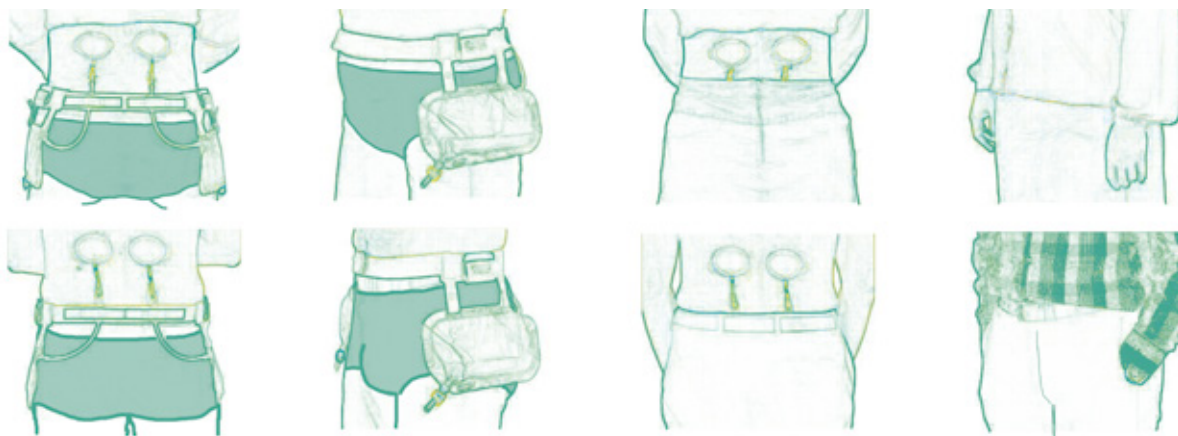


Das SAUER-NephSys-System ist sowohl für die ein- als auch für die beidseitige Anwendung geeignet.

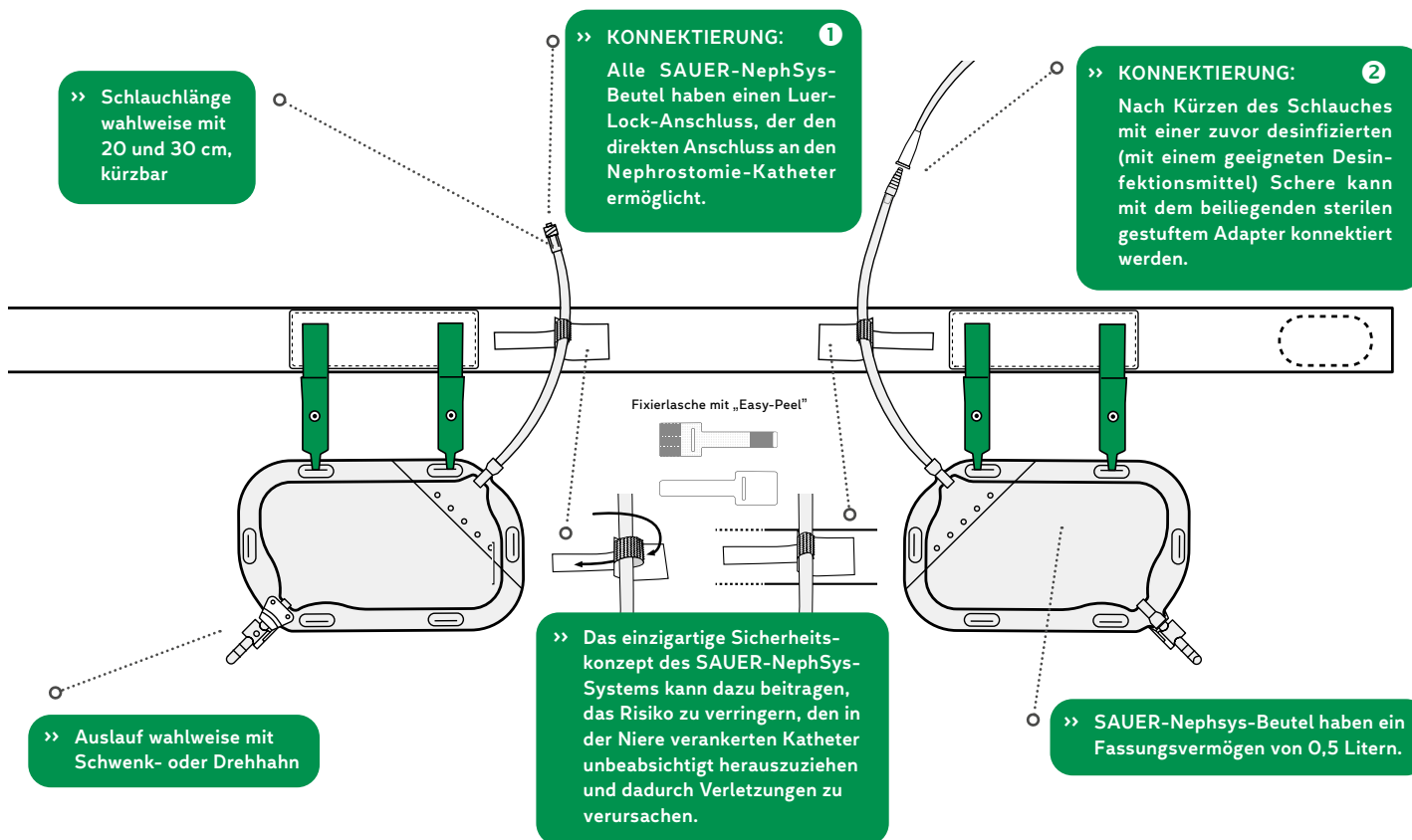


1. Leibgurt anlegen und kürzen

Dazu die Gurt-Seite mit den Silikonlinien auf der Haut positionieren, den Gurt unter leichtem Zug nach Belieben zwischen Taille und Hüfte anlegen.

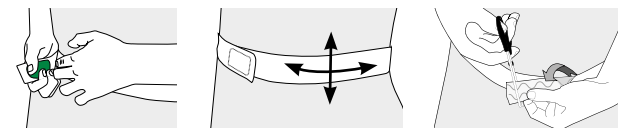

2. Klettpad positionieren und fixieren

Das Klettpad an der Körperseite befestigen, an der sich das ableitende System, z. B. der Nierenfistelkatheter, befindet. *Tipp: bei der Comfort-Variante empfiehlt es sich, zuerst den Beutel am Klettpad zu befestigen*

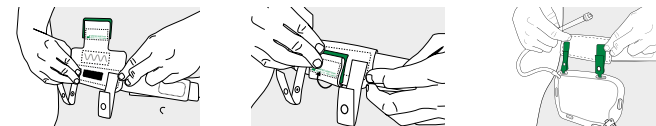


3. Beutel am Klettpad befestigen


Die beiden Haltetaschen des Klett pads durch die Gurtösen des Beutels fädeln und die Druckknöpfe schließen.



4. Beutel an Katheter konnektieren

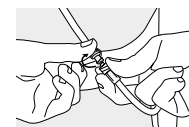

1 Verbinden Sie den männlichen Luer-Lock-Anschluss am Beutel mit dem weiblichen Luer-Lock-Anschluss am Nephrostomiekatheter durch Drehen im Uhrzeigersinn.

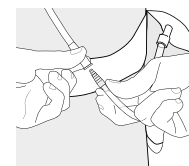

2 Zur Nutzung des beigelegten gestuften Adapters den Schlauch mit einer zuvor desinfizierten Schere auf die gewünschte Länge kürzen (gerader Schnitt). Adapter auf den Schlauch aufstecken, ohne die Konnektierfläche des Adapters zu berühren. Schutzkappe vom Adapter entfernen. Den Adapter des Beutels zugleich mit dem Konnektor des Katheters verbinden.

5. Einlaufschlauch mit der Zugentlastung sichern

Um das Risiko des Verdrehens des Einlaufschlauches oder Zuges am Katheter zu vermindern, wird der Schlauch mit Hilfe der Zugentlastung am Leibgurt in einer geeigneten Position fixiert.

