

Auszug aus dem Gesamtsortiment

SAUER-Fußgängerbeutel

Einlaufschlauch 45 cm, weich, kürzbar
Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

Schwenkhahn

Anschluss	Fassungsvermögen	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
glatter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	710.1345-10	06095705	15.25.05.1061
		30 St.	710.1345-30	06095711	15.25.05.1061
gestufter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	710.1445-10	06095935	15.25.05.1061
		30 St.	710.1445-30	06095941	15.25.05.1061
glatter Adapter aufsteckbar	1,0 l	10 St.	711.1345-10	06096550	15.25.05.1068
		30 St.	711.1345-30	06096567	15.25.05.1068

Schiebehahn

glatter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	710.2345-10	06095846	15.25.05.1061
		30 St.	710.2345-30	06095852	15.25.05.1061
gestufter Adapter aufsteckbar	0,6 l	10 St.	710.2445-10*	06096136	15.25.05.1061
		30 St.	710.2445-30*	06096142	15.25.05.1061
glatter Adapter aufsteckbar	1,0 l	10 St.	711.2345-10	06096627	15.25.05.1068
		30 St.	711.2345-30	06096633	15.25.05.1068

Drehhahn

gestufter Adapter aufsteckbar	1,0 l	10 St.	711.3445-10*	06096691	15.25.05.1068
		30 St.	711.3445-30*	06096716	15.25.05.1068

* auch steril erhältlich

PZN = Pharmazentralnummer

HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Bei Fragen zu unserem umfangreichen Beutelsortiment und Musterwünschen wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam:

Tel. +49 6226 960 100
info@manfred-sauer.de

Unsere Produkte sind von den Krankenkassen anerkannt und erstattungsfähige Hilfsmittel. Sie werden im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes aufgeführt.

SAUER-Sportbeutel

Ohne oder mit fest montiertem Adapter, Fassungsvermögen 0,5 l
Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

Schwenkhahn

Anschluss	Einlauf	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
glatter Adapter fest montiert	diagonal	10 St.	721.1100-10	06097288	15.25.05.1031
		30 St.	721.1100-30	06097294	15.25.05.1031

Schiebehahn

glatter Adapter fest montiert	diagonal	10 St.	721.2100-10	05358031	15.25.05.1132
		30 St.	721.2100-30	05358025	15.25.05.1132

SAUER-Rechteckbeutel

Fest montierter Adapter, Fassungsvermögen: 0,6 l
Die Beutel sind in Packungen mit 10 oder 30 Stück erhältlich.

Schiebehahn

Anschluss	Schlauch	Menge	Best.-Nr./REF	PZN	HMV-Nr.
gestufter Adapter fest montiert	32 cm, weich, nicht kürzbar	10 St.	732.2232-10	07590097	15.25.05.1101
		30 St.	732.2232-30	07590105	15.25.05.1101

PZN = Pharmazentralnummer

HMV-Nr. = Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis



MADE IN GERMANY Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach.



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7-15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

SAUER-Beinbeutel

... für Fußgänger und Rollstuhlfahrer



Verschiedene Beutelformen
mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen

Urin-Beinbeutel

Die Urin-Beinbeutel stammen aus eigener Entwicklung und Produktion. Sie werden in unserem Betrieb in Lobbach auf Hochfrequenz-Schweißmaschinen gefertigt. Durch unterschiedliche Formen, Größen und vielfältige Ausstattungsmerkmale wird weitestgehend den Bedürfnissen und Wünschen des Anwenders entsprochen.



SAUER-Fußgängerbeutel

(auch für Rollstuhlfahrer)

- Rechteckige Form; gerader Einlauf; Fassungsvermögen 0,6l oder 1,0 l; wahlweise mit einseitiger Beschichtung (Viskose-Flock)
- Einlauf: aufsteckbarer Adapter, glatt oder gestuft; weicher Schlauch, 45 cm, kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn




SAUER-Sportbeutel

- Gerader oder diagonaler Einlauf; Fassungsvermögen 0,5 l
- Einlauf: ohne Adapter oder mit fest montiertem Adapter, glatt oder gestuft; Rücklaufventil
- Auslauf: Schwenkhahn, Drehhahn oder Schiebehahn

SAUER-Rechteckbeutel

- Fassungsvermögen 0,6 l
- Einlauf: gestufter Adapter, fest montiert; Schlauch 8 cm oder 32 cm, nicht kürzbar; Rücklaufventil
- Auslauf: Schiebehahn

Auch in anderen Varianten erhältlich

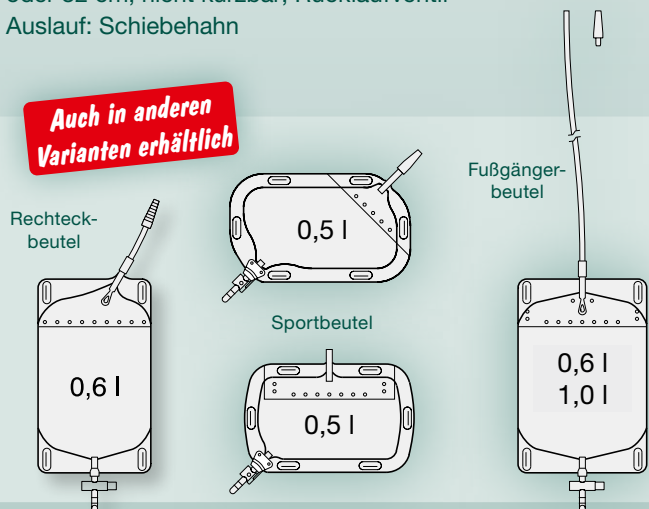

Merkmale

- Der Anschluss**
mit und ohne Adapter, ermöglicht die einfache und sichere Verbindung mit allen Kathetern und allen Urinal-Kondomen:
 - glatter Adapter: für den Anschluss an Urinal-Kondome
 - gestufter Adapter: für den Anschluss an Katheter
- Der Einlaufschlauch**
in harter oder weicher Ausführung und in verschiedenen Längen, auch kürzbar zur Anpassung an die Körpergröße.
- Der Ventilkörper**
gewährleistet das ungehinderte Einlaufen des Urins auch bei nicht glatt anliegendem Beutel.
- Das Rücklaufventil**
verhindert das Zurückfließen des Urins z. B. bei krankengymnastischer Behandlung.
- Die Gurtösen**
bieten zusammen mit verstellbaren Beingurten individuelle Befestigungsarten und sicheren Sitz.
- Der Auslaufhahn**
für ein sauberes Entleeren des Beutels:
 - Schwenkhahn: leicht bedienbar, auch bei eingeschränkter Handfunktion
 - Drehhahn: kompakt und diskret, besonders für kleine Beutel, ermöglicht den problemlosen Anschluss eines Bettbeutels
 - Schiebehahn: zur Einhandbedienung, der Beutel kann links oder rechts getragen werden
- Die Schweißung**
Ventilkörper, Rücklaufventil und Auslaufhahn sind fest mit der Folie verschweißt. Die doppelten Schweißnähte halten auch hohen Belastungen stand.
- Die Beschichtung**
Um den direkten Kontakt der Beutelfolie mit der Haut zu vermeiden, können alle Urin-Auffangbeutel (außer Bettbeutel) mit einer einseitigen Beschichtung (Viskose-Flock) versehen werden.

100%-Prüfung

Um dem Anwender eine möglichst hohe Sicherheit zu bieten, werden alle Beutel *einzel*n auf Dichtigkeit und Reißfestigkeit geprüft.

