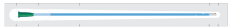
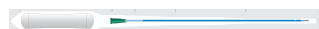


» HYDROPHILE EINMALKATHETER

FUNKTIONSVERPACKUNG	CH	ohne Umverpackung		mit Umverpackung	
		Best.-Nr.	PZN	Best.-Nr.	PZN
IQ 20 Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Funktionsverpackung, steril 	10	IQ2004.10	06831601	-	-
	12	IQ2004.12	06873775	IQ2014.12	06874415
	14	IQ2004.14	06873812	IQ2014.14	06875099
	16	IQ2004.16	06874208	-	-

IQ 21 Länge 40 cm, gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % integriert, Funktionsverpackung, steril 	10	IQ2104.10	06831570	IQ2114.10	06831564
	12	IQ2104.12	01899014	IQ2114.12	01054245
	14	IQ2104.14	01899020	IQ2114.14	01054251
	16	IQ2104.16	01899066	IQ2114.16	01054268

18	IQ2104.18	05519043	IQ2114.18	05519066	
----	------------------	----------	------------------	----------	--

PEELVERPACKUNG	CH	Best.-Nr.		PZN	
		Best.-Nr.	PZN	Best.-Nr.	PZN
IQ 2904 Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril 	10	IQ2904.10	14137145	-	-
	12	IQ2904.12	14137151	-	-
	14	IQ2904.14	14137168	-	-
	16	IQ2904.16	14137180	-	-
	18	IQ2904.18	14137197	-	-

IQ 2902 Länge 12 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril 	10	IQ2902.10	14137079	-	-
	12	IQ2902.12	14137085	-	-
	14	IQ2902.14	14137091	-	-

IQ 2304 Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Peelverpackung, steril 	10	IQ2304.10	14137010	-	-
	12	IQ2304.12	14137027	-	-
	14	IQ2304.14	14137033	-	-
	16	IQ2304.16	14137056	-	-

18	IQ2304.18	14137062	-	-	
----	------------------	----------	---	---	--

IQ 2303 Länge 30 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Peelverpackung, steril 	10	IQ2303.10	14136973	-	-
	12	IQ2303.12	14136996	-	-
	14	IQ2303.14	14137004	-	-


IQ 2302 Länge 12 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Peelverpackung, steril 	10	IQ2302.10	14136944	-	-
	12	IQ2302.12	14136950	-	-
	14	IQ2302.14	14136967	-	-


IQ 4304 Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril 	10	IQ4304.10	14137257	-	-
	12	IQ4304.12	14137263	-	-
	14	IQ4304.14	14137286	-	-
	16	IQ4304.16	14137292	-	-
	18	IQ4304.18	14137300	-	-


IQ 4303 Länge 30 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril 	10	IQ4303.10	14137205	-	-
	12	IQ4303.12	14137234	-	-
	14	IQ4303.14	14137240	-	-


URIN-AUFFANGBEUTEL	CH	Best.-Nr.		PZN	
		Best.-Nr.	PZN	Best.-Nr.	PZN
IQ 26 Länge 40 cm, gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9 % integriert, Urin-Auffangbeutel 1 l, steril 	12	IQ2604.12	06875366	IQ2614.12	06875857
	14	IQ2604.14	06875490	IQ2614.14	06876058
	16	IQ2604.16	06875797	IQ2614.16	06876070
	18	IQ2604.18	06427745	-	-

» GEL-EINMALKATHETER

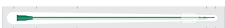FUNKTIONSVERPACKUNG	CH	ohne Umverpackung		mit Umverpackung	
		Best.-Nr.	PZN	Best.-Nr.	PZN
IQ 30 Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Funktionsverpackung, steril 	12	IQ3004.12	06876242	-	-
	14	IQ3004.14	06876288	-	-
	16	IQ3004.16	06876294	-	-

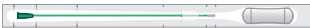IQ 31 Länge 40 cm, gebrauchsfertig, Gleitgel integriert, Funktionsverpackung, steril 	10	IQ3104.10	18782629	-	-
	12	IQ3104.12	01899089	IQ3114.12	01899149
	14	IQ3104.14	01899126	IQ3114.14	01899161
	16	IQ3104.16	01899132	IQ3114.16	01900384

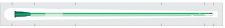IQ 3204 Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig, vorgegellt, Funktionsverpackung, steril 	10	IQ3204.10	09943654	-	-
	12	IQ3204.12	09943660	-	-
	14	IQ3204.14	09943677	-	-
	16	IQ3204.16	09943708	-	-
	18	IQ3204.18	09943720	-	-

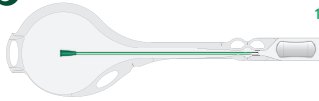URIN-AUFFANGBEUTEL	CH	Best.-Nr.		PZN	
		Best.-Nr.	PZN	Best.-Nr.	PZN
IQ 36 Länge 40 cm, gebrauchsfertig, Gleitgel integriert, Urin-Auffangbeutel 1 Liter, steril 	12	IQ3604.12	06877810	IQ3614.12	06878264
	14	IQ3604.14	06877879	IQ3614.14	06878330
	16	IQ3604.16	06877885	-	-

Alle Katheter sind einzeln steril verpackt. Packung mit jeweils 30 Stück.

Unsere Produkte sind im Hilfsmittelverzeichnis gelistet und somit von den Krankenkassen anerkannte und erstattungsfähige Hilfsmittel.

FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...

+49 6226 960100
 Festnetz oder per WhatsApp

info@manfred-sauer.de

Kontakt und Social Media



» MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach


MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
 Tel. +49 6226 960 100 · Fax +49 6226 960 010
info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com



DE 2025-11
 REF 99.936

MANFRED SAUER

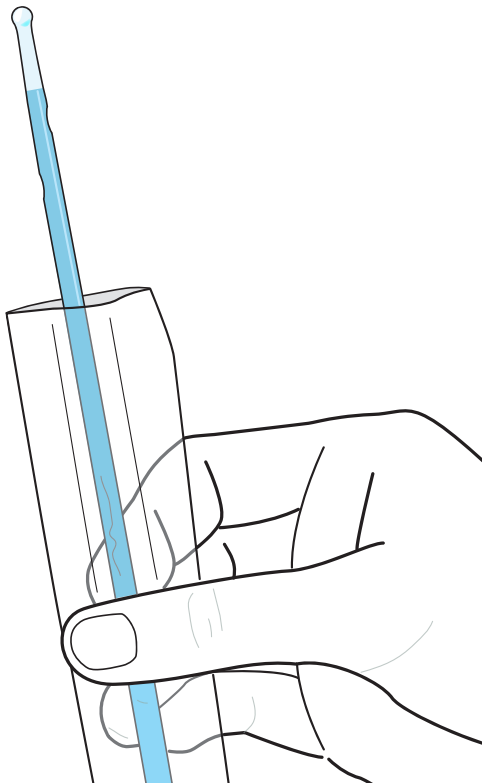

» IQ-CATH – Der Einmalkatheter

DER
 EINMALKATHETER
 FÜR
 SCHONENDES
 KATHETERISIEREN



DER AUFBAU

Um den Katheter IQ-Cath leicht und schonend in die Harnröhre einführen zu können, ist er in zwei funktionelle Bereiche unterteilt:

1

SAUER-KUGELKOPF

Der Kopf des IQ-Cath besteht aus einer weichen Kugel, die auf einem flexiblen Schaft sitzt. Durch diese Kombination kann der Katheter nahezu ungehindert Engstellen, Ausbuchtungen u. ä. passieren.

VERRUNDETE AUGEN

Die Katheteraugen sind verrundet, um Verletzungen der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut vorzubeugen.

2

FÜHRUNGSZONE

Dieser Bereich des IQ-Cath, der sich bis zum Konnektor fortsetzt, ist verhältnismäßig starr ausgelegt. Dadurch lässt sich der Katheter gut nachführen.

Länge des Katheters

Die Angabe bezieht sich auf die (effektive) Länge des Katheters ohne Konnektor: 40 cm vorrangig für Männer, 30 cm vorrangig für Jungen, 12 cm vorrangig für Frauen und Mädchen. Die genannten Längen sind nicht für alle Kathetertypen erhältlich.

i

4 – 6 × am Tag, 150 × im Monat, 1800 × im Jahr. Etwa so häufig führt ein durchschnittlicher Anwender des intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) den Katheter durch die Harnröhre in die Blase ein, um sie zu entleeren. Deshalb kommt es auf die Qualität und die Anwendungssicherheit des Katheters an, um Verletzungen von Anfang an vorzubeugen!


i

AUSFÜHRUNG

» PEELVERPACKUNG

Einfache Handhabung

Greiflöcher ermöglichen ein behutsames, leichtes Aufziehen („peelen“) der Verpackung ohne den Katheter zu berühren.

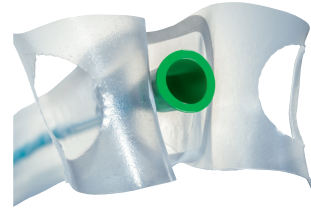

» SLEEVE

Berührungsfreies Einführen

Der Sleeve, eine dünne Folie, umschließt vollkommen den Katheter und gewährleistet ein berührungsfreies Einführen.



» FUNKTIONSVERPACKUNG

Variable Anwendung


Die Funktionsverpackung kann als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu den Katheter so weit nach vorne schieben, bis der Konnektor abdichtet.



» ALL IN ONE

Version ...

... für den hydrophilen oder den Gel-Katheter. Fassungsvermögen des Auffangbeutels 1 Liter.

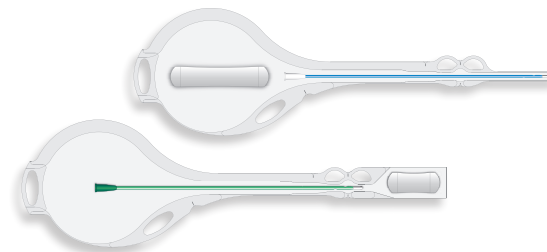

FÜR FRAUEN UND KINDER

1


SAUER-KUGELKOPF

Beim Katheter für Frauen ist der Schaft des Kugelkopfes wegen der besseren Führbarkeit kürzer.

VERRUNDETE AUGEN

Peelverpackung – Anwendungstipp

Den Katheter senkrecht nach unten halten und die Peelverpackung am Konnektorende öffnen.

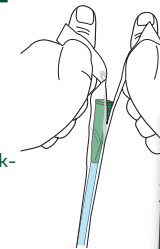

KONNEKTOR 2


Der extralange Konnektor beim Frauen- und Mädchenkatheter (ca. 5 cm) ermöglicht Griffsicherheit und bessere Handhabung.



i

Konnektor

Der extralange Konnektor beim Frauen- und Mädchenkatheter (ca. 5 cm) ermöglicht Griffsicherheit und bessere Handhabung.

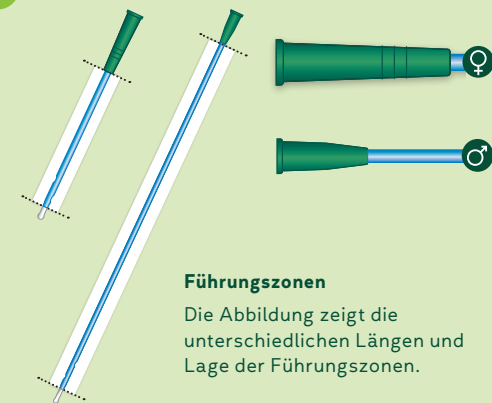

Führungszone

Die Abbildung zeigt die unterschiedlichen Längen und Lage der Führungszone.